



Meine elektronische  
Gesundheitsakte.  
**Meine Entscheidung!**

# ELGA CDA Implementierungsleitfäden

HL7 Implementation Guide for CDA<sup>®</sup> R2:  
Telemonitoring-Episodenbericht (Version 1)

Zur Anwendung im österreichischen  
Gesundheitswesen [1.2.40.0.34.7.23.1]

Datum: 01.10.2021  
Version: 1.2.1+20211001  
Status: Normativ



## Inhaltsverzeichnis

|   |           |
|---|-----------|
| <b>1 Zusammenfassung .....</b>  | <b>5</b>  |
| <b>2 Informationen über dieses Dokument.....</b>  | <b>6</b>  |
| 2.1 Impressum.....  | 6         |
| 2.2 Haftungsausschluss .....  | 6         |
| 2.3 Sprachliche Gleichbehandlung .....  | 6         |
| 2.4 Lizenzinformationen .....   | 6         |
| 2.4.1 Urheber- und Nutzungsrechte von anderen Quellen ("Third Party IP").....                                   | 7         |
| 2.4.2 SNOMED CT .....   | 7         |
| 2.4.3 Weitere Terminologien .....   | 7         |
| 2.5 Verbindlichkeit.....  | 8         |
| 2.6 Verwendete Grundlagen und Bezug zu anderen Standards .....  | 9         |
| 2.7 Wichtige unterstützende Materialien .....   | 11        |
| 2.8 Bedienungshinweise .....  | 12        |
| 2.8.1 Farbliche Hervorhebungen und Hinweise .....   | 12        |
| 2.8.2 PDF-Navigation.....   | 12        |
| <b>3 Einleitung .....</b>   | <b>13</b> |
| 3.1 Ausgangslage und Motivation.....  | 13        |
| 3.2 Zweck des Dokuments.....  | 13        |
| 3.3 Zielgruppe.....   | 13        |
| <b>4 Leitfadenerstellungs- und Harmonisierungsprozess .....</b>   | <b>14</b> |
| 4.1 Revision der Leitfäden .....  | 14        |
| 4.2 Autoren und Mitwirkende .....   | 14        |
| 4.2.1 Autoren.....  | 15        |
| 4.2.2 Mitwirkende .....   | 15        |
| <b>5 Technischer Hintergrund.....</b>   | <b>16</b> |
| 5.1 ELGA.....   | 16        |
| 5.2 Rahmenrichtlinie für die IT-Infrastruktur bei der Anwendung von Telemonitoring:<br>Messdatenerfassung ..... | 16        |
| <b>6 Allgemeine Richtlinien für ELGA CDA-Implementierungsleitfäden .....</b>                                    | <b>17</b> |
| <b>7 Funktionale Anforderungen.....</b>   | <b>18</b> |
| 7.1 Voraussetzungen für den Zugriff auf e-Befunde in ELGA.....  | 18        |
| 7.2 Anwendungsfälle des Dokumentenmanagements.....  | 18        |
| 7.2.1 Dokument-Metadaten (XDS-Metadaten) .....  | 19        |
| <b>8 Konformitätsprüfung .....</b>  | <b>24</b> |
| <b>9 Datentypen.....</b>  | <b>25</b> |
| <b>10 Anwendungsfälle zur Dokumentenerstellung und -Aktualisierung .....</b>                                    | <b>26</b> |
| 10.1 Start Telemonitoring .....   | 26        |
| 10.2 Fortschritt Telemonitoring .....   | 27        |
| 10.3 Ende Telemonitoring .....  | 28        |
| <b>11 Dataset des Telemonitoring Episodenberichts .....</b>   | <b>29</b> |
| <b>12 Technische Spezifikation .....</b>  | <b>30</b> |
| 12.1 Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers .....   | 30        |

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| 12.2      | Übersichtstabelle der Header-Elemente für dokumenten-relevante Zeitpunkte/Zeitspannen..... | 32         |
| 12.3      | Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Bodys .....                                       | 34         |
| 12.4      | CDA Templates.....   | 35         |
| 12.4.1    | Document Level Templates.....  | 35         |
| 12.4.2    | Header Level Templates.....  | 126        |
| 12.4.3    | Section Level Templates.....   | 127        |
| 12.4.4    | Entry Level Template.....  | 217        |
| 12.4.5    | Weitere CDA Fragmente .....  | 491        |
| 12.5      | Terminologien.....   | 549        |
| 12.5.1    | TGD_tgdServiceEvents_VS.....   | 549        |
| 12.5.2    | TGD_Messergebnis_Codes_VS .....  | 549        |
| <b>13</b> | <b>Anhang .....</b>  | <b>550</b> |
| 13.1      | Abbildungsverzeichnis .....  | 550        |
| 13.2      | Tabellenverzeichnis.....   | 550        |
| 13.3      | Einzelnachweise.....   | 550        |
| 13.4      | Literatur und Weblinks .....   | 551        |
| 13.5      | Revisionsliste .....   | 551        |
| 13.5.1    | Nebenversion 2020.1 (1.1.0+20201120).....  | 551        |
| 13.5.2    | Nebenversion 1.2.0+20210304 .....  | 553        |
| 13.6      | Erratum .....  | 553        |

Dieses Dokument bildet den **vollständigen Implementierungsleitfaden des Telemonitoring-Episodenberichtes (TmE)** ab und richtet sich an Softwareentwickler und Berater. Zum besseren Verständnis empfehlen wir Ihnen den **zusammenfassenden TmE-Guide** im Vorfeld zu lesen.

# 1 Zusammenfassung

Dieser Implementierungsleitfaden beschreibt das Datenaustauschformat des Telemonitoring-Episodenberichts in Österreich. Die Beschreibung enthält Festlegungen, Einschränkungen und Bedingungen auf Grundlage des internationalen Standards ISO/HL7 27932:2009 HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0 (CDA) und ist ein nationaler Standard der HL7 Austria.

Die Grundlage der Datenaustauschformate ist der internationale [CDA-Standard](#), der sich in ELGA bereits bewährt hat. Er erlaubt es Sender und Empfänger, sich ohne vorherige Absprache zu verstehen. Der Standard hat zum Ziel, einen umfassenden Austausch von semantisch interoperablen Informationen zwischen allen beteiligten Akteuren bei der Behandlung von Patienten zu ermöglichen. Der Datenaustausch findet hierbei nicht nur innerhalb einer Einrichtung, sondern auch zwischen kooperierenden Einrichtungen und über Sektorengrenzen hinaus statt. Die Empfänger der Dokumente sollen die Inhalte benutzen und weiterverwenden können, ohne sich vorher mit dem Ersteller absprechen zu müssen.

Das CDA Telemonitoring Episodenbericht kann als Datenaustauschformat für eine fortlaufende wie auch abgeschlossene durch Telemonitoring unterstützte Behandlung dienen. Die Unterscheidung ist am Dokumententyp, dem Code für den Status wie "active" oder "completed" und einem anderem Beginn des Titels erkennbar. Als Grundlage wurde der Personal Healthcare Monitoring Report (PHMR)<sup>[1]</sup> und Teile des IHE Pharmacy Community Medication Administration (CMA)<sup>[2]</sup> und IHE Patient Care Coordination (PCC)<sup>[3]</sup> herangezogen.

Der Implementierungsleitfaden orientiert sich an den elementaren Konzepten und dem zugrunde liegenden Modell des Dokuments [Allgemeiner Implementierungsleitfaden](#). Dort werden die notwendigen Datentypen, Dokument-Metadaten (Header), die Möglichkeiten der Textstrukturierung, grundlegende Vorgaben für die Anwendung von Terminologien, einige allgemein genutzten Inhaltsstrukturen (Sections) sowie Codebeispiele und praktische Implementierungshilfen gezeigt. Alle weiteren, für diesen Leitfaden benötigten Elemente werden hier erklärt. Die Notation der Spezifikation der Datenaustauschformate folgt der "Art-Decor"-Schreibweise, die auf einer eigenen Seite ([Art-Decor-Tabellen verstehen](#)) erläutert wird.

Der vorgesehene Ablauf des Datenaustausches wird im Kapitel [Anwendungsfälle zur Dokumentenerstellung und -Aktualisierung](#) beschrieben.

## Übersichtstabellen für Header und Body-Strukturen

- [Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers](#) (administrative Daten)
- [Übersichtstabelle der CDA Strukturen des CDA Bodys](#) (medizinische Inhalte)

Auf der [Diskussionsseite](#) werden die Fehler und Änderungswünsche an dieser Version dokumentiert.

## 2 Informationen über dieses Dokument

### 2.1 Impressum

*Medieneigentümer, Herausgeber, Hersteller, Verleger:*

ELGA GmbH, Treustraße 35-43, Wien, Österreich. Telefon: +43.1.2127050

Internet: [www.elga.gv.at](http://www.elga.gv.at) (<http://www.elga.gv.at>) Email: [cda@elga.gv.at](mailto:cda@elga.gv.at) (<mailto:cda@elga.gv.at>)

Geschäftsführer: DI Dr. Günter Rauchegger, DI(FH) Dr. Franz Leisch

*Redaktion, Projektleitung, Koordination:*

Nikola Tanjga, [nikola.tanjga@elga.gv.at](mailto:nikola.tanjga@elga.gv.at) (<mailto:nikola.tanjga@elga.gv.at>)

*Abbildungen:* © ELGA GmbH

*Nutzung:* Das Dokument enthält geistiges Eigentum der Health Level Seven® Int. und HL7® Austria, Franckstrasse 41/5/14, 8010 Graz; [www.hl7.at](http://www.hl7.at) (<http://www.hl7.at>).

Die Nutzung ist ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren zum Zweck der Erstellung medizinischer Dokumente ausdrücklich erlaubt. Andere Arten der Nutzung und auch auszugsweise Wiedergabe bedürfen der Genehmigung des Medieneigentümers.

Download unter [www.gesundheit.gv.at](https://www.gesundheit.gv.at) (<https://www.gesundheit.gv.at>) und [www.elga.gv.at/cda](http://www.elga.gv.at/cda) (<http://www.elga.gv.at/cda>)

### 2.2 Haftungsausschluss

Die Arbeiten für den vorliegenden Leitfaden wurden von den Autoren gemäß dem Stand der Technik und mit größtmöglicher Sorgfalt erbracht und über ein öffentliches Kommentierungsverfahren kontrolliert. Die Nutzung des vorliegenden Leitfadens erfolgt in ausschließlicher Verantwortung der Anwender. Aus der Verwendung des vorliegenden Leitfadens können keinerlei Rechtsansprüche gegen die Autoren, Herausgeber oder Mitwirkenden erhoben und/oder abgeleitet werden. Ein allfälliger Widerspruch zum geltenden Recht ist jedenfalls nicht beabsichtigt und von den Erstellern des Dokumentes nicht gewünscht.

### 2.3 Sprachliche Gleichbehandlung

Soweit im Text Bezeichnungen nur im generischen Maskulinum angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer, Frauen und andere Geschlechtsidentitäten in gleicher Weise. Unter dem Begriff "Patient" werden sowohl Bürger, Kunden und Klienten zusammengefasst, welche an einem Behandlungs- oder Pflegeprozess teilnehmen als auch gesunde Bürger, die derzeit nicht an einem solchen teilnehmen. Es wird ebenso darauf hingewiesen, dass umgekehrt der Begriff Bürger auch Patienten, Kunden und Klienten mit einbezieht.

### 2.4 Lizenzinformationen

Die von HL7 Austria erarbeiteten Standards und die Bearbeitungen der Standards von HL7 International stellen Werke im Sinne des österreichischen Urheberrechtsgesetzes dar und unterliegen daher urheberrechtlichem Schutz.

HL7 Austria genehmigt die Verwendung dieser Standards für die Zwecke der Erstellung, des Verkaufs und des Betriebs von Computerprogrammen, sofern nicht anders angegeben oder sich die Standards auf andere urheberrechtlich oder lizenzrechtlich geschützte Werke beziehen.

Die vollständige oder teilweise Veröffentlichung der Standards (zum Beispiel in Spezifikationen, Publikationen oder Schulungsunterlagen) ist nur mit einer *ausdrücklichen Genehmigung der HL7 Austria* gestattet. Mitglieder von HL7 Austria sind berechtigt, die Standards vollständig oder in Auszügen

gen ausschließlich organisationsintern zu publizieren, zu vervielfältigen oder zu verteilen. Die Veröffentlichung eigener Anpassungen der HL7-Spezifikationen (im Sinne von Lokalisierungen) oder eigener Leitfäden erfordert eine formale Vereinbarung mit der HL7 Austria.

HL7® und CDA® sind die eingetragenen Marken von Health Level Seven International. Die vollständigen Lizenzinformationen finden sich unter <https://hl7.at/nutzungsbedingungen-und-lizenzinformationen/>. Die Lizenzbedingungen von HL7 International finden sich unter <http://www.HL7.org/legal/ip-policy.cfm>

#### 2.4.1 Urheber- und Nutzungsrechte von anderen Quellen ("Third Party IP")

##### Third Party Intellectual Property

Der Nutzer dieses Dokuments (bzw. der Lizenznehmer) stimmt zu und erkennt an, dass HL7 Austria nicht alle Rechte und Ansprüche in und an den Materialien besitzt und dass die Materialien geistiges Eigentum von Dritten enthalten und / oder darauf verweisen können ("Third Party Intellectual Property (IP)").

Die Anerkennung dieser Lizenzbestimmungen gewährt dem Lizenznehmer keine Rechte in Bezug auf Third Party IP. Der Lizenznehmer allein ist für die Identifizierung und den Erhalt von notwendigen Lizenzen oder Genehmigungen zur Nutzung von Third Party IP im Zusammenhang mit den Materialien oder anderweitig verantwortlich.

Jegliche Handlungen, Ansprüche oder Klagen eines Dritten, die sich aus einer Verletzung eines Third Party IP-Rechts durch den Lizenznehmer ergeben, bleiben die Haftung des Lizenznehmers.

#### 2.4.2 SNOMED CT



Dieser Leitfaden enthält Material, das durch [SNOMED International \(https://www.snomed.org\)](https://www.snomed.org) urheberrechtlich geschützt ist. **Jede Verwendung von SNOMED CT in Österreich erfordert eine aufrechte Affiliate Lizenz oder eine Sublizenz.** Die entsprechende Lizenz ist kostenlos, vorausgesetzt die Verwendung findet nur in Österreich statt und erfüllt die Bedingungen des Affiliate License Agreements. Affiliate Lizenzen können über das Member Licensing and Distribution Service (MLDS) direkt beim jeweiligen NRC beantragt werden: [MLDS für Österreich \(https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de\)](https://mlds.ihtsdotools.org/#/landing/AT?lang=de).

#### 2.4.3 Weitere Terminologien

Im Folgenden finden Sie eine nicht-exhaustive Liste von weiteren Terminologien, die eine solche separate Lizenz erfordern können:

| Terminologie   | Eigentümer, Kontaktinformation             |
|--|--|
| Logical Observation Identifiers Names & Codes (LOINC) <sup>[4]</sup> | Regenstrief Institute, Inc. <sup>[5]</sup> |
| Unified Code for Units of Measure (UCUM) <sup>[6]</sup>              | Regenstrief Institute, Inc. <sup>[5]</sup> |

|   |  |
|---|--|
| International Classification of Diseases (ICD) <sup>[7]</sup>               | World Health Organization (WHO) <sup>[8]</sup>   |
| ICD-10 BMASGK 2020 <sup>[9]</sup>   | Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz <a href="http://www.sozialministerium.at">www.sozialministerium.at</a> ( <a href="https://www.sozialministerium.at">https://www.sozialministerium.at</a> )  |
| Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC) <sup>[10]</sup> | World Health Organization (WHO) <sup>[8]</sup>   |
| Pharmazentralnummer (PZN)   | ARGE Pharma im Fachverband der chemischen Industrie Österreichs (FCIO) der Wirtschaftskammern Österreichs (WKO) <sup>[11]</sup>  |
| EDQM-Codes  | Europäisches Direktorat für die Qualität von Arzneimitteln <sup>[12]</sup>   |
| Medical Device Communications (MDC) vom ISO/IEEE 11073 Standard             | MDC wird als Substandard 10101 "Nomenclature" in "Health informatics - Medical / health device communication standards", kurz 11073, geführt und werden mit einem Copyright bei IEEE SA am österreichischen Termserver bereitgestellt ( <a href="https://termpub.gesundheit.gv.at:443/TermBrowser/gui/main/main.zul?loadType=CodeSystem&amp;loadName=MDC_MedicalDeviceCommunications">https://termpub.gesundheit.gv.at:443/TermBrowser/gui/main/main.zul?loadType=CodeSystem&amp;loadName=MDC_MedicalDeviceCommunications</a> ). <sup>[13]</sup> , <sup>[14]</sup> |

Die Terminologien werden am österreichischen Terminologieserver zur Verfügung gestellt. <sup>[15]</sup>

## 2.5 Verbindlichkeit

Die Verbindlichkeit und die Umsetzungsfrist dieses Leitfadens sind im Gesundheitstelematikgesetz 2012, BGBl. I Nr. 111/2012 sowie in den darauf fußenden ELGA-Verordnungen geregelt.

Der Leitfaden in seiner jeweils aktuell gültigen Fassung sowie die aktualisierten Terminologien sind vom zuständigen Minister auf [www.gesundheit.gv.at](http://www.gesundheit.gv.at) zu veröffentlichen. Der Zeitplan zur Bereitstellung der Datenaustauschformate wird durch das Gesundheitstelematikgesetz 2012 und darauf basierenden Durchführungsverordnungen durch den zuständigen Bundesminister vorgegeben. Hauptversionen, also Aktualisierungen des Implementierungsleitfadens, welche zusätzliche verpflichtende Konformitätskriterien enthalten ("Mandatory" [M], "Required" [R] und "Fixed" [F]), sind mit ihren Fristen zur Bereitstellung per Verordnung kundzumachen. Andere Aktualisierungen (Nebenversionen) dürfen auch ohne Änderung dieser Verordnung unter [www.gesundheit.gv.at](http://www.gesundheit.gv.at) veröffentlicht werden.

Die Anwendung dieses Implementierungsleitfadens hat im Einklang mit österreichischem und europäischem Recht, insbesondere mit den relevanten Materiengesetzen (z.B. Ärztegesetz 1998, Apothekenbetriebsordnung 2005, Krankenanstalten- und Kuranstaltengesetz, Gesundheits- und Krankenpflegegesetz, Rezeptpflichtgesetz, Datenschutzgesetz, Gesundheitstelematikgesetz 2012, DSGVO) zu erfolgen. Technische Möglichkeiten können gesetzliche Bestimmungen selbstverständlich nicht verändern, vielmehr sind die technischen Möglichkeiten im Einklang mit den Gesetzen zu nutzen.

Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen liegt im Verantwortungsbereich der Ersteller der CDA-Dokumente.



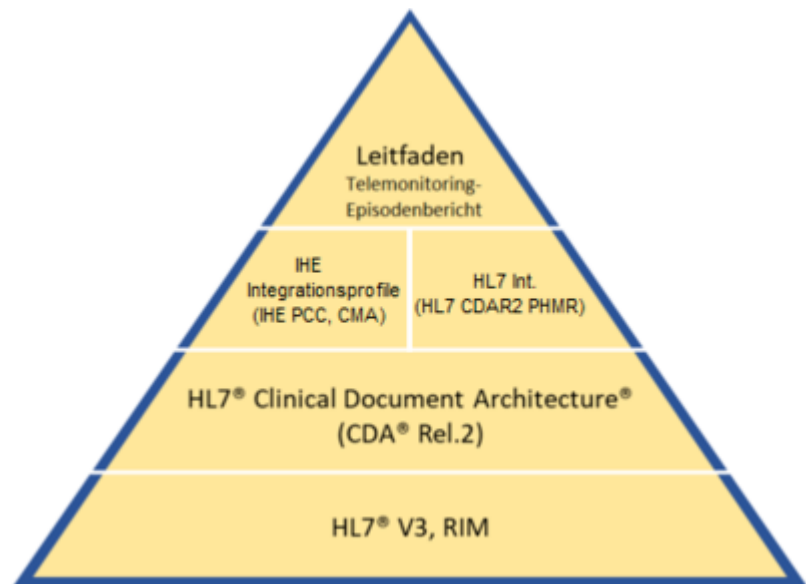
## 2.6 Verwendete Grundlagen und Bezug zu anderen Standards

Grundlage dieses Implementierungsleitfadens ist der internationale Standard "HL7 Clinical Document Architecture, Release 2.0" (CDA ©), für die das Copyright © von Health Level Seven International<sup>[16]</sup> gilt. 2009 wurde die Release 2.0 als ISO-Standard ISO/HL7 27932:2009 publiziert<sup>[17]</sup>.

CDA definiert die Struktur und Semantik von "medizinischen Dokumenten" zum Austausch zwischen Gesundheitsdiensteanbietern und Patienten. Es enthält alle Metadaten zur Weiterverarbeitung und einen lesbaren textuellen Inhalt und kann diese Informationen auch maschinenlesbar tragen. Das Datenmodell von CDA und seine Abbildung in XML<sup>[18]</sup> folgen dem Basisstandard HL7 Version 3<sup>[19]</sup> mit seinem Referenz-Informationsmodell (RIM). Dieser Leitfaden verwendet das HL7-Template-Austauschformat zur Definition der "Bausteine" (Templates) und ART-DECOR®<sup>[20]</sup> als Spezifikationsplattform.

- HL7 Clinical Document Architecture (CDA)<sup>[21]</sup>
- HL7 Referenz-Informationsmodell (RIM)<sup>[22]</sup>
- HL7 V3 Datentypen<sup>[23]</sup>
- HL7 Template-Austauschformat Specification and Use of Reusable Information Constraint Templates, Release 1<sup>[24]</sup>

Die HL7 Standards können über die HL7 Anwendergruppe Österreich (HL7 Austria)<sup>[25]</sup>, die offizielle Vertretung von Health Level Seven International in Österreich bezogen werden ([www.HL7.at](http://www.HL7.at) (<https://www.hl7.at>)). Alle auf nationale Verhältnisse angepassten und veröffentlichten HL7-Spezifikationen können ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren in jeder Art von Anwendungssoftware verwendet werden.



[Abbildung 1]

Der Telemonitoring-Episodenbericht basiert auf den Vorgaben des **Allgemeinen Implementierungsleitfadens (Version 3)**.

Für die Modellierung der technischen Spezifikation der Inhalte des Telemonitoring-Episodenberichtes wurde das "PHMR Personal Healthcare Monitoring Report", das "CMA Community Medication Administration" und das "PCC Patient Care Coordination" als wesentliche Grundlage gewählt.

- IHE Integrationsprofile Patient Care Coordination ([https://www.ihe.net/resources/technical\\_frameworks/#pcc](https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#pcc)) [26]
- IHE Pharmacy Technical Framework Supplement Community Medication Administration (CMA) Rev. 1.1 – Trial Implementation ([https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE\\_Pharmacy\\_Suppl\\_CMA.pdf](https://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_CMA.pdf))
- HL7 CDA® R2 Implementation Guide: Personal Healthcare Monitoring Report, Release 1 ([https://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=33](https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=33))

## 2.7 Wichtige unterstützende Materialien

Auf der Website [Telemonitoring-Episodenbericht Guide](#) werden unter anderem folgende Materialien zur Verfügung gestellt:

- die PDF-Version dieses Leitfadens
- Beispieldokumente
- ein erweitertes CDA-Schema
- Schematron-Prüfregeln

Die im weiteren angeführten Templatespezifikationen wurden im Art-Decor Projektrepository [ELGATGD](https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--elgatgd-?section=templates) (<https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--elgatgd-?section=templates>) erstellt und können dort eingesehen werden.

Gemeinsam mit diesem Leitfaden werden auf der Website der ELGA GmbH ([www.elga.gv.at/CDA](http://www.elga.gv.at/CDA)) weitere Dateien und Dokumente zur Unterstützung bereitgestellt:

- Beispieldokumente

- Referenz-Stylesheet (Tool zur Darstellung im Browser - Konvertierung in HTML)
- CDA2PDF Suite (Tool zur Erzeugung einer PDF-Datei zur Ausgabe am Drucker)
- Schematron-Dateien für die Prüfung der Konformität ("Richtigkeit") von CDA Dateien
- Vorgaben zur Registrierung von CDA-Dokumenten (Leitfaden für XDS-Metadaten)
- Hinweise für die zu verwendenden Terminologien
- Leitfaden zur richtigen Verwendung von Terminologien

Fragen, Kommentare oder Anregungen für die Weiterentwicklung können an [cda@elga.gv.at](mailto:cda@elga.gv.at) (<mailto:cda@elga.gv.at>) gesendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter [www.elga.gv.at/CDA](http://www.elga.gv.at/CDA) (<http://www.elga.gv.at/CDA>).

## 2.8 Bedienungshinweise

### 2.8.1 Farbliche Hervorhebungen und Hinweise

#### Themenbezogene Hinweise zur besonderen Beachtung:

##### **Hinweis:**

Es dürfen keine Elemente oder Attribute verwendet werden, die nicht vom allgemeinen oder einem speziellen ELGA-Implementierungsleitfaden definiert wurden

#### Hinweis auf anderen Implementierungsleitfaden:

##### **Verweis**

Verweis auf den Allgemeinen Leitfaden:...

#### Themenbezogenes CDA Beispiel-Fragment im XML Format:

```
<BEISPIEL>  
<languageCode code="de-AT" />
```

### 2.8.2 PDF-Navigation

Nutzen Sie die bereitgestellten Links im Dokument (z.B. im Inhaltsverzeichnis), um direkt in der PDF-Version dieses Dokuments zu navigieren. Folgende Tastenkombinationen können Ihnen die Nutzung des Leitfadens erleichtern:

- Rücksprung: Alt + Pfeil links und Retour: Alt + Pfeil rechts
- Seitenweise blättern: "Bild" Tasten
- Scrollen: Pfeil nach oben bzw. unten
- Zoomen: Strg + Mouserad drehen
- Suchen im Dokument: Strg + F

# 3 Einleitung

## 3.1 Ausgangslage und Motivation

In Österreich gibt es verschiedene telemedizinische Versorgungsprogramme, die unter anderem die Betreuung von Patienten mit Herzkreislauf-Erkrankungen und Diabetes gewährleisten. Bisher gibt es keine Anbindung dieser telemedizinischen Anwendungen an die ELGA-Infrastruktur. Um den Austausch der Informationen zwischen allen beteiligten Institutionen und Personen zu unterstützen, muss ein einheitliches Austauschformat geschaffen und definiert werden, welches in diesem Dokument beschrieben wird. Durch den Telemonitoring-Episodenbericht sollen Daten aus telemedizinischen Versorgungsprogrammen auch anderen Gesundheitsdiensteanbietern mit ELGA-Zugriff zur Verfügung stehen.

## 3.2 Zweck des Dokuments

Der vorliegende "Implementierungsleitfaden für den Telemonitoring-Episodenbericht" beschreibt die einheitliche Implementierungsvorschrift für den Informationsaustausch von Telemonitoring-Daten im österreichischen Gesundheitswesen. Der Leitfaden basiert auf den vorangegangenen Erfahrungen in der Erstellung von Implementierungsleitfäden für ELGA CDA Dokumente. Der Header beinhaltet zum einen administrative Daten (allgemeine Angaben zum Dokument, Daten zum Patienten, usw.) und dient zum anderen auch als Quelle für die Metadaten, die bei der Registrierung des Dokuments in ELGA verwendet werden. Die eigentlichen Telemonitoringdaten, die im Rahmen von telemedizinischen Versorgungsprogrammen erfasst werden, sind im so genannten "Body" enthalten.

Elemente des Headers und Bodys orientieren sich am bestehenden "Allgemeiner Implementierungsleitfaden für ELGA CDA Dokumente".

## 3.3 Zielgruppe

Anwender dieses Dokuments sind Softwareentwickler und Berater, die allgemein mit Implementierungen und Integrationen im e-Health-Umfeld, aber auch mit ELGA e-Befunden oder e-Medikation betraut sind, insbesondere Hersteller und Betreiber von Telemonitoringplattformen. Weiters richtet sich der Leitfaden an alle an der Erstellung von Gesundheitsdaten und Gesundheitsdokumenten beteiligten Personen, einschließlich der Endbenutzer der medizinischen Softwaresysteme und der Angehörigen von Gesundheitsberufen.

## 4 Leitfadenerstellungs- und Harmonisierungsprozess

Für die Ausgestaltung der Inhalte von "CDA Implementierungsleitfäden" ist eine breite Beteiligung der Stakeholder wesentlich, um die praktische Nutzbarkeit und die Akzeptanz durch die ELGA-Benutzer sicherzustellen. Für diese interdisziplinären Expertengruppen stehen nicht die technischen, sondern vor allem medizinisch-inhaltliche Aspekte im Vordergrund. Die technischen Inhalte werden großteils von den Redaktionsteams beigetragen.

Ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zur Interoperabilität der IT-Systeme im Gesundheitswesen ist die Einigung auf Vorgaben für einheitliche Dokumentation und Codierung der Information. Diese durch die Arbeitsgruppen erreichte "Harmonisierung" etabliert neue nationale Qualitätsstandards der medizinischen Dokumentation. Die Leitfäden werden über ein reguläres Standardisierungsverfahren ("Ballot") durch die HL7 Anwendergruppe Österreich (HL7 Austria) zu einem nationalen HL7 Standard.

Weitere Details zum Vorgehensmodell sind im [Allgemeiner Leitfaden - Kapitel Leitfadenerstellungs- und Harmonisierungsprozess - Vorgehensmodell](#) zu finden.

Dieser Implementierungsleitfaden entstand durch die Harmonisierungsarbeit der [AG Telemonitoring-Episodenbericht](#), die im Zeitraum von Februar 2020 bis Mai 2020 tagte. Die Teilnehmer der Arbeitsgruppe wurden durch ihre Organisation delegiert.

*Die Arbeitsgruppe harmonisierte primär die inhaltlichen Vorgaben und soweit möglich die zu verwendenden Terminologien (Value Sets). Die Formulierung der technischen Spezifikation des CDA Implementierungsleitfadens Telemonitoring-Episodenbericht erfolgte durch die ELGA GmbH parallel bzw. nach der inhaltlichen Festlegung.*

Der Leitfaden wird in einem technischen Abstimmungsverfahren durch die HL7 Austria ("Ballot") zu einem österreichischen Standard. Die Verbindlichkeit zur Anwendung soll durch eine Novellierung des Gesundheitstelematikgesetzes 2012, BGBl. I Nr. 111/2012 begründet werden.

### 4.1 Revision der Leitfäden

Neue und geänderte Anforderungen sowie Verbesserungen können neue Versionen der bestehenden Spezifikationen notwendig machen.

Der CDA-Koordinator evaluiert in regelmäßigen Abständen, ob und welche Änderungen (etwa durch neue medizinische oder gesetzliche Anforderungen) notwendig sind. Aufgrund des Berichtes des CDA-Koordinators empfiehlt die ELGA GmbH die Erstellung von Revisionsversionen der bestehenden Leitfäden. Die geplanten Änderungen sollen mit den maßgeblichen Stakeholdern abgestimmt werden.

Neue Versionen, die "verpflichtende Elemente" (Sections oder Entries) neu einführen oder entfernen, sind "Hauptversionen", die jedenfalls über eine Durchführungsverordnung verbindlich gemacht und veröffentlicht werden. Andere Versionen sind "Nebenversionen". Alle verbindlichen Versionen sind auf <http://www.gesundheit.gv.at> zu veröffentlichen.

### 4.2 Autoren und Mitwirkende

Der vorliegende Leitfaden wurde unter der Leitung der ELGA GmbH von den Autoren und unter Mitwirkung der genannten Personen (Mitglieder der Arbeitsgruppe) erstellt. Die Arbeiten für den vorliegenden Leitfaden wurden von den Autoren gemäß dem Stand der Technik und mit größtmöglicher Sorgfalt erbracht. Die HL7 Austria und die ELGA GmbH genehmigen ausdrücklich die Anwendung des Leitfadens ohne Lizenz- und Nutzungsgebühren zum Zweck der Erstellung medizinischer Dokumente und weisen darauf hin, dass dies mit dem Einverständnis aller Mitwirkenden erfolgt.

## 4.2.1 Autoren

Das Redaktionsteam bestand aus folgenden Personen<sup>1</sup>:

| Name               | Organisation                              | Rolle              |
|--------------------|---|--------------------|
| Stefan Sabutsch    | ELGA GmbH, HL7 Austria                    | Autor, Herausgeber |
| Nikola Tanjga      | ELGA GmbH                                 | Autor              |
| Andrea Klostermann | ELGA GmbH                                 | Autor              |
| Oliver Kuttin      | ELGA GmbH                                 | Autor              |
| Kristina Reiter    | AIT Austrian Institute of Technology GmbH | Autor              |

Unter Mitwirkung von<sup>1</sup>: Stephan Rainer-Sablatnig (ELGA GmbH), Carina Seerainer (ELGA GmbH), Nina Sjencic (ELGA GmbH)

## 4.2.2 Mitwirkende

**Teilnehmer der Arbeitsgruppe Telemonitoring-Episodenbericht<sup>1</sup>:** Christian Starek (Updation), Bernadette Matiz (Gesundheitsfonds Steiermark), Paul Kressnik (Reha Buddy GmbH), Stefan Pötz (KAGES), Jan Nicolics (A1), Silke Klemen (FEEI), Christoph Hatzenberger (CareCenter), Alexander Gaiger (MedUni Wien), Peter Kastner (AIT), Andreas Nuener (Tirol Kliniken), Alexander Degelsegger-Márquez (Gesundheit Österreich GmbH - GOEG), Michael Gruska (Pensionsversicherungsanstalt), Stefan Sauermann (Technikum Wien & Chairman der PCHA EU Workgroup), Robert Modre (AIT), Clemens Rissbacher (Landesinstituts für Integrierte Versorgung Tirol), Gottfried Endel (SV), Florian Hoffmann (Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau), Eduard Schebesta (Verband Österreichischer Medizin Softwarehersteller), Simone Lubowitzky (MedUni Wien), Christoph Steinacker (Ärzttekammer)

<sup>1</sup> Personen sind ohne Titel angegeben

# 5 Technischer Hintergrund

## 5.1 ELGA

Der technische Hintergrund soll im [allgemeinen Leitfaden](#) nachgelesen werden.

## 5.2 Rahmenrichtlinie für die IT-Infrastruktur bei der Anwendung von Telemonitoring: Messdatenerfassung

Inhaltlich beschreibt die Rahmenrichtlinie den idealtypischen Ablauf einer zusätzlichen Betreuung mit Telemonitoring, stellt die IT-Architektur für Telemonitoring und die Systemanforderungen hinsichtlich der Interoperabilität dar. Skizziert werden weiters die Ziele und auch die Nicht-Ziele, die Adressatinnen und Adressaten, die Anbindung an ELGA, die rechtlichen Grundlagen und die technischen Begleitmaßnahmen.

Folgender Auszug gibt eine Einführung in die Rahmenrichtlinie. Es ist zu empfehlen das Dokument im Zuge der Vorbereitung für die Implementierung eines Telemonitoring Episodenberichts zu lesen.

*Vorarbeiten für vorliegende Rahmenrichtlinie des BMGF waren die Ergebnisse und Empfehlungen der Telegesundheitsdienste Kommission und der Projektgruppe Telegesundheitsdienste im Auftrag der Zielsteuerung und unter Mitwirkung von Bund (Leitung), Ländern und Sozialversicherung. Im Rahmen dieser Arbeiten wurde festgestellt, dass eine grundlegende technische "Guideline" in Form dieser Rahmenrichtlinie benötigt wird, die ein sinnvolles und hilfreiches Hilfsmittel für die in weiterer Folge genannten AdressatInnen bei der Umsetzung von Telemonitoring sein soll. Die hier vorliegende IT Architektur kann im Sinne der Machbarkeit derzeit keine vollständige Umsetzung abdecken und beschränkt sich daher auf die Messdatenerfassung im Rahmen des Telemonitorings. Diese Rahmenrichtlinie betrifft das Telemonitoring für Patientinnen und Patienten, die zur Behandlung/Überwachung ihrer Erkrankung ein zusätzliches Telemonitoring in Anspruch nehmen wollen. Es ist vorgesehen, dass die vorliegende Rahmenrichtlinie für sämtliche öffentlich finanzierte Telemonitoring Anwendungen angewendet werden muss. Diese Rahmenrichtlinie bezieht sich ausschließlich auf den Unterpunkt Überwachung/Monitoring/Messdatenerfassung der PatientInnen und nicht auf die umfassende Kommunikation, welche jedoch weiter entwickelt werden kann – auch im Sinne einer "feedback Funktion" GDA an Patient, bzw. im Führen z.B. eines Therapiegebuches durch die Patienten.<sup>[27]</sup>*

Aktuell (2020-07) gültiger, direkter Download der Rahmenrichtlinie: [https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:c6f54325-0c71-4614-93ff-3358d1cfea27/telemonitoring\\_rahmenrichtlinie\\_.pdf](https://www.sozialministerium.at/dam/jcr:c6f54325-0c71-4614-93ff-3358d1cfea27/telemonitoring_rahmenrichtlinie_.pdf)



## 6 Allgemeine Richtlinien für ELGA CDA-Implementierungsleitfäden

Die allgemeinen Richtlinien für ELGA CDA-Implementierungsleitfäden sollen beachtet werden.

## 7 Funktionale Anforderungen

Patienten können mit Telehealth-Systemen (medizinische Telemonitoring-Systeme) ihre Selbstmesswerte (z.B. Körpergewicht, Blutzucker, Blutdruck, Herzfrequenz, Wohlbefinden, Schritte) und zusätzlich auch Medikationsdaten, die verwendeten Medizingeräte, das Feedback aufgrund von Selbstmesswerten der GDAs (Gesundheitsdiensteanbieter) und weitere medizinische Daten in einer Datenzentrale speichern. Alle diese Daten gemeinsam werden als Telehealth-Daten bezeichnet.

Ein spezieller Anwendungszweck sind Disease Management Programme (DMP), welche mit Telehealth-Daten unterstützt werden. GDAs interagieren und kommunizieren mit den Patienten auf eine regelmäßige, koordinierte Weise, um eine Erkrankung über eine definierte Zeitspanne zu behandeln. Bei diesen Erkrankungen ist die Selbstpflege der Patienten für einen positiven Krankheitsverlauf unumgänglich. Ein DMP kann durch Selbstmesswert-Geräte und Webservices unterstützt werden, um eine aus der Ferne mit Telehealth-Daten unterstützte Behandlung zu ermöglichen.

Mit einer automatischen, standardisierten Erstellung und Meldung dieses neuen Dokuments in ELGA bietet man den Patienten volle Einsicht in die erhobenen Telehealth-Daten über das ELGA-Portal, in welchem auch weitere Dokumente von verschiedensten GDAs zur Verfügung stehen. Auch anderen und zukünftig behandelnden GDAs erleichtert man damit den Zugriff auf die erhobenen Telehealth-Daten und die dazugehörigen Behandlungen. Zusätzlich haben die von den GDAs eingesetzten Informationssysteme die Möglichkeit, diese Informationen in diesem Dokument automatisiert einzulesen und abzurufen.

### 7.1 Voraussetzungen für den Zugriff auf e-Befunde in ELGA

Der ELGA GDA ist in ELGA angemeldet, berechtigt und besitzt eine gültige Kontaktbestätigung für den Patienten. Der Patient ist ELGA-Teilnehmer und hat keinen generellen, partiellen oder situativen Widerspruch hinsichtlich ELGA eingelegt.

### 7.2 Anwendungsfälle des Dokumentenmanagements

Die folgenden Kapiteln aus dem allgemeinen Leitfaden stellen eine Zusammenfassung der Inhalte der ELGA-Gesamtarchitektur, des Leitfadens XDS Metadaten und Usability Styleguides zum Thema e-Befunde dar. Detailinformationen sind in den entsprechenden Dokumenten nachzulesen (verfügbar auf der Homepage der [ELGA GmbH \(https://www.elga.gv.at/\)](https://www.elga.gv.at/)). Die wesentlichen Anwendungsfälle sind

- Schreiben und Einbringen von Dokumenten
- Versionierung von Dokumenten
- Stornierung von Dokumenten
- Filtern und Suchen von Dokumenten
- Lesen von Dokumenten

## 7.2.1 Dokument-Metadaten (XDS-Metadaten)

| XDS-Element mit Link zum XDS-Leitfaden | Optionalität im XDS-Leitfaden | CDA-Element in /ClinicalDocument | Werte mit Beispielen  | Erklärung   |
|--|-------------------------------|----------------------------------|---|---|
| uniqueId                               | M                             | ./id                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337.999021.1"</li> </ul>  | Das uniqueId Element beschreibt den global eindeutigen Identifier des Dokuments und kann mit oder ohne Extension angegeben werden.  |
|  |                               |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337"</li> <li>▪ @extension="999021.1"</li> </ul>  |   |
| typeCode                               | R                             | ./code                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="75497-8"</li> <li>▪ @displayName="Telehealth Progress note"</li> <li>▪ @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</li> </ul> | Zur Unterscheidung des Dokumenttyps erhält das Element code des <b>"Telemonitoring Zwischen-Episodenbericht"</b> ein vorgegebenes "code"-Element.                         |
|  |                               |                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="75498-6"</li> <li>▪ @displayName="Telehealth Summary note"</li> <li>▪ @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</li> </ul>  | Zur Unterscheidung des Dokumenttyps erhält das Element code des <b>"Telemonitoring Entlassungs-Episodenbericht"</b> ein vorgegebenes "code"-Element.                      |
| classCode                              | R                             | ./code/translation               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="75496-0"</li> <li>▪ @displayName="Telehealth note"</li> <li>▪ @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"</li> </ul>          | Bezeichnet die "Dokumentklasse" in dem untergeordneten "translation"-Element. Einzig zulässige Wert für den telemonitoring Episodenbericht ist Telehealth note (75496-0). |

|                     |   |                             |   |   |
|---------------------|---|-----------------------------|---|---|
| title               | R | ./title                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Zwischenbericht Herz-Mobil Steiermark (23.3.2020-30.4.2020)"</li> </ul>   | Für den Telemonitoring Episodenbericht mit dem LOINC Code 75497-8 (Tel-ehealth Progress note) muss der Titel mit "Zwischenbericht" beginnen. Danach soll das Telegesundheitsdienste-System angegeben werden und mit dem Zeitraum der in dem Dokument vorhandenen Daten enden.   |
|                     |   |                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>"Entlassungsbericht Herz-Mobil Tirol (5.2020)"</li> </ul>  | Für den Telemonitoring Episodenbericht mit dem LOINC Code 75498-6 (Tel-ehealth Summary note) muss der Titel mit "Entlassungsbericht" beginnen. Danach soll das Telegesundheitsdienste-System angegeben werden und mit dem Zeitraum der in dem Dokument vorhandenen Daten enden. |
| formatCode          | M | ./hl7at:formatCode          | <ul style="list-style-type: none"> <li>@code="urn:hl7-at:telemon-epi:1.2.0+20210304"</li> <li>@codeSystem="1.2.40.0.34.5.37"</li> <li>@displayName="HL7 Austria Telemonitoring Episodenbericht 1.2.0+20210304"</li> </ul> | Version des vom CDA erfüllten Telemonitoring Episodenbericht Implementierungsleitfades.   |
| practiceSettingCode | M | ./hl7at:practiceSettingCode | <ul style="list-style-type: none"> <li>@code="F019"</li> <li>@codeSystem="1.2.40.0.34.5.12"</li> <li>@displayName="Innere Medizin"</li> </ul>   | Fachliche Zuordnung des Dokuments.  |

|  |                     |   |  |   |  |
|--|---------------------|---|--|---|--|
|  | creationTime        | M | ./effectiveTime  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @value="20181213095800+0200"</li> </ul>  | Das letzte medizinisch relevante Datum, an welchem das Dokument medizinische Inhalte hinzugefügt worden sind.  |
|  | confidentialityCode | M | ./confidentialityCode                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="N"</li> <li>▪ @displayName="normal"</li> <li>▪ @codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"</li> <li>▪ @codeSystemName="HL7:Confidentiality"</li> </ul> | Vertraulichkeitscode des Dokuments. Für ELGA-Dokumente ist ausschließlich "N" erlaubt!   |
|  | languageCode        | M | ./languageCode   | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="de-AT"</li> </ul>   | Für ELGA ist in @code für CDA und Ableitungen in die XSDDocumentEntry-Metadaten derzeit ausschließlich der Wert "de-AT" zulässig. Für eHealth können in zukünftigen Versionen des Leitfadens weitere Sprachcodes erlaubt werden. |
|  | referenceIdList     | M | ./setId  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337"</li> <li>▪ @extension="999021"</li> </ul>  | Eindeutige Id des Dokumentensets. Diese bleibt über alle Versionen der Dokumente gleich (initialer Wert bleibt erhalten). Die setId SOLL unterschiedlich zu /ClinicalDocument/id sein.   |
|  | sourcePatientId     | M | ./recordTarget/patientRole/id[1]                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.99.111.1.2"</li> <li>▪ @extension="123"</li> </ul>  | Patienten ID im Informationssystem des GDA, z.B.: im KIS eines Krankenhauses.  |
|  | author              | M | ./author[1]/assignedAuthor/representedOrganization/id[1] | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.99.4.1234"</li> </ul>   | ID und Name der Organisation (Kurzbezeichnung), der die Person angehört, wie im GDA-Index angegeben.   |
|  | authorInstitution   |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @root="1.2.40.0.34.99.4"</li> <li>▪ @extension="1234"</li> </ul>   |  |

|  |                    |   |  |  |  |
|--|--------------------|---|--|--|--|
|  | authorPerson       | M | ./author[1]/assignedAuthor             | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./id/@root="1.2.40.0.34.99.111.1.2"</li> <li>▪ ./id/@extension="999021"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/family="Holzer"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/given[1]="Daniela"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/given[2]="Chiara"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/suffix="BSc"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/prefix[@qualifier="AC"]="Dr."</li> </ul> | Daten der Person/des Geräts (Name, ID, etc.)                         |
|  |                    |   |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./assignedAuthoringDevice/softwareName="TelehealthSoftware"</li> <li>▪ ./assignedAuthoringDevice/manufacturerModelName="TelehealthSolutions"</li> </ul>   |  |
|  | authorRole         | M | ./author[1]/functionCode               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @displayName="Diensthabender Oberarzt"</li> </ul>   | Rolle der Person.  |
|  | authorSpeciality   | M | ./author[1]/assignedAuthor/code        | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @displayName="Fachärztin/Facharzt für Innere Medizin"</li> </ul>  | Fachrichtung des Verfassers des Dokuments aus ELGA_AuthorSpeciality. |
|  | LegalAuthenticator | M | ./legalAuthenticator[1]/assignedEntity | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ./id/@root="1.2.40.0.34.99.111.1.2"</li> <li>▪ ./id/@extension="999021"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/family="Holzer"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/given[1]="Daniela"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/given[2]="Chiara"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/suffix="BSc"</li> <li>▪ ./assignedPerson/name/prefix[@qualifier="AC"]="Dr."</li> </ul> | Rechtlicher Unterzeichner des Dokuments.                             |
|  | eventCodeList      | R | ./documentationOf[1]/serviceEvent/code | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ @code="719858009"</li> <li>▪ @displayName="Telehealth monitoring (regime/therapy)"</li> <li>▪ @codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"</li> <li>▪ @codeSystemName="SNOMED CT"</li> </ul>  | Code der Gesundheitsdienstleistung.                                  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                            |   |  |  |   |
|----------------------------|---|--|--|---|
| serviceStartTime           | R | ./documentationOf[1]/serviceEvent/<br>effectiveTime/low                  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ @value="20181001082015+0200"</li></ul>   | Zeitpunkt des Behandlungsbeginns (erster medizinisch relevanter Behandlungstag dieser dokumentierter Gesundheitsdienstleistung)   |
| serviceStopTime            | R | ./documentationOf[1]/serviceEvent/<br>effectiveTime/high                 | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ @value="20181213105900+0200"</li></ul>   | Zeitpunkt des Behandlungsendes (letzter medizinisch relevanter Behandlungstag dieser dokumentierter Gesundheitsdienstleistung, muss sich von Behandlungsbeginn unterscheiden) |
| healthcareFacilityTypeCode | R | ./componentOf/encompassingEncounter/<br>location/healthCareFacility/code | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ @code="300"</li><li>▪ @displayName="Allgemeine Krankenanstalt"</li><li>▪ @codeSystem="1.2.40.0.34.5.2"</li></ul> | Klassifizierung des GDA.  |

## 8 Konformitätsprüfung

Ein zu diesem Implementierungsleitfaden konformes CDA-Dokument ist zunächst ein valides CDA Release 2.0 XML-Dokument mit [Header](#) und [Body](#). Darüber hinaus erfüllt es alle in diesem Leitfaden festgelegten "Geschäftsregeln".

Dies spiegelt ein generelles Konzept im Umgang mit Dokumenten wieder: die Validierung in zwei Schritten. Im ersten Schritt stellt dies die Validierung gegen zugehörige **W3C Schemas** dar. Das verwendete Schema ist das geringfügig erweiterte offizielle CDA Release 2.0 Schema (siehe [Schema-Prüfung](#)). Darüber hinaus existieren eine Reihe von **Schematron** Regeln, die für einen zweiten Validierungsschritt genutzt werden und letztlich die Detailregelungen in diesem Leitfaden wiedergeben, sowie die Einhaltung der Geschäftsregeln (Optionalität, Kardinalität/Multiplizität, Datentypen, Wertebereiche, Abhängigkeiten) sicherstellen (siehe [Schematron-Prüfung](#)). Geschäftsregeln für Abschnitte oder Elemente werden auch technisch zu "**Templates**" zusammengefasst. Eine XML-Instanz, die kein valides CDA-Dokument ist oder sich nicht gegen das XSD-Schema validieren lässt oder im Widerspruch zu den angegebenen Geschäftsregeln steht, ist kein gültiges CDA-Dokument im Sinne dieses Implementierungsleitfadens.

Hinweis: Nicht alle Geschäftsregeln können mit Schema oder Schematron geprüft werden (etwa Inhalte von Multimedia-Attachments, Dokumentengröße). Zusätzliche Validierungsschritte sind gegebenenfalls notwendig, um alle Regeln zu überprüfen zu können.

Die Kapitel zu den technischen Konformitätsprüfungen von CDA-Dokumenten, gemäß diesem Dokumentleitfadens mittels Schema und Schematron, sind im allgemeinen Leitfaden unter den folgenden Links zu finden:

- [Schema-Prüfung](#)
- [Schematron-Prüfung](#)
- [Online-Validation von CDA-Dokumenten](#)
- [Hinweise zur Konformitätsprüfung](#)
- [Abnahmeprüfung für ELGA e-Befunde](#)
- [Zertifizierung](#)



## 9 Datentypen

Im [Kapitel Datentypen im allgemeinen Leitfaden](#) werden nur die Datentypen beschrieben, die in ELGA CDA-Dokumenten wie diesem zur Anwendung kommen. Für weiterführende Informationen wird auf den zugrundeliegenden Standard Health Level Seven Version 3 (V3), Normative Edition verwiesen.

## 10 Anwendungsfälle zur Dokumentenerstellung und -Aktualisierung

Die Einsatzszenarien für dieses Datenaustauschformat werden in Form von Anwendungsfälle beschrieben, um dem Leser den Hintergrund zu vermitteln. Diese Beschreibung der Anwendungsfälle ist nicht normativ und keine Vorentscheidung für die tatsächliche Umsetzung.

Es werden die drei Anwendungsfälle "**Start Telemonitoring**", "**Fortschritt Telemonitoring**" und "**Ende Telemonitoring**" aus Sicht des Dokuments, welches von einem Telemonitoring-System befüllt wird, erklärt.

- "**Start Telemonitoring**" geht auf den Prozess ein, welcher nur die Arbeitsschritte beinhaltet, welche notwendig sind, um ein erstes valides Dokument ohne optionale Felder zu generieren. Damit kann die noch gültige Kontaktbestätigung genutzt werden für ein erstes Registrieren des Dokumentes in der ELGA.
- "**Fortschritt Telemonitoring**" erklärt die Möglichkeiten wie ein Dokument automatisch wie auch halbautomatisch in einem bestimmten Intervall mit den neuesten Telemonitoring-Daten befüllt werden kann. Durch das erste Hochladen des Dokumentes ist ein stetiges Hochversionieren auch nach Ablauf der Kontaktbestätigung möglich.
- "**Ende Telemonitoring**" erweitert den Prozess dadurch, dass die Behandlung beendet wird und spätestens hier sollen die möglichen Sektionen des Dokumentes befüllt werden.

Um die Anforderungen eines Backup-Dokumentes, On-Demand Dokumentes oder maschinell erstellten Dokumentes, welches ohne Vidierung in der ELGA registriert wird, mit diesem Leitfaden zu erfüllen, wird auch ermöglicht, dieses Dokument ohne Vidierung (legalauthenticator 0..\*) valide sein zu lassen.

Es ist zu beachten, dass in aktuellen Telemonitoring Programmen ein ambulanter oder stationärer Besuch vorausgehend ist, zu welchem höchstwahrscheinlich ein ELGA-Dokument existiert. Auch bei Abschluss der Behandlung ist es zur Zeit der Normalfall, dass der Patient persönlich einen zuständigen Arzt besucht, wo auch ein ELGA-Dokument geschrieben wird. Diese fachlich zusammenhängenden Dokumente werden jedoch nicht maschinenlesbar verknüpft, sondern sind durch das relevante Dokumentendatum als zusammenhängend erkennbar.

### 10.1 Start Telemonitoring

Dieser Anwendungsfall startet am Beginn der Behandlung. Das Anlegen des Dokuments und erstmalige Hochladen in der dem GDA zugehörigen ELGA-Domäne erfolgt nach dem Eingeben der hier aufgeschlüsselten, mindestens notwendigen Header-Felder und der Body-Sektion "Behandlungsgrund".

Folgenden Elemente sind für das TmE **fixert** und somit nicht extra zu befüllen, jedoch verpflichtend anzugeben

- Hoheitsbereich des Dokuments im *realmCode*
- Fixe OID für alle Dokumente, die in der Governance-Gruppe "eHealth Austria" abgestimmt werden in der *typeId*
- den drei Dokumenten-Templatelds in jeweils einem *templateld*
- Dokumentenklasse im *code*
- Format welches das Dokument erfüllt im *formatCode*
- Vertraulichkeitscode des Dokuments im *confidentialityCode*
- Sprachcode des Dokuments im *languageCode*

Es **müssen** folgende Header-Informationen **einmalig für das System** konfiguriert werden und im Dokument angegeben werden

- Terminologie-Datum mit der letzten Aktualisierung der Terminologien im *terminologyDate*
- fachliche Zuordnung des Dokumentes im *practiceSettingCode*
- Verwahrer des Dokuments im *custodian*

Es **müssen** folgende Header-Informationen **einmalig für das DokumentenSet** im Dokument angegeben werden

- Eindeutige Id des Dokumentensets in der *setId*
- Komponente für die Patientendaten im *recordTarget*

Es **müssen** folgende Header-Informationen **einmalig pro Version des Dokuments** angegeben werden

- Dokumenten-ID in *id*
- Dokumententyp in *code.translation*
- Titel des Dokuments im *title*
- StatusCode wie fortlaufend oder abgeschlossen im *statusCode*
- Relevantes Datum des Dokuments im *effectiveTime*
- Versionsnummer des Dokuments in *versionNumber*
- ein bis mehrere Verfasser des Dokuments im *author*
- Komponente für die Gesundheitsdienstleistung im *documentationOf*

Alle anderen Elemente im Header und Body sind optional (mit Ausnahme der Body-Sektion "Behandlungsgrund") und können für den ersten Upload des Dokuments leer bleiben und in einer neuen Version des Dokuments optional hinzugefügt werden. Dieses Dokument wird vom behandelnden Gesundheitsdienstexperten vidiert und damit für das Hochladen in die ELGA-Domäne bereitgestellt. Dieser Schritt kann während dem Bekanntwerden der geplanten Behandlung und spätestens am ersten Behandlungstag stattfinden.

## 10.2 Fortschritt Telemonitoring

Während der Behandlung besteht optional die Möglichkeit, das **Dokument** zu **erweitern** und neue Daten - wie eine Zusammenfassung der bisherigen Behandlung, Messungen, Kommentare und Beilagen - hinzuzufügen und muss mit einer gültigen Vidierung, einer neuen Dokumenten-ID, einer erhöhten Versionsnummer, einer aktualisierten Zeitspanne der Behandlung und einem neuen Dokumentendatum hochgeladen werden. Dies kann automatisch ohne Vidierung oder halbautomatisch durch nochmalige Vidierung geschehen und in der ELGA registriert werden.

**Automatisch generierte und ohne Vidierung** in ELGA hochgeladene Dokumente, mit allen bis zu diesem Zeitpunkt vorhandenen Messergebnissen wie auch weiteren freigegeben Daten, bieten auch anderen GDAs in einer fortwährenden Behandlung eine Einsicht in die Daten. Der Großteil der Daten bei einem TmE Dokument wird vom Patienten selbst generiert und kann von hohem Interesse für andere Behandlungen sein. In einem bestimmten für die Behandlung sinnvollen Intervall, wie beispielsweise wöchentlich oder täglich, wird das Dokument mit den neuen Beobachtungen automatisch aktualisiert. Dabei können vorausgewählte Kommentare und Notizen wie auch ganze Dokumente als Anhang mit hochgeladen werden. Aktualisierte Texte von "Behandlungsgrund" wie auch erste Zusammenfassungen der bisherigen Behandlungen, können für das nächste Hochladen hinzugefügt werden. Es steht den Implementierern frei, dieses als automatisches Dokument für seine Benutzer in jeglicher Form bereitzustellen.

Grundsätzlich ist zu beachten, dass der **manuelle Schritt einer nochmaligen Vidierung** durch eine natürliche Person die Qualität der Daten hebt. Dies könnte halbautomatisch passieren, indem in regelmäßigen Abständen das System den Behandler bittet die neuesten Daten freizugeben und so-

mit zu vidieren. Es ist zu empfehlen die erste Vidierung, welche beim Start der Behandlung geschehen ist, für die folgenden, automatischen Zwischenberichte zu entfernen. Das erste Dokument mit der ersten Vidierung ist dann weiterhin als älteste Version in dem Dokumenten-Set auffindbar.

Die **maximale Dokumentengröße** für ELGA-Dokumente sind 20MB. Wenn diese Größe durch ein TmE-Dokument überschritten wird, ist es möglich durch mehrere Dokumente die vollständige Behandlung abzubilden. Dabei soll es nach der Behandlung **immer nur einen Abschlussbericht** für die Behandlung geben! Dieser Abschlussbericht kann auch die Daten des jüngsten Zeitraums beinhalten. Die anderen Zeiträume können in einem oder mehreren Fortschrittsberichten mit dem richtigen Setzen des Titels und "documentationOf"-Zeitraumes abgebildet werden.

### 10.3 Ende Telemonitoring

Spätestens am Ende der Behandlung wird eine über die ganze Behandlung berichtende Zusammenfassung verfasst, welche verpflichtend vom behandelnden Gesundheitsdienstexperten unterzeichnet werden muss. Auch weitere Sektionen können hier noch befüllt oder fertiggestellt werden. Diese aktualisierte Version des Telemonitoring-Episodenberichts (TmE Dokument) dient als Übersicht für zukünftige Behandlungen aller Gesundheitsdienstexperten mit Zugriff auf das Dokument.

## 11 Dataset des Telemonitoring Episodenberichts

Das Dataset (auch "Datenarten" oder "Konzepte") listet alle mit der Arbeitsgruppe abgestimmten Inhalte des Leitfadens auf. Es enthält Beschreibungen der Elemente mit Synonymen.

Dataset-Elemente können auf das CDA Datenmodell gemappt werden. In den Metadaten eines Templates sind alle assoziierten Konzepte auf einen Blick ersichtlich. Im Template-Body wird das assoziierte Konzept beim entsprechenden Datenelement angezeigt.

Die Live-Version des Datasets in Art-Decor kann unter folgendem [Link \(https://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--elgatgd-\)](https://art-decor.org/art-decor/decor-datasets--elgatgd-) betrachtet werden.

## 12 Technische Spezifikation

Die Struktur des CDA Austauschformats ist in den nachfolgenden Kapiteln im Detail beschrieben.

Der Header entspricht im Wesentlichen den bisherigen ELGA CDA-Leitfäden ("Allgemeiner Leitfaden"). Der Body enthält die tatsächlichen (medizinischen) Inhalte des Dokuments. Dieses Dokument existiert ausschließlich in einer voll strukturierten Form, eine Unterscheidung der Interoperabilitätsstufen ist daher nicht notwendig.

### 12.1 Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Elemente des CDA Headers und den Vorgaben bezüglich Kardinalität und Konformität.

Die jeweiligen Links in der letzten Spalte zeigen auf die einzelnen Header Elemente im allgemeinen Leitfaden.

Der aktuelle Leitfaden ist für den ELGA Kontext entwickelt worden, kann jedoch auch für andere Zwecke, welche als eHealth zusammengefasst werden, verwendet werden.

| Element               | Kard/Konf<br>ELGA | Kard/Konf<br>eHealth | Bedeutung / Link zum Kapitel                                 |
|-----------------------|-------------------|----------------------|--|
| realmCode             | 1..1 M            | 1..1 M               | <a href="#">Hoheitsbereich des Dokuments</a>                 |
| typeId                | 1..1 M            | 1..1 M               | <a href="#">Kennzeichnung CDA R2</a>                         |
| templateId            | 3..* M            | 3..* M               | <a href="#">Kennzeichnung von Strukturvorschriften</a>       |
| id                    | 1..1 M            | 1..1 M               | <a href="#">Dokumenten-Id</a>                                |
| code                  | 1..1 M            | 1..1 M               | <a href="#">Klassifikation des Dokuments (fein und grob)</a> |
| translation           | 1..1 M            | 0..* R               |  |
| title                 | 1..1 M            | 1..1 M               | <a href="#">Titel des Dokuments</a>                          |
| sdtc:statusCode       | 0..1 C            | 0..1 O               | <a href="#">Status des Dokuments</a>                         |
| hl7at:terminologyDate | 1..1 M            | 0..1 O               | <a href="#">Terminologie-Datum des Dokuments</a>             |
| hl7at:formatCode      | 1..1 M            | 0..1 O               | <a href="#">FormatCode des Dokuments</a>                     |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                            |         |        |  |
|----------------------------|---------|--------|--|
| hl7at:practiceSettingCode  | 1..1 M  | 0..1 O | Fachliche Zuordnung des Dokuments                                      |
| effectiveTime              | 1..1 M  | 1..1 M | Erstellungsdatum des Dokuments (medizinisch relevantes Datum)          |
| confidentialityCode        | 1..1 M  | 1..1 M | Vertraulichkeitscode   |
| languageCode               | 1..1 M  | 1..1 M | Sprachcode des Dokuments   |
| setId                      | 1..1 M  | 1..1 M | Versionierung des Dokuments  |
| versionNumber              | 1..1 M  | 1..1 M |  |
| recordTarget               | 1..1 M  | 0..1 C | Patient  |
| recordTarget de-identified | 0..0 NP | 0..1 C | Anonymer oder pseudonymisierter Patient                                |
| author                     | 1..* M  | 1..* M | Verfasser des Dokuments  |
| dataEnterer                | 0..1 O  | 0..1 O | Personen der Dateneingabe  |
| informant                  | 0..* O  | 0..* O | Informant  |
| custodian                  | 1..1 M  | 1..1 M | Verwahrer des Dokuments  |
| informationRecipient       | 0..* O  | 0..* O | Beabsichtigte Empfänger des Dokuments                                  |
| legalAuthenticator         | 0..* C  | 0..* C | Rechtlicher Unterzeichner, wird im speziellen Leitfaden definiert.     |
| authenticator              | 0..* O  | 0..* O | Weitere Unterzeichner  |
| participant                | 0..* O  | 0..* O | Weitere Beteiligte (nähere Unterscheidung im entsprechenden Leitfaden) |
| inFulfillmentOf            | 0..* O  | 0..* O | Zuweisung und Ordermanagement  |
| documentationOf            | 0..* O  | 0..* O | Gesundheitsdienstleistungen  |
| serviceEvent               | 1..1 M  | 1..1 M |  |
| relatedDocument            | 0..1 O  | 0..1 O | Bezug zu vorgehenden Dokumenten  |
| authorization              | 0..0 NP | 0..* O | Einverständniserklärung  |

|                       |        |        |   |
|-----------------------|--------|--------|---|
| componentOf           | 0..1 O | 0..1 O | <a href="#">Patientenkontakt (Aufenthalt)</a> |
| encompassingEncounter | 1..1 M | 1..1 M |   |

[Tabelle 1]: Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers

## 12.2 Übersichtstabelle der Header-Elemente für dokumenten-relevante Zeitpunkte/Zeitspannen

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Elemente des CDA Headers mit Zeitangaben und ihre Zusammenhänge.

Die jeweiligen Links in der letzten Spalte zeigen auf die einzelnen Header Elemente im allgemeinen Leitfaden.

Der aktuelle Leitfaden ist für den ELGA Kontext entwickelt worden, kann jedoch auch für andere Zwecke, welche als eHealth zusammengefasst werden, verwendet werden.

| Element                   | Kard/<br>Konf<br>ELGA | Kard/<br>Konf<br>eHealth | Bedeutung   | Link zum Kapitel                                 |
|---------------------------|-----------------------|--------------------------|---|--|
| hl7at:terminologyDate     | 1..1 M                | 0..1 O                   | Das Datum, an dem die lokal zur Implementierung verwendeten Value Sets mit dem österreichischen Terminologieserver abgeglichen wurden, wird hier angegeben.         | <a href="#">Terminologie-Datum des Dokuments</a> |
| effectiveTime             | 1..1 M                | 1..1 M                   | Das letzte medizinisch relevante Datum, an welchem das Dokument medizinische Inhalte hinzugefügt worden sind. Kann im speziellen Leitfaden anders definiert werden. | <a href="#">Erstellungsdatum des Dokuments</a>   |
| recordTarget<br>birthTime | 1..1 M<br>1..1 R      | 0..1 C<br>1..1 R         | Der Geburtstag des Patienten.   | <a href="#">Patient</a>                          |



|  |                  |                  |  |                           |
|--|------------------|------------------|--|---------------------------|
| recordTarget<br>deceasedTime   | 1..1 M<br>0..1 O | 0..1 C<br>1..1 R | Das Sterbedatum des Patienten.   | Patient                   |
| author<br>time   | 1..* M<br>0..1 R | 1..* M<br>0..1 R | Das jeweilige Datum, an welche der jeweilige Autor neue medizinische Informationen hinzugefügt hat.  | Verfasser des Dokuments   |
| dataEnterer<br>time  | 0..1 O<br>0..1 R | 0..1 O<br>0..1 R | Das Datum, an welchem eine Schreibkraft die Informationen aus einem Medium in das CDA Dokument überträgt, ohne weitere fachliche Informationen hinzuzufügen.   | Personen der Dateneingabe |
| legalAuthenticator<br>time   | 0..* C<br>1..1 R | 0..* C<br>1..1 R | Die Zeitpunkte, an welchem das Dokument von den einzelnen berechtigten Personen vidiert wurde. Diese Personen sind die Hauptunterzeichner. Ist im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden genauer vorgeschrieben. Dieser Zeitpunkt, wenn vorhanden, sollte nach author.time und dataenterer.time liegen. | Rechtlicher Unterzeichner |
| authenticator<br>time  | 0..* O<br>1..1 R | 0..* O<br>1..1 R | Die Zeitpunkte, an welchem das Dokument von den einzelnen berechtigten Personen vidiert wurde. Diese Personen sind die weiteren Unterzeichner.   | Weitere Unterzeichner     |
| <i>Notfallkontakt / Auskunftsberechtigte Person</i><br>participant [templated[@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.27']] time | 0..* O<br>0..1 O | 0..* O<br>0..1 O | Zeitraum, in dem der angegebene Kontakt den Notfall-Kontakt darstellt.<br><br>Wird nur angegeben, wenn der Kontakt bereits absehbar nur in einem eingeschränkten Zeitraum zur Verfügung steht.   | Weitere Beteiligte        |
| <i>Versicherter/Versicherungsparticipant</i><br>participant [templated[@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.26']] time        | 0..* O<br>0..1 O | 0..* O<br>0..1 O | Gültigkeitszeitraum der Versicherungspolizze.  | Weitere Beteiligte        |

|   |                            |                            |   |   |
|---|----------------------------|----------------------------|---|---|
| documentationOf<br>serviceEvent<br>effectiveTime      | 0..* O<br>1..1 M<br>1..1 M | 0..* O<br>1..1 M<br>1..1 M | Zeitraum der durchgeführten Gesundheitsdienstleistung. Ist im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden genauer vorgeschrieben. | <a href="#">Gesundheitsdienstleistungen</a>   |
| componentOf<br>encompassingEncounter<br>effectiveTime | 0..1 O<br>1..1 M<br>1..1 M | 0..1 O<br>1..1 M<br>1..1 M | Zeitraum des Patientenkontakts.   | <a href="#">Patientenkontakt (Aufenthalt)</a> |

[Tabelle 2]: Übersichtstabelle der Header-Elemente für Zeitpunkte/Zeitspannen

## 12.3 Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Bodys

Dieses Kapitel gibt einen Überblick über die Elemente des CDA Bodys und den Vorgaben bezüglich Kardinalität und Konformität.

| Element                        | Kard/Konf | Bedeutung / Link zum Kapitel                                |
|--------------------------------|-----------|---|
| Brieftext                      | 0..1 O    | <a href="#">Brieftext, welches auch das Logo beinhaltet</a> |
| Behandlungsgrund               | 1..1 M    | <a href="#">Behandlungsgrund</a>                            |
| Diagnosen                      | 0..1 O    | <a href="#">Diagnosen</a>                                   |
| Zusammenfassung der Behandlung | 0..1 O    | <a href="#">Zusammenfassung der Behandlung</a>              |
| Auszüge aus erhobene Daten     | 0..1 O    | <a href="#">Auszüge aus erhobene Daten</a>                  |
| Erhobene Daten                 | 0..1 O    | <a href="#">Erhobene Daten</a>                              |
| Verwendete Geräte              | 0..1 O    | <a href="#">Verwendete Geräte</a>                           |
| Beilagen                       | 0..1 O    | <a href="#">Beilagen</a>                                    |

[Tabelle 3]: Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Bodys


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

**12.4 CDA Templates**

**12.4.1 Document Level Templates**

**12.4.1.1 Telemonitoring Episodenbericht (Zwischen- & Entlassungsbericht)**

**12.4.1.1.1 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10**























|   |   |  |  |
|---|---|--|--|
| <div>Id</div> <div>Status</div> <div>Name</div> <div>Kontext</div> <div>Klassifikation</div> <div>Offen/Geschlossen</div> | 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10   | <div>Gültigkeit</div> <div>Versions-Label</div> <div>Bezeichnung</div> | 2021-04-22 06:24:14<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> TGDBeFund vom 2021-02-11 09:01:26</li><li><input type="radio"/> TGDBeFund vom 2018-07-18 16:07:16</li></ul> |
|   |  Entwurf |  | 1.3.0+20210622   |
|   | TGDBeFund   |  | Telemonitoring Episodenbericht   |
|   | Pfadname /  |  |  |
|   | CDA Document Level Template   |  |  |
|   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |  |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25


















Benutzt

Benutzt 39 Templates

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Benutzt                 | als       | Name  | Version |
|-------------------------|-----------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.10 | Inklusion |  Document Realm (1.0.0+20210219)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.30 | Inklusion |  Document Typeld (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.1  | Inklusion |  Document Id (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.45 | Inklusion |  Document StatusCode (1.0.1+20210624)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.46 | Inklusion |  Document TerminologyDate (1.0.0+20210219)                                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.44 | Inklusion |  Document PracticeSettingCode (1.1.0+20210303)                               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.11 | Inklusion |  Document Effective Time (1.0.0+20210219)                                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.12 | Inklusion |  Document Confidentiality Code (1.0.1+20210628)                              | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.13 | Inklusion |  Document Language (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.15 | Inklusion |  Document Set Id and Version Number (1.0.0+20210219)                         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.3  | Inklusion |  Record Target (1.2.0+20210303)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.2  | Inklusion |  Author (1.0.2)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.22 | Inklusion |  Data Enterer (1.0.0+20210219)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.4  | Inklusion |  Custodian (1.0.1)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.24 | Inklusion |  Information Recipient (1.0.0+20210219)                                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.5  | Inklusion |  Legal Authenticator (1.0.0+20210219)                                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.6  | Inklusion |  Authenticator (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.20 | Inklusion |  Participant Fachlicher Ansprechpartner (1.0.2+20210803)                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.21 | Inklusion |  Participant Ein-, Ueber-, Zuweisender Arzt (1.0.0+20210219)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.23 | Inklusion |  Participant Hausarzt (1.0.1+20210803)                                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.27 | Inklusion |  Participant Auskunftsberechtigte Person (Notfallkontakt) (1.0.2+20210803) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.25 | Inklusion |  Participant Angehoerige (1.0.1+20210803)                                  | DYNAMIC |

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

|                         |             |   |         |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.26 | Inklusion   |  Participant Versicherung (1.0.0+20210219)                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.29 | Inklusion   |  Participant Betreuungsorganisation (1.0.0+20210219)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.28 | Inklusion   |  Participant Weitere Behandler (1.0.0+20210219)              | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.9  | Inklusion   |  In Fulfillment Of (1.0.1+20210628)                          | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628)          | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 | Inklusion   |  Assigned Entity (1.0.1+20210526)                            | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.14 | Inklusion   |  Document Replacement - Related Document (1.0.1+20210628)    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.18 | Inklusion   |  Authorization (1.0.0+20210219)                              | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.1.7  | Inklusion   |  Component Of - Encompassing Encounter (1.0.0+20210219)      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 | Containment |  Brieftext (1.0.1+20210628)                                  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79 | Containment |  Behandlungsgrund - unkodiert (1.0.0+20210218)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 | Containment |  Diagnose - kodiert (1.1.1+20210304)                         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80 | Containment |  Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert (1.0.0+20210218) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91 | Containment |  Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert (1.1.0+20210218)     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81 | Containment |  Erhobene Daten - kodiert (1.0.0+20210218)                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 | Containment |  Verwendete Geräte - kodiert (1.0.0+20210218)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 | Containment |  Beilagen (1.0.1+20210628)                                 | DYNAMIC |

## Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 *Telemonitoring Episodenbericht* (2021-02-11 09:01:26) ref elgatgd-  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10 *Telemonitoring Episodenbericht* (2018-07-18 16:07:16) ref elgatgd-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```

<!-- Dies ist das Beispieldokument in der Version 3.0 für das "ELGA CDA Telemonitoring Episodenbericht"-
CDA -->
<cda:ClinicalDocument>
  <!-- der Bereich für welcher das CDA erstellt wurde -->
  <cda:realmCode code="AT"/>
  <!-- CDA R2 typeID -->
  <cda:typeID root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
  <!-- eHealth Austria Dokumente -->
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.0.1"/>
  <!-- Telemonitoring Episodenbericht Leitfaden -->
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.7.23.1"/>
  <!-- Telemonitoring Episodenbericht Art-Decor -->
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.0.10"/>
  <!-- Die Eindeutige ID des Dokumentes, bestehend aus der ID des Dokumenten-Sets und der Versionsnummer innerhalb des Sets -->
  <cda:id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999021.1" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
  <!-- Der Code gibt an um welches Dokument es sich handelt. Mit Telehealth Progress Note mit dem LOINC 75497-8 exisitert eine zweite
  mögliche Verwendung als Fortschrittsbefund. -->
  <cda:code codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" code="75498-6" displayName="Telehealth Summary note">
    <cda:translation codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" code="75496-0" displayName="Telehealth note"/>
  </cda:code>
  <!-- der Titel des Dokumentes -->
  <cda:title>Entlassungsbericht HerzMobil Tirol (10.01.2018 - 13.12.2018)</cda:title>
  <!-- Status eines Dokuments, bei einem Zwischen-Bericht auf "active" zu setzten -->
  <!-- <sdct:statusCode code="active"/> -->
  <!-- Terminologie-Datum -->
  <hl7at:terminologyDate value="20180526"/>
  <!-- Erste Version des Telemonitoring Episodenbericht -->
  <hl7at:formatCode code="urn:hl7-at:telemon-epi:1.2.0+20210301" codeSystem="1.2.40.0.34.5.37" displayName="HL7 Austria Telemonitoring
  Episodenbericht 1.2.0+20210301"/>
  <!-- die fachliche Zuordnung des Dokumentes -->
  <hl7at:practiceSettingCode code="F019" displayName="Innere Medizin" codeSystem="1.2.40.0.34.5.12" codeSystemName="ELGA_PracticeSet-
  ting"/>
  <!-- Erstellungszeitpunkt des Dokumentes -->
  <cda:effectiveTime value="20181213095800+0200"/>
  <!-- Die Vertraulichkeit des Dokumentes wird in der ELGA immer mit "N" für normal angegeben -->
  <cda:confidentialityCode code="N" displayName="normal" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25" codeSystemName="HL7:Confidentiality"/>
  <!-- Die Sprache des Dokumentes wird für das TmE im ELGA Szenario immer "de-AT" sein. -->
  <cda:languageCode code="de-AT"/>
  <!-- Die Id des Sets -->
  <cda:setId root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999021" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
  <!-- Die Versionsnummer des Dokumentes innerhalb des Sets -->
  <cda:versionNumber value="1"/>
  <!-- Der Patient der behandelt wurde -->
  <cda:recordTarget>
    <cda:patientRole>
      <!-- Der ID des Patienten beim Behandler -->
      <cda:id root="1.2.40.0.34.99.111.1.2" extension="123" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
      <!-- Die SVNR als globale ID des Patienten -->
      <cda:id root="1.2.40.0.10.1.4.3.1" extension="2568190361" assigningAuthorityName="Oesterreichische Sozialversicherung"/>
      <!-- Die Adresse des Patienten -->
      <cda:addr use="H">
        <cda:streetAddressLine>Kranebitter Allee 11/6</cda:streetAddressLine>
        <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
        <cda:city>Innsbruck</cda:city>
        <cda:state>Tirol</cda:state>
        <cda:country>AUT</cda:country>
      </cda:addr>
    </cda:patientRole>
  </cda:recordTarget>

```



```

</cda:addr>
<!-- Die Telefonnummer des Patienten -->
<cda:telecom value="tel:+43.660.12301942" use="MC"/>
<!-- Die Email-Adresse des Patienten -->
<cda:telecom value="mailto:franz.haecker@gmail.at"/>
<!-- Der Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Familienstand, Religion und Geburtsort des Patienten -->
<cda:patient>
  <cda:name>
    <cda:prefix>Dr.</cda:prefix>
    <cda:given>Franz</cda:given>
    <cda:family>Häckler</cda:family>
  </cda:name>
  <cda:administrativeGenderCode code="M" displayName="Male" codeSystem="1.2.40.0.34.10.4" codeSystemName="HL7:AdministrativeGender"/>
  <cda:birthTime value="19610319"/>
  <cda:maritalStatusCode code="M" displayName="Married" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.2" codeSystemName="HL7:MaritalStatus"/>
  <cda:religiousAffiliationCode code="101" displayName="Römisch-Katholisch" codeSystem="2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1" codeSystemName="HL7.AT:ReligionAustria"/>
  <cda:birthplace>
    <cda:place>
      <cda:addr>Innsbruck</cda:addr>
    </cda:place>
  </cda:birthplace>
</cda:patient>
</cda:patientRole>
</cda:recordTarget>
<!-- Der Autor/Ersteller des Dokumentes -->
<cda:author>
  <!-- Der Zeitpunkt des Erstellens -->
  <cda:time value="20160501120000+0200"/>
  <!-- Die Details über den Ersteller des Dokumentes -->
  <cda:assignedAuthor>
    <!-- Die ID des Erstellers, eindeutig innerhalb des Dokumentenverwahreres -->
    <cda:id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999021" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
    <!-- wenn das Dokument vollständig von einer Maschine erstellt worden ist, dann wird folgender auskommentierter XML Abschnitt
    statt "assignedPerson" verwendet
  <assignedAuthoringDevice>
    <manufacturerModelName>AIT KIT Telemedical Solutions</manufacturerModelName>
    <softwareName>TMScardio v2.3</softwareName>
  </assignedAuthoringDevice>
  -->
    <cda:assignedPerson>
      <!-- Name des Verfassers des Dokumentes -->
      <cda:name>
        <cda:prefix>Dr.</cda:prefix>
        <cda:given>Daniela</cda:given>
        <cda:family>Holzer</cda:family>
      </cda:name>
    </cda:assignedPerson>
    <!-- Die Organisation für welche der Autor das Dokument verfasst hat -->
    <cda:representedOrganization>
      <cda:id root="1.2.40.0.34.99.4" assigningAuthorityName="Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Bluthochdruck und Ernährungs-
      medizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer"/>
      <cda:name>Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Bluthochdruck und Ernährungsmedizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer</cda:na-
      me>
      <cda:telecom value="mailto:praxis@drHolzer.at"/>

```

```

<cda:telecom value="tel:+43.215285721"/>
<cda:telecom value="fax:+43.1.3453446.4674"/>
<cda:telecom value="http://www.amadeusspital.at"/>
<cda:addr>
  <cda:streetAddressLine>Weiherburggasse 85</cda:streetAddressLine>
  <cda:city>Innsbruck</cda:city>
  <cda:state>Tirol</cda:state>
  <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
  <cda:country>Austria</cda:country>
</cda:addr>
</cda:representedOrganization>
</cda:assignedAuthor>
</cda:author>
<!-- Der Verwahrer des Dokumentes -->
<cda:custodian>
  <cda:assignedCustodian>
    <!-- Die Details über den Verwahrer des Dokumentes inklusive Kontaktmöglichkeit -->
    <cda:representedCustodianOrganization>
      <cda:id root="1.2.40.0.34.3.1.3" extension="1" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
      <cda:name>Tirol Kliniken GmbH</cda:name>
      <cda:telecom value="tel:+43.(0)50.55460-0"/>
      <cda:addr>
        <cda:streetName>Anichstrasse</cda:streetName>
        <cda:houseNumber>35</cda:houseNumber>
        <cda:city>Innsbruck</cda:city>
        <cda:state>Tirol</cda:state>
        <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
        <cda:country>Austria</cda:country>
      </cda:addr>
    </cda:representedCustodianOrganization>
  </cda:assignedCustodian>
</cda:custodian>
<!-- der beabsichtige Empfänger des Dokumentes -->
<cda:informationRecipient typeCode="PRCP">
  <cda:intendedRecipient>
    <!-- Identifikation des Empfängers aus dem GDA-Index, kann unbekannt sein -->
    <cda:id nullFlavor="UNK"/>
    <!-- Die Details über den Empfänger -->
    <cda:informationRecipient>
      <cda:name>
        <cda:prefix qualifier="AC">Univ.-Doz. Dr.</cda:prefix>
        <cda:given>Gerhard</cda:given>
        <cda:family>Pölzl</cda:family>
      </cda:name>
    </cda:informationRecipient>
  <!-- Organisation, der der Empfänger angehört -->
  <cda:receivedOrganization>
    <cda:id root="1.2.40.0.34.99.3" extension="1234567890" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
    <cda:name>Tirol Kliniken GmbH</cda:name>
    <cda:telecom value="tel:+43.(0)50.55460-0"/>
    <cda:addr>
      <cda:streetName>Anichstrasse</cda:streetName>
      <cda:houseNumber>35</cda:houseNumber>
      <cda:city>Innsbruck</cda:city>
      <cda:state>Tirol</cda:state>
      <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
    </cda:addr>
  </cda:receivedOrganization>
</cda:informationRecipient>

```

```

        <cda:country>Austria</cda:country>
      </cda:addr>
    </cda:receivedOrganization>
  </cda:intendedRecipient>
</cda:informationRecipient>
<!-- Der Haupt-Unterzeichner des Dokumentes -->
<cda:legalAuthenticator>
  <!-- Der Zeitstempel des Unterzeichnens -->
  <cda:time value="20181213105900+0200"/>
  <!-- Der Signaturcode -->
  <cda:signatureCode code="S"/>
  <!-- Personen- und Organisationsdaten -->
  <cda:assignedEntity>
    <cda:id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999021" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
    <!--
  <assignedAuthoringDevice>
  <manufacturerModelName>AIT KIT Telemedical Solutions</manufacturerModelName>
  <softwareName>TMScardio</softwareName>
</assignedAuthoringDevice>
-->
    <cda:assignedPerson>
      <!-- Name des Verfassers des Dokuments -->
      <cda:name>
        <cda:prefix>Dr.</cda:prefix>
        <cda:given>Daniela</cda:given>
        <cda:family>Holzer</cda:family>
      </cda:name>
    </cda:assignedPerson>
    <cda:representedOrganization>
      <cda:id root="1.2.40.0.34.99.4" extension="1234567890" assigningAuthorityName="Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Blut-
hochdruck und Ernährungsmedizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer"/>
      <cda:name>Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Bluthochdruck und Ernährungsmedizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer</cda:na-
me>
      <cda:telecom value="mailto:praxis@drHolzer.at"/>
      <cda:telecom value="tel:+43.215285721"/>
      <cda:addr>
        <cda:streetAddressLine>Weiherburggasse 85</cda:streetAddressLine>
        <cda:city>Innsbruck</cda:city>
        <cda:state>Tirol</cda:state>
        <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
        <cda:country>Austria</cda:country>
      </cda:addr>
    </cda:representedOrganization>
  </cda:assignedEntity>
</cda:legalAuthenticator>
<!-- der fachliche Ansprechpartner -->
<cda:participant typeCode="CALLBACK">
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.11.1.1.1"/>
  <cda:associatedEntity classCode="PROV">
    <!-- Die verpflichtende Telefonnummer des fachlichen Ansprechpartners -->
    <cda:telecom use="WP" value="tel:+43.215285721"/>
    <!-- Name des Fachlichen Ansprechpartners -->
    <cda:associatedPerson>
      <cda:name>
        <cda:prefix>Dr.</cda:prefix>
        <cda:given>Daniela</cda:given>

```

```

        <cda:family>Holzer</cda:family>
      </cda:name>
    </cda:associatedPerson>
  </cda:associatedEntity>
</cda:participant>
<!-- Die Behandlung/Gesundheitsdienstleistung welche hier dokumentiert ist -->
<cda:documentationOf>
  <cda:serviceEvent>
    <cda:code code="719858009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Telehealth monitoring (re-
gime/therapy)"/>
    <!-- Anfang und Ende der Behandlung -->
    <cda:effectiveTime>
      <cda:low value="20181001082015+0200"/>
      <cda:high value="201812131059+0200"/>
    </cda:effectiveTime>
  </cda:serviceEvent>
</cda:documentationOf>
<!-- Der Patientenkontakt kann hier dokumentiert werden, welcher beim TmE-Dokument optional ist -->
<cda:componentOf>
  <cda:encompassingEncounter>
    <!-- Die Fallzahl der Behandlung -->
    <cda:id extension="2017999999" root="1.3.6.1.4.1.36678.5.903.71.7"/>
    <cda:code code="VR" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="HL7:ActCode" displayName="virtual"/>
    <!-- Die Laufzeit des Falles zur Behandlung -->
    <cda:effectiveTime>
      <cda:low value="20181001082015+0200"/>
      <cda:high value="201812131059+0200"/>
    </cda:effectiveTime>
    <!-- Die verantwortliche Person für die Behandlung -->
    <cda:responsibleParty>
      <cda:assignedEntity>
        <cda:id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999021" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
        <cda:assignedPerson>
          <cda:name>
            <cda:prefix>Dr.</cda:prefix>
            <cda:given>Daniela</cda:given>
            <cda:family>Holzer</cda:family>
          </cda:name>
        </cda:assignedPerson>
      </cda:assignedEntity>
    </cda:responsibleParty>
    <!-- Der Ort des Patientenkontaktes -->
    <cda:location>
      <cda:healthCareFacility>
        <cda:code code="300" displayName="Allgemeine Krankenanstalt" codeSystem="1.2.40.0.34.5.2"/>
        <cda:serviceProviderOrganization>
          <cda:id root="1.2.40.0.34.99.4" extension="1234567890" assigningAuthorityName="Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere,
Bluthochdruck und Ernährungsmedizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer"/>
          <cda:name>Tirol Kliniken GmbH</cda:name>
          <cda:telecom use="WP" value="tel:+43.215285721"/>
          <cda:addr>
            <cda:streetAddressLine>Weiherburggasse 85</cda:streetAddressLine>
            <cda:city>Innsbruck</cda:city>
            <cda:state>Tirol</cda:state>
            <cda:postalCode>6020</cda:postalCode>
            <cda:country>Austria</cda:country>
          </cda:addr>
        </cda:serviceProviderOrganization>
      </cda:healthCareFacility>
    </cda:location>
  </cda:encompassingEncounter>
</cda:componentOf>

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
        </cda:addr>  
      </cda:serviceProviderOrganization>  
    </cda:healthCareFacility>  
  </cda:location>  
</cda:encompassingEncounter>  
</cda:componentOf>  
<cda:component>  
  <cda:structuredBody>  
  
    ::  
  
</cda:structuredBody>  
</cda:component>  
</cda:ClinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                 | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|----------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:ClinicalDocument |     |         |      |  | (TGD...und) |
| └ @classCode         | cs  | 0 ... 1 | F    | DOCCLIN  |             |
| └ @moodCode          | cs  | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| Eingefügt            |     | 1 ... 1 | M    | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.10 Document Realm (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:realmCode      | CS  | 1 ... 1 | M    | Hoheitsbereich des Dokuments.<br>Fester Wert: @code = AT<br>(aus ValueSet „ELGA_RealmCode“)  | (TGD...und) |
| └ @code              |     | 1 ... 1 | F    | AT   |             |
| Eingefügt            |     | 1 ... 1 | M    | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.30 Document TypeId (DYNAMIC)  |             |
| └ hl7:typeId         | II  | 1 ... 1 | M    | Dokumentformat CDA R2  | (TGD...und) |
| └ @root              | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.1.3  |             |
| └ @extension         | st  | 1 ... 1 | F    | POCD_HD000040  |             |
| └ hl7:templateId     | II  | 1 ... 1 | M    | Fixe OID für alle Dokumente, die in der Governance-Gruppe "eHealth Austria" abgestimmt werden und von einem zentralen Art-Decor Repository abgeleitet werden (AT-CDA-BBR). | (TGD...und) |
| └ @root              | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.0.1   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |     |         |   |   |             |
|-------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M | Root-OID des Implementierungsleitfadens (Dokument-OID). Dient als informative Referenz.   | (TGD...und) |
| └─ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.7.23.1  |             |
| └─ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M | OID der Art-Decor Template für das Dokument (DocumentLevel-Template für Schematron)   | (TGD...und) |
| └─ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10   |             |
| Eingefügt         |     | 1 ... 1 | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.1 <i>Document Id</i> (DYNAMIC)   |             |
| └─ hl7:id         | II  | 1 ... 1 | M | Dokumenten-Id des CDA-Dokuments.<br>Es MUSS eine gültige und innerhalb des ID-Pools eindeutige Dokumenten-ID angegeben werden.<br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| └─ @root          | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| Auswahl           |     | 1 ... 1 |   | Einer von zwei Dokumententypen 75497-8 (Telehealth Progress note) oder 75498-6 (Telehealth Summary note) im "code"-Element und die fixierte Dokumentenklasse 75496-0 (Telehealth note) im untergeordneten "translation"-Element.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:code</li> <li>hl7:code</li> </ul> |             |
| └─ hl7:code       | CE  | 0 ... 1 | R | Dokumententyp 75497-8 (Telehealth Progress note)<br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b><br>Wird in ELGA in das XDS DocumentEntry Metadaten-Attribut XDS-DocumentEntry.typeCode übernommen.<br>Zu berücksichtigen sind jeweils die Attribute @code, @codeSystem und @displayName.  | (TGD...und) |

|                   |     |         |   |                          |
|-------------------|-----|---------|---|--------------------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | F | 75497-8                  |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1    |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 | F | LOINC                    |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | Telehealth Progress note |

|                   |    |         |   |  |             |
|-------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:translation | CE | 1 ... 1 | M | fester Dokumententyp 75496-0 (Telehealth note)<br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Dieses Element wird ins XDS-Attribut XSDDocumentEntry.classCode gemappt.<br>Zu berücksichtigen sind jeweils die Attribute @code, @codeSystem und @displayName. | (TGD...und) |
|-------------------|----|---------|---|--|-------------|

|                   |     |         |   |                       |
|-------------------|-----|---------|---|-----------------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | F | 75496-0               |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 | F | LOINC                 |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | Telehealth note       |

|            |    |         |   |   |             |
|------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:code | CE | 0 ... 1 | R | Dokumententyp 75498-6 (Telehealth Summary note)<br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b><br>Wird in ELGA in das XDS DocumentEntry Metadaten-Attribut XSD-DocumentEntry.typeCode übernommen.<br>Zu berücksichtigen sind jeweils die Attribute @code, @codeSystem und @displayName. | (TGD...und) |
|------------|----|---------|---|---|-------------|



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |     |         |   |                         |
|-------------------|-----|---------|---|-------------------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | F | 75498-6                 |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1   |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 | F | LOINC                   |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | Telehealth Summary note |

|                   |    |         |   |  |             |
|-------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:translation | CE | 1 ... 1 | M | fester Dokumententyp 75496-0 (Telehealth note)<br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Dieses Element wird ins XDS-Attribut XSDDocumentEntry.classCode gemappt.<br>Zu berücksichtigen sind jeweils die Attribute @code, @codeSystem und @displayName. | (TGD...und) |
|-------------------|----|---------|---|--|-------------|

|                   |     |         |   |                       |
|-------------------|-----|---------|---|-----------------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | F | 75496-0               |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1 |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 | F | LOINC                 |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | Telehealth note       |

Auswahl

1 ... 1

Dokumententitel. Dieses Element enthält den für den lesenden Dokumentempfänger gedachten Titel und muss sinngemäß mit der Dokumentklasse übereinstimmen. Für den Telemonitoring Episodenbericht gilt es weiter je nach Dokumententyp zu unterscheiden.  
Elemente in der Auswahl:

- hl7:title
- hl7:title

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                              |            |   |   |  |             |
|------------------------------|------------|---|---|--|-------------|
| <div>└ hl7:title</div>       | ST         | 0 ... 1   | R | Für den Telemonitoring Episodenbericht mit dem LOINC Code 75497-8 (Telehealth Progress note) muss der Titel mit "Zwischenbericht" beginnen. Danach soll das Telegesundheitsdienste-System angegeben werden und mit dem Zeitraum, der in dem Dokument vorhandenen Daten, enden. Bsp.: Zwischen-Bericht Herz-Mobil Steiermark (23.03.2020-30.04.2020)  | (TGD...und) |
| <div>└ hl7:title</div>       | ST         | 0 ... 1   | R | Für den Telemonitoring Episodenbericht mit dem LOINC Code 75498-6 (Telehealth Summary note) muss der Titel mit "Entlassungsbericht" beginnen. Danach soll das Telegesundheitsdienste-System angegeben werden und mit dem Zeitraum, der in dem Dokument vorhandenen Daten, enden. Bsp.: Entlassungs-Bericht Herz-Mobil Tirol (05.2020)  | (TGD...und) |
| Eingefügt                    |            | 0 ... 1   | C | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.45 Document StatusCode (DYNAMIC)  |             |
|                              | Constraint | Ein Zwischenbericht soll immer nur den statusCode "active" haben. Ein Entlassungsbericht soll keinen statusCode haben, was gleichbedeutend mit "completed" ist. Ausnahmen sind in einzelnen Fällen möglich, bitte mit der Ausnahme bei cda@elga.gv.at zur Überprüfung melden. |   |  |             |
| <div>└ sdct:statusCode</div> | CS         | 0 ... 1   | C | Status eines Dokuments.<br>e-Befunde sind grundsätzlich abgeschlossene bzw. "fertige" ("completed") Dokumente, daher entfällt die Angabe eines Status. In folgenden Ausnahmen <b>SOLL</b> der Status eines Dokuments wie folgt angegeben werden: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ "active": z.B. wenn bekannt ist, dass Updates folgen werden: Etwa für "vorläufige ärztliche Entlassungsbriege" oder Laborbefunde, für die noch Ergebnisse einzelner Analysen ausständig sind</li><li>▪ "nullified": z.B. für Dokumente, die gemäß Anwendungsfall "Storno von ELGA-Dokumenten" storniert werden, wobei zusätzlich ein letztes Dokument mit Storniert-Status in der Versionskette registriert wird.</li></ul> ↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Der Status wird <b>nicht</b> in die XDS-Metadaten übernommen! | (TGD...und) |
|                              | Constraint | Zulässige Werte für sdct:statusCode/@code sind "active" und "nullified"   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                             |              |   |   |   |  |
|-----------------------------|--------------|---|---|---|--|
|                             |              | CONF  | @code muss "nullified" sein<br>oder<br>@code muss "active" sein |   |  |
| Eingefügt                   |              |   | 1 ... 1   | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.46 Document TerminologyDate (DYNAMIC)   |
| └ hl7at:terminologyDate     | TS.DATE.FULL |   | 1 ... 1   | M | Das Terminologie-Datum des Dokumentes<br>Das Datum, an dem die lokal zur Implementierung verwendeten Value Sets mit dem österreichischen Terminologieserver abgeglichen wurden, wird hier angegeben. (TGD...und) |
|                             | Constraint   | Das Datum der letzten Terminologie-Aktualisierung MUSS entsprechend klassischer HL7 V3 Notation im Format "YYYYMMDD" angegeben werden.<br><b>Beispiel:</b> 20200527 |   |   |  |
| └ hl7at:formatCode          | CD           |   | 1 ... 1   | M | ↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> @code wird in das XDS-Attribut XSDSDocumentEntry.formatCode übernommen. (TGD...und)  |
| └ @code                     | CONF         |   | 1 ... 1   | F | urn:hl7-at:telemon-epi:1.2.0+20210304  |
| └ @codeSystem               |              |   | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.34.5.37   |
| └ @displayName              |              |   | 1 ... 1   | F | HL7 Austria Telemonitoring Episodenbericht 1.2.0+20210301  |
| Eingefügt                   |              |   | 1 ... 1   | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.44 Document PracticeSettingCode (DYNAMIC)   |
| └ hl7at:practiceSettingCode | CD           |   | 1 ... 1   | M | Die fachliche Zuordnung des Dokumentes (TGD...und)   |
| └ @displayName              |              |   | 1 ... 1   | R |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.75  
atcdabbr\_PracticeSetting\_VS (DYNAMIC)

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.11 Document Effective Time (DYNAMIC)

|                   |          |         |   |   |             |
|-------------------|----------|---------|---|---|-------------|
| h17:effectiveTime | TS.AT.TZ | 1 ... 1 | M | Relevantes Datum des Dokuments.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|-------------------|----------|---------|---|---|-------------|

|                           |                  |                |
|---------------------------|------------------|----------------|
| at-cda-bbr-dataelement-11 | Erstellungsdatum | Dataset A 2019 |
|---------------------------|------------------|----------------|

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.12 Document Confidentiality Code (DYNAMIC)

|                         |    |         |   |   |             |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| h17:confidentialityCode | CE | 1 ... 1 | M | Vertraulichkeitscode des Dokuments aus ValueSet „ELGA_Confidentiality“. | (TGD...und) |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|

|                           |                      |                |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| at-cda-bbr-dataelement-13 | Vertraulichkeitscode | Dataset A 2019 |
|---------------------------|----------------------|----------------|

@codeSystemName

st

1 ... 1 F

HL7:Confidentiality

Constraint

Für ELGA-Dokumente ist ausschließlich "N" erlaubt!

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.13 Document Language (DYNAMIC)

|                  |         |         |   |                           |             |
|------------------|---------|---------|---|---------------------------|-------------|
| h17:languageCode | CS.LANG | 1 ... 1 | M | Sprachcode des Dokuments. | (TGD...und) |
|------------------|---------|---------|---|---------------------------|-------------|




|                           |            |                |
|---------------------------|------------|----------------|
| at-cda-bbr-dataelement-14 | Sprachcode | Dataset A 2019 |
|---------------------------|------------|----------------|














@code

cs

1 ... 1 R

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |  |   |  |  |             |
|---|--|---|--|--|-------------|
| CONF  | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.10 <i>atcdabbr_LanguageCode</i> (DYNAMIC)  |   |  |  |             |
| Constraint  | Für ELGA ist in @code für CDA und Ableitungen in die XSDDocumentEntry-Metadaten derzeit ausschließlich der Wert <b>"de-AT"</b> zulässig.<br>Für eHealth und zukünftige Versionen der ELGA Leitfäden können weitere Sprachcodes erlaubt werden. |   |  |  |             |
|   | 1 ... 1  | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.15 <i>Document Set Id and Version Number</i> (DYNAMIC)  |  |             |
| II  | 1 ... 1  | M | Eindeutige <i>Id</i> des Dokumentensets. Diese bleibt über alle Versionen der Dokumente gleich (initialer Wert bleibt erhalten). Die <i>setId</i> SOLL unterschiedlich zur <i>clinicalDocument.id</i> sein.<br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Dieses Element wird ins XDS-Attribut <i>referenceIdList</i> (" <i>urn:elga:iti:xds:2014:ownDocument_setId</i> ") gemappt.<br><b>Hinweis:</b> Bestimmte Systeme, die bei der Übernahme der <i>setId</i> in die XDS-Metadaten mit dem V2-Datentyp CX arbeiten, könnten ein Problem mit @extension-Attributen haben, die länger als 15 Zeichen sind. |  | (TGD...und) |
| INT.NONNEG  | 1 ... 1  | M | Versionsnummer des Dokuments, wird bei neuen Dokumenten mit 1 festgelegt.<br>Die <i>versionNumber</i> ist eine natürliche Zahl für die fortlaufende Versionszählung. Mit einer neuen Version wird diese Zahl hochgezählt, während die <i>setId</i> gleich bleibt.  |  | (TGD...und) |
| int   | 1 ... 1  | R | Versionsnummer als positive ganze Zahl.  |  |             |
|   | 1 ... 1  | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.3 <i>Record Target</i> (DYNAMIC)  |  |             |
|   | 1 ... 1  | M | Komponente für die Patientendaten.   |  | (TGD...und) |
| <div> at-cda-bbr-dataelement-64</div> <div> Patient</div> <div> Dataset A 2019</div> |  |   |  |  |             |
| cs  | 0 ... 1  | F | RCT  |  |             |

|  |                     |    |         |   |                          |             |
|--|---------------------|----|---------|---|--------------------------|-------------|
|   | @contextControlCode | cs | 0 ... 1 | F | OP                       |             |
|   | hl7:patientRole     |    | 1 ... 1 | M | Patientendaten.          | (TGD...und) |
|   | @classCode          | cs | 0 ... 1 | F | PAT                      |             |
|   | hl7:id              | II | 2 ... * | R | Patientenidentifikatoren | (TGD...und) |
| <div>  at-cda-bbr-dataelement-193            EKVK            Dataset A 2019         </div> <div>           at-cda-bbr-dataelement-65            LokaleID            Dataset A 2019         </div> <div>           at-cda-bbr-dataelement-66            SVNr            Dataset A 2019         </div> <div>           at-cda-bbr-dataelement-67            bPK-GH            Dataset A 2019         </div> |                     |    |         |   |                          |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|            |  |
|------------|--|
| Constraint | <p><b>Hinweis: Die Reihenfolge der id-Elemente MUSS unbedingt eingehalten werden!</b></p> <p><b>*id[1] Identifikation des Patienten im lokalen System (1..1 M)</b><br/>↔ Hinweis zum XDS-Mapping: Das Element id[1] wird ins XDS-Attribut sourcePatientId gemappt.</p> <p><b>*id[2] Sozialversicherungsnummer des Patienten (1..1 R):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- @root: OID der Liste aller österreichischen Sozialversicherungen, fester Wert: 1.2.40.0.10.1.4.3.1 (1..1 M)</li><li>- @extension: Vollständige Sozialversicherungsnummer des Patienten (10 Stellen) (1..1 M)</li><li>- @assigningAuthorityName: Fester Wert: Österreichische Sozialversicherung (0..1 O)</li></ul> <p>Zugelassene nullFlavor:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- NI ... Patient hat keine Sozialversicherungsnummer (z.B. Ausländer)</li><li>- UNK ... Patient hat eine Sozialversicherungsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li></ul> <p><b>*id[@root="1.2.40.0.10.2.1.1.149"] Bereichsspezifisches Personenkennzeichen (0..1 O):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- @root: OID der österreichischen bPK, fester Wert: 1.2.40.0.10.2.1.1.149 (1..1 M)</li><li>- @extension: bPK des Patienten: concat(Bereichskürzel, ":", bPK) (Base64, 28 Zeichen). Typischerweise bPK-GH (Gesundheit). Kann im Zusammenhang mit E-ID auch andere Bereichskürzel tragen.</li></ul> <p>Anmerkung: Das bPK dient ausschließlich der Zuordnung der elektronischen Identität und darf daher nicht am Ausdruck erscheinen (1..1 M)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- @assigningAuthorityName: Fester Wert: Österreichische Stammzahlenregisterbehörde (0..1 O)</li></ul> <p><b>*id[@root="1.2.40.0.34.4.21"] Europäische Krankenversicherungskarte (0..1 O):</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- @root: OID der EKVK, fester Wert: 1.2.40.0.34.4.21 (1..1 M)</li><li>- @extension: Datenfelder der EKVK nach folgender Bildungsvorschrift: concat(Feld 6,"^",Feld 7,"^",Feld 8,"^",Feld 9) wobei Feld 6 "Persönliche Kennnummer" angegeben sein MUSS (1..1 M). Die übrigen Datenfelder sind optional (0..1 O). In Feld 9 MUSS die Datumsangabe im Format YY-MM-DD erfolgen.</li><li>- @assigningAuthorityName: Fester Wert: Nationaler Krankenversicherungsträger (0..1 O)</li></ul> <p>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.</p> |
| Beispiel   | <p>EKVK Beispiel-Max</p> <pre>&lt;!-- Beispiel einer EKVK Maximum-Variante --&gt;<br/>&lt;id root="1.2.40.0.34.4.21" extension="123456789^1100-OEGK^800400010016^20251231"/&gt;</pre>  |
| Beispiel   | <p>EKVK Beispiel-Min</p> <pre>&lt;!-- Beispiel einer EKVK Minimum-Variante --&gt;<br/>&lt;id root="1.2.40.0.34.4.21" extension="123456789"/&gt;</pre>  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|               |   |   |   |  |             |
|---------------|---|---|---|--|-------------|
| └ h17:addr    |   | 0 ... 2   | R | Adresse des Patienten.<br>Es MUSS eine mögliche Adresse unterstützt werden. Spezielle Leitfäden (z.B. Entlassungsbrief Pflege) können es erforderlich machen, dass mehr als eine Adresse unterstützt werden muss.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
|               | at-cda-bbr-dataelement-68 Adresse Dataset A 2019      |   |   |  |             |
|               | Constraint  | Werden mehrere gleichartige address-Elemente strukturiert (z.B. Home, Pflege), MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| └ h17:telecom | TEL.AT  | 0 ... *   | R | Kontakt-Element. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontakt-daten-Element“ zu befolgen.  | (TGD...und) |
|               | at-cda-bbr-dataelement-72 Kontaktdaten Dataset A 2019 |   |   |  |             |
|               |   |   |   |  |             |
| └ @value      | url   | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom-Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“                                   |             |
| └ @use        | cs  | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (z.B Heim, Arbeitsplatz), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|               | Constraint  | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.                     |   |  |             |
| └ h17:patient |   | 1 ... 1   | M | Name des Patienten.<br>Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 („strukturierte Angabe des Namens“) anzuwenden!<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Namen-Elemente von Personen PN“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
|               | at-cda-bbr-dataelement-70 Name Dataset A 2019         |   |   |  |             |
|               |   |   |   |  |             |
| Eingefügt     |   | 1 ... 1   | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  |             |




|                   |      |   |   |  |             |
|-------------------|------|---|---|--|-------------|
| └ @classCode      | CS   | 0 ... 1   | F | PSN  |             |
| └ @determinerCode | CS   | 0 ... 1   | F | INSTANCE   |             |
| └ hl7:name        | PN   | 1 ... 1   | M | Namen-Element (Person)   | (TGD...und) |
| └ @use            | CS   | 0 ... 1   |   | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, z.B. Angabe eines Künstlernamens mit „A“ für „Artist“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNameUse“.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“). |             |
| └ hl7:prefix      | ENXP | 0 ... *   |   | Beliebig viele Präfixe zum Namen, z.B. Akademische Titel<br>Achtung: Die Angabe der Anrede („Frau“, „Herr“), ist im CDA nicht vorgesehen!  | (TGD...und) |
| └ @qualifier      | CS   | 0 ... 1   |   | Bedeutung eines prefix-Elements, z.B. Angabe eines akademischen mit "AC" für „Academic“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.  |             |
|                   | CONF | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_EntityNamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ hl7:family      | ENXP | 1 ... *   | M | Mindestens ein Hauptname (Nachname).   | (TGD...und) |
| └ @qualifier      | CS   | 0 ... 1   |   | Bedeutung eines family-Elements, z.B. Angabe eines Geburtsnamen mit „BR“ für „Birth“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.   |             |
|                   | CONF | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_EntityNamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ hl7:given       | ENXP | 1 ... *   | M | Mindestens ein Vorname   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                |  |      |   |   |             |
|--------------------------------|--|------|---|---|-------------|
| └ @qualifier                   |  | cs   | 0 ... 1   | Die genaue Bedeutung eines given-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet, z.B. BR („Birth“). Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“  |             |
|                                |  | CONF | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 EL-GA_EntityNamePartQualifier_VS (DYNAMIC) |   |             |
| └ hl7:suffix                   |  | ENXP | 0 ... *   | Beliebig viele Suffixe zum Namen  | (TGD...und) |
| └ @qualifier                   |  | cs   | 0 ... 1   | Die genaue Bedeutung eines suffix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Suffix einen akademischen Titel darstellt, z.B.: AC („Academic“). Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.  |             |
|                                |  | CONF | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 EL-GA_EntityNamePartQualifier_VS (DYNAMIC) |   |             |
| Auswahl                        |  |      | 1 ... 1   | <p>Das "administrative Geschlecht" ist das soziale oder gesellschaftliche Geschlecht ("Gender"). Das administrative Geschlecht ist daher grundsätzlich getrennt von den biologischen Merkmalen der Person zu sehen. Grundsätzlich soll das administrative Geschlecht dem im Zentralen Melderegister (ZMR) eingetragenen Geschlecht entsprechen.</p> <p>Über ein Translation-Element können weitere Angaben zum Geschlecht gemacht werden, wenn diese abweichend vom administrativen Geschlecht sind, z.B.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Biologisches Geschlecht</li><li>▪ Geschlecht in der Sozialversicherung</li><li>▪ Geschlecht für die Stations-/Bettenbelegung im Krankenhaus</li></ul> <p>Codierung des Geschlechts des Patienten aus ValueSet "ELGA_Administrative-Gender".</p> <p>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ hl7:administrativeGenderCode[not(@nullFlavor)]</li><li>▪ hl7:administrativeGenderCode[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| └ hl7:administrativeGenderCode |  | CE   | 0 ... 1   |   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]          |  |      |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

 at-cda-bbr-dataelement-74  Geschlecht  Dataset A 2019

|                   |     |         |   |
|-------------------|-----|---------|---|
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | R |
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 | F |

2.16.840.1.113883.5.1

HL7:AdministrativeGender

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.4 *ELGA\_AdministrativeGender* (DYNAMIC)

|                   |    |         |   |   |             |
|-------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:translation | CD | 0 ... * | R | Über ein Translation-Element können weitere Angaben zum Geschlecht gemacht werden, wenn diese abweichend vom administrativen Geschlecht sind, z.B.: Biologisches Geschlecht, Geschlecht in der Sozialversicherung, Geschlecht für die Stations-/Bettenbelegung im Krankenhaus | (TGD...und) |
|-------------------|----|---------|---|---|-------------|

|                |    |         |   |
|----------------|----|---------|---|
| └ @displayName | st | 1 ... 1 | R |
|----------------|----|---------|---|

Beispiel

Beispiel für eine SNOMED CT Angabe  
<translation code="772004004" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" displayName="Non-binary gender"/>

|                                |    |         |  |  |             |
|--------------------------------|----|---------|--|--|-------------|
| └ h17:administrativeGenderCode | CE | 0 ... 1 |  |  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor="UNK"]         |    |         |  |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |  |         |   |  |             |
|------------------------|--|--|---------|---|--|-------------|
| └ @nullFlavor          |  | cs   | 1 ... 1 | F | UNK  |             |
| Auswahl                |  |  | 1 ... 1 |   | Geburtsdatum des Patienten.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:birthTime</li><li>hl7:birthTime[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| └ hl7:birthTime        |  | TS.AT.VAR  | 0 ... 1 |   |  | (TGD...und) |
|                        |  | at-cda-bbr-dataelement-75 Geburtsdatum Dataset A 2019            |         |   |  |             |
| └ hl7:birthTime        |  | TS.AT.VAR  | 0 ... 1 |   |  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |  |         |   |  |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs   | 1 ... 1 | F | UNK  |             |
| └ sdtc:deceasedInd     |  | BL   | 0 ... 1 | R | Kennzeichen, dass die Person verstorben ist. Kann alternativ zum Todesdatum angegeben werden, v.a. wenn der Todeszeitpunkt nicht bekannt ist.  | (TGD...und) |
|                        |  | at-cda-bbr-dataelement-192 Verstorben-Kennzeichen Dataset A 2019 |         |   |  |             |
| └ sdtc:deceasedTime    |  | TS.AT.TZ   | 0 ... 1 | R | Todesdatum der Person.   | (TGD...und) |
|                        |  | at-cda-bbr-dataelement-191 Todesdatum Dataset A 2019             |         |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |   |
|---|---|
| <div> <div> <div></div> <div>h17:maritalStatusCode</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>0 ... 1</div> <div>R</div> </div> <div> <div>Codierung des Familienstands des Patienten.<br/>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_MaritalStatus“</div> <div>(TGD...und)</div> </div> </div>                       | <div> <div> <div></div> <div>at-cda-bbr-dataelement-98</div> </div> <div> <div></div> <div>Familienstand</div> </div> <div> <div></div> <div>Dataset A 2019</div> </div> </div>       |
| <div> <div> <div></div> <div>@code</div> </div> <div> <div>cs</div> <div>1 ... 1</div> <div>R</div> </div> </div>   |   |
| <div> <div> <div></div> <div>@codeSystem</div> </div> <div> <div>oid</div> <div>1 ... 1</div> <div>F</div> </div> <div>2.16.840.1.113883.5.2</div> </div>   |   |
| <div> <div> <div></div> <div>@codeSystemName</div> </div> <div> <div>st</div> <div>1 ... 1</div> <div>F</div> </div> <div>HL7:MaritalStatus</div> </div>  |   |
| <div> <div> <div></div> <div>@displayName</div> </div> <div> <div>st</div> <div>1 ... 1</div> <div>R</div> </div> </div>  |   |
|   | <div> <div>CONF</div> <div>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.11 <i>ELGA_MaritalStatus</i> (DYNAMIC)</div> </div>                                |
| <div> <div> <div></div> <div>h17:religiousAffiliationCode</div> </div> <div> <div>CE</div> <div>0 ... 1</div> <div>R</div> </div> <div> <div>Codierung des Religionsbekenntnisses des Patienten.<br/>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_ReligiousAffiliation“</div> <div>(TGD...und)</div> </div> </div> | <div> <div> <div></div> <div>at-cda-bbr-dataelement-99</div> </div> <div> <div></div> <div>Religionsbekenntnis</div> </div> <div> <div></div> <div>Dataset A 2019</div> </div> </div> |
| <div> <div> <div></div> <div>@code</div> </div> <div> <div>cs</div> <div>1 ... 1</div> <div>R</div> </div> </div>   |   |
| <div> <div> <div></div> <div>@codeSystem</div> </div> <div> <div>oid</div> <div>1 ... 1</div> <div>F</div> </div> <div>2.16.840.1.113883.2.16.1.4.1</div> </div>  |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

└ @codeSystemName st 1 ... 1 F HL7.AT:ReligionAustria

└ @displayName st 1 ... 1 R

CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.18 *ELGA\_ReligiousAffiliation* (DYNAMIC)

|                       |  |         |    |  |             |
|-----------------------|--|---------|----|--|-------------|
| └ hl7:raceCode        |  |         | NP | Rasse des Patienten.<br><b>Darf nicht verwendet werden!</b>  | (TGD...und) |
| └ hl7:ethnicGroupCode |  |         | NP | Ethnische Zugehörigkeit des Patienten.<br><b>Darf nicht verwendet werden!</b>  | (TGD...und) |
| └ hl7:guardian        |  | 0 ... * | R  | Gesetzlicher Vertreter:<br>1. Vorsorgebevollmächtigte/r (Bevollmächtigte/r durch Vorsorgevollmacht)<br>2. Gewählte/r ErwachsenenvertreterIn<br>3. Gesetzliche/r ErwachsenenvertreterIn<br>4. Gerichtliche/r ErwachsenenvertreterIn (Sachwalter)<br>Der gesetzliche Vertreter kann entweder eine Person (guardianPerson) oder eine Organisation (guardianOrganization) sein.<br>Beim Patienten können optional ein oder mehrere gesetzliche Vertreter angegeben werden. Wenn ein gesetzliche Vertreter bekannt ist, SOLL diese Information auch angegeben werden. | (TGD...und) |

at-cda-bbr-dataelement-88 Gesetzlicher Vertreter Dataset A 2019

└ @classCode cs 0 ... 1 F GUARD

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|         |                    |            |   |   |   |             |
|---------|--------------------|------------|---|---|---|-------------|
| L       | hl7:addr           |            | 0 ... 1   | R | Die Adresse des gesetzlichen Vertreters oder der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Adress-Elemente“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
|         |                    |            |   |   |   |             |
| L       | hl7:telecom        | TEL.AT     | 0 ... *   | R | Beliebig viele Kontaktdaten des gesetzlichen Vertreters als Person oder Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
|         |                    |            |   |   |   |             |
| L       | @value             | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom-Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“  |             |
| L       | @use               | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (z.B. Heim, Arbeitsplatz) Bsp: WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|         |                    | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |   |             |
| Auswahl |                    |            | 1 ... 1   |   | Angabe des gesetzlichen Vertreters als Person (guardianPerson in Granularitätsstufe 1 oder 2) ODER als Organisation (guardianOrganization)<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:guardianPerson welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:guardianPerson welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:guardianOrganization welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.27 <i>Organization Name Compilation</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| L       | hl7:guardianPerson |            | 0 ... 1   |   | Name des gesetzlichen Vertreters: Angabe in Granularitätsstufe 1<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| L       | hl7:guardianPerson |            | 0 ... 1   |   | Name des gesetzlichen Vertreters: Angabe in Granularitätsstufe 2<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |    |         |   |   |             |
|---|----|---------|---|---|-------------|
| <div> <div></div> <div>h17:guardianOrganization</div> </div>                                      |    | 0 ... 1 | R | Name des gesetzlichen Vertreters (Organisation)<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.27 <i>Organization Name Compilation</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| <div> <div></div> <div>h17:birthplace</div> </div>  |    | 0 ... 1 | R | Geburtsort des Patienten.   | (TGD...und) |
| <div> <div>at-cda-bbr-dataelement-76</div> <div>Geburtsort</div> <div>Dataset A 2019</div> </div> |    |         |   |   |             |
| <div> <div></div> <div>@classCode</div> </div>  | cs | 0 ... 1 | F | BIRTHPL   |             |
| <div> <div></div> <div>h17:place</div> </div>   |    | 1 ... 1 | M |   | (TGD...und) |
| <div> <div></div> <div>@classCode</div> </div>  | cs | 0 ... 1 | F | PLC   |             |
| <div> <div></div> <div>@determinerCode</div> </div>   | cs | 0 ... 1 | F | INSTANCE  |             |
| Auswahl   |    | 1 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:addr welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:addr welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| <div> <div></div> <div>h17:addr</div> </div>  | AD | 0 ... 1 |   | Die Adresse des Geburtsorts. Minimalangabe. Alle Elemente optional.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| <div> <div></div> <div>h17:addr</div> </div>  | AD | 0 ... 1 |   | Die Adresse des Geburtsorts, struktuiert.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |   |         |   |  |             |
|--|---|---------|---|--|-------------|
| <div><div></div><div>hl7:languageCommunication</div></div> |   | 0 ... * | R   | Informationen bezüglich der Sprachfähigkeiten und Ausdrucksform des Patienten.   | (TGD...und) |
|  | <div><div><div></div><div>at-cda-bbr-dataelement-100</div></div><div><div></div><div>Sprachfähigkeit</div></div><div><div></div><div>Dataset A 2019</div></div></div> |         |   |  |             |
| <div><div></div><div>hl7:languageCode</div></div>          | CS  | 1 ... 1 | M   | <p>Sprache, die vom Patienten zu einem bestimmten Grad beherrscht wird (geschrieben oder gesprochen).</p> <p>In der Klasse <i>languageCommunication</i> können Informationen bezüglich der Sprachfähigkeiten und Ausdrucksform (z.B. gesprochen oder geschrieben) des Patienten angegeben werden. Dieser Leitfaden schränkt die möglichen Werte für die Sprache auf Werte aus dem Value Set ELGA_HumanLanguage ein.</p> <p>Die <i>Gebärdensprache</i> ist als eigene Sprache inkl. Ländercode anzugeben, mit der Ergänzung des Länder-/Regional-Codes (z.B. sgn-at), die Ausdrucksweise (MoodCode) wird in diesem Fall nicht angegeben (denn expressed / received signed wären redundant).</p> | (TGD...und) |
|  | <div><div><div></div><div>at-cda-bbr-dataelement-101</div></div><div><div></div><div>Sprache</div></div><div><div></div><div>Dataset A 2019</div></div></div>         |         |   |  |             |
| <div><div></div><div>@code</div></div>                     | cs  | 1 ... 1 | R   | <p>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_HumanLanguage“ aus Code-System „HL7:HumanLanguage 2.16.840.1.113883.6.121“</p> <p>Gemäß IETF / RFC 3066 enthält es ein bestimmtes Subset von Codes aus ISO 639-1 und ISO 639-2 (also zwei- und dreistellige Sprachcodes). Gemäß RFC 3066 ist es zulässig, eine Angabe der landestypischen Ausprägung der Sprache nach einem Bindestrich anzufügen. Das Land wird dabei nach ISO 3166-1 Alpha 2 angegeben. Dies MUSS bei der Auswertung des languageCodes berücksichtigt und toleriert werden.</p>   |             |
|  | CONF  |         | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.173 <i>ELGA_HumanLanguage</i> (DYNAMIC) |  |             |
| <div><div></div><div>hl7:modeCode</div></div>              | CE  | 0 ... 1 | C   | Ausdrucksform der Sprache.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_LanguageAbilityMode“   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

└ @code cs 1 ... 1 R

└ @displayName st 1 ... 1 R

└ @codeSystem oid 1 ... 1 F 2.16.840.1.113883.5.60

└ @codeSystemName st 0 ... 1 F HL7:LanguageAbilityMode

Constraint

Bei Strukturierung einer Gebärdensprache ist dieses Element NICHT ERLAUBT, NP [0..0] und MUSS daher komplett entfallen

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.175 *ELGA\_LanguageAbilityMode* (DYNAMIC)

└ hl7:proficiencyLevelCode

CE

0 ... 1 R

Grad der Sprachkenntnis in der Sprache.  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_ProficiencyLevelCode“ (TGD...und)



at-cda-bbr-dataelement-102



Grad der Sprachkenntnis



Dataset A 2019

└ @code cs 1 ... 1 R

└ @displayName st 1 ... 1 R

└ @codeSystem oid 1 ... 1 F 2.16.840.1.113883.5.61

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |  |  |  |   |  |             |
|-----------------------|--|--|--|---|--|-------------|
| L @codeSystemName     |  | st   | 0 ... 1  | F | HL7:LanguageAbilityProficiency   |             |
|                       |  | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.174 EL-GA_ProficiencyLevelCode (DYNAMIC) |   |  |             |
| L hl7:preferenceInd   |  | BL   | 0 ... 1  | R | Kennzeichnung, ob die Sprache in der angegebenen Ausdrucksform vom Patienten bevorzugt wird. | (TGD...und) |
|                       |  | <div>at-cda-bbr-dataelement-103SprachpräferenzDataset A 2019</div> |  |   |  |             |
| Schematron assert     |  | role   | error  |   |  |             |
|                       |  | test   | not(hl7:id[1]/@nullFlavor)   |   |  |             |
|                       |  | Meldung  | Die Verwendung von id/@nullFlavor ist an dieser Stelle NICHT ERLAUBT.  |   |  |             |
| Schematron assert     |  | role   | error  |   |  |             |
|                       |  | test   | not(hl7:id[2]/@nullFlavor) or (hl7:id[2][@nullFlavor='UNK'] or hl7:id[2][@nullFlavor='NI'])                      |   |  |             |
|                       |  | Meldung  | Zugelassene nullFlavor sind "NI" und "UNK"   |   |  |             |
| Eingefügt             |  |  | 1 ... *  | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.2 Author (DYNAMIC)  |             |
| L hl7:author          |  |  | 1 ... *  | M | Verfasser des Dokuments.   | (TGD...und) |
| L @typeCode           |  | cs   | 0 ... 1  | F | AUT  |             |
| L @contextControlCode |  | cs   | 0 ... 1  | F | OP   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |                 |         |   |   |             |
|------------------------|-----------------|---------|---|---|-------------|
| └ h17:functionCode     | CE (extensible) | 0 ... 1 | R | Funktionscode des Verfassers des Dokuments, z.B: „Diensthabender Oberarzt“, „Verantwortlicher Arzt für Dokumentation“, „Stationschwester“.<br>Eigene Codes und Bezeichnungen können verwendet werden. | (TGD...und) |
| └ @code                | cs              | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem          | oid             | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @displayName         | st              | 1 ... 1 | R |   |             |
| Auswahl                |                 | 1 ... 1 |   | Der Zeitpunkt an dem das Dokument verfasst bzw. inhaltlich fertiggestellt wurde.<br>Elemente in der Auswahl:<br>▪ hl7:time[not(@nullFlavor)]<br>▪ hl7:time[@nullFlavor='UNK']                         |             |
| └ hl7:time             | TS.AT.TZ        | 0 ... 1 |   |   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |                 |         |   |   |             |
| └ hl7:time             | TS.AT.TZ        | 0 ... 1 |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |                 |         |   |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs              | 1 ... 1 | F | UNK   |             |
| └ hl7:assignedAuthor   |                 | 1 ... 1 | M |   | (TGD...und) |
| └ @classCode           | cs              | 0 ... 1 | F | ASSIGNED  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |    |            |  |  |             |
|------------------------|----|------------|--|--|-------------|
| Auswahl                |    | 1 ... *    |  | Identifikation des Verfassers des Dokuments im lokalen System des/der datenerstellenden Gerätes/Software.<br>ODER Identifikation des/der datenerstellenden Gerätes/Software.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li><li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
|                        |    | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"><li>NI ..... Person hat keine ID / Gerät/Software hat keine ID</li><li>UNK ... Person hat eine ID, diese ist jedoch unbekannt / Gerät/Software hat eine ID, diese ist jedoch unbekannt</li></ul> |  |             |
| └ hl7:id               | II | 0 ... *    |  | Identifikation des Verfassers des Dokuments im lokalen System des/der datenerstellenden Gerätes/Software.<br>ODER Identifikation des/der datenerstellenden Gerätes/Software.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |    |            |  |  |             |
| └ hl7:id               | II | 0 ... 1    |  |  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |    |            |  |  |             |
| └ @nullFlavor          | CS | 1 ... 1    | F  | NI   |             |
| └ hl7:id               | II | 0 ... 1    |  |  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |    |            |  |  |             |
| └ @nullFlavor          | CS | 1 ... 1    | F  | UNK  |             |
| └ hl7:code             | CE | 0 ... 1    | R  | Angabe der Fachrichtung des Verfassers des Dokuments („Sonderfach“ gem. Ausbildungsordnung), z.B: „Facharzt/Fachärztin für Gynäkologie“.<br>Wenn ein Autor mehreren ärztlichen Sonderfächern zugeordnet ist, kann das anzugebende Sonderfach gewählt werden. Additivfächer werden nicht angegeben.   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|         |                       |            |  |   |  |             |
|---------|-----------------------|------------|--|---|--|-------------|
|         | └ @codeSystem         | oid        | 1 ... 1  | R |  |             |
|         | └ @displayName        | st         | 1 ... 1  | R |  |             |
|         | └ @code               | cs         | 1 ... 1  | R |  |             |
|         |                       | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
|         | └ hl7:telecom         | TEL.AT     | 0 ... *  |   | Kontaktdaten des Verfassers des Dokuments. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
|         | wo [not(@nullFlavor)] |            |  |   |  |             |
|         | └ @value              | st         | 1 ... 1  | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“   |             |
|         | └ @use                | set_cs     | 0 ... 1  |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|         |                       | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.        |   |  |             |
| Auswahl |                       |            | 1 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:assignedPerson welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:assignedAuthoringDevice welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
|         | └ hl7:assignedPerson  |            | 0 ... 1  |   | Personendaten des Verfassers des Dokuments. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen, name-Element ist hier Mandatory.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |  |            |   |   |             |
|---|--|------------|---|---|-------------|
| <div> <div></div> <div>hl7:assignedAuthoringDevice</div> </div>                                     |  | 0 ... 1    |   | Datenerstellende/s Software/Gerät<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| <div> <div></div> <div>hl7:representedOrganization</div> </div>                                     |  | 1 ... 1    | M   | Organisation, in deren Auftrag der Verfasser des Dokuments die Dokumentation verfasst hat.<br><br>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Da manche offiziellen Bezeichnungen von GDA sehr lang werden können, <b>SOLL</b> das <i>name</i> Element einer möglichst eindeutigen Kurzbezeichnung der Organisation entsprechen (im GDA-I im Tag <i>description</i> enthalten). Bei größeren Organisationen SOLL zusätzlich die Abteilung angegeben werden, damit die Zuordnung für den Leser einfacher wird.<br><br>Beispiel: Statt "Allgemeines Krankenhaus der Stadt Wien-Medizinischer Universitätscampus" --> "Wien AKH" bzw "Wien AKH - Augenambulanz"<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 <i>Organization Compilation with id, name</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
|   |  | Constraint | <ul style="list-style-type: none"> <li>id <b>MUSS</b> der OID der Organisation aus dem GDA-Index entsprechen.</li> <li>name <b>SOLL</b> der Kurzbezeichnung im GDA-I entsprechen (sofern vorhanden)</li> <li>Zu dem Namen größerer Organisationen <b>SOLL</b> auch die Abteilung angegeben werden., z.B.: „Amadeus Spital, Chirurgische Abteilung“</li> <li><b>Ausnahme:</b> Wenn als Author ein/e <b>Software/Gerät</b> fungiert und keine OID aus dem GDA-I angegeben werden kann, <b>MÜSSEN</b> die Angaben der Organisation des Geräte-/Software-<b>Betreibers oder Herstellers</b> entsprechen.</li> </ul> |   |             |
| Eingefügt   |  | 0 ... 1    |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.22 <i>Data Enterer</i> (DYNAMIC)   |             |
| <div> <div></div> <div>hl7:dataEnterer</div> </div>   |  | 0 ... 1    |   | Schreibkraft, Medizinische/r Dokumentationsassistent/in, etc.   | (TGD...und) |
| <div> <div>at-cda-bbr-dataelement-16</div> <div>Schreibkraft</div> <div>Dataset A 2019</div> </div> |  |            |   |   |             |

└ @typeCode cs 0 ... 1 F ENT

└ @contextControlCode cs 0 ... 1 F OP

└ hl7:time TS.AT.TZ 0 ... 1 R Der Zeitpunkt an dem das Dokument geschrieben wurde. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen. (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

at-cda-bbr-dataelement-17 Zeitpunkt des Schreibens Dataset A 2019

└ hl7:assignedEntity 1 ... 1 M Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 *Assigned Entity* (DYNAMIC) (TGD...und)

Eingefügt 1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.4 *Custodian* (DYNAMIC)

└ hl7:custodian 1 ... 1 M Verwahrer des Dokuments. (TGD...und)

at-cda-bbr-dataelement-24 Verwahrer Dataset A 2019

└ @typeCode cs 0 ... 1 F CST

└ hl7:assignedCustodian 1 ... 1 M (TGD...und)

└ @classCode cs 0 ... 1 F ASSIGNED

└ hl7:representedCustodian Organization 1 ... 1 M (TGD...und)



└ @classCode                      cs                      0 ... 1    F                      ORG

└ @determinerCode                  cs                      0 ... 1    F                      INSTANCE

|          |    |         |   |  |             |
|----------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:id | II | 1 ... * | M | Identifikation des Verwahrers des Dokuments. Wenn dieser im GDA-I angeführt ist, ist die entsprechende OID zu verwenden. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|----------|----|---------|---|--|-------------|

|            |    |         |   |   |             |
|------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:name | ON | 1 ... 1 | M | Name des Verwahrers des Dokuments (Organisation). Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Namen-Elemente von Organisationen ON“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|------------|----|---------|---|---|-------------|

|               |        |         |  |   |             |
|---------------|--------|---------|--|---|-------------|
| └ hl7:telecom | TEL.AT | 0 ... * |  | Kontaktdaten des Verwahrers des originalen Dokuments (Organisation). Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Elemente“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|---------------|--------|---------|--|---|-------------|

wo [not(@nullFlavor)]

└ @value                      st                      1 ... 1    R

└ @use                      set\_cs                      0 ... 1                      Bedeutung des angegebenen Kontakts gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

|            |   |
|------------|---|
| Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |
|------------|---|

|            |    |         |   |   |             |
|------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:addr | AD | 1 ... 1 | M | Adresse des Verwahrers des Dokuments (Organisation). Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Adress-Elemente“ zu befolgen. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
|------------|----|---------|---|---|-------------|

Eingefügt                      0 ... \*                      von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.24 *Information Recipient* (DYNAMIC)

|                            |  |         |  |  |             |
|----------------------------|--|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:informationRecipient |  | 0 ... * |  | Beabsichtiger Empfänger des Dokuments. | (TGD...und) |
|----------------------------|--|---------|--|--|-------------|

└ @typeCode



at-cda-bbr-dataelement-26

Empfänger



Dataset A 2019

Typ des Informationsempfängers, z.B: PRCP „Primärer Empfänger“.

cs

0 ... 1

Werden mehrere Empfänger angegeben, MUSS der primäre Empfänger über den typeCode definiert werden.

**Hinweis:** Das ist relevant, wenn Funktionen aus dem gerichteten Befundversand oder für den Briefdruck auf das Dokument angewendet werden.

CONF

Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.29 *EL-GA\_InformationRecipientType* (DYNAMIC)



at-cda-bbr-dataelement-27

Empfänger Typ



Dataset A 2019

└ hl7:intendedRecipient

1 ... 1

M

(TGD...und)

└ @classCode

cs

0 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:id[not(@nullFlavor)]
- hl7:id[@nullFlavor='NI']
- hl7:id[@nullFlavor='UNK']

Auswahl

1 ... \*

└ hl7:id

II

0 ... \*

Identifikation des beabsichtigten Empfängers (Person).  
Empfohlene Information für einen Empfänger ist die ID aus dem GDA-Index.  
Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.

(TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]






at-cda-bbr-dataelement-28

ID des Empfängers






Dataset A 2019

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |    |         |   |   |             |
|--|----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:id   | II | 0 ... 1 |   | NI ... Person hat keine ID  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |    |         |   |   |             |
| └ @nullFlavor  | cs | 1 ... 1 | F | NI  |             |
| └ h17:id   | II | 0 ... 1 |   | UNK ... Person hat eine ID, diese ist jedoch unbekannt  | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK']   |    |         |   |   |             |
| └ @nullFlavor  | cs | 1 ... 1 | F | UNK   |             |
| Auswahl  |    | 1 ... 1 |   | Personendaten des beabsichtigten Empfängers.<br><b>Empfehlung:</b> Der Name des Empfängers und die Organisation, der er angehört, sollen in möglichst hoher Granularität angegeben werden. Aufgrund der gängigen Praxis kann als minimale Information für den Empfänger der unstrukturierte Name angegeben werden.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Personen-Element“ zu befolgen.<br>Elemente in der Auswahl: |             |
|  |    |         |   | <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:informationRecipient[hl7:name[count(child::*)=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:informationRecipient[hl7:name[count(child::*)!=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li></ul>  |             |
| └ hl7:informationRecipient   |    | ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| wo [hl7:name [count(child::*)=0]]  |    |         |   |   |             |
| <div> at-cda-bbr-dataelement-29  Name  Dataset A 2019</div> |    |         |   |   |             |










1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |  |        |         |   |  |             |
|--|--|--------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:informationRecipient   |  |        | ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [h17:name [count(child::*)!=0]]   |  |        |         |   |  |             |
| └ h17:receivedOrganization   |  |        | 0 ... 1 | R | Organisation, der der beabsichtigte Empfänger angehört, z.B.: „Ordnation des empfangenden Arztes“. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Organisations-Element“ zu befolgen.  | (TGD...und) |
| <div>  at-cda-bbr-dataelement-30  Organisation  Dataset A 2019 </div> |  |        |         |   |  |             |
| Eingefügt  |  |        |         |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ @classCode   |  | cs     | 0 ... 1 | F | ORG  |             |
| └ @determinerCode  |  | cs     | 0 ... 1 | F | INSTANCE   |             |
| └ h17:id   |  | II     | 0 ... * |   | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |        |         |   |  |             |
| └ h17:name   |  | ON     | 1 ... 1 | M | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.  | (TGD...und) |
| └ h17:telecom  |  | TEL.AT | 0 ... * |   | Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |        |         |   |  |             |
| └ @value   |  | st     | 1 ... 1 | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |            |   |   |  |             |
|--|------------|---|---|--|-------------|
| <div><div></div><div>@use</div></div>  | set_cs     | 0 ... 1   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“ |  |             |
|  | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use an-<br>geführt sein.  |   |  |             |
| <div><div></div><div>hl7:addr</div></div>  | AD         | 0 ... 1   |   | Adresse der Organisation.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 Address Compilation (DYNA-<br>MIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |            |   |   |  |             |
| Eingefügt  |            | 0 ... *   | C   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.5 Legal Authenticator (DYNAMIC)   |             |
|  | Constraint | Um die Anforderungen eines Backup-Dokumentes, On-Demand Dokumentes oder maschinell er-<br>stellten Dokumentes welches ohne Vidierung in der ELGA registriert wird, mit diesem Leitfaden zu<br>erfüllen, wird auch ermöglicht, dieses Dokumente ohne Vidierung (legalauthenticator 0..*) valide<br>sein zu lassen. |   |  |             |
| <div><div></div><div>hl7:legalAuthenticator</div></div>  |            | 0 ... *   | C   | Hauptunterzeichner, Rechtlicher Unterzeichner  | (TGD...und) |
| <div><div><div></div>at-cda-bbr-dataelement-1</div><div><div></div>Rechtlicher Unterzeichner</div><div><div></div>Dataset A 2019</div></div> |            |   |   |  |             |
| <div><div></div><div>@contextControlCode</div></div>   | cs         | 0 ... 1   | F   | OP   |             |
| <div><div></div><div>@typeCode</div></div>   | cs         | 0 ... 1   | F   | LA   |             |
| Auswahl  |            | 1 ... 1   |   | Der Zeitpunkt, an dem das Dokument unterzeichnet wurde.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:time[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:time[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| <div><div></div><div>hl7:time</div></div>  | TS.AT.TZ   | 0 ... 1   |   |  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |            |   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |          |         |   |   |  |   |  |  |
|------------------------|----------|---------|---|---|--|---|--|--|
|                        |          |         |   |   |  |  at-cda-bbr-dataelement-5    |  Zeitpunkt der Unterzeichnung |  Dataset A 2019   |
| └─ hl7:time            | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |   |  |   | (TGD...und)  |  |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |   |   |  |   |  |  |
| └─ @nullFlavor         | cs       | 1 ... 1 | F | UNK   |  |   |  |  |
| └─ hl7:signatureCode   | CS       | 1 ... 1 | M | Signaturcode gibt an, dass das Originaldokument unterzeichnet wurde.  |  |   |  | (TGD...und)  |
|                        |          |         |   |   |  |  at-cda-bbr-dataelement-6    |  Signatur                     |  Dataset A 2019   |
| └─ @code               | CONF     | 1 ... 1 | F | S   |  |   |  |  |
| └─ hl7:assignedEntity  |          | 1 ... 1 | M | Personendaten des rechtlichen Unterzeichners.<br><b>Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 ("strukturierte Angabe des Namens") anzuwenden!</b><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 <i>Assigned Entity</i> (DYNAMIC) |  |   |  | (TGD...und)  |
| Eingefügt              |          | 0 ... * |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.6 <i>Authenticator</i> (DYNAMIC)   |  |   |  |  |
| └─ hl7:authenticator   |          | 0 ... * |   | Weitere Unterzeichner.  |  |   |  | (TGD...und)  |
|                        |          |         |   |   |  |  at-cda-bbr-dataelement-31 |  Weitere Unterzeichner      |  Dataset A 2019 |
| └─ @typeCode           | cs       | 0 ... 1 | F | AUTHEN  |  |   |  |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Auswahl




1 ... 1

Der Zeitpunkt, an dem das Dokument unterzeichnet wurde.  
Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.  
Elemente in der Auswahl:

- hl7:time[not(@nullFlavor)]
- hl7:time[@nullFlavor='UNK']

|            |          |         |  |  |             |
|------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:time | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (TGD...und) |
|------------|----------|---------|--|--|-------------|

wo [not(@nullFlavor)]

|  |  |  |
|--|--|--|
|  at-cda-bbr-dataelement-105 |  Zeitpunkt der Unterzeichnung |  Dataset A 2019 |
|--|--|--|

|            |          |         |  |  |             |
|------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:time | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (TGD...und) |
|------------|----------|---------|--|--|-------------|

wo [@nullFlavor='UNK']

└ @nullFlavor      cs      1 ... 1      F      UNK

|                     |    |         |   |  |             |
|---------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:signatureCode | CS | 1 ... 1 | M |  | (TGD...und) |
|---------------------|----|---------|---|--|-------------|

|  |  |  |
|--|--|--|
|  at-cda-bbr-dataelement-106 |  Signatur |  Dataset A 2019 |
|--|--|--|

└ @code      CONF      1 ... 1      F      S

|                      |  |         |   |   |             |
|----------------------|--|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:assignedEntity |  | 1 ... 1 | M | Personendaten des weiteren Unterzeichners.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „AssignedEntity-Element (Person + Organisation)“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|----------------------|--|---------|---|---|-------------|

Eingefügt

von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 Assigned Entity (DYNAMIC)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |            |   |   |   |             |
|------------------------|--|------------|---|---|---|-------------|
| └ @classCode           |  | cs         | 0 ... 1   | F | ASSIGNED  |             |
| Auswahl                |  |            | 1 ... *   |   | Mindestens eine ID der Person der Entität<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li><li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li></ul>             |             |
|                        |  | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"><li><b>NI</b> ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li><li><b>UNK</b> ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li></ul> |   |   |             |
| └ hl7:id               |  | II         | 0 ... *   |   |   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |            |   |   |   |             |
| └ hl7:id               |  | II         | 0 ... 1   |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |  |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs         | 1 ... 1   | F | NI  |             |
| └ hl7:id               |  | II         | 0 ... 1   |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs         | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
| Auswahl                |  |            | 0 ... 1   |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:addr[not(@nullFlavor)] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:addr[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |            |   |   |   |             |
|-------------------------------|------------|---|---|---|-------------|
| └ h17:addr                    |            | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]         |            |   |   |   |             |
| └ h17:addr                    |            | 0 ... 1   |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK']        |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor                 | cs         | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
| └ h17:telecom                 | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Beliebig viele Kontakt-Elemente der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]         |            |   |   |   |             |
| └ @value                      | url        | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.). Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                        | cs         | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP. Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                               | Constraint | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angegeben sein. |   |   |             |
| └ h17:assignedPerson          |            | 1 ... 1   | M | Personendaten der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Personen-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| └ h17:representedOrganization |            | 0 ... 1   | R | Organisationsdaten der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)                                       | (TGD...und) |

|   |                 |         |   |  |             |
|---|-----------------|---------|---|--|-------------|
| Eingefügt   |                 | 0 ... 1 |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.20 Participant Fachlicher Ansprechpartner (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:participant                                     |                 | 0 ... 1 |   | Fachlicher Ansprechpartner   | (TGD...und) |
| wo [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.20']] |                 |         |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs              | 1 ... 1 | F | CALLBACK   |             |
|   |                 |         |   | Callback contact   |             |
| └ @contextControlCode                                 | cs              | 0 ... 1 | F | OP   |             |
| └ hl7:templateId                                      | II              | 1 ... 1 | M | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten  | (TGD...und) |
| └ @root   | uid             | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.20  |             |
| └ hl7:functionCode                                    | CE (extensible) | 0 ... 1 |   | Optionale Angabe eines Funktionscodes des fachlichen Ansprechpartners, z.B.: „Diensthabender Oberarzt“, „Verantwortlicher Arzt für Dokumentation“, „Stationsschwester“.<br>Eigene Codes und Bezeichnungen können verwendet werden. | (TGD...und) |
| └ @code   | cs              | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @codeSystem   | oid             | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @displayName  | st              | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ hl7:associatedEntity                                |                 | 1 ... 1 | M |  | (TGD...und) |

|                       |        |         |   |  |             |
|-----------------------|--------|---------|---|--|-------------|
| └ @classCode          | cs     | 1 ... 1 | F | PROV   |             |
|                       |        |         |   | Healthcare provider - Gesundheitsdiensteanbieter   |             |
| └ h17:code            | CE     | 0 ... 1 |   | Optionale Angabe der Fachrichtung des fachlichen Ansprechpartners („Sonderfach“ gem. Ausbildungsordnung), z.B: „Facharzt/ Fachärztin für Gynäkologie“. Wenn ein fachlicher Ansprechpartner mehreren ärztlichen Sonderfächern zugeordnet ist, kann das anzugebende Sonderfach gewählt werden. Additivfächer werden nicht angegeben. | (TGD...und) |
| └ @codeSystem         | oid    | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @displayName        | st     | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | R |  |             |
|                       | CONF   |         |   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ h17:addr            | AD     | 0 ... 1 |   | Adresse des Beteiligten. Grundsätzlich sind die Vorgaben für "Adress-Elemente" zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |   |  |             |
| └ h17:telecom         | TEL.AT | 1 ... * | M | Beliebig viele Kontaktdaten des Beteiligten.   | (TGD...und) |
| └ @value              | st     | 1 ... 1 | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                           |  |            |   |   |  |             |
|---------------------------|--|------------|---|---|--|-------------|
| └ @use                    |  | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|                           |  | Constraint | Es MUSS mindestens eine Telefonnummer angegeben werden. Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| └ hl7:associatedPerson    |  |            | 0 ... 1   | R | Name der Person<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| └ hl7:scopingOrganization |  |            | 0 ... 1   | R | Organisation, der der Beteiligte angehört (mit Adresse und Kontaktdaten der Organisation).<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für "Organisations-Element" zu befolgen.   | (TGD...und) |
| Eingefügt                 |  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)<br>ORG  |             |
| └ @classCode              |  | cs         | 0 ... 1   | F | INSTANCE   |             |
| └ @determinerCode         |  | cs         | 0 ... 1   | F |  |             |
| └ hl7:id                  |  | II         | 0 ... *   |   | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]     |  |            |   |   |  |             |
| └ hl7:name                |  | ON         | 1 ... 1   | M | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden.<br>Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.   | (TGD...und) |
| └ hl7:telecom             |  | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Kontaktdaten der Organisation.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]     |  |            |   |   |  |             |
| └ @value                  |  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |  |   |   |             |
|---|------------|--|---|---|-------------|
| └ @use  | set_cs     | 0 ... 1  | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“ |   |             |
|   | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use an-<br>geführt sein. |   |   |             |
| └ hl7:addr  | AD         | 0 ... 1  |   | Adresse der Organisation.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNA-<br>MIC) | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |  |   |   |             |
| Eingefügt   |            | 0 ... 1  | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.21 <i>Participant Ein-, Ueber-, Zuweisender Arzt</i> (DYNA-<br>MIC)                                      |   |             |
| └ hl7:participant                                     |            | 0 ... 1  |   | Einweisender/Zuweisender/Überweisender Arzt   | (TGD...und) |
| wo [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.21']] |            |  |   |   |             |
| └ @typeCode   | cs         | 1 ... 1  | F   | REF   |             |
| └ @contextControlCode                                 | cs         | 0 ... 1  | F   | Referrer<br>OP  |             |
| └ hl7:templateId                                      | II         | 1 ... 1  | M   |   | (TGD...und) |
| └ @root   | uid        | 1 ... 1  | F   | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.21   |             |
| └ hl7:associatedEntity                                |            | 1 ... 1  | M   |   | (TGD...und) |
| └ @classCode  | cs         | 1 ... 1  | F   | PROV  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |  |            |   |   |
|------------------------|--|--|------------|---|---|
| Auswahl                |  |  | 1 ... *    | Healthcare provider - Gesundheitsdiensteanbieter<br>Identifikation des einweisenden/zuweisenden/überweisenden Arztes.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |   |
|                        |  |  | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NI</b> ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li><b>UNK</b> ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul>  |   |
| └─ hl7:id              |  |  | II         | 0 ... *   | (TGD...und)   |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |  |            |   |   |
| └─ hl7:id              |  |  | II         | 0 ... 1   | (TGD...und)   |
| wo [@nullFlavor='NI']  |  |  |            |   |   |
| └─ @nullFlavor         |  |  | CS         | 1 ... 1 F   | NI  |
| └─ hl7:id              |  |  | II         | 0 ... 1   | (TGD...und)   |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |  |            |   |   |
| └─ @nullFlavor         |  |  | CS         | 1 ... 1 F   | UNK   |
| └─ hl7:addr            |  |  | AD         | 0 ... 1   | Adresse des einweisenden/zuweisenden/überweisenden Arztes<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNA-MIC) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |  |            |   |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                    |  |            |   |   |   |             |
|------------------------------------|--|------------|---|---|---|-------------|
| └ h17:telecom                      |  | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Beliebig viele Kontaktdaten des einweisenden/zuweisenden/überweisenden Arztes   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]              |  |            |   |   |   |             |
| └ @value                           |  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“  |             |
| └ @use                             |  | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                                    |  | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |   |             |
| Auswahl                            |  |            | 1 ... 1   |   | Name des einweisenden/zuweisenden/überweisenden Arztes.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:associatedPerson[hl7:name[count(child::*)=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:associatedPerson[hl7:name[count(child::*)!=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ h17:associatedPerson             |  |            | ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| wo [hl7:name [count(child::*)=0]]  |  |            |   |   |   |             |
| └ h17:associatedPerson             |  |            | ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| wo [hl7:name [count(child::*)!=0]] |  |            |   |   |   |             |
| └ h17:scopingOrganization          |  |            | 0 ... 1   | R | Organisation, der der Einweiser/Zuweiser/Überweiser angehört (mit Adresse und Kontaktdaten der Organisation). Grundsätzlich sind die Vorgaben für "Organisations-Element" zu befolgen.  | (TGD...und) |
| Eingefügt                          |  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)  |             |

└ @classCode                      cs                      0 ... 1    F                      ORG

└ @determinerCode                  cs                      0 ... 1    F                      INSTANCE

└ hl7:id                              II                      0 ... \*                      Beliebige viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ hl7:name                              ON                      1 ... 1    M                      Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                      (TGD...und)

└ hl7:telecom                          TEL.AT                      0 ... \*                      Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ @value                              st                      1 ... 1    R                      Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <tel:+43.1.1234567>  
Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“  
Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA\_URLScheme“

└ @use                                  set\_cs                      0 ... 1                      Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

Constraint

Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.

└ hl7:addr                              AD                      0 ... 1                      Adresse der Organisation.  
Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (DYNAMIC)                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

Eingefügt                                      0 ... 1                      von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.23 *Participant Hausarzt* (DYNAMIC)

└ hl7:participant                                      0 ... 1                      Beteiligter (Hausarzt).                      (TGD...und)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

wo [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.23']]

└ @typeCode cs 1 ... 1 F IND

In indirektem Bezug.

└ @contextControlCode cs 0 ... 1 F OP

└ hl7:templateId II 1 ... 1 M Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten (TGD...und)

└ @root uid 1 ... 1 F 1.2.40.0.34.6.0.11.1.23

└ hl7:functionCode CE 1 ... \* M Funktionscode des Beteiligten (TGD...und)

└ @code cs 1 ... 1 F PCP

└ @codeSystem oid 1 ... 1 F 2.16.840.1.113883.5.88

└ @codeSystemName st 1 ... 1 F HL7:ParticipationFunction

└ hl7:associatedEntity 1 ... 1 M Beschreibung der Entität. (TGD...und)

└ @classCode cs 1 ... 1 F PROV

Healthcare provider - Gesundheitsdiensteanbieter.

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25

**0 ... \***

- ### Constraint

- NI ... Organisation hat keine ID
- UNK ... Organisation hat eine ID, diese ist jedoch unbekannt



(TGD...und)

```
└─ hl7:id
```

II

0 ... 1

(TGD...und)

```
└─ @nullFlavor
```

CS

1 ... 1

F

NI



0 ... 1

(TGD...und)

```
└─ @nullFlavor
```

CS

1 ... 1

F

UNK

AD

0 ... 1

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (DYNAMIC)

(TGD...und)

# h17:telecom

**TEL.AT**

0 ... \*

Beliebig viele Kontaktdaten des Hausarztes.

(TGD...und)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                    |            |   |   |  |
|------------------------------------|------------|---|---|--|
| wo [not(@nullFlavor)]              |            |   |   |  |
| └ @value                           | st         | 1 ... 1   | R |  |
| └ @use                             | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |
|                                    | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |
| Auswahl                            |            | 1 ... 1   |   | Name des Hausarztes.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:associatedPerson[hl7:name[count(child::*)=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:associatedPerson[hl7:name[count(child::*)!=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |
| └ hl7:associatedPerson             |            | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC) (TGD...und)   |
| wo [hl7:name [count(child::*)=0]]  |            |   |   |  |
| └ hl7:associatedPerson             |            | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC) (TGD...und)   |
| wo [hl7:name [count(child::*)!=0]] |            |   |   |  |
| └ hl7:scopingOrganization          |            | 0 ... 1   | R | Arztpraxis oder Ordination.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Organisations-Element“ zu befolgen. (TGD...und)  |
| Eingefügt                          |            |   |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)<br>ORG  |
| └ @classCode                       | cs         | 0 ... 1   | F |  |
| └ @determinerCode                  | cs         | 0 ... 1   | F | INSTANCE   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |   |   |  |             |
|---|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:id  | II         | 0 ... *   |   | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| └ h17:name  | ON         | 1 ... 1   | M | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                                | (TGD...und) |
| └ h17:telecom   | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| └ @value  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use  | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|   | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| └ h17:addr  | AD         | 0 ... 1   |   | Adresse der Organisation.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| Eingefügt   |            | 0 ... *   |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.27 <i>Participant Auskunftsberechtigte Person (Notfallkontakt)</i> (DYNAMIC)  |             |
| └ h17:participant                                     |            | 0 ... *   |   | Beteiligter (Notfallkontakt / Auskunftsberechtigte Person)   | (TGD...und) |
| wo [h17:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.27']] |            |   |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs         | 1 ... 1   | F | IND  |             |

|  |                        |        |         |                      |   |
|--|------------------------|--------|---------|----------------------|---|
|  |                        |        |         | In indirektem Bezug. |   |
|  |                        |        |         | OP                   |   |
|  | └ @contextControlCode  | cs     | 0 ... 1 | F                    |   |
|  | └ hl7:templateId       | II     | 1 ... 1 | M                    | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten (TGD...und)   |
|  | └ @root                | uid    | 1 ... 1 | F                    | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.27   |
|  | └ hl7:time             | IVL_TS | 0 ... 1 |                      | Zeitraum, in dem der angegebene Kontakt den Notfall-Kontakt darstellt.<br>Wird nur angegeben, wenn der Kontakt bereits absehbar nur in einem eingeschränkten Zeitraum zur Verfügung steht.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC) |
|  | └ hl7:associatedEntity |        | 1 ... 1 | M                    | Beschreibung der Entität. (TGD...und)   |
|  | └ @classCode           | cs     | 1 ... 1 | F                    | ECON  |
|  |                        |        |         |                      | Emergency contact - Notfall-Kontakt   |
|  | └ hl7:code             | CE     | 0 ... 1 |                      | Verwandtschaftsverhältnis des Beteiligten zum Patienten, z.B. DAU („daughter“), wenn die Beteiligte die Tochter des Patienten ist. (TGD...und)  |
|  | wo [not(@nullFlavor)]  |        |         |                      |   |
|  | └ @code                | cs     | 1 ... 1 | R                    | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_PersonalRelationship“   |
|  | └ @displayName         | st     | 0 ... 1 |                      |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |  |            |   |   |  |             |
|-----------------------|--|------------|---|---|--|-------------|
| └ @codeSystem         |  | oid        | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.5.111  |             |
| └ @codeSystemName     |  | st         | 1 ... 1   | F | HL7:RoleCode   |             |
|                       |  | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.17 <i>ELGA_PersonalRelationship</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ h17:addr            |  | AD         | 0 ... 1   |   | Adresse des Beteiligten<br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Adress-Elemente“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)] |  |            |   |   |  |             |
| Auswahl               |  |            | 0 ... *   |   | Beliebig viele Kontaktdaten des Beteiligten.<br>Elemente in der Auswahl:   |             |
|                       |  |            |   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:telecom[not(@nullFlavor)]</li> <li>h17:telecom[@nullFlavor='UNK']</li> </ul>  |             |
|                       |  | Constraint | Es SOLL mindestens eine Telefonnummer angegeben werden.   |   |  |             |
| └ h17:telecom         |  | TEL.AT     | 0 ... *   | R |  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)] |  |            |   |   |  |             |
| └ @value              |  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                |  | set_cs     | 0 ... 1   |   |  |             |
|                       |  | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.             |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |                                    |        |         |   |   |             |
|-----------|------------------------------------|--------|---------|---|---|-------------|
|           | └ h17:telecom                      | TEL.AT | 0 ... 1 |   | Die Kontaktadresse ist unbekannt. nullFlavor "UNK"  | (TGD...und) |
|           | wo [@nullFlavor="UNK"]             |        |         |   |   |             |
|           | └ @nullFlavor                      | cs     | 1 ... 1 | F | UNK   |             |
| Auswahl   |                                    |        | 1 ... 1 |   | Name des Beteiligten.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:associatedPerson[h17:name[count(child::*)=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:associatedPerson[h17:name[count(child::*)!=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
|           | └ h17:associatedPerson             |        | 0 ... 1 |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
|           | wo [h17:name [count(child::*)=0]]  |        |         |   |   |             |
|           | └ h17:associatedPerson             |        | 0 ... 1 |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
|           | wo [h17:name [count(child::*)!=0]] |        |         |   |   |             |
|           | └ h17:scopingOrganization          |        | 0 ... 1 | R | Organisation, der der Beteiligte angehört (mit Adresse und Kontaktdaten der Organisation). Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Organisations-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| Eingefügt |                                    |        |         |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)  |             |
|           | └ @classCode                       | cs     | 0 ... 1 | F | ORG   |             |
|           | └ @determinerCode                  | cs     | 0 ... 1 | F | INSTANCE  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |   |   |  |             |
|---|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:id  | II         | 0 ... *   |   | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| └ h17:name  | ON         | 1 ... 1   | M | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                                | (TGD...und) |
| └ h17:telecom   | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| └ @value  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use  | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|   | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| └ h17:addr  | AD         | 0 ... 1   |   | Adresse der Organisation.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |            |   |   |  |             |
| Eingefügt   |            | 0 ... *   |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.25 <i>Participant Angehoerige</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ h17:participant                                     |            | 0 ... *   |   | Beteiligter (Angehöriger)  | (TGD...und) |
| wo [h17:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.25']] |            |   |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs         | 1 ... 1   | F | IND<br><br>In indirektem Bezug.  |             |



|                        |      |         |   |   |             |
|------------------------|------|---------|---|---|-------------|
| └ @contextControlCode  | cs   | 0 ... 1 | F | OP  |             |
| └ hl7:templateId       | II   | 1 ... 1 | M | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten   | (TGD...und) |
| └ @root                | uid  | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.25   |             |
| └ hl7:associatedEntity |      | 1 ... 1 | M | Beschreibung der Entität.   | (TGD...und) |
| └ @classCode           | cs   | 1 ... 1 | F | PRS   |             |
|                        |      |         |   | Personal relationship - In persönlicher Beziehung   |             |
| └ hl7:code             | CE   | 1 ... 1 | M | Verwandtschaftsverhältnis des Beteiligten zum Patienten. Beispiel: DAU („daughter“), wenn die Beteiligte die Tochter des Patienten ist oder NBOR für Nachbar. | (TGD...und) |
| └ @code                | cs   | 1 ... 1 | R |   |             |
|                        | CONF |         |   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.17 <i>ELGA_PersonalRelationship</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ @displayName         | st   | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @codeSystem          | oid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111   |             |
| └ @codeSystemName      | st   | 1 ... 1 | F | HL7:RoleCode  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                   |  |            |   |   |             |
|-----------------------------------|--|------------|---|---|-------------|
|                                   |  | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.17 <i>ELGA_PersonalRelationship</i> (DYNAMIC) |   |             |
| └ h17:addr                        |  | AD         | 0 ... 1   | Adresse des Beteiligten<br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Adress-Elemente“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]             |  |            |   |   |             |
| └ h17:telecom                     |  | TEL.AT     | 0 ... *   | Beliebig viele Kontaktdaten des Beteiligten.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]             |  |            |   |   |             |
| └ @value                          |  | st         | 1 ... 1   | R   |             |
| └ @use                            |  | set_cs     | 0 ... 1   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                                   |  | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.             |   |             |
| Auswahl                           |  |            | 1 ... 1   | Name des Beteiligten.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:associatedPerson[h17:name[count(child::*)=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:associatedPerson[h17:name[count(child::*)!=0]] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ h17:associatedPerson            |  |            | 0 ... 1   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| wo [h17:name [count(child::*)=0]] |  |            |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |        |         |   |  |             |
|---|--------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:associatedPerson                                |        | 0 ... 1 |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [h17:name [count(child::*)!=0]]                    |        |         |   |  |             |
| └ h17:scopingOrganization                             |        | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
| Eingefügt   |        | 0 ... * |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.26 <i>Participant Versicherung</i> (DYNAMIC)  |             |
| └ h17:participant                                     |        | 0 ... * |   | Beteiligter (Versicherter/Versicherung).   | (TGD...und) |
| wo [h17:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.26']] |        |         |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs     | 1 ... 1 | F | HLD  |             |
| └ @contextControlCode                                 | cs     | 0 ... 1 | F | OP   |             |
| └ h17:templateId                                      | II     | 1 ... 1 | M | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten  | (TGD...und) |
| └ @root   | uid    | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.26  |             |
| └ h17:time  | IVL_TS | 0 ... 1 |   | Gültigkeitszeitraum der Versicherungspolizze.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
| └ h17:associatedEntity                                |        | 1 ... 1 | M |  | (TGD...und) |
| └ @classCode  | cs     | 1 ... 1 | F | POLHOLD  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |    |            |   |   |   |
|------------------------|----|------------|---|---|---|
| Auswahl                |    |            | 1 ... 1   |   | Policy holder - Halter einer Versicherungspolizze<br>Sozialversicherungsnummer des Patienten (SELF) oder der Person, bei der der Patient mitversichert ist (FAMDEP)<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li><li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |
|                        |    | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"><li><b>NI</b> ... Patient hat keine Sozialversicherungsnummer (z.B. Ausländer, ...)</li><li><b>UNK</b> ... Patient hat eine Sozialversicherungsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li></ul> |   |   |
| └ hl7:id               | II |            | 0 ... 1   |   | (TGD...und)   |
| wo [not(@nullFlavor)]  |    |            |   |   |   |
| └ hl7:id               | II |            | 0 ... 1   |   | (TGD...und)   |
| wo [@nullFlavor='NI']  |    |            |   |   |   |
| └ @nullFlavor          | CS |            | 1 ... 1   | F | NI  |
| └ hl7:id               | II |            | 0 ... 1   |   | (TGD...und)   |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |    |            |   |   |   |
| └ @nullFlavor          | CS |            | 1 ... 1   | F | UNK   |
| └ hl7:code             | CE |            | 1 ... 1   | M | Versicherungsverhältnis codiert<br>Beispiele: <ul style="list-style-type: none"><li>SELF, wenn der Patient selbst der Versicherte ist.</li><li>FAMDEP, wenn der Patient bei einem Familienmitglied mit-versichert ist.</li></ul> (TGD...und)  |

|                   |     |         |   |                         |
|-------------------|-----|---------|---|-------------------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |                         |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.5.111 |
| └ @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | HL7:RoleCode            |

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.9 *ELGA\_Insu-redAssocEntity* (DYNAMIC)

└ h17:addr

AD

0 ... 1

Adresse des Beteiligten.

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (DYNAMIC)

(TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ h17:telecom

TEL.AT

0 ... \*

Beliebig viele Kontaktdaten des Beteiligten.

(TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ @value

st

1 ... 1

R Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <tel:+43.1.1234567>  
Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“  
Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA\_URLScheme“

└ @use

set\_cs

0 ... 1

Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

Constraint

Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.

└ h17:associatedPerson

0 ... 1

Name des Beteiligten.

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 *Person Name Compilation G2 M* (DYNAMIC)

(TGD...und)

Constraint

Wenn das Versicherungsverhältnis "familienversichert" ("FAMDEP") ist, MUSS eine associated-Person angegeben sein, M [1..1], sonst kann sie komplett entfallen, O [0..1]

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                           |            |   |   |  |             |
|---------------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:scopingOrganization |            | 1 ... 1   | M | Versicherungsgesellschaft.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Organisations-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| Eingefügt                 |            |   |   |  |             |
| └ @classCode              | CS         | 0 ... 1   | F | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 Organization Compilation with name (DYNAMIC)<br>ORG   |             |
| └ @determinerCode         | CS         | 0 ... 1   | F | INSTANCE   |             |
| └ h17:id                  | II         | 0 ... *   |   | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]     |            |   |   |  |             |
| └ h17:name                | ON         | 1 ... 1   | M | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.  | (TGD...und) |
| └ h17:telecom             | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Kontaktdaten der Organisation.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.  | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]     |            |   |   |  |             |
| └ @value                  | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                    | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|                           | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| └ h17:addr                | AD         | 0 ... 1   |   | Adresse der Organisation.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 Address Compilation (DYNAMIC)  | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |         |  |   |  |             |
|---|---------|--|---|--|-------------|
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |         |  |   |  |             |
| Schematron assert                                     | role    | error  |   |  |             |
|   | test    | not(hl7:code[@code='FAMDEP']) or hl7:associatedPerson  |   |  |             |
|   | Meldung | Wenn das Versicherungsverhältnis "familienversichert" ist, dann muss eine associatedPerson angegeben sein. |   |  |             |
| Eingefügt   |         | 0 ... 1  |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.29 Participant Betreuungsorganisation (DYNAMIC) |             |
| └ hl7:participant                                     |         | 0 ... 1  |   | Beteiligter (Betreuende Organisation)                                    | (TGD...und) |
| wo [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.29']] |         |  |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs      | 1 ... 1  | F | IND  |             |
| └ @contextControlCode                                 | cs      | 0 ... 1  | F | OP   |             |
| └ hl7:templateId                                      | II      | 1 ... 1  | M | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten                | (TGD...und) |
| └ @root   | uid     | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.29  |             |
| └ hl7:associatedEntity                                |         | 1 ... 1  | M | Beschreibung der Entität.  | (TGD...und) |
| └ @classCode  | cs      | 1 ... 1  | F | CAREGIVER  |             |
|   |         |  |   | Betreuer   |             |
| └ hl7:scopingOrganization                             |         | 1 ... 1  | M | Betreuende Organisation  | (TGD...und) |
| Eingefügt   |         |  |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 Organization Compilation with name (DYNAMIC)  |             |

└ @classCode                      cs                      0 ... 1    F                      ORG

└ @determinerCode                  cs                      0 ... 1    F                      INSTANCE

└ hl7:id                              II                      0 ... \*                      Beliebige viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ hl7:name                            ON                      1 ... 1    M                      Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                      (TGD...und)

└ hl7:telecom                        TEL.AT                      0 ... \*                      Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ @value                              st                      1 ... 1    R                      Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <tel:+43.1.1234567>  
Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“  
Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA\_URLScheme“

└ @use                                set\_cs                      0 ... 1                      Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

Constraint                      Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.

└ hl7:addr                            AD                      0 ... 1                      Adresse der Organisation.  
Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (DYNAMIC)                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

Eingefügt                              0 ... \*                      von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.28 *Participant Weitere Behandler* (DYNAMIC)

└ hl7:participant                      0 ... \*                      Beteiligter (Weitere Behandler)                      (TGD...und)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |                 |  |   |  |             |
|---|-----------------|--|---|--|-------------|
| wo [hl7:templateId [@root='1.2.40.0.34.6.0.11.1.28']] |                 |  |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs              | 1 ... 1  | F | CON  |             |
| └ @contextControlCode                                 | cs              | 0 ... 1  | F | OP   |             |
| └ hl7:templateId                                      | II              | 1 ... 1  | M | Template ID zur Identifikation dieser Art von Beteiligten  | (TGD...und) |
| └ @root   | uid             | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.6.0.11.1.28  |             |
| └ hl7:functionCode                                    | CE (extensible) | 0 ... 1  |   | Funktionscode des Behandlers z.B: „Facharzt für Neurologie“<br>Eigene Codes und Bezeichnungen dürfen verwendet werden. | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]                                 |                 |  |   |  |             |
| └ @code   | cs              | 1 ... 1  | R |  |             |
| └ @codeSystem   | oid             | 1 ... 1  | R |  |             |
| └ @displayName  | st              | 1 ... 1  | R |  |             |
|   | CONF            | Der Wert von @code sollte gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ hl7:associatedEntity                                |                 | 1 ... 1  | M | Beschreibung der Entität.  | (TGD...und) |
| └ @classCode  | cs              | 1 ... 1  | F | PROV   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |        |         |   |  |             |
|---|--------|---------|---|--|-------------|
|   |        |         |   | Gesundheitsdiensteanbieter.  |             |
| └ h17:addr  | AD     | 0 ... 1 |   | Adresse des Beteiligten.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Adress-Elemente“ zu befolgen<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]   |        |         |   |  |             |
| └ h17:telecom   | TEL.AT | 0 ... * |   | Beliebig viele Kontaktdaten des Beteiligten.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]   |        |         |   |  |             |
| └ @value  | st     | 1 ... 1 | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.)<br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Bsp: <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use  | set_cs | 0 ... 1 |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...)<br>Bsp: WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
| Bei Angabe mehrerer Telefonnummern ist jeweils das Attribut @use anzugeben. |        |         |   |  |             |
| └ h17:associatedPerson  |        | 1 ... 1 | M | Beteiligte Person<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| └ h17:scopingOrganization   |        | 0 ... 1 | R | Organisation, der der Beteiligte angehört (mit Adresse und Kontaktdaten der Organisation).<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Organisations-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| Eingefügt   |        |         |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)   |             |

└ @classCode                      cs                      0 ... 1    F                      ORG

└ @determinerCode                  cs                      0 ... 1    F                      INSTANCE

└ h17:id                              II                      0 ... \*                      Beliebige viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ h17:name                           ON                      1 ... 1    M                      Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden. Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                      (TGD...und)

└ h17:telecom                        TEL.AT                      0 ... \*                      Kontaktdaten der Organisation. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

└ @value                              st                      1 ... 1    R                      Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <tel:+43.1.1234567>  
Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“  
Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA\_URLScheme“

└ @use                                  set\_cs                      0 ... 1                      Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

Constraint

Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angegeben sein.







└ h17:addr                              AD                      0 ... 1                      Adresse der Organisation.  
Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (DYNAMIC)                      (TGD...und)

wo [not(@nullFlavor)]

Eingefügt                                      0 ... \*                      von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.9 *In Fulfillment Of* (DYNAMIC)

└ h17:inFulfillmentOf                      0 ... \*                      Komponente zur Dokumentation des Auftrags.                      (TGD...und)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |    |         |   |  |             |
|--|----|---------|---|--|-------------|
|  at-cda-bbr-dataelement-42  Auftrag  Dataset A 2019 |    |         |   |  |             |
| └ @typeCode  | cs | 1 ... 1 | F | FLFS   |             |
| └ hl7:order  |    | 1 ... 1 | M | Auftrag.   | (TGD...und) |
| └ @classCode   | cs | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
| └ @moodCode  | cs | 1 ... 1 | F | RQO  |             |
| └ hl7:id   | II | 1 ... 1 | M | Auftragsnummer, Anforderungsnummer.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-<br>Elemente“ zu befolgen. | (TGD...und) |
|  at-cda-bbr-dataelement-43  ID  Dataset A 2019      |    |         |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |                     |    |         |   |  |             |
|---|---------------------|----|---------|---|--|-------------|
| L | hl7:documentationOf |    | 1 ... * | R | <p>Komponente für die Gesundheitsdienstleistung.</p> <p>Mit der Assoziation documentationOf/serviceEvent wird die eigentliche Gesundheitsdienstleistung repräsentiert, die in dem Dokument dokumentiert wird (z.B. "Telehealth monitoring", "Telehealth chronic obstructive pulmonary disease monitoring", etc.). Dies ist in engem Zusammenhang mit dem Dokumententyp zu sehen, der in ClinicalDocument/code wiedergegeben ist. Mit der documentationOf Beziehung kann die dokumentierte Gesundheitsdienstleistung näher spezifiziert werden. Dies darf natürlich nicht im Widerspruch zum Dokumententyp stehen.</p> <p>↔ Hinweis zum XDS-Mapping: Da diese Informationen in die XDS-Metadaten übernommen werden, ergeben sich folgende Implikationen: Es SOLL mindestens eine Gesundheitsdienstleistung als documentationOf/serviceEvent-Element angegeben werden Es können beliebig viele weitere Gesundheitsdienstleistungen als weitere documentationOf/serviceEvent-Elemente angegeben werden Die serviceEvents sind die einzigen medizinischen Informationen zum Dokument im XDS-Dokumentenregister Können daher als Such-/Filterkriterium verwendet werden und scheinen ggf. in den Ergebnissen der Suchabfragen auf Die Zeitangaben des ersten documentationOf/serviceEvent-Elements werden in die Dokument-Metadaten übernommen Die ServiceEvents stellen eine wertvolle Information zum Suchen und Filtern in den Dokument-Metadaten dar!</p> | (TGD...und) |
|   |                     |    |         |   | DOC  |             |
|   |                     |    |         |   | @typeCode  |             |
|   |                     | cs | 0 ... 1 | F |  |             |
| L | hl7:serviceEvent    |    | 1 ... 1 | M | <p>Gesundheitsdienstleistung.</p>  | (TGD...und) |
|   |                     |    |         |   | ACT  |             |
|   |                     |    |         |   | @classCode   |             |
|   |                     | cs | 0 ... 1 | F |  |             |
| L | @moodCode           | cs | 0 ... 1 | F | EVN  |             |
|   |                     |    |         |   |  |             |
|   |                     |    |         |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |      |   |   |   |             |
|------------------------|------|---|---|---|-------------|
| Auswahl                |      | 1 ... 1   |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:code[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:code[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| └ hl7:code             | CE   | 0 ... 1   |   | Code der Gesundheitsdienstleistung.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |      |   |   |   |             |
| └ @code                | cs   | 1 ... 1   | R |   |             |
| └ @codeSystem          | oid  | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.6.96  |             |
| └ @displayName         | st   | 1 ... 1   | R |   |             |
|                        | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.26 <i>EL-GA_ServiceEventsTelemonEpi</i> (DYNAMIC) |   |   |             |
| └ hl7:code             | CE   | 0 ... 1   |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |      |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs   | 1 ... 1   | F | UNK   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |          |         |   |   |             |
|------------------------|--|----------|---------|---|---|-------------|
| L h17:effectiveTime    |  | IVL_TS   | 1 ... 1 | M | <p>Zeitraum der Gesundheitsdienstleistung.<br/>Hier soll der Start und das Ende des Telemonitoring-Programms dokumentiert werden. Falls es im Telemonitoring-Programm zu Unterbrechungen gekommen ist, muss das erste documentationOf-Element (documentationOf[1]) die vollständige Behandlung inklusive Unterbrechungen dokumentieren. In den weiteren documentationOf-Elementen (documentationOf[2] bis [n]) Elementen können dann die einzelnen, durchgehenden Zeitintervalle dokumentiert werden.</p> <p>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b><br/>Dieses Element wird in die XDS-Attribute <i>serviceStartTime</i> und <i>serviceStopTime</i> gemappt.<br/>Für die automatisierte Datenübernahme aus dem CDA-Dokument in die XDS-Dokumentmetadaten ist stets ein Zeitintervall anzugeben.<br/>ACHTUNG: Die <b>Zeitangaben</b> der jeweils ersten Gesundheitsdienstleistung (erstes documentationOf/serviceEvent-Element) werden in die Dokument-Metadaten übernommen!<br/>Die Bedeutung der Dokument-Metadaten-Elemente lautet daher wie folgt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ serviceStartTime: Beginn des ersten documentationOf/serviceEvent-Elements</li><li>▪ serviceStopTime: Ende des ersten documentationOf/serviceEvent-Elements</li></ul> | (TGD...und) |
| Eingefügt              |  |          |         |   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC)  |             |
| Auswahl                |  |          | 1 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl:  |             |
|                        |  |          |         |   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ hl7:low[@value]</li><li>▪ hl7:low[@nullFlavor='UNK']</li></ul>  |             |
| L hl7:low              |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |   | (TGD...und) |
| wo [@value]            |  |          |         |   |   |             |
| L hl7:low              |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |          |         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |          |  |   |   |             |
|------------------------|--|----------|--|---|---|-------------|
| └ @nullFlavor          |  | cs       | 1 ... 1  | F | UNK   |             |
| Auswahl                |  |          | 1 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:high[@value]</li><li>hl7:high[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| └ hl7:high             |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1  |   |   | (TGD...und) |
| wo [@value]            |  |          |  |   |   |             |
| └ hl7:high             |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1  |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |          |  |   |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs       | 1 ... 1  | F | UNK   |             |
| └ hl7:performer        |  |          | 0 ... *  | R | Person oder Organisation, die die Gesundheitsdienstleistung durchführt.   | (TGD...und) |
| └ @typeCode            |  | cs       | 1 ... 1  | R | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_ServiceEventPerformer“  |             |
|                        |  | CONF     | Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.43 <i>ELGA_ServiceEventPerformer</i> (DYNAMIC) |   |   |             |
| └ hl7:functionCode     |  | CE       | 0 ... 1  | R | Funktionscode   | (TGD...und) |
|                        |  | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC)           |   |   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |          |         |  |   |             |
|------------------------|--|----------|---------|--|---|-------------|
| └ h17:time             |  | IVL_TS   | 0 ... 1 |  | Zeit, in der der Performer mit der Gesundheitsdienstleistung beschäftigt war (wenn abweichend von EffectiveTime im Act). Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Zeit-Elemente“ zu befolgen.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b> | (TGD...und) |
| Eingefügt              |  |          |         | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC) |   |             |
| Auswahl                |  |          | 1 ... 1 |  | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>h17:low[@value]</li><li>h17:low[@nullFlavor='UNK']</li></ul>   |             |
| └ h17:low              |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |   | (TGD...und) |
| wo [@value]            |  |          |         |  |   |             |
| └ h17:low              |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |          |         |  |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs       | 1 ... 1 | F  | UNK   |             |
| Auswahl                |  |          | 1 ... 1 |  | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>h17:high[@value]</li><li>h17:high[@nullFlavor='UNK']</li></ul>   |             |
| └ h17:high             |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |   | (TGD...und) |
| wo [@value]            |  |          |         |  |   |             |
| └ h17:high             |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |          |         |  |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs       | 1 ... 1 | F  | UNK   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |                        |            |  |   |   |             |
|-----------|------------------------|------------|--|---|---|-------------|
|           | └ h17:assignedEntity   |            | 1 ... 1  | M |   | (TGD...und) |
| Eingefügt |                        |            | 1 ... 1  | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 Assigned Entity (DYNAMIC)   |             |
|           | └ @classCode           | cs         | 0 ... 1  | F | ASSIGNED  |             |
| Auswahl   |                        |            | 1 ... 1  |   | Mindestens eine ID der Person der Entität<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>h17:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>h17:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |             |
|           |                        | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NI</b> ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li><b>UNK</b> ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> |   |   |             |
|           | └ h17:id               | II         | 0 ... *  |   |   | (TGD...und) |
|           | wo [not(@nullFlavor)]  |            |  |   |   |             |
|           | └ h17:id               | II         | 0 ... 1  |   |   | (TGD...und) |
|           | wo [@nullFlavor='NI']  |            |  |   |   |             |
|           | └ @nullFlavor          | cs         | 1 ... 1  | F | NI  |             |
|           | └ h17:id               | II         | 0 ... 1  |   |   | (TGD...und) |
|           | wo [@nullFlavor='UNK'] |            |  |   |   |             |
|           | └ @nullFlavor          | cs         | 1 ... 1  | F | UNK   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |            |   |   |   |             |
|------------------------|--|------------|---|---|---|-------------|
| Auswahl                |  | 1 ... 1    |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:addr[not(@nullFlavor)] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:addr[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |   |             |
| └ hl7:addr             |  |            | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |            |   |   |   |             |
| └ hl7:addr             |  |            | 0 ... 1   |   |   | (TGD...und) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs         | 1 ... 1   | F   | UNK   |             |
| └ hl7:telecom          |  | TEL.AT     | 1 ... 1   | M   | Beliebig viele Kontakt-Elemente der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |  |            |   |   |   |             |
| └ @value               |  | url        | 1 ... 1   | R   | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.). Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                 |  | cs         | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP. Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                        |  | Constraint | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |   |             |
| └ hl7:assignedPerson   |  |            | 1 ... 1   | M   | Personendaten der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Personen-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |   |   |  |             |
|---|------------|---|---|--|-------------|
| <div><div></div><div>h17:representedOrganization</div></div>  |            | 1 ... 1   | M | Organisationsdaten der Entität.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
| Eingefügt   |            | 0 ... 1   | R | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.14 <i>Document Replacement - Related Document</i> (DYNAMIC)   |             |
| <div><div></div><div>h17:relatedDocument</div></div>  |            | 0 ... 1   | R |  | (TGD...und) |
| <div><div></div> at-cda-bbr-dataelement-15 <div></div> Bezug zu vorgehenden Dokumenten <div></div> Dataset A 2019</div> |            |   |   |  |             |
| <div><div></div><div>@typeCode</div></div>  | cs         | 1 ... 1   | R | Art des Bezugs zum Vordokument.  |             |
|   | Constraint | <div>Erlaubte @typeCodes:<br/><br/>RPLC - replaces: Das Dokument ersetzt ein existierendes Dokument. Der Status des zu ersetzenden Dokumentes wird auf "deprecated" gesetzt, das ursprüngliche Dokument bleibt aber noch im System als historische Referenz verfügbar.<br/><br/>APND - append: Zusammenhängen von Dokumenten. Dies ist in ELGA bereits über das Einbetten von Dokumenten realisiert.<br/><br/>XFRM - transformed: Das Dokument ist Ergebnis eines Transformationsprozesses, d.h. ist aus einem anderen Originaldokument hervorgegangen.<br/><br/>Hinweis: Die parallele Ablage von CDA-Dokumenten, welche vom Dokumentersteller bereits mit einem Stylesheet zu einem PDF Dokument gerendert wurden, kann mit der XFRM – Transaktion vorgenommen werden. Es ist nicht auszuschließen, dass die Transformation in lokalen Affinity Domains Anwendung findet. Für ELGA ist die Transformation jedoch kein Anwendungsfall.</div> |   |  |             |
| <div><div></div><div>h17:parentDocument</div></div>   |            | 1 ... 1   | M | Vorhergehendes Dokument.   | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |                     |    |         |    |   |             |
|-----------|---------------------|----|---------|----|---|-------------|
|           | └ @classCode        | CS | 0 ... 1 | F  | DOCCLIN   |             |
|           | └ @moodCode         | CS | 0 ... 1 | F  | EVN   |             |
|           | └ hl7:id            | II | 1 ... 1 | M  | Dokumenten-Id des vorgehenden Dokuments.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. | (TGD...und) |
| Eingefügt |                     |    |         | NP | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.18 Authorization (DYNAMIC)   |             |
|           | └ hl7:authorization |    |         | NP |   | (TGD...und) |
|           | └ @typeCode         | CS | 0 ... 1 | F  | AUTH  |             |
|           | └ hl7:consent       |    | 1 ... 1 | M  |   | (TGD...und) |
|           | └ @classCode        | CS | 0 ... 1 | F  | CONS  |             |
|           | └ @moodCode         | CS | 0 ... 1 | F  | EVN   |             |
|           | └ hl7:id            | II | 0 ... * |    |   | (TGD...und) |
|           | └ hl7:code          | CE | 0 ... 1 |    |   | (TGD...und) |
|           | └ @code             | CS | 1 ... 1 | R  |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                           |      |   |   |  |             |
|--|---------------------------|------|---|---|--|-------------|
|  |                           | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.27 atcdabbr_hl7at_ActConsentType_VS (DYNAMIC) |   |  |             |
| L  | hl7:statusCode            | CS   | 1 ... 1   | M |  | (TGD...und) |
|  | L @code                   | CONF | 1 ... 1   | F | completed  |             |
| Eingefügt  |                           |      | 0 ... 1   | R | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.7 Component Of - Encompassing Encounter (DYNAMIC) |             |
| L  | hl7:componentOf           |      | 0 ... 1   | R | Komponente für den Patientenkontakt.                                       | (TGD...und) |
| <div> at-cda-bbr-dataelement-33  Patientenkontakt  Dataset A 2019</div> |                           |      |   |   |  |             |
| L  | @typeCode                 | cs   | 0 ... 1   | F | COMP   |             |
| L  | hl7:encompassingEncounter |      | 1 ... 1   | M | Patientenkontakt.  | (TGD...und) |
| L  | @classCode                | cs   | 0 ... 1   | F | ENC  |             |
| L  | @moodCode                 | cs   | 0 ... 1   | F | EVN  |             |
| L  | hl7:id                    | II   | 0 ... 1   |   | Identifikationselement zur Aufnahme der Aufenthaltszahl                    | (TGD...und) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |                           |      |   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |     |   |   |   |
|--|-----|---|---|---|
| at-cda-bbr-dataelement-34 ID Dataset A 2019                  |     |   |   |   |
| @extension   | st  | 1 ... 1   | R | Aufenthaltszahl, z.B.: Az123456                         |
| @root  | uid | 1 ... 1   | R | OID der Liste der Aufenthaltszahlen der Organisation    |
| Constraint   |     | ▪ @assigningAuthorityName [0..1]: Name der Stelle, welche die ID zugewiesen hat, z.B.: „Amadeus Spital“.  |   |   |
| hl7:code   | CE  | 1 ... 1   | M | Codierung des Patientenkontakts. (TGD...und)            |
| at-cda-bbr-dataelement-39 Art des Aufenthalts Dataset A 2019 |     |   |   |   |
| @code  | cs  | 1 ... 1   | R | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_ActEncounterCode“ |
| @displayName   | st  | 0 ... 1   |   |   |
| @codeSystem  | oid | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.5.4                                   |
| @codeSystemName  | st  | 1 ... 1   | F | HL7:ActCode   |
| CONF   |     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.5 ELGA_ActEncounterCode (DYNAMIC) |   |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |   |   |   |  |             |
|---|---|---|---|--|-------------|
| <div> <div> <div></div> <div>hl7:effectiveTime</div> </div> </div>    | IVL_TS  | 1 ... 1   | M | <div> <div>Zeitraum des Patientenkontakts.<br/>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.</div> <div>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC)</div> </div>                  | (TGD...und) |
|   | <div> <div> <div></div> <div>at-cda-bbr-dataelement-37</div> </div> <div> <div></div> <div>Beginn des Patientenkontaktes</div> </div> <div> <div></div> <div>Dataset A 2019</div> </div> </div> |   |   |  |             |
|   | Constraint  | <div> Der Zeitraum des Patientenkontaktes muss die Vorgaben der speziellen Implementierungsleitfäden einhalten. Dabei gilt allgemein: <ul style="list-style-type: none"> <li>Der Zeitraum besteht aus dem Zeitpunkt der administrativen Aufnahme in die Behandlung und dem Zeitpunkt der administrativen Entlassung aus der Behandlung.</li> <li>Der Entlassungszeitpunkt kann „unbekannt“ sein, wenn die administrative Entlassung noch nicht erfolgt ist. (nullFlavor UNK beim effectiveTime.high)</li> <li>Hinweis: Als Zeitpunkt der Aufnahme/Entlassung SOLL der Zeitpunkt der administrativen Aufnahme/Entlassung angegeben werden. Wenn der Zeitpunkt der administrativen Aufnahme/Entlassung nicht vorhanden ist, darf auch der Zeitpunkt der medizinischen Aufnahme/Entlassung angegeben werden.</li> </ul> </div> |   |  |             |
| <div> <div> <div></div> <div>hl7:responsibleParty</div> </div> </div> |   | 0 ... 1   | R | <div> <div>Komponente für die verantwortliche Person.</div> </div>   | (TGD...und) |
|   | <div> <div> <div></div> <div>at-cda-bbr-dataelement-40</div> </div> <div> <div></div> <div>Verantwortliche Person</div> </div> <div> <div></div> <div>Dataset A 2019</div> </div> </div>        |   |   |  |             |
| <div> <div> <div></div> <div>hl7:assignedEntity</div> </div> </div>   |   | 1 ... 1   | M | <div> <div>Entität der verantwortlichen Person.<br/>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „AssignedEntity-Element (Person + Organisation)“ zu befolgen.</div> </div>   | (TGD...und) |
| Eingefügt   |   |   |   | <div> <div>von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 <i>Assigned Entity</i> (DYNAMIC)</div> </div>   |             |
| <div> <div> <div></div> <div>@classCode</div> </div> </div>           | cs  | 0 ... 1   | F | <div> <div>ASSIGNED</div> </div>   |             |
| Auswahl   |   | 1 ... *   |   | <div> <div>Mindestens eine ID der Person der Entität<br/>Elemente in der Auswahl:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> </div> |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                        |            |  |   |  |             |
|--|------------------------|------------|--|---|--|-------------|
|  |                        | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <b>NI</b> ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li>▪ <b>UNK</b> ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> |   |  |             |
|  | └ h17:id               | II         | 0 ... *  |   |  | (TGD...und) |
|  | wo [not(@nullFlavor)]  |            |  |   |  |             |
|  | └ h17:id               | II         | 0 ... 1  |   |  | (TGD...und) |
|  | wo [@nullFlavor='NI']  |            |  |   |  |             |
|  | └ @nullFlavor          | CS         | 1 ... 1  | F | NI   |             |
|  | └ h17:id               | II         | 0 ... 1  |   |  | (TGD...und) |
|  | wo [@nullFlavor='UNK'] |            |  |   |  |             |
|  | └ @nullFlavor          | CS         | 1 ... 1  | F | UNK  |             |
|  | Auswahl                |            | 0 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ h17:addr[not(@nullFlavor)] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)</li> <li>▪ h17:addr[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |             |
|  | └ h17:addr             |            | 0 ... 1  |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
|  | wo [not(@nullFlavor)]  |            |  |   |  |             |
|  | └ h17:addr             |            | 0 ... 1  |   |  | (TGD...und) |
|  | wo [@nullFlavor='UNK'] |            |  |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                               |            |   |   |  |             |
|--|-------------------------------|------------|---|---|--|-------------|
|  | └ @nullFlavor                 | cs         | 1 ... 1   | F | UNK  |             |
|  | └ hl7:telecom                 | TEL.AT     | 0 ... *   |   | Beliebig viele Kontakt-Elemente der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.  | (TGD...und) |
|  | wo [not(@nullFlavor)]         |            |   |   |  |             |
|  | └ @value                      | url        | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.). Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“                |             |
|  | └ @use                        | cs         | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP. Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|  |                               | Constraint | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
|  | └ hl7:assignedPerson          |            | 1 ... 1   | M | Personendaten der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Personen-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)  | (TGD...und) |
|  | └ hl7:representedOrganization |            | 0 ... 1   | R | Organisationsdaten der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)                                      | (TGD...und) |
|  | Eingefügt                     |            | 1 ... 1   | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.1.8 <i>Encounter Location</i> (DYNAMIC)<br>Die Organisation, in deren Verantwortungsbereich der Patientenkontakt stattfand, MUSS verpflichtend angegeben werden (z.B.: die entlassende Krankenanstalt mit Abteilung). |             |
|  | └ hl7:location                |            | 1 ... 1   | M |  | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                   |  |    |         |   |  |             |
|-----------------------------------|--|----|---------|---|--|-------------|
| └ @typeCode                       |  | cs | 0 ... 1 | F | LOC  |             |
| └ h17:healthCareFacility          |  |    | 1 ... 1 | M |  | (TGD...und) |
| └ @classCode                      |  | cs | 0 ... 1 | F | SDLOC  |             |
| └ h17:code                        |  | CE | 1 ... 1 | M | <p>Der Code zur Klassifizierung des GDA repräsentiert die Art der Einrichtung, in der die Tätigkeit stattfand, die zur Erzeugung des Dokuments führte. Zum Beispiel sollten Dokumente, die während eines ambulanten Falls in einem Krankenhaus entstehen, mit dem healthcareFacilityTypeCode für „Krankenhaus“ gekennzeichnet werden.</p> <p>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_HealthcareFacilityType-Code“</p> <p>Für ELGA SOLL der Code dem Eintrag "GDA Rollenname" oder, wenn der GDA Rollenname nicht verfügbar ist, der "Aggregierten Rolle" im GDA-I entsprechen.</p> <p>↔ <b>Hinweis zum XDS-Mapping:</b> Dieses Element wird ins XDS-Attribut XDSDocumentEntry.healthcareFacilityTypeCode gemappt. Zu berücksichtigen sind jeweils die Attribute @code, @codeSystem und @displayName.</p> | (TGD...und) |
| └ @displayName                    |  | st | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:serviceProviderOrganization |  |    | 1 ... 1 | M | <p>Organisation, in deren Verantwortungsbereich der Patientenkontakt stattfand.</p> <p>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)</p>   | (TGD...und) |
| └ h17:component                   |  |    | 1 ... 1 | R |  | (TGD...und) |

|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:structuredBody    |    | 1 ... 1 | R |  | (TGD...und) |
| └ @classCode            | cs | 0 ... 1 | F | DOCBODY  |             |
| └ @moodCode             | cs | 0 ... 1 | F | EVN  |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... 1 |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 <i>Brieftext</i> (DYNAMIC)                    | (TGD...und) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 1 ... 1 | M | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79 <i>Behandlungsgrund - unkodiert</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 <i>Diagnose - kodiert</i> (DYNAMIC)           | (TGD...und) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |    |         |   |   |             |
|-------------------------|--|----|---------|---|---|-------------|
| └ @typeCode             |  | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ hl7:component         |  |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80 Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert (DYNAMIC) | (TGD...und) |
| └ @typeCode             |  | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ hl7:component         |  |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91 Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert (DYNAMIC)     | (TGD...und) |
| └ @typeCode             |  | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ hl7:component         |  |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81 Erhobene Daten - kodiert (DYNAMIC)                   | (TGD...und) |
| └ @typeCode             |  | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ hl7:component         |  |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 Verwendete Geräte - kodiert (DYNAMIC)                | (TGD...und) |

|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 <i>Beilagen</i> (DYNAMIC) | (TGD...und) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |

## 12.4.2 Header Level Templates

Die Header Level Templates wurden aus dem bestehenden "Allgemeiner Implementierungsleitfaden für ELGA CDA Dokumente" übernommen. Diese sind unter [Allgemeiner Leitfaden - Kapitel Administrative Daten \(CDA Header\) - Dokumentenstruktur](#) zu finden.

**Wichtiger Hinweis:** Header-Elemente welche spezifisch für den telemonitoring Episodenbericht angepasst wurden sind der Spezifikation im Kapitel [Document Level Template](#) zu entnehmen.

Diese angepassten Elemente umfassen:

- ClinicalDocument/templateId
- ClinicalDocument/code
- ClinicalDocument/title

- ClinicalDocument/formatCode
- ClinicalDocument/documentationOf/serviceEvent

### 12.4.3 Section Level Templates

#### 12.4.3.1 Brieftext

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69  at-cda-bbr- | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 11:19:35<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪  atcdabbr_section_Brieftext vom 2021-02-19 11:44:10</li> <li>▪  atcdabbr_section_Brieftext vom 2019-04-02 15:48:06</li> </ul> |
| <b>Status</b> |  Aktiv                               | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_Brieftext  | <b>Bezeichnung</b>    | Brieftext   |

#### Beschreibung



Ein am Anfang des Briefes formulierter Freitext für eine Anrede oder Begrüßung. Z.B. „Sehr geehrte Kollegin...“

Die Angabe von medizinisch / fachlich relevanter Information in diesem Abschnitt ist NICHT ERLAUBT.

Es ist EMPFOHLEN, redundante Angaben von Patientennamen oder Aufenthaltsdaten des Patienten in dieser Section zu vermeiden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template                                       |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |





#### Assoziiert mit 1 Konzept

| Assoziiert mit | Id                        | Name  | Datensatz  |
|----------------|---------------------------|---|--|
|                | at-cda-bbr-dataelement-55 |  Brieftext |  Dataset A 2019 |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 4 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 | Containment |  Logo Entry (1.0.1+20210628)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)  | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 *Brieftext* (2021-02-19 11:44:10) [ref at-cda-bbr-](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69 *Brieftext* (2019-04-02 15:48:06) [ref at-cda-bbr-](#)

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<section classCode="DOCSECT">
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.69"/>
  <code code="BRIEFT" displayName="Brieftext" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>
  <!-- Titel der Section Brieftext wird vom ELGA Referenz-Stylesheet nicht angezeigt! -->
  <title>Brieftext</title>
  <!-- Textbereich der Section -->
  <text>Sehr geehrte Kollegen
</text>
  <!-- Maschinenlesbare Elemente der Section (optionales Logo) -->
  <entry>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 'Logo Entry' (2020-01-09T12:00:13) -->
  </entry>
</section>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung                         | Label       |
|---|------|---------|------|--------------------------------------|-------------|
| hl7:section   |      |         |      | Container zur Angabe des Brieftexts. | (atc...ext) |
| <div>  at-cda-bbr-dataelement-55            Brieftext            Dataset A 2019         </div> |      |         |      |                                      |             |
| └ @moodCode   | cs   | 0 ... 1 | F    | EVN                                  |             |
| └ @classCode  | cs   | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                              |             |
| └ hl7:templateId  | II   | 1 ... 1 | M    |                                      | (atc...ext) |
| └ @root   | uid  | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.69              |             |
| └ hl7:id  | II   | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Section            | (atc...ext) |
| wo [not(@nullFlavor)]   |      |         |      |                                      |             |
| └ hl7:code  | CE   | 1 ... 1 | M    | Code der Section.                    | (atc...ext) |
| └ @codeSystemName   | st   | 0 ... 1 | F    | ELGA_Sections                        |             |
| └ @code   | CONF | 1 ... 1 | F    | BRIEFT                               |             |
| └ @codeSystem   |      | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.5.40                     |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |         |                                     |   |   |             |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|---|---|-------------|
| h17:title             | ST      | 1 ... 1                             | M |   | (atc...ext) |
|                       | CONF    | Elementinhalt muss "Brieftext" sein |   |   |             |
| h17:text              | SD.TEXT | 1 ... 1                             | M | Information für den menschlichen Leser.<br>Achtung: Wird ein Logo als maschinenlesbares Element angegeben, darf keine Referenz darauf im narrativen Text-Bereich angegeben werden (<renderMulti-Media referencedObject="...">). | (atc...ext) |
| h17:author            |         | 0 ... *                             | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ext) |
| h17:informant         |         | 0 ... *                             | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ext) |
| h17:entry             |         | 0 ... 1                             | R | Es KANN zusätzlich ein Logo als maschinenlesbares Element angegeben werden.<br>Maschinenlesbares Element gemäß Template „ELGA Logo-Entry“ .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 <i>Logo Entry</i> (DYNAMIC)                   | (atc...ext) |
| @typeCode             | cs      | 0 ... 1                             | F | COMP  |             |
| @contextConductionInd | cs      | 0 ... 1                             | F | true  |             |
| h17:component         |         | 0 ... *                             |   | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des text-Elements in andere Sprachen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (atc...ext) |
| @typeCode             | cs      | 0 ... 1                             | F | COMP  |             |
| @contextConductionInd | cs      | 0 ... 1                             | F | true  |             |

### 12.4.3.1.1 Übersetzung

|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <span>ref at-cda-bbr-</span> | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 11:28:05<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_section_Uebersetzung vom 2021-02-19 11:58:13</li><li><input type="radio"/> atcdabbr_section_Uebersetzung vom 2019-05-14 15:24:50</li></ul> |
| <b>Status</b> | <div><div></div>Aktiv</div>                         | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628   |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_Uebersetzung                       | <b>Bezeichnung</b>    | Übersetzung  |

Beschreibung

Subsection für die Übersetzung des narrativen Textes  
Die Angabe des languaueCode erfolgt durch Angabe eines Codes aus dem ValueSet ELGA\_HumanLanguage. Optional kann an diesen, mit Bindestrich getrennt, die Angabe des Landes aus ISO-Codelisten angefügt werden.

|                          |   |             |   |                |
|--------------------------|---|-------------|---|----------------|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 |             |   |                |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template                                      |             |   |                |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)              |             |   |                |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 2 Templates   |             |   |                |
|                          | <b>Benutzt</b>  | <b>als</b>  | <b>Name</b>   | <b>Version</b> |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36   | Containment | <div><div></div>Author Body (1.0.0+20210219)</div>  | DYNAMIC        |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment | <div><div></div>Informant Body (2.0.0+202109)</div> | DYNAMIC        |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Beziehung</b> | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (2021-02-19 11:58:13) <span>ref at-cda-bbr-</span> |
|                  | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (2019-05-14 15:24:50) <span>ref at-cda-bbr-</span> |
|                  | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 <i>CDA Section</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>      |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

## Beispiel

### automatische Übersetzung durch ein Gerät

```
<cda:section>
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.8"/>
  <cda:id root="1.2.3.999" extension="myExt"/>
  <cda:title>Allergie ed Intolleranze</cda:title>
  <cda:text>Nessuna Allergia Nota</cda:text>
  <cda:languageCode code="it-IT"/>
  <cda:author>
    <!-- Zeitpunkt der Erstellung -->
    <cda:time value="20191224082015+0100"/>
    <cda:assignedAuthor>
      <!-- Geräte Identifikation (oder nullFlavor) -->
      <cda:id root="86562fe5-b509-4ce9-b976-176fd376e477"/>
      <!-- Geräte Beschreibung -->
      <cda:assignedAuthoringDevice>
        <cda:manufacturerModelName>Good Health System</cda:manufacturerModelName>
        <cda:softwareName>Best Health Software Application</cda:softwareName>
      </cda:assignedAuthoringDevice>
      <cda:representedOrganization>
        <cda:id root="1.2.40.0.34.99.3"/>
        <!-- Name der Organisation -->
        <cda:name>Amadeus Spital, 1. Chirurgische Abteilung</cda:name>
        <!-- Kontaktdaten der Organisation -->
        <cda:telecom value="tel:+43.6138.3453446.0"/>
        <cda:telecom value="mailto:chirurgie@amadeusspital.at"/>
        <cda:addr>
          <cda:streetName>Mozartgasse</cda:streetName>
          <cda:houseNumber>1-7</cda:houseNumber>
          <cda:postalCode>5350</cda:postalCode>
          <cda:city>St.Wolfgang</cda:city>
          <cda:state>Salzburg</cda:state>
          <cda:country>AUT</cda:country>
        </cda:addr>
      </cda:representedOrganization>
    </cda:assignedAuthor>
  </cda:author>
</cda:section>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

## Beispiel

### manuelle Übersetzung durch eine Person

```
<cda:section>
  <cda:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.8"/>
  <cda:id root="1.2.3.999" extension="myExt"/>
  <cda:title>Allergie ed Intolleranze</cda:title>
  <cda:text>Nessuna Allergia Nota</cda:text>
  <cda:languageCode code="it-IT"/>
  <cda:author>
    <!-- Zeitpunkt der Erstellung -->
    <time value="20191224082015+0100"/>
    <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
      <!-- Identifikation des Verfassers des Dokuments -->
      <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.3" extension="1111" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>
      <!-- Fachrichtung des Verfassers des Dokuments -->
      <code code="107" displayName="Fachärztin/Facharzt für Chirurgie" codeSystem="1.2.40.0.34.5.160" codeSystemName="EL-
GA_Fachaerzte"/>
      <!-- Kontaktdaten des Verfassers des Dokuments -->
      <telecom value="tel:+43.1.40400"/>
      <telecom value="mailto:herbert.mustermann@organization.at"/>
      <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
        <!-- Name des Verfassers des Dokuments -->
        <name>
          <prefix qualifier="AC">Univ.-Prof. Dr.</prefix>
          <given>Isabella</given>
          <family>Stern</family>
        </name>
      </assignedPerson>
      <!-- Organisation, in deren Auftrag der Verfasser des Dokuments die Dokumentation verfasst hat -->
      <representedOrganization>
        <id root="1.2.40.0.34.99.3"/>
        <!-- Name der Organisation -->
        <name>Amadeus Spital, 1. Chirurgische Abteilung</name>
        <!-- Kontaktdaten der Organisation -->
        <telecom value="tel:+43.6138.3453446.0"/>
        <telecom value="mailto:chirurgie@amadeusspital.at"/>
        <addr>
          <streetName>Mozartgasse</streetName>
          <houseNumber>1-7</houseNumber>
          <postalCode>5350</postalCode>
          <city>St. Wolfgang</city>
          <state>Salzburg</state>
          <country>AUT</country>
        </addr>
      </representedOrganization>
    </assignedAuthor>
  </cda:author>
</cda:section>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT       | Kard  | Konf | Beschreibung                         | Label       |
|-----------------------|----------|---|------|--------------------------------------|-------------|
| hl7:section           |          |   |      |                                      | (atc...ung) |
| └ @classCode          | cs       | 0 ... 1   | F    | DOCSECT                              |             |
| └ @moodCode           | cs       | 0 ... 1   | F    | EVN                                  |             |
| └ hl7:templateId      | II       | 1 ... 1   | M    | HL7 Austria - Übersetzung            | (atc...ung) |
| └ @root               | uid      | 1 ... 1   | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8               |             |
| └ hl7:id              | II       | 0 ... 1   |      |                                      | (atc...ung) |
| wo [not(@nullFlavor)] |          |   |      |                                      |             |
| └ hl7:title           | ST       | 1 ... 1   | M    | Titel der Section in der Übersetzung | (atc...ung) |
| └ hl7:text            | SD.TEXT  | 1 ... 1   | M    | Text der Section in der Übersetzung  | (atc...ung) |
| └ hl7:languageCode    | CS       | 1 ... 1   | M    | Sprachcode für die Übersetzung       | (atc...ung) |
|                       | CONF     | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.173 <i>ELGA_HumanLanguage</i> (DYNAMIC) |      |                                      |             |
|                       | Beispiel | Angabe mit Landescode<br><languageCode code="it-IT"/>   |      |                                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                            |  | Beispiel | Angabe ohne Landescode<br><languageCode code="it"/> |   |   |             |
|----------------------------|--|----------|---|---|---|-------------|
| <div>└ h17:author</div>    |  |          | 0 ... *   | R | Mit der Angabe des Autors kann die Qualität der Übersetzung - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ung) |
| <div>└ h17:informant</div> |  |          | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ung) |

12.4.3.2 Behandlungsgrund - unkodiert

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:13:54<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_section_BehandlungsgrundUnkodiert vom 2018-07-18 14:59:04</li></ul> |
| <b>Status</b> |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210218  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_BehandlungsgrundUnkodiert  | <b>Bezeichnung</b>    | Behandlungsgrund - unkodiert  |

Beschreibung



Als Einleitung in das Dokument wird der Behandlungsgrund angegeben, welcher die zu behandelnde Krankheit samt weiteren zu beachtenden Krankheiten und den geplanten Behandlungsvorgang dokumentiert. Diese Information kann nach Behandlern und somit auch Disziplinen getrennt werden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79 |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template                                       |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 5 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                            | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                           | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)             | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 | Containment |  BodySubSection - unkodiert - generisch (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                            | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79 *Behandlungsgrund - unkodiert* (2018-07-18 14:59:04) [ref elgatgd-](#)  
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.201 *CDA Section* (2005-09-07) [ref ad1bbr-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<!-- Behandlungsgrund
Als Einleitung in das Dokument wird der Behandlungsgrund und Vorgang angegeben, welcher die zu behan-
delnde Krankheit samt weiteren
zu beachtenden Krankheiten und geplanten Behandlungsverlauf dokumentiert. Diese Information kann nach
Disziplinen getrennt werden.-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.79"/>
    <code code="408773008" displayName="Reasons for treatment (finding)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNO-
MED CT"/>
    <title>Behandlungsgrund</title>
    <text>
      [nicht aus dem Fall Häckler] Der Patient ist am 28.9.2018 mit starken Schmerzen in der Brust per Krankenwaagen eingeliefert
      worden. Nach mehrtägiger Behandlung und Beobachtung wurde die Weiterbehandlung mittels Telemonitoring mit Herzmobil Tirol vorge-
      schlagen. Der Patient willigte ein und wurde eingeschult.
    <br/>
    <br/>
    Die Zielwerte für diesen Patienten befinden sich zwischen aaa und bbb systolisch und ccc und ddd diastolisch. Da dieser Patient
    zusätzlich zur Herzinsuffizienz an Diabetes leidet, müssen sein Körpergewicht genau beobachtet werden und bei einem Anstieg von 5%
    in einer Woche weitere Behandlungsmaßnahmen diskutiert werden.
    </text>
  </section>
</component>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                               | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:section           |        |         |      |  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                                    |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Behandlungsgrund - unkodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.79                    |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion                  | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 408773008                                  |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.96                     |             |
| └ @codeSystemName     | st     | 0 ... 1 | F    | SNOMED CT                                  |             |
| └ @displayName        | st     | 0 ... 1 | F    | Reasons for treatment (finding)            |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |         |  |   |  |             |
|--------------------|---------|--|---|--|-------------|
| └─ hl7:translation | CD      | 0 ... *                                    |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @code           | cs      | 1 ... 1                                    | R |  |             |
| └─ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1                                    | R |  |             |
| └─ @codeSystemName | st      | 0 ... 1                                    |   |  |             |
| └─ @displayName    | st      | 0 ... 1                                    |   |  |             |
| └─ ips:designation | ST      | 0 ... *                                    |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @language       | cs      | 1 ... 1                                    | R |  |             |
| └─ hl7:title       | ST      | 1 ... 1                                    | M |  | (atc...ert) |
|                    | CONF    | Elementinhalt muss "Behandlungsgrund" sein |   |  |             |
| └─ hl7:text        | SD.TEXT | 1 ... 1                                    | M |  | (atc...ert) |
| └─ hl7:author      |         | 0 ... 1                                    | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25





|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst). Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ hl7:entry             |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 <i>BodySubSection - unkodiert - generisch</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

#### 12.4.3.2.1 BodySubSection - unkodiert - generisch

|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 <span>ref at-cda-bbr-</span>                                    | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-19 11:44:04<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪ <input type="radio"/> BodySubSectionUnkodiertGenerisch vom 2020-03-16 13:58:47 |
| <b>Status</b> |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210219   |
| <b>Name</b>   | BodySubSectionUnkodiertGenerisch  | <b>Bezeichnung</b>    | BodySubSection - unkodiert - generisch   |

##### Beschreibung

Mit dieser generischen Subsektion können Sektionen unterteilt werden und pro Subsektion mit den Metadaten eines eigenen Titels und des Ursprungs versehen werden. Die Informationen zum Ursprung bestehen aus dem Autor als Person oder Gerät, die Funktion des Autors, wie z.B. Assistenzarzt oder Stationsschwester, und dem Zeitpunkt der Dokumentation. Ein Code-Element für diese Sektion ist nicht erlaubt, da explizit der Code der Übersektion gilt. Für den Titel gelten spezielle Vorgaben, siehe das Titel-Element, welche im speziellen Leitfaden weiter eingeschränkt werden können.

|                          |  |             |   |
|--------------------------|--|-------------|---|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92   |             |   |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template   |             |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |             |   |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 4 Templates  |             |   |
|                          | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>   |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)               |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19  | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8   | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 <i>BodySubSection - unkodiert - generisch</i> (2020-03-16 13:58:47) <span>ref at-cda-bbr-</span> |             |   |

## Beispiel

### Strukturbeispiel mit minimaler Befüllung

```
<clinicalDocument>

: CDA Header :
<component>
  <!-- strukturierter CDA Body -->
  <structuredBody>

: Einzelne Sektionen des Bodys :
  <component>
    <!-- Beginn der Übersektion -->
    <section>

: Inhalte Übersektion :
      <component>
        <!-- Beginn der Subsektion -->
        <section>
          <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
          <title>Titel der Subsektion</title>
          <text>Text der Subsektion</text>
          <!-- Ende der Subsektion -->
        </section>
      </component>
    <!-- Ende der Übersektion -->
  </section>
</component>

: Weitere Sektionen des Bodys :
  </structuredBody>
</component>
</clinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

## Beispiel

### Strukturbeispiel mit maximaler Befüllung

```
<clinicalDocument>

: CDA Header :
<component>
  <!-- strukturierter CDA Body -->
  <structuredBody>

: Einzelne Sektionen des Bodys :
  <component>
    <!-- Beginn der Übersektion -->
    <section>

: Inhalte Übersektion :
  <component>
    <!-- Beginn der Subsektion -->
    <section classCode="DOCSET" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
      <id root="2.25" extension="E6F45742-BA20-7224-15A0-6D8836E9608E" assigningAuthorityName="DummyGDA"/>
      <title>Titel der Subsektion</title>
      <text>Text der Subsektion</text>
      <author>
        <functionCode code="OA" displayName="Diensthabender Oberarzt" codeSystem="DummyGDAoid" codeSystemNa-
me="DummyGDA"/>
        <time value="20190710153549+0200"/>
        <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
          <id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
          <code code="100" codeSystem="1.2.40.0.34.5.2" displayName="Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin"/>
          <addr>
            <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 'Address Compilation' (2019-02-28T14:24:14) -->
          </addr>
          <telecom value="tel:+1-12345678"/>
          <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
            <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 'Person Name Compilation G2' -->
          </assignedPerson>
          <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
            <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 'Organization Compilation with id, name' (2019-03-25T13:43:57) --
          </representedOrganization>
        </assignedAuthor>
      </author>
    <!-- Ende der Subsektion -->
    </section>
  </component>
  <!-- Ende der Übersektion -->
  </section>
</component>

: Weitere Sektionen des Bodys :
  </structuredBody>
</component>
</clinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel mit minimaler Befüllung + Zeitpunkt

```
<clinicalDocument>

: CDA Header :
<component>
  <!-- strukturierter CDA Body -->
  <structuredBody>

: Einzelne Sektionen des Bodys :
  <component>
    <!-- Beginn der Übersektion -->
    <section>

: Inhalte Übersektion :
  <component>
    <!-- Beginn der Subsektion -->
    <section classCode="DOCSET" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
      <id root="2.25" extension="E6F45742-BA20-7224-15A0-6D8836E9608E" assigningAuthorityName="DummyGDA"/>
      <title>Titel der Subsektion</title>
      <text>Text der Subsektion</text>
      <author>
        <time value="20190710153549+0200"/>
        <assignedAuthor>
          <id nullFlavor="UNK"/>
          <assignedPerson>
            <name nullFlavor="UNK"/>
          </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
      </author>
    <!-- Ende der Subsektion -->
    </section>
  </component>
  <!-- Ende der Übersektion -->
  </section>
</component>

: Weitere Sektionen des Bodys :
  </structuredBody>
</component>
</clinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT      | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|---------|---------|------|--|-------------|
| hl7:section      |         |         |      |  | (Bod...sch) |
| └ @classCode     | cs      | 0 ... 1 | F    | DOCSECT  |             |
| └ @moodCode      | cs      | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId | II      | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - BodySubSection - unkodiert - generisch   | (Bod...sch) |
| └ @root          | uid     | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92  |             |
| └ hl7:id         | II      | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion (optional).  | (Bod...sch) |
| └ hl7:code       | CE.IPS  |         | NP   | Ein Code zur Sektion ist nicht erlaubt, da der Code der übergeordneten Sektion gilt!   | (Bod...sch) |
| └ hl7:title      | ST      | 1 ... 1 | M    | <p>Titel der Sektion.</p> <p>Nachdem es nicht erlaubt ist den Code zur Sektion anzugeben, kann der Titel hier frei gewählt werden und als Erweiterung des Titels der diese Sektion beinhaltende Sektion gesehen werden. Dadurch darf jedoch nicht dieser Titel gegensätzlich zum Titel der diese Sektion beinhaltende Sektion stehen. Zum Beispiel würde der Titel "Behandlungsverlauf" der Subsektion keinen Sinn mit dem Titel "Behandlungsgrund" der beinhaltenden Sektion machen.</p> <p>Im speziellen Leitfaden können Vorgaben für den Titel gemacht werden.</p> | (Bod...sch) |
| └ hl7:text       | SD.TEXT | 1 ... 1 | M    | Information für den menschlichen Leser.  | (Bod...sch) |
| └ hl7:author     |         | 0 ... 1 | R    | <p>Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden.</p> <p>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)</p>   | (Bod...sch) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |    |         |   |   |             |
|--------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst).<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC) | (Bod...sch) |
| └─ hl7:entry             |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)  | (Bod...sch) |
| └─ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └─ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (Bod...sch) |
| └─ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |

12.4.3.3 Diagnosen - kodiert

|        |   |                |   |
|--------|---|----------------|---|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 <small>ref at-cda-bbr-</small>                                    | Gültigkeit     | 2021-02-23 06:22:31<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_section_DiagnoseKodiert vom 2021-02-19 12:02:22</li><li>atcdabbr_section_DiagnoseKodiert vom 2020-10-06 09:34:46</li><li>atcdabbr_section_DiagnoseKodiert vom 2020-07-29 14:23:56</li></ul> |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.1+20210304  |
| Name   | atcdabbr_section_DiagnoseKodiert  | Bezeichnung    | Diagnose - kodiert  |

## Beschreibung

Diese Sektion dient zur Angabe der Diagnose(n), welche im Kontext der Behandlung erhoben wurde(n). Dazu gehören z.B. die ursprüngliche Diagnosen des Behandlungsgrunds sowie alle weiteren während der Behandlung zu beachtenden Diagnosen.

Es wird empfohlen die Diagnose(n) in tabellarischer Form anzugeben und bei Bedarf zu kennzeichnen, welche die Haupt- und welche die Nebendiagnosen sind.





Synonyme: Untersuchungsergebnis(se), Ergebnis(se)

**Kontext** Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96

**Klassifikation** CDA Section level template

**Offen/Geschlossen** Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

### Benutzt 4 Templates

| Benutzt                 | als         | Name   | Version |
|-------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)           | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)          | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.7  | Containment |  Problem Concern Entry (1.1.0+20210219) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)           | DYNAMIC |

### Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 *Diagnose - kodiert* (2021-02-19 12:02:22) [ref at-cda-bbr-](#)

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 *Diagnose - kodiert* (2020-10-06 09:34:46) [ref at-cda-bbr-](#)

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96 *Diagnose - kodiert* (2020-07-29 14:23:56) [ref at-cda-bbr-](#)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```

<!-- Diagnose
Alle in dieser Behandlung verwendeten Diagnosen, wie die ursprüngliche Diagnosen des Behand-
lungsgrunds als auch alle weiteren während der Behandlung zu beachtenden Diagnosen, sind hier
maschinenlesbar zu dokumentieren.-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.96"/>
    <code code="439401001" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96"/>
    <title>Diagnose</title>
    <text>

Diagnosen am Ende der Behandlung:
    <br/>
    <content ID="disdiag1">
      *
      <content ID="disdiag1_diagnosis">HFrEF, MI Grad I-II</content>
      , EF mittergradig eingeschränkt, A1 Grad I (Echo 08/18), diffuse KHK (CAG 07/18), Z.n. ventrikulärer Tachykardie
mit CPR 07/18 (Ursache DD QT Verlängerung unter Psychopharmaka plus Antibiothikatherapie), parosymales Vorhofflimmern/-
flattern, Linksschenkelblock      </content>
    <br/>
    <content ID="disdiag2">
      *
      <content ID="disdiag2_diagnosis">Z.n. akutem prärenalen Nierenversagen</content>
      07/18      </content>
    <br/>

    * arterielle Hypertonie
    <br/>

    * Hypercholesterinämie
    <br/>

    * Z.n. ACM Infarkt rechts 08/16 (kardioembolisch) mit Hemisymptomatik links
    <br/>

    * Z.n. einmaligem GM-Anfall 04/17
    <br/>

    * Z.n. multiplen TVT beidseits
    <br/>

    * Z.n. Motorradumfall 2016 mit instabilem Becken (Beckentrauma, multiple Gefäßverletzungen (Stent Versorgung, Sehnenrup-
tur linke Schulter)
    <br/>

    * reaktiv chronische Depression seit Motoradumfall
    <br/>

    * aktuell: leichter Atemwegsinfekt, sowie Mikrohämaturie und diskrete Dysurie (DD asymptomatischer Harnwegsinfekt) ohne
systematische Infektzeichen
  </text>
  <author>
    <time value="20181213083800+0100"/>
    <assignedAuthor>
      <id root="1.2.40.0.34.99.4" assigningAuthorityName="Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Bluthochdruck und

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
Ernährungsmedizin - Dr. med. univ. Daniela Holzer"/>
  <assignedPerson>
    <name>
      <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix>
      <given>Daniela</given>
      <family>Holzer</family>
    </name>
  </assignedPerson>
</assignedAuthor>
</author>

::

</section>
</component>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                     | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|----------------------------------|-------------|
| hl7:section           |        |         |      |                                  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                          |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN                              |             |
| └ hl7:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Diagnose - kodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96          |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion        | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |                                  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |                                  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 439401001                        |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.96           |             |
| └ @codeSystemName     | st     | 0 ... 1 | F    | SNOMED CT                        |             |
| └ @displayName        | st     | 0 ... 1 | F    | Diagnosis                        |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |         |                                    |   |   |             |
|--------------------|---------|------------------------------------|---|---|-------------|
| └─ hl7:translation | CD      | 0 ... *                            |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ert) |
| └─ @code           | cs      | 1 ... 1                            | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1                            | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st      | 0 ... 1                            |   |   |             |
| └─ @displayName    | st      | 0 ... 1                            |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST      | 0 ... *                            |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ert) |
| └─ @language       | cs      | 1 ... 1                            | R |   |             |
| └─ hl7:title       | ST      | 1 ... 1                            | M |   | (atc...ert) |
|                    | CONF    | Elementinhalt muss "Diagnose" sein |   |   |             |
| └─ hl7:text        | SD.TEXT | 1 ... 1                            | M | Enthält Informationen für den menschlichen Leser  | (atc...ert) |
| └─ hl7:author      |         | 0 ... *                            |   | Author der enthaltenen Information (GDA)<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)           | (atc...ert) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |    |         |   |  |             |
|--------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └─ hl7:informant         |    | 0 ... * |   | Quelle für die enthaltene Information<br>Name der Person und ihre Beziehung zum Patienten (Patient oder Angehöriger, Auskunftsperson - nicht-GDA)<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └─ hl7:entry             |    | 1 ... * | M | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.7 <i>Problem Concern Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └─ @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F | DRIV   |             |
| └─ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des Elements<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └─ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |






12.4.3.4 Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert

|                     |   |                       |  |
|---------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>           | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:16:54<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_section_ZusammenfassungBehandlungUnkodiert vom 2018-07-18 15:16:10</li></ul> |
| <b>Status</b>       |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210218   |
| <b>Name</b>         | atcdabbr_section_ZusammenfassungBehandlungUnkodiert                                       | <b>Bezeichnung</b>    | Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert   |
| <b>Beschreibung</b> |   |                       |  |

Als Übersicht dienende textuelle Zusammenfassung über die bis jetzt stattgefundene oder bereits abgeschlossene Behandlung. Diese Information kann nach Behandlern und somit auch nach Disziplinen getrennt werden.



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80   |             |  |
| Klassifikation    | CDA Section level template   |             |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |             |  |
| Benutzt           | Benutzt 5 Templates  |             |  |
|                   | Benutzt  | als         | NameVersion  |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)DYNAMIC                            |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)DYNAMIC                           |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19  | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)DYNAMIC             |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92  | Containment |  BodySubSection - unkodiert - generisch (1.0.0+20210219)DYNAMIC |
| Beziehung         | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8   | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)DYNAMIC                            |
|                   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80 Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert (2018-07-18 15:16:10) <span>ref elgatgd-</span> |             |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```

<!-- Zusammenfassung der Behandlung
Als Übersicht dienende textuelle Zusammenfassung über die bis jetzt stattgefundenene oder bereits abgeschlossene
Behandlung.
Diese Information kann nach Disziplinen getrennt werden. -->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.80"/>
    <code code="721917003" displayName="Physician discharge concise summary" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>
    <title>Zusammenfassung der Behandlung</title>
    <text>

Die Abschlusskontrolle aus Herzmobil hat stattgefunden. Entresto wurde gesteigert, der Blutdruck ist laut Herzmobil Protokoll zum Teil hypo-
tensiv, dies wird vom Patienten jedoch gut toleriert, er fühlt sich gut leistungsfähig.
    <br/>

Reha im RZ Münster ab 4.1.2019, Herr Häckler erhofft sich zum einen eine Verbesserung der kardialen Situation/Anleitung zum selbst Training
und zum anderen eine Verbesserung der Mobilität der linken oberen Extremität
    <br/>

keine Dyspnoe, keine Ödeme, nimmt Torasemid eine ganze bzw. halbe Tablette im Wechsel, Gewicht stabil, keine AP, keine Palpitationen, Mictio
derzeit OB, Nykturie einmal, Trinkmenge 1-1,5l, Stuhlanalyse: Jeden ersten bis zweiten Tag, unauffällig
    <br/>

aktuelle Verschnupft, Nase rinnt seit 2 Monaten, kein Sekret, kein Fieber (DD Allergie/Unverträglichkeiten im Rahmen der aktuellen Wohnsitua-
tion)
    <br/>

bezüglich der Schmerzen im Bereich von Becken und Schultern wird dzt. Novalgin im Durchschnitt jeden zweiten Tag eingenommen
    <br/>

Die restliche Anamnese ist unauffällig.
  </text>
  <component>
    <section>
      <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
      <title>Am 09.07.2018 um 8:38 von DGKP Veronika Mattes:</title>
      <text>

Arztbrief und Medikamente hochgeladen. Schulung und Hausbesuch für den 16.07 18:00 vereinbart.
      </text>
      <author>
        <time value="20180709083800+0100"/>
        <assignedAuthor>
          <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
          <assignedPerson>
            <name>
              <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
              <given>Veronika</given>
              <family>Mattes</family>
            </name>
          </assignedPerson>
        </assignedAuthor>
      </author>
    </section>
  </component>
</component>

```

```

<section>
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
  <title>Am 10.07.2018 um 8.06 von DGKP Veronika Mattes:</title>
  <text>
    Pat. seit 7.7.18 erneut mit kardialer Dekompensation und mit V.a Stauungsgastropathie stationär auf der Kardiologischen Sonderstation. Gerade
    Besuch meinerseits auf Station: Pat. wirkt sehr müde und schläft während des Gesprächs immer wieder ein. Redet davon, dass sein Sohn ihn heu-
    te holen würde und sie gemeinsam in den Urlaub fahren. Nehme heute Kontakt mit der Gattin auf.
  </text>
  <author>
    <time value="20180710080600+0100"/>
    <assignedAuthor>
      <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
      <assignedPerson>
        <name>
          <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
          <given>Veronika</given>
          <family>Mattes</family>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
    <title>Am 10.07.2018 um 9:31 von DGKP Veronika Mattes:</title>
    <text>
      Zustand von Herrn Häckler hat sich nach der Entlassung erneut stark verschlechtert. Brustschmerzen, Übelkeit und Atemnot. Zudem eine große
      Todesangst und Depressionen. Für morgen 9:30 Uhr ein Treffen auf Station vereinbart um weiteres Procedere zu besprechen. Prof. Friedrich dar-
      über informiert.
    </text>
    <author>
      <time value="20180710093100+0100"/>
      <assignedAuthor>
        <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
        <assignedPerson>
          <name>
            <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
            <given>Veronika</given>
            <family>Mattes</family>
          </name>
        </assignedPerson>
      </assignedAuthor>
    </author>
  </section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
    <title>Am 11.07.2018 um 7:43 von DGKP Veronika Mattes:</title>
    <text>
      GTEEraclip geplant.
    </text>
    <author>
      <time value="20180711074300+0100"/>

```

```

    <assignedAuthor>
      <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
        <given>Veronika</given>
        <family>Mattes</family>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
    <title>Am 12.07.2018 um 7:46 von DGKP Veronika Mattes:</title>
    <text>
      Gestern Gespräch mit Sohn auf Station: Hr. Häckler leidet momentan an einer schweren Depression. Er kann sich nicht aufraffen und möchte am liebsten nur schlafen. Gegenüber PP auf Station äußert er sich auch, dass er sterben möchte und alles sinnlos ist. Bei Visite Psych.Konsil angefordert. GGF Übernahme auf eine psychiatrischen Station. Sohn steht mit mir in Kontakt.
    </text>
    <author>
      <time value="20180712074600+0100"/>
      <assignedAuthor>
        <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
      <assignedPerson>
        <name>
          <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
          <given>Veronika</given>
          <family>Mattes</family>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
</section>
</component>
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
    <title>Am 13.12.2018 um 8:38 von Dr. Daniela Holzer:</title>
    <text>
      Herr Häckler kommt zur Abschlussuntersuchung des Telemonitoring-Programms Herzmobil in die Ordination. Herr Häckler fühlt sich subjektiv kardipulmonal stabil und weitgehend beschwerdefrei, die gesteigerte Dosierung vom Entresto hat er gut toleriert. Klinisch bestehen unter der zwischenzeitlich ergänzten Torasemid Dosierung keine Ödeme mehr.
    <br/>
      Aktuell besteht der Verdacht auf einen asymptomatischen Harnwegsinfekt, weswegen Cranberry Präparate empfohlen worden sind sowie Monuril Stand-by rezeptiert wurde. Bezüglich eines fraglichen Atemwegsinfekts steht als Ursache DD auch eine Allergie/Unverträglichkeit im Raum.
    <br/>
      Bei KHK und LDL außerhalb des Zielbereiches ist die Einnahme von Atorvastatin empfohlen (siehe auch Vorbrief)
    <br/>
      Die Laborbefunde zeigen das Blutbild im Normbereich, ein zwischenzeitlich erhöhter proBNP-Wert ist nun wieder im Normalbereich, Nieren- und

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Leberfunktion sind unauffällig. Im Harn zeigt sich eine Mikrohämaturie bei Verdacht auf asymptomatischen Harnwegsinfekt.  
<br/>

internistische Kontrollen alle 3 Monate bzw. jederzeit kurzfristig bei Bedarf (insbesondere Atemnot, Zunahme des Körpergewichtes bzw. Zunahme der Beinödeme oder eingeschränkter Allgemeinzustand)  
<br/>

neurologischerseits ist Herr Häckler in Betreuung bei Frau Dr. Klug, dankenswerterweise erfolgt die Klärung der notwendigen OAK (Noak plus Plättchenhemmung? bei Z.n. multiplen TVT/VH-Flimmern plus Stent/Kontakt Gefäßchirurgie)  
<br/>

Diagnosen siehe Diagnosen-Sektion.

```
</text>
<author>
  <time value="20181213083800+0100"/>
  <assignedAuthor>
    <id root="1.2.40.0.34.99.4" assigningAuthorityName="Facharztpraxis für Innere Medizin, Niere, Bluthochdruck und Ernährungsmedizin
- Dr. med. univ. Daniela Holzer"/>
    <assignedPerson>
      <name>
        <prefix qualifier="AC">Dr.</prefix>
        <given>Daniela</given>
        <family>Holzer</family>
      </name>
    </assignedPerson>
  </assignedAuthor>
</author>
</section>
</component>
</section>
</component>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:section           |        |         |      |  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT  |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Zusammenfassung der Behandlung - unkodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.80                                  |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion                                | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 721917003  |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.96                                   |             |
| └ @codeSystemName     | st     | 0 ... 1 | F    | SNOMED CT  |             |
| └ @displayName        | st     | 0 ... 1 | F    | Physician discharge concise summary                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |         |  |   |  |             |
|--------------------|---------|--|---|--|-------------|
| └─ hl7:translation | CD      | 0 ... *  |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @code           | cs      | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ @codeSystemName | st      | 0 ... 1  |   |  |             |
| └─ @displayName    | st      | 0 ... 1  |   |  |             |
| └─ ips:designation | ST      | 0 ... *  |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @language       | cs      | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ hl7:title       | ST      | 1 ... 1  | M |  | (atc...ert) |
|                    | CONF    | Elementinhalt muss "Zusammenfassung der Behandlung" sein |   |  |             |
| └─ hl7:text        | SD.TEXT | 1 ... 1  | M |  | (atc...ert) |
| └─ hl7:author      |         | 0 ... 1  | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25








|                         |    |         |   |   |             |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst).<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ hl7:entry             |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 <i>BodySubSection - unkodiert - generisch</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |

### 12.4.3.5 Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert

2021-02-18 13:12:29

Andere Versionen mit dieser Id:

- atcdabbr\_section\_AuszuegeAusErhobeneDatenUnkodiert vom 2020-10-06 11:04:53
- atcdabbr\_section\_AuszuegeAusErhobeneDatenUnkodiert vom 2018-07-18 15:24:53

|   |   |                       |   |
|---|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>   | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91   | <b>Gültigkeit</b>     |   |
| <b>Status</b>   |  Aktiv   | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_AuszuegeAusErhobeneDatenUnkodiert  | <b>Bezeichnung</b>    | Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert  |
| <b>Beschreibung</b>   |   |                       |   |
| Bestimmte auffallende Beobachtungen, wie pathologische Parameter oder ausschlaggebende Verläufe, können aus den Beobachtungen hier extrahiert und als Gruppe benannt werden, um sich speziell auf diese gruppierten und benannten Werte in den Texten beziehen zu können. |   |                       |   |
| <b>Kontext</b>  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>   | CDA Section level template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>  | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <b>Benutzt</b>  | <b>Benutzt 5 Templates</b>  |                       |   |
|   | <b>Benutzt</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b>   |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36   | Containment           |  Author Body (1.0.0+20210219)                            |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment           |  Informant Body (2.0.0+202109)                           |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19   | Containment           |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)             |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92   | Containment           |  BodySubSection - unkodiert - generisch (1.0.0+20210219) |
| <b>Beziehung</b>  | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91 <i>Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert</i> (2020-10-06 11:04:53)  |                       |   |
|   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91 <i>Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert</i> (2018-07-18 15:24:53)  |                       |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```

<!-- Auszüge aus erhobenen Daten
Bestimmte auffallende Beobachtungen wie pathologische Parameter oder ausschlaggebende Verläufe können aus den
Beobachtungen hier extrahiert werden und als Gruppe benannt werden, um sich speziell auf diese gruppierten
und benannten Werte in den Texten beziehen zu können.
-->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.2.6"/>
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.16"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.15" extension="2015-08-17"/>
    <code code="703852005" displayName="Narrative comment section (record artifact)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemNa-
me="SNOMED CT"/>
    <title>Auszüge aus erhobenen Daten</title>
    <component>
      <section>
        <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
        <title>Am 12.07.2018 um 7:48 von DGKP Veronika Mattes: Zu Blutdruck und Puls</title>
        <text>

[nicht aus dem Fall Häckler] Die Depression wirkt sich psychosomatisch auf die Vitalparameter aus, erkennbare leichte Erhöhung der diastoli-
schen Werte sichtbar.
        <br/>
        <br/>
        <table border="1" width="100%">
          <thead>
            <tr>
              <th>Datum/Zeit</th>
              <th>Systolisch (mmHg)</th>
              <th>Diastolisch (mmHg)</th>
              <th>Puls (Schläge/min)</th>
              <th>Notiz</th>
            </tr>
          </thead>
          <tbody>
            <tr>
              <td>2015-10-28 07:55:42</td>
              <td>121.0</td>
              <td>70.0</td>
              <td>79.0</td>
              <td>Maschinell</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2015-10-27 07:48:28</td>
              <td>115.0</td>
              <td>67.0</td>
              <td>79.0</td>
              <td>Maschinell</td>
            </tr>
            <tr>
              <td>2015-10-23 07:41:00</td>
              <td>127.0</td>
              <td>64.0</td>
              <td>82.0</td>
              <td>Maschinell</td>
            </tr>
          </tbody>
        </table>
      </section>
    </component>
  </section>
</component>

```

```

        </tr>
        <tr>
            <td>2015-10-22 09:04:56</td>
            <td>125.0</td>
            <td>69.0</td>
            <td>88.0</td>
            <td>Maschinell</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>2015-10-21 08:23:48</td>
            <td>139.0</td>
            <td>73.0</td>
            <td>81.0</td>
            <td>Maschinell</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
</text>
<author>
    <time value="20180712074600+0100"/>
    <assignedAuthor>
        <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
        <assignedPerson>
            <name>
                <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
                <given>Veronika</given>
                <family>Mattes</family>
            </name>
        </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
</author>
</section>
</component>
<component>
    <section>
        <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.92"/>
        <title>Am 12.07.2018 um 7:48 von DGKP Veronika Mattes: Alle Grafiken gesammelt</title>
        <text>
            <renderMultiMedia referencedObject="bloodpressure1">
                <caption>Eingebettetes Blutdruckprofil</caption>
            </renderMultiMedia>
            <renderMultiMedia referencedObject="pulse1">
                <caption>Eingebettetes Pulsprofil</caption>
            </renderMultiMedia>
            <renderMultiMedia referencedObject="weight1">
                <caption>Eingebettetes Gewichtsprofil</caption>
            </renderMultiMedia>
            <renderMultiMedia referencedObject="wellbeing1">
                <caption>Eingebettetes Wohlbefinden</caption>
            </renderMultiMedia>
        </text>
        <author>
            <time value="20180712074600+0100"/>
            <assignedAuthor>
                <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="999022" assigningAuthorityName="Tirol Kliniken GmbH"/>
                <assignedPerson>

```

```

        <name>
          <prefix qualifier="AC">DGKP</prefix>
          <given>Veronika</given>
          <family>Mattes</family>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <!-- Blutdruck Diagramm -->
  <entry>
    <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="bloodpressure1">
      <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
      <value mediaType="image/jpeg" representation="B64">
someBase64Value</value>
      </observationMedia>
    </entry>
    <!-- Puls Diagramm -->
    <entry>
      <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="pulse1">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
        <value mediaType="image/jpeg" representation="B64">
someBase64Value</value>
        </observationMedia>
      </entry>
      <!-- Gewicht Diagramm -->
      <entry>
        <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="weight1">
          <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
          <value mediaType="image/jpeg" representation="B64">
someBase64Value</value>
          </observationMedia>
        </entry>
        <!-- maschinenlesbare Eintrag zur Grafik zum Wohlbefinden -->
        <entry>
          <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="wellbeing1">
            <templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.1" assigningAuthorityName="ELGA"/>
            <value mediaType="image/jpeg" representation="B64">
someBase64Value</value>
            </observationMedia>
          </entry>
        </section>
      </component>
    </section>
  </component>

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:section           |        |         |      |  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT  |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Auszüge aus erhobene Daten - unkodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91                              |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion                            | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 703852005  |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.96                               |             |
| └ @codeSystemName     | st     | 0 ... 1 | F    | SNOMED CT  |             |
| └ @displayName        | st     | 0 ... 1 | F    | Narrative comment section (record artifact)          |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |         |  |   |  |             |
|--------------------|---------|--|---|--|-------------|
| └─ hl7:translation | CD      | 0 ... *  |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @code           | cs      | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ @codeSystemName | st      | 0 ... 1  |   |  |             |
| └─ @displayName    | st      | 0 ... 1  |   |  |             |
| └─ ips:designation | ST      | 0 ... *  |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @language       | cs      | 1 ... 1  | R |  |             |
| └─ hl7:title       | ST      | 1 ... 1  | M |  | (atc...ert) |
|                    | CONF    | Elementinhalt muss "Auszüge aus erhobene Daten" sein |   |  |             |
| └─ hl7:text        | SD.TEXT | 0 ... 1  |   |  | (atc...ert) |
| └─ hl7:author      |         | 0 ... 1  | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ hl7:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst). Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ hl7:entry             |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.92 <i>BodySubSection - unkodiert - generisch</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

### 12.4.3.6 Erhobene Daten - kodiert

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:15:27<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪ <input type="radio"/> atcdabbr_section_ErhobeneDatenKo-<br>diert vom 2018-07-18 15:54:47 |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_section_ErhobeneDatenKodiert   | <b>Bezeichnung</b>    | Erhobene Daten - kodiert   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                       |  |
| <p>Beinhaltet alle Messungen an dem Patienten wie die vordefinierten Vitalparameter, die Medikationseinnahme und alle weiteren Ergebnisse. Diese werden als Sektionen innerhalb dieser Sektion geführt. Dabei sind die Sektionen Vitalparameter und Ergebnisse als Platzhalter für ihre jeweiligen Sektionen zu sehen, die natürlich auch entfallen können. Im folgenden Beispiel sind "Blutdruck und Puls" und "Gewicht" Vitalparameter. Die Untersektionen "Wohlbefinden", "Schritte", "Aktivitäten" und "Blutzucker" sind Ergebnisse. Das für die Messung jeweils verwendete Gerät wird unter "Verwendete Geräte" dokumentiert.</p> <p>Beispiel:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Behandlungsgrund</li> <li>* Diagnosen</li> <li>* Zusammenfassung der Behandlung</li> <li>* Auszüge aus erhobenen Daten</li> <li>* Erhobene Daten <ul style="list-style-type: none"> <li>- Blutdruck und Puls</li> <li>- Gewicht</li> <li>- Wohlbefinden</li> <li>- Schritte</li> <li>- Aktivitäten</li> <li>- Blutzucker</li> <li>- Überwachte Medikamente</li> <li>- Dokumentierte Einnahme</li> </ul> </li> <li>* Verwendeten Geräte</li> <li>* Beilagen</li> </ul> |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81                        |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Section level template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 8 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 | Containment |  Vitalparameter - kodiert (1.1.0+20210219)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 | Containment |  Messergebnisse - kodiert (1.0.1+20210901)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 | Containment |  Medikationsliste PS - kodiert (1.0.0+20210219)    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 | Containment |  Dokumentierte Einnahme - kodiert (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                      | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81 *Erhobene Daten - kodiert* (2018-07-18 15:54:47) ref elgatgd-

Beispiel

Beispiel

```
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.81"/>
    <code code="423100009" displayName="Results section (record artifact)" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>
    <title>Erhobene Daten</title>

    ::

  </section>
</component>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                           | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:section           |        |         |      |  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                                |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN                                    |             |
| └ hl7:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Erhobene Daten - kodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.81                |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion              | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 423100009                              |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.96                 |             |
| └ @codeSystemName     | st     | 0 ... 1 | F    | SNOMED CT                              |             |
| └ @displayName        | st     | 0 ... 1 | F    | Results section (record artifact)      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |         |  |   |  |             |
|--------------------|---------|--|---|--|-------------|
| └─ hl7:translation | CD      | 0 ... *                                  |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @code           | cs      | 1 ... 1                                  | R |  |             |
| └─ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1                                  | R |  |             |
| └─ @codeSystemName | st      | 0 ... 1                                  |   |  |             |
| └─ @displayName    | st      | 0 ... 1                                  |   |  |             |
| └─ ips:designation | ST      | 0 ... *                                  |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...ert) |
| └─ @language       | cs      | 1 ... 1                                  | R |  |             |
| └─ hl7:title       | ST      | 1 ... 1                                  | M |  | (atc...ert) |
|                    | CONF    | Elementinhalt muss "Erhobene Daten" sein |   |  |             |
| └─ hl7:text        | SD.TEXT | 0 ... 1                                  |   |  | (atc...ert) |
| └─ hl7:author      |         | 0 ... 1                                  | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |    |         |   |   |             |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst). Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ h17:entry             |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
| Auswahl                 |    | 1 ... * |   | <p>Es muss mindestens einer der folgenden Subsektionen verwendet werden.<br/>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 <i>Vitalparameter - kodiert</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 <i>Messergebnisse - kodiert</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 <i>Medikationsliste PS - kodiert</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 <i>Dokumentierte Einnahme - kodiert</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ h17:component         |    | 0 ... * | R | Vitalparameter Subsektion, Titel benannt nach dem Inhalt<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 <i>Vitalparameter - kodiert</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | bl | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:component         |    | 0 ... * | R | Ergebnisse Subsektion, Titel benannt nach dem Inhalt<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 <i>Messergebnisse - kodiert</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |            |   |   |   |             |
|-------------------------|--|------------|---|---|---|-------------|
| └ @typeCode             |  | cs         | 0 ... 1   | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl         | 0 ... 1   | F | true  |             |
| └ h17:component         |  |            | 0 ... 1   | C | Überwachte Medikamente, kann nur gemeinsam mit der Sektion "Dokumentierte Einnahme" bestehen.<br>Die Sektion der Medikationsliste ist hier wiederverwendet worden. Es muss in dieser Sektion nicht die Vorgabe erfüllt werden, eine vollständige über die Behandlung herausgehende Medikationsliste zu führen. Es sollen mindestens alle für die Behandlung relevanten Medikamente hier dokumentiert werden.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 <i>Medikationsliste PS - kodiert</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ @typeCode             |  | cs         | 0 ... 1   | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl         | 0 ... 1   | F | true  |             |
|                         |  | Constraint | Der Titel des Sektion muss "Überwachte Medikamente" sein!<br>Diese Sektion muss vorhanden sein wenn die Sektion "Dokumentierte Einnahme" vorhanden ist! |   |   |             |
| └ h17:component         |  |            | 0 ... 1   | C | Dokumentierte Einnahme, kann nur gemeinsam mit der Sektion "Überwachte Medikamente" bestehen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 <i>Dokumentierte Einnahme - kodiert</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             |  | cs         | 0 ... 1   | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | bl         | 0 ... 1   | F | true  |             |
|                         |  | Constraint | Diese Sektion muss vorhanden sein wenn die Sektion "Überwachte Medikamente" vorhanden ist!  |   |   |             |
| └ h17:component         |  |            | 0 ... *   | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |

|   |    |           |      |
|---|----|-----------|------|
|  @typeCode             | cs | 0 ... 1 F | COMP |
|  @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 F | true |

#### 12.4.3.6.1 Vitalparameter - kodiert

|                          |   |                                      |  |
|--------------------------|---|--------------------------------------|--|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 <div>ref at-cda-bbr-</div>                            | <b>Gültigkeit</b>                    | 2021-02-19 12:03:03<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabrr_section_VitalparameterKodiert vom 2020-10-06 09:16:17</li><li><input type="radio"/> atcdabrr_section_VitalparameterKodiert vom 2019-07-19 13:48:27</li></ul> |
| <b>Status</b>            | <div><div></div>Aktiv</div>   | <b>Versions-Label</b>                | 1.1.0+20210219   |
| <b>Name</b>              | atcdabrr_section_VitalparameterKodiert  | <b>Bezeichnung</b>                   | Vitalparameter - kodiert   |
| <b>Beschreibung</b>      | Informationen zu den Vitalparametern (Körpertemperatur, Puls, Blutdruck ...). |                                      |  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46              |                                      |  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template  |                                      |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                            |                                      |  |
| <b>Assoziiert mit</b>    | Assoziiert mit 1 Konzept  |                                      |  |
|                          | <b>Id</b>   | <b>Name</b>                          | <b>Datensatz</b>   |
|                          | at-cda-bbr-dataelement-61   | <div><div></div>Vitalparameter</div> | <div><div></div>Dataset A 2019</div>   |









1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Beziehung

Benutzt 5 Templates

| Benutzt                 | als         | Name   | Version |
|-------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                 | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 | Containment |  Vitalparameter Gruppe Entry (1.1.0+20210219) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                 | DYNAMIC |

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 *Vitalparameter - kodiert* (2020-10-06 09:16:17)  ref at-cda-bbr-  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46 *Vitalparameter - kodiert* (2019-07-19 13:48:27)  ref at-cda-bbr-  
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.16 *Vital signs section* (DYNAMIC)  ref ccd1-  
Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25 *IHE Vital Signs Section* (DYNAMIC)  ref IHE-PCC-  
Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2 *eHDSI Vital Signs* (DYNAMIC)  ref epsos-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```
<section>
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.46"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.16"/>
  <!-- HL7 CCD -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25"/>
  <!-- IHE PCC -->
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2"/>
  <!-- IHE PCC -->
  <!-- Code der Sektion -->
  <code code="8716-3" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
  <!-- Titel der Sektion -->
  <title>Vitalparameter</title>
  <!-- Textbereich der Sektion -->
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Name</th>
          <th>Wert</th>
          <th>Einheit</th>
          <th>Messzeitpunkt</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr ID="vitsig-1">
          <td ID="vitsigtype-1">Puls</td>
          <td>120</td>
          <td>/min</td>
          <td>27.06.2019 19:43</td>
        </tr>
        <tr ID="vitsig-2">
          <td ID="vitsigtype-2">Blutdruck systolisch</td>
          <td>180</td>
          <td>mmHg</td>
          <td>27.06.2019 19:43</td>
        </tr>
        <tr ID="vitsig-3">
          <td ID="vitsigtype-3">Blutdruck diastolisch</td>
          <td>120</td>
          <td>mmHg</td>
          <td>27.06.2019 19:43</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <entry>
    <!-- ELGA VitalparameterGruppe-Entry -->
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.23"/>
  </entry>
</section>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item  | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                             | Label       |
|---|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:section   |     |         |      | Container zur Angabe der Vitalparameter. | (atc...ert) |
| <div><div> at-cda-bbr-dataelement-61</div><div> Vitalparameter</div><div> Dataset A 2019</div></div> |     |         |      |  |             |
| └ @classCode  | cs  | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                                  |             |
| └ @moodCode   | cs  | 0 ... 1 | F    | EVN                                      |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Vitalparameter - kodiert   | (atc...ert) |
| └ @root   | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46                  |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 CCD Vital signs section              | (atc...ert) |
| └ @root   | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.16             |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PCC Vital Signs Section              | (atc...ert) |
| └ @root   | uid | 1 ... 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.3.25           |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PCC Section Coded Vital Signs        | (atc...ert) |

└ @root uid 1 ... 1 F 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.1.5.3.2

|                       |            |   |   |  |             |
|-----------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ hl7:id              | II         | 0 ... 1   |   | Eindeutige ID der Sektion  | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |   |  |             |
| └ hl7:code            | CE.IPS     | 1 ... 1   | M | Code der Sektion.  | (atc...ert) |
| └ @code               | CONF       | 1 ... 1   | F | 8716-3   |             |
| └ @codeSystem         |            | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC)  |             |
| └ hl7:title           | ST         | 1 ... 1   | M | Der Titel der Sektion.   | (atc...ert) |
|                       | Constraint | Der Titel der Sektion MUSS lauten: "Vitalparameter"<br>Ausnahme: Für die Sektion in einem Telemonitoring Episodenbericht, ein CDA mit der Document-Level TemplateID 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10, sind andere Titel möglich. Diese MÜSSEN den Typ des Inhalts beschreiben, wie z.B.: "Bludruck und Puls" oder "Gewicht". |   |  |             |
| └ hl7:text            | SD.TEXT    | 1 ... 1   | M | Information für den menschlichen Leser.<br>Die Vorgaben und Empfehlungen zur Gestaltung dieses Bereichs im Falle von CDA Level 3 sind zu beachten! | (atc...ert) |
| └ hl7:author          |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ hl7:informant       |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ hl7:entry           |            | 1 ... *   | M | Maschinenlesbares Element.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 <i>Vitalparameter Gruppe Entry</i> (DYNAMIC)                                      | (atc...ert) |






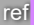

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |    |         |   |  |             |
|-------------------------|--|----|---------|---|--|-------------|
| └ @typeCode             |  | CS | 0 ... 1 | F | DRIV   |             |
| └ @contextConductionInd |  | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:entry             |  |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             |  | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd |  | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:component         |  |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des text-Elements in andere Sprachen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ @typeCode             |  | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd |  | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |

12.4.3.6.2 Messergebnisse - kodiert

|        |  |  |                |  |  |
|--------|--|--|----------------|--|--|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95                | Gültigkeit     |  | 2021-09-01 10:24:02<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_section_MessergebnisseKodiert vom 2021-02-18 13:16:02</li><li>atcdabbr_section_MessergebnisseKodiert vom 2018-07-18 15:50:15</li></ul> |
| Status |  | 🟡 Entwurf                              | Versions-Label |  | 1.0.1+20210901   |
| Name   |  | atcdabbr_section_MessergebnisseKodiert | Bezeichnung    |  | Messergebnisse - kodiert   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |             |   |
|-------------------|--|-------------|---|
| Beschreibung      | Alle anderen Messungen die nicht in der Medikationseinnahme oder als Vitalparameter gelistet sind. Die Messungen werden analog zu den Vitalparametern vollstrukturiert angegeben.  |             |   |
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95   |             |   |
| Klassifikation    | CDA Section level template   |             |   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |             |   |
| Benutzt           | Benutzt 5 Templates  |             |   |
|                   | Benutzt  | als         | NameVersion   |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)DYNAMIC                 |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)DYNAMIC                |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70  | Containment |  Messergebnisse Gruppe Entry (1.1.0+20210218)DYNAMIC |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19  | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)DYNAMIC  |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8   | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)DYNAMIC                 |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 <i>Messergebnisse - kodiert</i> (2021-02-18 13:16:02) <br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95 <i>Messergebnisse - kodiert</i> (2018-07-18 15:50:15)  |             |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel

```

<component>
  <section>
    <!-- HL7 Austria - Messergebnisse - kodiert -->
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.95"/>
    <!-- C-CDA Results Section -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.2.3.1" extension="2015-08-01"/>
    <!-- PHMR Results Section -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.15" extension="2015-11-19"/>
    <code code="30954-2" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="Results Section"/>
    <title>Wohlbefinden</title>
    <text>

Eingegeben auf einem Smartphone mit den Möglichkeiten: Gut, Mittel, Schlecht
    <br/>
    <br/>
    <table border="1" width="100%">
      <thead>
        <tr>
          <th>Datum/Zeit</th>
          <th ID="resultstype1">Wohlbefinden</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr ID="resultswellbeeing1">
          <td>2015-10-28 08:44:47</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr ID="resultswellbeeing2">
          <td>2015-10-27 07:49:13</td>
          <td>Mittel</td>
        </tr>
        <tr ID="resultswellbeeing3">
          <td>2015-10-26 16:28:44</td>
          <td>Schlecht</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2015-10-23 07:41:26</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2015-10-22 09:05:04</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2015-10-21 08:23:57</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2015-10-20 09:23:06</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>2015-10-19 09:51:30</td>
          <td>Gut</td>
        </tr>
        <tr>

```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
<td>2015-10-18 16:35:29</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-16 07:52:36</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-15 10:26:19</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-14 08:58:27</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-13 20:09:23</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-12 09:49:01</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-11 16:47:46</td>
<td>Mittel</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-09 08:12:20</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-08 09:15:54</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-07 08:38:15</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-06 08:50:57</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-05 10:22:44</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-04 17:09:00</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-02 08:24:17</td>
<td>Gut</td>
</tr>
<tr>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
        <td>2015-10-01 09:12:26</td>  
        <td>Gut</td>  
      </tr>  
    </tbody>  
  </table>  
</text>  
  
  ::  
  
  </section>  
</component>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25





| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                           | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:section      |     |         |      | Container zur Angabe der Ergebnisse.   | (atc...ert) |
| └ @classCode     | cs  | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                                |             |
| └ @moodCode      | cs  | 0 ... 1 | F    | EVN                                    |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Messergebnisse - kodiert | (atc...ert) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.95                |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | C-CDA Results Section                  | (atc...ert) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.22.2.3.1       |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-01                             |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHMR Results Section                   | (atc...ert) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.15          |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-11-19                             |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25




|                       |     |         |   |   |             |
|-----------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:id              | II  | 0 ... 1 |   | Eindeutige ID der Sektion   | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |     |         |   |   |             |
| └ h17:code            | CE  | 1 ... 1 | M |   | (atc...ert) |
| └ @code               | cs  | 1 ... 1 | F | 30954-2   |             |
| └ @codeSystem         | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.1   |             |
| └ @codeSystemName     | st  | 0 ... 1 | F | LOINC   |             |
| └ @displayName        | st  | 0 ... 1 | F | Results Section   |             |
| └ h17:translation     | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ert) |
| └ @code               | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem         | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ ips:designation     | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ert) |
| └ @language           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |            |  |   |  |             |
|-----------------------|------------|--|---|--|-------------|
| h17:title             | ST         | 1 ... 1  | M |  | (atc...ert) |
|                       | Constraint | Der Titel muss je nach Inhalt gewählt werden. z.B. "Wohlbefinden", "Blutzucker", "Schritte", "Aktivitäten", usw. |   |  |             |
| h17:text              | SD.TEXT    | 1 ... 1  | M | Information für den menschlichen Leser.<br>Die Vorgaben und Empfehlungen zur Gestaltung dieses Bereichs im Falle von CDA Level 3 sind zu beachten!   | (atc...ert) |
| h17:author            |            | 0 ... 1  | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| h17:informant         |            | 0 ... *  | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst).<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| h17:entry             |            | 1 ... *  | M | Maschinenlesbares Element.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70 <i>Messergebnisse Gruppe Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| @typeCode             | cs         | 1 ... 1  | F | DRIV   |             |
|                       |            |  |   | DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt.  |             |
| @contextConductionInd | cs         | 0 ... 1  | F | true   |             |
| h17:entry             |            | 0 ... *  | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| @typeCode             | cs         | 0 ... 1  | F | COMP   |             |

|   |                       |    |         |   |  |             |
|---|-----------------------|----|---------|---|--|-------------|
|  | @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
|  | hl7:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
|  | @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|  | @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

#### 12.4.3.6.3 Überwachte Medikamente - kodiert

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63  at-cda-bbr- | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-19 11:50:29<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪  atcdabbr_section_MedikationslistePSKo-<br>diert vom 2019-11-27 13:35:37 |
| <b>Status</b> |  Aktiv                               | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210219  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_MedikationslistePSKodiert  | <b>Bezeichnung</b>    | Medikationsliste PS - kodiert   |

#### Beschreibung

Die Medikationsliste enthält eine Zusammenfassung alle relevanten Informationen aus den „Verordnungen“, „Abgaben“ und „pharmazeutischen Empfehlungen“ der letzten 12 Monate.







Sie entspricht einer aggregierten Medikationsliste der ELGA e-Medikation mit den Daten über Medikament, Dosierung, Dauermedikation, Einnahmezeitraum. Abgesetzte Medikamente sind nicht enthalten, diese Information kann aus der vollständigen Medikationsliste der e-Medikation entnommen werden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template                                       |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 6 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1  | Containment |  Medikation Verordnung Entry eMedikation     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1  | Containment |  Medikation Abgabe Entry eMedikation         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 | Containment |  Medication Statement Entry (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63 *Medikationsliste PS - kodiert* (2019-11-27 13:35:37) [ref at-cda-bbr-](#)  
Adaptation: Template 1.2.40.0.34.11.8.3.2.1 (2017-08-31 14:20:20) [ref ?](#)

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<hl7:section classCode="DOCSECT" moodCode="EVN">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.63"/>
  <hl7:id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
  <hl7:code code="10160-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"/>
  <hl7:title>Medikationsliste</hl7:title>
  <hl7:text/>
  <hl7:author>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 'Author Body' (2019-11-20T12:13:04) -->
  </hl7:author>
  <hl7:informant>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 'Informant Body' (2019-02-07T13:29:32) -->
  </hl7:informant>
  <!-- choice: 1..*
element hl7:entry containing template 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 (dynamic)
element hl7:entry containing template 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1 (dynamic)
element hl7:entry containing template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 (dynamic)
-->
</hl7:section>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung                  | Label       |
|-----------------------|------|---------|------|-------------------------------|-------------|
| h17:section           |      |         |      |                               | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs   | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                       |             |
| └ @moodCode           | cs   | 0 ... 1 | F    | EVN                           |             |
| └ h17:templateId      | II   | 1 ... 1 | M    |                               | (atc...ert) |
| └ @root               | uid  | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.63       |             |
| └ h17:id              | II   | 0 ... 1 | R    | Eindeutige ID der Sektion     | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |      |         |      |                               |             |
| └ h17:code            | CE   | 1 ... 1 | M    |                               | (atc...ert) |
| └ @code               | CONF | 1 ... 1 | F    | 10160-0                       |             |
| └ @codeSystem         |      | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1 (LOINC) |             |
| └ h17:title           | ST   | 1 ... 1 | M    |                               | (atc...ert) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

CONF

Elementinhalt muss "Medikationsliste" sein  
-oder-  
Elementinhalt muss "Aktuelle Medikation" sein  
-oder-  
Elementinhalt muss "Überwachte Medikamente" sein

|                 |    |         |   |   |             |
|-----------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:text      | ED | 1 ... 1 | M | Information für den menschlichen Leser.   | (atc...ert) |
| └ h17:author    |    | 0 ... * | R | Author der enthaltenen Information (GDA)<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ h17:informant |    | 0 ... * | R | Quelle für die enthaltene Information<br>Name der Person und ihre Beziehung zum Patienten (Patient oder Angehöriger, Auskunftsperson - nicht-GDA)<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| Auswahl         |    | 1 ... * |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:entry welches enthält Template 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 <i>Medikation Verordnung Entry eMedikation</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:entry welches enthält Template 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1 <i>Medikation Abgabe Entry eMedikation</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:entry welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 <i>Medication Statement Entry</i> (DYNAMIC)</li></ul> |             |
| └ h17:entry     |    | 0 ... * |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 <i>Medikation Verordnung Entry eMedikation</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |






└ @typeCode cs 1 ... 1 F

DRIV

DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt.

|                         |    |         |   |   |             |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:entry             |    | 0 ... * |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1 <i>Medikation Abgabe Entry eMedikation</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | CS | 1 ... 1 | F | DRIV  |             |
|                         |    |         |   | DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt. |             |
| └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:entry             |    | 0 ... * |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.50 <i>Medication Statement Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | CS | 1 ... 1 | F | DRIV  |             |
|                         |    |         |   | DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt. |             |
| └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |

#### 12.4.3.6.4 Dokumentierte Einnahme - kodiert

|                          |  |   |  |
|--------------------------|--|---|--|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 <small>ref at-cda-bbr-</small>   | <b>Gültigkeit</b>   | 2021-02-19 11:44:16<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪ <input type="radio"/> atcdabbr_section_DokumentierteEinnahmeKo-<br>diert vom 2020-07-29 11:56:01 |
| <b>Status</b>            |  Aktiv  | <b>Versions-Label</b>   | 1.0.0+20210219   |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_section_DokumentierteEinnahmeKodiert  | <b>Bezeichnung</b>  | Dokumentierte Einnahme - kodiert   |
| <b>Beschreibung</b>      | Die dokumentierte Einnahme der Medikamente wird in diesem Element gespeichert.   |   |  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94   |   |  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Section level template   |   |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |   |  |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 4 Templates  |   |  |
|                          | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>  |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment   | Author Body (1.0.0+20210219)   |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment   | Informant Body (2.0.0+202109)  |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72  | Containment   | Medikationseinnahme Entry (1.1.0+20210219)   |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8   | Containment  | Übersetzung (1.0.1+20210628)   |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94 <i>Dokumentierte Einnahme - kodiert</i> (2020-07-29 11:56:01) <small>ref at-cda-bbr-</small> |   |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel

```

<!-- Dokumentierte Einnahme
Die dokumentierte Einnahme der überwachten Medikamente wird in diesem Element gespeichert. -->
<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.94"/>
    <!-- IHE PHARM Medication Administration Section-->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.4"/>
    <!-- Code der Sektion -->
    <code code="87232-5" displayName="Medication administration.brief" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC"/>
    <!-- Titel der Sektion -->
    <title>Dokumentierte Einnahme</title>
    <!-- Textbereich der Sektion -->
    <text>
      <table border="1" width="100%">
        <thead>
          <tr>
            <th styleCode="xELGA_colw:15">Datum/Zeit</th>
            <th styleCode="xELGA_colw:55">Medikament</th>
            <th styleCode="xELGA_colw:10">Eingenommen</th>
            <th styleCode="xELGA_colw:20">Notiz</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td>2015-10-01</td>
            <td>
              <content styleCode="Bold">CONCOR Cor2 5 mg - Filmtabletten, BETA-BLOCKER</content>
            </td>
            <td>JA</td>
            <td/>
          </tr>
          <tr>
            <td>2015-10-01</td>
            <td>
              <content styleCode="Bold">TORASEMID \Hexal\ 20 mg - Tabletten, DIURETIKA</content>
            </td>
            <td>JA</td>
            <td/>
          </tr>
          <tr>
            <td>2015-10-01</td>
            <td>
              <content styleCode="Bold">DIOVAN - Filmtabletten80 mg, ANTIHYPERTONIKA</content>
            </td>
            <td>JA</td>
            <td/>
          </tr>
          <tr>
            <td>2015-10-01</td>
            <td>
              <content styleCode="Bold">SPIROBENE50 mg - Tabletten, DIURETIKA</content>
            </td>
            <td>JA</td>
            <td/>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>
  </section>
</component>

```

```

        <td>2015-10-02</td>
        <td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
        <td>JA (Alle)</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>2015-10-04</td>
        <td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
        <td>JA (Alle)</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>2015-10-05</td>
        <td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
        <td>JA (Alle)</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr ID="medintake17">
        <td>2015-10-06</td>
        <td>
            <content styleCode="Bold">CONCOR Cor2 5 mg - Filmtabletten, BETA-BLOCKER</content>
        </td>
        <td>NEIN</td>
        <td ID="medintake17comment">zu starke Nebenwirkungen wie Körperschwäche und Schlafstörungen, halbe Dosis wurde vom Pati-
enten weitergenommen</td>
    </tr>
    <tr ID="medintake18">
        <td>2015-10-06</td>
        <td>
            <content styleCode="Bold">TORASEMID \Hexal\ 20 mg - Tabletten, DIURETIKA</content>
        </td>
        <td>JA</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr ID="medintake19">
        <td>2015-10-06</td>
        <td>
            <content styleCode="Bold">DIOVAN - Filmtabletten 80 mg, ANTIHYPERTONIKA</content>
        </td>
        <td>JA</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr ID="medintake20">
        <td>2015-10-06</td>
        <td>
            <content styleCode="Bold">SPIROBENE 50 mg - Tabletten, DIURETIKA</content>
        </td>
        <td>JA</td>
        <td/>
    </tr>
    <tr>
        <td>2015-10-07</td>
        <td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
        <td>JA/NEIN (Gemischt)</td>
        <td/>
    </tr>

```

```
|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2015-10-08 | Medikamente und Einnahme wie davor angegeben | JA/NEIN (Gemischt) |
| 2015-10-09 | Medikamente und Einnahme wie davor angegeben | JA/NEIN (Gemischt) |
| 2015-10-11 | Medikamente und Einnahme wie davor angegeben | JA/NEIN (Gemischt) |
| 2015-10-12 | Medikamente und Einnahme wie davor angegeben | JA/NEIN (Gemischt) |
| 2015-10-13 | TORASEMID \Hexal\ 20 mg - Tabletten, DIURETIKA | JA |
| 2015-10-13 | DIOVAN - Filmtabletten 80 mg, ANTIHYPERTONIKA | JA |
| 2015-10-13 | SPIROBENE 50 mg - Tabletten, DIURETIKA | JA |
| 2015-10-14 | Medikamente und Einnahme wie davor angegeben | JA (alle) |
| 2015-10-15 |  |  |

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-16</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-18</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-19</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-20</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-21</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-22</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-23</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-26</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
<td/>
</tr>
<tr>
<td>2015-10-27</td>
<td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
<td>JA (alle)</td>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
        <td/>
      </tr>
      <tr>
        <td>2015-10-28</td>
        <td>Medikamente und Einnahme wie davor angegeben</td>
        <td>JA (alle)</td>
      <td/>
    </tr>
  </tbody>
</table>
</text>

::
</section>
</component>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25








| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                                   | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| h17:section           |        |         |      |  | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | DOCSECT  |             |
| └ @moodCode           | cs     | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ h17:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Dokumentierte Einnahme - kodiert | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.94                        |             |
| └ h17:templateId      | II     | 1 ... 1 | M    | IHE PHARM Medication Administration Section    | (atc...ert) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.2.4                    |             |
| └ h17:id              | II     | 0 ... 1 | R    | Eindeutige ID der Sektion                      | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |
| └ h17:code            | CE.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs     | 1 ... 1 | F    | 87232-5  |             |
| └ @codeSystem         | uid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.1                          |             |

|                   |         |         |   |   |             |
|-------------------|---------|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName | st      | 0 ... 1 | F | LOINC   |             |
| └ @displayName    | st      | 0 ... 1 | F | Medication administration.brief   |             |
| └ hl7:translation | CD      | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ert) |
| └ @code           | cs      | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st      | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st      | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST      | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ert) |
| └ @language       | cs      | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:title       | ST      | 1 ... 1 | M |   | (atc...ert) |
|                   | CONF    |         |   | Elementinhalt muss "Dokumentierte Einnahme" sein  |             |
| └ hl7:text        | SD.TEXT | 1 ... 1 | M | Information für den menschlichen Leser.<br>Siehe auch „Empfehlung zur Gestaltung im Falle von CDA Level 3“.           | (atc...ert) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:author            |    | 0 ... 1 | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ h17:informant         |    | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst).<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ h17:entry             |    | 1 ... * | M | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72 <i>Medikationseinnahme Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F | DRIV   |             |
|                         |    |         |   | DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt.  |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ h17:component         |    | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

### 12.4.3.7 Verwendete Geräte

|   |  |   |   |
|---|--|---|---|
| <b>Id</b>   | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82  | <b>Gültigkeit</b>   | 2021-02-18 13:16:30<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪  atcdabbr_section_VerwendeteGeraeteKodiert vom 2020-03-30 08:30:13 |
| <b>Status</b>   |  Aktiv                                      | <b>Versions-Label</b>   | 1.0.0+20210218  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_section_VerwendeteGeraeteKodiert  | <b>Bezeichnung</b>  | Verwendete Geräte - kodiert   |
| <b>Beschreibung</b>   |  |   |   |
| Die Geräte die für die Messungen von Vitalparametern und weiteren Ergebnissen herbeigezogen wurden, werden in dieser Sektion dokumentiert. Die verschiedenen Eigenschaften des Geräts sind, wie in den "medical devices" Entrys des HL7 PHMRs vorgegeben, maschinenlesbar codiert. Eine eindeutige Bezeichnung des Gerätes ist mindestens anzugeben, alle weiteren Eigenschaften wie Hersteller, Seriennummer, Firmware des Gerätes usw. sind optional. |  |   |   |
| <b>Kontext</b>  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82   |   |   |
| <b>Klassifikation</b>   | CDA Section level template   |   |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>  | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |   |   |
| <b>Benutzt</b>  | <b>Benutzt 5 Templates</b>   |   |   |
|   | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>   |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment   | Author Body (1.0.0+20210219)  |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment  | Informant Body (2.0.0+202109)   |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19  | Containment  | Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628)   |
|   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73  | Containment  | Device Information Organizer (1.1.1+20210831)   |
| <b>Beziehung</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8   | Containment  | Übersetzung (1.0.1+20210628)  |
|   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82 <i>Verwendete Geräte - kodiert</i> (2020-03-30 08:30:13) <span>ref elgatgd-</span> |   |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```

<component>
  <section>
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.82"/>
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.1" extension="2015-08-17"/>
    <code code="46264-8" displayName="History of medical device use" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="2.16.840.1.113883.6.1"/>
    <title>Verwendete Geräte</title>
    <text>
      <table border="1" width="100%">
        <thead>
          <tr>
            <th>System Typ</th>
            <th>Hersteller</th>
            <th>Modellnummer</th>
            <th>Seriennummer</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody>
          <tr>
            <td ID="device1type">Blutdruck-Messgeraet</td>
            <td ID="device1manufactName">A/D Medical</td>
            <td ID="device1modelNumber">UA-767NFC</td>
            <td ID="device1serialNumber">51204 00454</td>
          </tr>
          <tr>
            <td ID="device2type">Waage</td>
            <td ID="device2manufactName">Wahoo Fitness</td>
            <td ID="device2modelNumber">WFBTSscalev1</td>
            <td ID="device2serialNumber">40355 42306255</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Fitness Tracker</td>
            <td>Polar</td>
            <td>loop-90047656</td>
            <td>73539 012302</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Fitness Tracker</td>
            <td>Garmin</td>
            <td>vivofit</td>
            <td>3F7019550</td>
          </tr>
          <tr>
            <td>Blutzuckermesser</td>
            <td>Aktivmed</td>
            <td>GlucocCheckXL</td>
            <td>12231 23128829</td>
          </tr>
        </tbody>
      </table>
    </text>

  ::

</section>

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |              |
|--|--------------|
|  |              |
|  | </component> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                                 | Label       |
|-----------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:section           |     |         |      | Container zur Angabe der verwendeten Geräte. | (atc...ert) |
| └ @classCode          | cs  | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                                      |             |
| └ @moodCode           | cs  | 0 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId      | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Verwendete Geräte - kodiert    | (atc...ert) |
| └ @root               | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.82                      |             |
| └ hl7:templateId      | II  | 1 ... 1 | M    | PHMR Medical Equipment Section               | (atc...ert) |
| └ @root               | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.1                 |             |
| └ @extension          | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17                                   |             |
| └ hl7:id              | II  | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Sektion                    | (atc...ert) |
| wo [not(@nullFlavor)] |     |         |      |  |             |
| └ hl7:code            | CE  | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ert) |
| └ @code               | cs  | 1 ... 1 | F    | 46264-8                                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25


|  |                   |      |   |                       |   |
|--|-------------------|------|---|-----------------------|---|
|  |                   |      |   | 2.16.840.1.113883.6.1 |   |
|  | └ @codeSystem     | uid  | 1 ... 1                                     | F                     |   |
|  |                   |      |   |                       | LOINC   |
|  | └ @codeSystemName | st   | 0 ... 1                                     | F                     |   |
|  |                   |      |   |                       | History of medical device use   |
|  | └ @displayName    | st   | 0 ... 1                                     | F                     |   |
|  | └ hl7:translation | CD   | 0 ... *                                     |                       | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. (atc...ert) |
|  | └ @code           | cs   | 1 ... 1                                     | R                     |   |
|  | └ @codeSystem     | uid  | 1 ... 1                                     | R                     |   |
|  | └ @codeSystemName | st   | 0 ... 1                                     |                       |   |
|  | └ @displayName    | st   | 0 ... 1                                     |                       |   |
|  | └ ips:designation | ST   | 0 ... *                                     |                       | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. (atc...ert)                               |
|  | └ @language       | cs   | 1 ... 1                                     | R                     |   |
|  | └ hl7:title       | ST   | 1 ... 1                                     | M                     | (atc...ert)   |
|  |                   | CONF | Elementinhalt muss "Verwendete Geräte" sein |                       |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |         |         |   |  |             |
|-------------------------|---------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text              | SD.TEXT | 1 ... 1 | M | Information für den menschlichen Leser.<br><br>Die Vorgaben und Empfehlungen zur Gestaltung dieses Bereichs im Falle von CDA Level 3 sind zu beachten!   | (atc...ert) |
| └ h17:author            |         | 0 ... 1 | R | Verfasser dieses Eintrags. Mit der Angabe des Autors kann die Qualität des Eintrags - automatisch durch ein Gerät oder manuell durch eine Person - zum Ausdruck gebracht werden. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.author .<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...ert) |
| └ h17:informant         |         | 0 ... * | R | Quelle der Information. Person, auf deren Angabe die Information beruht: der Patient selbst oder eine dem Patienten verwandte oder bekannte Person. Kann entfallen wenn gleich mit ClinicalDocument.recordTarget (der Patient selbst).<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ h17:entry             |         | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs      | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd | cs      | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ h17:entry             |         | 1 ... * | R | Es muss bei Verwendung der Sektion mindestens ein maschinenlesbares Element existieren, welches Details zum verwendeten Gerät abspeichern kann.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 <i>Device Information Organizer</i> (DYNAMIC)  | (atc...ert) |
| └ @typeCode             | cs      | 1 ... 1 | F | DRIV   |             |
| └ @contextConductionInd | cs      | 0 ... 1 | F | DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt.<br><br>true  |             |
| └ h17:component         |         | 0 ... * | R | Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des <text> Elements<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 <i>Übersetzung</i> (DYNAMIC)   | (atc...ert) |

|   |                       |    |         |   |      |
|---|-----------------------|----|---------|---|------|
|  | @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP |
|  | @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

### 12.4.3.8 Beilagen

|        |   |                |   |
|--------|---|----------------|---|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71  | Gültigkeit     | 2021-06-28 11:22:40<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> atcdabbr_section_Beilagen vom 2021-02-19 11:43:44</li> <li> atcdabbr_section_Beilagen vom 2020-01-09 09:53:16</li> </ul> |
|        |   |                |   |
| Status |  Aktiv                   | Versions-Label | 1.0.1+20210628  |
| Name   | atcdabbr_section_Beilagen   | Bezeichnung    | Beilagen  |

#### Beschreibung

Sonstige Beilagen, außer denjenigen Dokumenten, die in „Willenserklärungen und andere juristische Dokumente“ angegeben sind.



**Achtung:** Da einzelne e-Befunde vom Bürger ausgeblendet oder gelöscht werden können, ist ein **Referenzieren bzw. Verweisen** auf andere e-Befunde nicht zuverlässig und daher **NICHT ERLAUBT**. Inhalte, die unmittelbar zum Befund gehören, sollen daher **als Beilage eingebettet** werden (siehe Kapitel „Beilagen“).

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 |
| Klassifikation    | CDA Section level template                                       |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25





Assoziiert mit

Assoziiert mit 1 Konzept

| Id                        | Name   | Datensatz  |
|---------------------------|--|--|
| at-cda-bbr-dataelement-58 |  Beilagen |  Dataset A 2019 |

Benutzt

Benutzt 4 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 | Containment |  Eingebettetes Objekt Entry (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8  | Containment |  Übersetzung (1.0.1+20210628)                | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 *Beilagen* (2021-02-19 11:43:44)    
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71 *Beilagen* (2020-01-09 09:53:16)  

## Beispiel

### Strukturbeispiel

```
<section>
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.2.71"/>
  <!-- Code der Section -->
  <code code="BEIL" displayName="Beilagen" codeSystem="1.2.40.0.34.5.40" codeSystemName="ELGA_Sections"/>
  <!-- Titel der Section -->
  <title>Beilagen</title>
  <!-- Textbereich der Section -->
  <text>
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th styleCode="xELGA_colw:1">Titel des Dokuments</th>
          <th styleCode="xELGA_colw:1">Erstellungsdatum</th>
          <th styleCode="xELGA_colw:1">Dokument</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Laborbefund</td>
          <td>05.11.2019</td>
          <td>
            <renderMultiMedia referencedObject="Beilage-1"/>
          </td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </text>
  <!-- Maschinenlesbare Elemente der Section -->
  <entry>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 'Eingebettetes Objekt Entry' (2019-05-29T11:59:07) -->
  </entry>
</section>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item   | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung                       | Label       |
|--|------|---------|------|------------------------------------|-------------|
| h17:section  |      |         |      | Container zur Angabe der Beilagen. | (atc...gen) |
| <div>  at-cda-bbr-dataelement-58            Beilagen            Dataset A 2019         </div> |      |         |      |                                    |             |
| └ @classCode   | cs   | 0 ... 1 | F    | DOCSECT                            |             |
| └ @moodCode  | cs   | 0 ... 1 | F    | EVN                                |             |
| └ h17:templateId   | II   | 1 ... 1 | M    |                                    | (atc...gen) |
| └ @root  | uid  | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.2.71            |             |
| └ h17:id   | II   | 0 ... 1 |      | Eindeutige ID der Section          | (atc...gen) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |      |         |      |                                    |             |
| └ h17:code   | CE   | 1 ... 1 | M    |                                    | (atc...gen) |
| └ @displayName   | st   | 0 ... 1 | F    | Beilagen                           |             |
| └ @codeSystemName  | st   | 0 ... 1 | F    | ELGA_Sections                      |             |
| └ @code  | CONF | 1 ... 1 | F    | BEIL                               |             |

└ @codeSystem

1 ... 1 F 1.2.40.0.34.5.40

└ hl7:title

ST

1 ... 1 M

(atc...gen)

CONF

Elementinhalt muss "Beilagen" sein

└ hl7:text

SD.TEXT

1 ... 1 M

Information für den menschlichen Leser.

Es SOLLEN der Titel des Dokuments, sowie das Erstellungsdatum angegeben werden.

(atc...gen)

└ hl7:author

0 ... \*

R

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 *Author Body* (DYNAMIC)

(atc...gen)

└ hl7:informant

0 ... \*

R

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 *Informant Body* (DYNAMIC)

(atc...gen)

└ hl7:entry

1 ... \*

M

Maschinenlesbares Element.

Die Beilagen MÜSSEN als maschinenlesbare Elemente angegeben werden.

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.19 *Eingebettetes Objekt Entry* (DYNAMIC)

(atc...gen)

└ @typeCode

cs

1 ... 1 F

DRIV

DRIV (is derived from) deutet an, dass der section.text aus den Level 3 Entries gerendert wurde und keinen medizinisch relevanten Inhalt enthält, der nicht aus den Entries stammt.

└ @contextConductionInd

cs

0 ... 1 F

true

└ hl7:component

0 ... \*

Optionale Subsections zur Angabe von Übersetzungen des text-Elements in andere Sprachen.

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.2.8 *Übersetzung* (DYNAMIC)


(atc...gen)



|   |    |         |   |      |
|---|----|---------|---|------|
|  @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP |
|  @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

## 12.4.4 Entry Level Template





### 12.4.4.1 Logo Entry

|                          |   |                       |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53  | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 11:08:49<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_Logo vom 2021-02-19 12:51:55</li> <li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_Logo vom 2020-01-09 12:00:13</li> </ul> |
| <b>Status</b>            |  Aktiv                   | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628  |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_entry_Logo   | <b>Bezeichnung</b>    | Logo Entry  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                       |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |
|-----------|--|
| Benutzt   |  |
|           |  |
|           |  |
|           |  |
| Beziehung |  |
|           |  |
|           |  |
| Beispiel  |  |
|           |  |
|           |  |

Benutzt 4 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 *Logo Entry* (2021-02-19 12:51:55) ref at-cda-bbr-  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53 *Logo Entry* (2020-01-09 12:00:13) ref at-cda-bbr-  
Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.2 *Logo Entry* (2011-12-19) ref elgabbr-

Strukturbeispiel

```
<entry>
  <observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- ELGA Logo-Entry -->
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.53"/>
    <value mediaType="image/jpeg" representation="B64"> JVBEi0xLjMKJcfsj6IKNSAwIG9iago8PC9MZW5ndGggNiAwIFIvRmlsdGVyI
C9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nMlaW28dtxFGnLfzK/ap3S0ihveLU AQYydprBSJcJICNvggu1TrSI4kN0H+bF76M/LQ4S7Jmd3DlY/kg6IO4NBDch
M5z5OHt+bjgTznIVGh7/o/84Xi0+PwjN+d3i54VhlnNjezltH6+a50sYJngj AuOu2Z5thB9n2gcZ55r2XjoEzBjuVq0Tbf8V5wAUhjvQqhNUJyZ4E2c8KZ90
e0opgNXrv2p40zBn/YAZU0HLR+cb3lnW Tbf8V5wAUhjvQqhNUJyZ4E2c8KZ : : : </value>
  </observationMedia>
</entry>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                 | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|----------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observationMedia |     |         |      |   | (atc...ogo) |
| └ @classCode         | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode          | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN   |             |
| └ hl7:templateId     | II  | 1 ... 1 | M    |   | (atc...ogo) |
| └ @root              | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.53   |             |
| └ hl7:value          | ED  | 1 ... 1 | M    | Das eingebettete Logo in einem Bildformat, unkomprimiert, Base64 codiert.<br>Maximale Abmessungen des Bildes: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Höhe: 80px</li> <li>▪ Breite: 270px</li> </ul> | (atc...ogo) |
| └ @mediaType         | st  | 1 ... 1 | R    | Medientyp des eingebetteten Objekts gemäß zugelassener Werteliste: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ image/png</li> <li>▪ image/jpeg</li> </ul>  |             |
| └ @representation    | cs  | 1 ... 1 | F    | B64   |             |
| └ hl7:performer      |     | 0 ... * | R    | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ogo) |
| └ hl7:author         |     | 0 ... * | R    | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ogo) |
| └ hl7:informant      |     | 0 ... * | R    | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...ogo) |

hl7:participant

0 ... \*

R

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 *Participant Body* (DYNAMIC)

(atc...ogo)

#### 12.4.4.2 Vitalparameter Gruppe Entry

Id

1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 ref at-cda-bbr-

Gültigkeit

2021-02-19 13:01:06

Andere Versionen mit dieser Id:

- ☐ atcdabbr\_entry\_VitalparameterGruppeEntry vom 2020-10-07 07:45:39
- ☐ atcdabbr\_entry\_VitalparameterGruppeEntry vom 2019-07-19 14:21:41

Status

 Aktiv

Versions-Label

1.1.0+20210219

Name

atcdabbr\_entry\_VitalparameterGruppeEntry

Bezeichnung

Vitalparameter Gruppe Entry

#### Beschreibung

Das **Vitalparameter Gruppe Entry** bündelt einzelne Vitalparameter-Beobachtungen.

Das **effectiveTime-Element** MUSS vorhanden sein, um anzuzeigen, wann die darunterliegenden Messungen durchgeführt wurden; es KANN aber weggelassen werden, wenn alle zugrunde liegenden Observations selbst ein effectiveTime-Element enthalten.

Kontext

Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23

Klassifikation

CDA Entry Level Template








Offen/Geschlossen

Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 7 Templates

| Benutzt                  | als         | Name  | Version |
|--------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15  | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                        | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13  | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628)                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24  | Containment |  Vitalparameter Entry (1.1.0+20210219)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 | Containment |  Serienmessung Vitalparameter Entry (1.1.1+20210303) | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 *Vitalparameter Gruppe Entry* (2020-10-07 07:45:39) [ref at-cda-bbr-](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23 *Vitalparameter Gruppe Entry* (2019-07-19 14:21:41) [ref at-cda-bbr-](#)  
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.26 *Vital Signs Organizer (V3)* (DYNAMIC) [ref ccda-](#)  
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.36.2 (DYNAMIC) [ref ?](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.3 *Vitalparameter Gruppe Entry* (DYNAMIC) [ref elgabbr-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
  <!-- ELGA -->
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.23"/>
  <!-- C-CDA Vital Signs Organizer -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.26" extension="2015-08-01"/>
  <!-- PHMR Vital Signs Organizer -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.2" extension="2015-11-19"/>
  <id root="" extension=""/>
  <code code="46680005" displayName="Vital signs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime>
    <low value="20170721131413"/>
  </effectiveTime>
  <component>
    <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
      <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.24"/>
    </observation>
  </component>
</organizer>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:organizer    |     |         |      |  | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | CLUSTER  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | ELGA<br>Die folgenden zwei TemplateIDs ersetzen die TemplateIDs "2.16.840.1.113883.10.20.1.32", "2.16.840.1.113883.10.20.1.35" und "1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.1". Dies ist begründet durch die Erweiterung der Vitalparameter Messungen um Serienmessungen. | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.23  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | C-CDA Vital Signs Organizer  | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.26  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-01   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHMR Vital Signs Organizer   | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.2   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |  |   |   |             |
|---|------------|--|---|---|-------------|
| <div><div><div></div><div>@extension</div></div></div>        | st         | 1 ... 1  | F | 2015-11-19  |             |
| <div><div><div></div><div>hl7:id</div></div></div>            | II         | 1 ... 1  | M | ID der VitalparameterGruppe.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.   | (atc...try) |
| <div><div><div></div><div>hl7:code</div></div></div>          | CD.IPS     | 1 ... 1  | M | Code des VitalparameterGruppe-Entry.  | (atc...try) |
| <div><div><div></div><div>@code</div></div></div>             | CONF       | 1 ... 1  | F | 46680005  |             |
| <div><div><div></div><div>@codeSystem</div></div></div>       |            | 1 ... 1  | F | 2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed-CT)  |             |
| <div><div><div></div><div>hl7:statusCode</div></div></div>    | CS         | 1 ... 1  | M |   | (atc...try) |
| <div><div><div></div><div>@code</div></div></div>             | CONF       | 1 ... 1  | F | completed   |             |
| Auswahl   |            | 0 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:effectiveTime[@value]</li><li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']</li><li>hl7:effectiveTime</li></ul> |             |
|   | Constraint | Wenn in allen untergeordneten Kind-Elementen observation/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.<br><br>Wenn in allen untergeordneten Kind-Elementen observation/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein. |   |   |             |
| <div><div><div></div><div>hl7:effectiveTime</div></div></div> | TS.AT.TZ   | 0 ... 1  | C | Messungen mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt  | (atc...try) |
| wo [@value]   |            |  |   |   |             |

└ @value

1 ... 1 R

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 -->
<effectiveTime value="20110527133000+0200"/>
```

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt -->
<effectiveTime value="20110527"/>
```

└ hl7:effectiveTime

TS.AT.TZ

0 ... 1 C

Messungen mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt  
Fixierter nullFlavor: UNK

(atc...try)

wo [ @nullFlavor="UNK" ]

└ @nullFlavor

cs

1 ... 1 F

UNK

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Messungen unbekannt -->
<effectiveTime nullFlavor="UNK"/>
```

└ hl7:effectiveTime

IVL\_TS

0 ... 1 C

Messungen mit dem Gerät in einer Zeitspanne.  
Zugelassene nullFlavor: UNK

(atc...try)

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 -->
<effectiveTime>
  <low value="20110527133000+0200"/>
  <high value="20110527140000+0200"/>
</effectiveTime>
```

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 -->
<effectiveTime>
  <low nullFlavor="UNK"/>
  <high value="20110527140000+0200"/>
</effectiveTime>
```

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt -->
<effectiveTime>
  <low value="20110527133000+0200"/>
  <high nullFlavor="UNK"/>
</effectiveTime>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)  
<!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 -->  
<effectiveTime>  
 <low value="20110527"/>  
 <high value="20110528T140000+0200"/>  
</effectiveTime>

Eingefügt 0 ... 1 C von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 Time Interval Information minimal (DYNAMIC)

Auswahl 0 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:low[@value]
- hl7:low[@nullFlavor='UNK']

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

└ @nullFlavor CS 1 ... 1 F UNK

Auswahl 0 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:high[@value]
- hl7:high[@nullFlavor='UNK']

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                |                              |    |         |   |  |             |
|----------------|------------------------------|----|---------|---|--|-------------|
|                | <b>@nullFlavor</b>           | cs | 1 ... 1 | F | UNK  |             |
|                | <b>hl7:performer</b>         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
|                | <b>hl7:author</b>            |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
|                | <b>hl7:informant</b>         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
|                | <b>hl7:participant</b>       |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| <i>Auswahl</i> |                              |    | 1 ... * |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 <i>Vitalparameter Entry</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 <i>Serienmessung Vitalparameter Entry</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
|                | <b>hl7:component</b>         |    | 0 ... * | R | ELGA Vitalparameter-Entry.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 <i>Vitalparameter Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
|                | <b>@typeCode</b>             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|                | <b>@contextConductionInd</b> | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
|                | <b>hl7:component</b>         |    | 0 ... * | R | ELGA Serienmessung-Entry.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 <i>Serienmessung Vitalparameter Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
|                | <b>@typeCode</b>             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |

 @contextConductionInd      cs      0 ... 1 F      true

### 12.4.4.3 Vitalparameter Entry

|        |   |                |  |
|--------|---|----------------|--|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24  at-cda-bbr- | Gültigkeit     | 2021-02-19 13:00:55<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_VitalparameterEntry vom 2020-10-07 07:50:09</li><li>atcdabbr_entry_VitalparameterEntry vom 2019-07-19 14:38:56</li></ul> |
| Status |  Aktiv                               | Versions-Label | 1.1.0+20210219   |
| Name   | atcdabbr_entry_VitalparameterEntry  | Bezeichnung    | Vitalparameter Entry   |

#### Beschreibung






Ein Vitalparameter-Entry bündelt einzelne Vitalparameter-Beobachtungen.  
Das effectiveTime-Element muss vorhanden sein, um anzuzeigen, wann einzelnen Messungen durchgeführt wurden; es kann aber weggelassen werden, wenn das gruppierende Vitalparameter Gruppe Entry selbst ein effectiveTime-Element enthält.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 5 Templates

| Benutzt                 | als         | Name   | Version |
|-------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3  | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628)                  | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 *Vitalparameter Entry* (2020-10-07 07:50:09) [ref at-cda-bbr-](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24 *Vitalparameter Entry* (2019-07-19 14:38:56) [ref at-cda-bbr-](#)  
Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.20.1.31 *Result observation* (DYNAMIC) [ref ccd1-](#)  
Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13 *eHDSI Simple Observation* (DYNAMIC) [ref epsos-](#)  
Spezialisierung: Template 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2 *eHDSI Vital Signs Observation* (DYNAMIC) [ref epsos-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.24"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>
  <!-- ID des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:id root=" " extension=" " />
  <!-- Code des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:code code="2710-2" displayName="Oxygen saturation in Capillary blood by Oximetry" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1"
codeSystemName="LOINC">
    <hl7:originalText>
      <hl7:reference value="#vitsigtype-1"/>
    </hl7:originalText>
  </hl7:code>
  <!-- Referenz zum narrativen Abschnitt dieses Vitalparameter-Entry im Text-Bereich der Sektion -->
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="#vitsig-1"/>
  </hl7:text>
  <!-- Statuscode des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:statusCode code="completed"/>
  <!-- Wert des Vitalparameter -->
  <hl7:value xsi:type="PQ" value="120" unit="/min"/>
</hl7:observation>
```

## Beispiel

### Keine Vitalparameter erhoben

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.24"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.31"/>
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13"/>
  <hl7:templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2"/>
  <!-- ID des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:id root=" " extension=" " />
  <!-- Code des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:code code="373121007" displayName="Test not done" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT">
    <hl7:originalText>
      <hl7:reference value="#vitsigtype-1"/>
    </hl7:originalText>
  </hl7:code>
  <!-- Referenz zum narrativen Abschnitt dieses Vitalparameter-Entry im Text-Bereich der Sektion -->
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="#vitsig-1"/>
  </hl7:text>
  <!-- Statuscode des Vitalparameter-Entry -->
  <hl7:statusCode code="completed"/>
  <!-- Wert des Vitalparameter -->
  <hl7:value xsi:type="PQ" nullFlavor="NA"/>
</hl7:observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                     | Label       |
|------------------|-----|---------|------|----------------------------------|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |                                  | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS                              |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN                              |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | ELGA                             | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.24          |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 CCD Result observation       | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.31     |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PCC Simple Observation       | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PCC Vital Signs Observation  | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.13.2 |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |            |   |   |   |             |
|--------------------|------------|---|---|---|-------------|
| └ h17:id           | II         | 1 ... 1   | M | ID des Vitalparameters<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.   | (atc...try) |
| └ h17:code         | CD.IPS     | 1 ... 1   | M | Code des Vitalparameters.<br><br>Die Art des angegebenen Vitalparameters (Puls, Blutdruck systolisch, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben. Die Angabe der Art des Vitalparameters bestimmt auch die möglichen Einheiten des Werts.<br><b>Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden:</b> Welche der Vitalparameterarten angegeben werden müssen bzw. sollen, kann im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden eingeschränkt werden. | (atc...try) |
|                    | Constraint | Wenn dieses Observation-Element im Dokument mit der TemplateID "1.2.40.0.34.6.0.11.0.10" (Telemonitoring Episodenbericht) verwendet wird, ist eine Translation zu diesem Code mit dem Attribut codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" verpflichtend anzugeben! |   |   |             |
|                    | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.34 <i>ELGA_Vitalparameterarten</i> (DYNAMIC)  |   |   |             |
| └ h17:originalText | ED         | 1 ... 1   | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Textbereich, in dem die Vitalparameterart beschrieben ist ( <b>ohne</b> zusätzliche Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc).   | (atc...try) |
| └ h17:reference    | TEL        | 1 ... 1   | M |   | (atc...try) |
| └ @value           | st         | 1 ... 1   | R |   |             |
| └ h17:translation  | CD         | 0 ... *   |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.   | (atc...try) |
| └ @code            | cs         | 1 ... 1   | R |   |             |
| └ @codeSystem      | uid        | 1 ... 1   | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |            |         |   |  |             |
|-------------------|------------|---------|---|--|-------------|
| └ @codeSystemName | st         | 0 ... 1 |   |  |             |
| └ @displayName    | st         | 0 ... 1 |   |  |             |
| └ ips:designation | ST         | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...try) |
| └ @language       | cs         | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ hl7:text        | ED         | 1 ... 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc).  | (atc...try) |
| └ hl7:reference   | TEL        | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| └ hl7:statusCode  | CS         | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| └ @code           | CONF       | 1 ... 1 | F | completed  |             |
| Auswahl           |            | 0 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:effectiveTime[@value]</li><li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']</li><li>hl7:effectiveTime</li></ul>  |             |
|                   | Constraint |         |   | Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.<br><br>Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein. |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |           |   |   |   |             |
|------------------------|-----------|---|---|---|-------------|
| └ h17:effectiveTime    | TS.AT.TZ  | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt                                      | (atc...try) |
| wo [@value]            |           |   |   |   |             |
| └ @value               | 1 ... 1 R |   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 --><br><effectiveTime value="20110527133000+0200"/>   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt --><br><effectiveTime value="20110527"/>   |   |   |             |
| └ h17:effectiveTime    | TS.AT.TZ  | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt<br>Fixierter nullFlavor: UNK | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |           |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs        | 1 ... 1 F UNK   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen unbekannt --><br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>   |   |   |             |
| └ h17:effectiveTime    | IVL_TS    | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät in einer Zeitspanne.<br>Zugelassene nullFlavor: UNK         | (atc...try) |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime> |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low nullFlavor="UNK"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>                         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high nullFlavor="UNK"/><br></effectiveTime>   |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)</b><br><!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527"/><br><high value="20110528140000+0200"/><br></effectiveTime> |

Eingefügt 0 ... 1 C von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 Time Interval Information minimal (DYNAMIC)

Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:low[@value]  
▪ hl7:low[@nullFlavor='UNK']

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

└ @nullFlavor cs 1 ... 1 F UNK  
Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:high[@value]  
▪ hl7:high[@nullFlavor='UNK']

|             |          |         |  |  |             |
|-------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:high  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value] |          |         |  |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |            |   |   |  |             |
|-------------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:high              | TS.AT.TZ   | 0 ... 1   |   |  | (atc...try) |
| wo [ @nullFlavor="UNK"] |            |   |   |  |             |
| └ @nullFlavor           | cs         | 1 ... 1   | F | UNK  |             |
| Auswahl                 |            | 1 ... 1   |   | Wert des Vitalparameters.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:value[not(@nullFlavor)]</li> <li>h17:value[@nullFlavor='NA']</li> </ul> |             |
|                         | Constraint | Wenn kein Vitalparameter erhoben wurde (code/@code="373121007"), MUSS, M [1..1], value mit @null-Flavor="NA" strukturiert sein.<br><br>In allen anderen Fällen MUSS, M [1..1], value angegeben sein. Die Verwendung von @nullFlavor="NA" ist NICHT ERLAUBT. |   |  |             |
| └ h17:value             | PQ         | 0 ... 1   |   |  | (atc...try) |
| wo [not(@nullFlavor)]   |            |   |   |  |             |
| └ h17:value             | PQ         | 0 ... 1   |   |  | (atc...try) |
| wo [ @nullFlavor='NA']  |            |   |   |  |             |
| └ @nullFlavor           | cs         | 1 ... 1   | F | NA   |             |
| └ h17:performer         |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ h17:author            |            | 0 ... *   | C | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |            |   |   |  |             |
|-------------------|--|------------|---|---|--|-------------|
|                   |  | Constraint | Wenn dieses Observation-Element im Dokument mit der TemplateID "1.2.40.0.34.6.0.11.0.10" (Telemonitoring Episodenbericht) verwendet wird, ist genau ein author-Element verpflichtend anzugeben! (1..1 M)<br>Sonst gilt 0..* |   |  |             |
| └ hl7:informant   |  |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)    | (atc...try) |
| └ hl7:participant |  |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |




12.4.4.4 Messergebnisse Gruppe Entry

|                          |  |                       |  |
|--------------------------|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70  | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:34:33<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_MessergebnisseGruppeEntry vom 2020-10-07 06:43:02</li><li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_MessergebnisseGruppeEntry vom 2018-07-25 11:00:12</li></ul> |
| <b>Status</b>            |  Aktiv  | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_entry_MessergebnisseGruppeEntry   | <b>Bezeichnung</b>    | Messergebnisse Gruppe Entry  |
| <b>Beschreibung</b>      | Die Gruppierung von Messungen die nicht in der Medikationseinnahme oder als Vitalparameter gelistet sind. Die Gruppierung der Messungen werden analog zu den Vitalparametern vollstrukturiert angegeben. |                       |  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70   |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template   |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 3 Templates

| Benutzt                  | als         | Name   | Version |
|--------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15  | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71  | Containment |  Messergebnis Entry (1.1.0+20210218)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 | Containment |  Serienmessung Entry (1.2.0+20210303)               | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70 *Messergebnisse Gruppe Entry* (2020-10-07 06:43:02) [ref elgatgd-](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70 *Messergebnisse Gruppe Entry* (2018-07-25 11:00:12) [ref elgatgd-](#)  
Adaptation: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.3 (2017-07-21 13:18:24) [ref ?](#)  
Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.3 *Vitalparameter Gruppe Entry* (2011-12-19) [ref elgabbr-](#)

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.70"/>
  <!-- Zeigt die Übereinstimmung mit dem "C-CDA Result Organizer"-Template -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.1" extension="2015-08-01"/>
  <!-- Zeigt die Übereinstimmung mit dem "PHMR Result Organizer"-Template -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.16" extension="2015-11-19"/>
  <id root="1.2.40.0.34.3.1.1058.1337" extension="b2e6e7dd-7fe1-43fb-aaac-3554f978cfb7"/>
  <code code="15220000" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED-CT" displayName="Tests"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
  <component>
    ...
  </component>
</organizer>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                              | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:organizer    |     |         |      |   | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | CLUSTER                                   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN                                       |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Messergebnisse Gruppe Entry | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.70                   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | C-CDA Result Organizer                    | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.1            |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-01                                |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHMR Result Organizer                     | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.16             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-11-19                                |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |            |  |   |  |             |
|-------------------|------------|--|---|--|-------------|
| └ h17:id          | II         | 1 ... 1  | M | ID des Ergebnis Gruppen Eintrags.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.   | (atc...try) |
| └ h17:code        | CE         | 1 ... 1  | M | Code des ErgebnisGruppe-Entry.<br>Ist aus dem PHMR übernommen worden, damit das Template vollständig kompatibel ist mit diesem. Der Code ist der Meinung von HL7-Austria nach unpassend, wird jedoch für Zwecke der Kompatibilität nicht geändert. | (atc...try) |
| └ @code           | CONF       | 1 ... 1  | F | 15220000   |             |
| └ @codeSystem     |            | 1 ... 1  | F | 2.16.840.1.113883.6.96 (Snomed-CT)   |             |
| └ @codeSystemName |            | 1 ... 1  | F | SNOMED-CT  |             |
| └ @displayName    |            | 1 ... 1  | F | Laboratory test  |             |
| └ h17:statusCode  | CS         | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ @code           | CONF       | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| Auswahl           |            | 0 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:effectiveTime[@value]</li> <li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']</li> <li>hl7:effectiveTime</li> </ul>  |             |
|                   | Constraint | Wenn in allen untergeordneten Kind-Elementen observation/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.<br><br>Wenn in allen untergeordneten Kind-Elementen observation/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein. |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |          |   |   |   |             |
|------------------------|----------|---|---|---|-------------|
| └ h17:effectiveTime    | TS.AT.TZ | 0 ... 1   | C | Messungen mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt                                      | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |   |   |   |             |
| └ @value               |          | 1 ... 1   | R |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 --><br><effectiveTime value="20110527133000+0200"/>   |   |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt --><br><effectiveTime value="20110527"/>   |   |   |             |
| └ h17:effectiveTime    | TS.AT.TZ | 0 ... 1   | C | Messungen mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt<br>Fixierter nullFlavor: UNK | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs       | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen unbekannt --><br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>   |   |   |             |
| └ h17:effectiveTime    | IVL_TS   | 0 ... 1   | C | Messungen mit dem Gerät in einer Zeitspanne.<br>Zugelassene nullFlavor: UNK         | (atc...try) |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime> |   |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low nullFlavor="UNK"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>                         |   |   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high nullFlavor="UNK"/><br></effectiveTime>   |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)</b><br><!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527"/><br><high value="20110528140000+0200"/><br></effectiveTime> |

Eingefügt 0 ... 1 C von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 Time Interval Information minimal (DYNAMIC)

Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:low[@value]  
▪ hl7:low[@nullFlavor='UNK']

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

└ @nullFlavor cs 1 ... 1 F UNK  
Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:high[@value]  
▪ hl7:high[@nullFlavor='UNK']

|             |          |         |  |  |             |
|-------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:high  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value] |          |         |  |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |          |         |   |   |             |
|-------------------------|--|----------|---------|---|---|-------------|
| └ h17:high              |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |   | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor="UNK"]  |  |          |         |   |   |             |
| └ @nullFlavor           |  | cs       | 1 ... 1 | F | UNK   |             |
| Auswahl                 |  |          | 1 ... * |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)</li> <li>h17:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 <i>Serienmessung Entry</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ h17:component         |  |          | 0 ... * | R | ELGA Ergebnis-Entry.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ @typeCode             |  | cs       | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | cs       | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:component         |  |          | 0 ... * | R | ELGA Serienmessung-Entry.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 <i>Serienmessung Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ @typeCode             |  | cs       | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | cs       | 0 ... 1 | F | true  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25










12.4.4.5 Messergebnis Entry

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71  | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:34:03<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li> atcdabbr_entry_MessergebnisEntry vom 2020-10-06 15:22:22</li><li> atcdabbr_entry_MessergebnisEntry vom 2018-07-25 11:01:29</li></ul> |
| <b>Status</b>  | Aktiv  | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_MessergebnisEntry                                 | <b>Bezeichnung</b>    | Messergebnis Entry   |
| <b>Beschreibung</b>  |  |                       |  |
| Alle anderen Messungen, die nicht in der Medikationseinnahme oder als Vitalparameter gelistet sind, werden hier maschinenlesbar dokumentiert. Die Messungen werden analog zu den Vitalparametern vollstrukturiert angegeben. |  |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template   |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |                       |  |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 9 Templates

| Benutzt                  | als         | Name   | Version |
|--------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2   | Inklusion   |  Original Text Reference (1.0.0+20210219)           | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.1   | Inklusion   |  Narrative Text Reference (1.0.1+20210512)          | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15  | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13  | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628)                  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71  | Containment |  Messergebnis Entry (1.1.0+20210218)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 | Containment |  Serienmessung Entry (1.2.0+20210303)               | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 *Messergebnis Entry* (2020-10-06 15:22:22)   
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 *Messergebnis Entry* (2018-07-25 11:01:29) 

## Beispiel

### Strukturbeispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
  <id root="2.25" extension="urn:uuid:04eb4803-4b8f-4609-9876-1c33a8bf5553" assigningAuthorityName="HerzMobil Tirol"/>
  <code code="405176005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Blood glucose status">
    <originalText>
      <reference value="#resultstype4"/>
    </originalText>
    <translation code="160184" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_CONC_GLU_CAPILLA-
RY_WHOLEBLOOD: Blood Glucose Level"/>
    <translation code="41653-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" displayName="Blood glucose status"/>
  </code>
  <text>
    <reference value="#resultsugar1"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
  <value type="PQ" value="155.5" unit="[mg/dL]"/>
  <author>
    <!-- Zeit an dem das Gerät den Messwert übertragen hat -->
    <time value="20150822170952+0200"/>
    <assignedAuthor>
      <id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="12-34-56-78-9A-BC-DE-F1"/>
      <!-- <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/> -->
      <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
        <manufacturerModelName/>
        <softwareName/>
      </assignedAuthoringDevice>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <referenceRange>
    <observationRange>
      <text>
        <reference value="#resultsugarRefRange"/>
      </text>
      <value type="IVL_PQ">
        <low value="80" unit="[mg/dL]"/>
        <high value="160" unit="[mg/dL]"/>
      </value>
    </observationRange>
  </referenceRange>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Messergebnis Entry   | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Metric Observation   | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.32  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| Auswahl          |     | 1 ... 1 |      | Durch die Wahl der TemplateID gibt man den möglichen Typ für das Value-Element vor!<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ hl7:templateId</li> <li>▪ hl7:templateId</li> <li>▪ hl7:templateId</li> <li>▪ hl7:templateId</li> </ul> |             |
| └ hl7:templateId | II  | 0 ... 1 | R    | PHM Metric Numeric Observation   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |     |         |   |   |
|-------------------------------|-----|---------|---|---|
| 2.16.840.1.113883.10.20.36.33 |     |         |   |   |
| └ @root                       | uid | 1 ... 1 | F |   |
| 2015-11-19                    |     |         |   |   |
| └ @extension                  | st  | 1 ... 1 | F |   |
| └ hl7:templateId              | II  | 0 ... 1 | R | PHM Metric Enum Integer Observation (atc...try) |
| 2.16.840.1.113883.10.20.36.38 |     |         |   |   |
| └ @root                       | uid | 1 ... 1 | F |   |
| 2015-08-17                    |     |         |   |   |
| └ @extension                  | st  | 1 ... 1 | F |   |
| └ hl7:templateId              | II  | 0 ... 1 | R | PHM Metric Coded Observation (atc...try)        |
| 2.16.840.1.113883.10.20.36.34 |     |         |   |   |
| └ @root                       | uid | 1 ... 1 | F |   |
| 2015-08-17                    |     |         |   |   |
| └ @extension                  | st  | 1 ... 1 | F |   |
| └ hl7:templateId              | II  | 0 ... 1 | R | PHM Metric String Observation (atc...try)       |
| 2.16.840.1.113883.10.20.36.35 |     |         |   |   |
| └ @root                       | uid | 1 ... 1 | F |   |
| 2015-08-17                    |     |         |   |   |
| └ @extension                  | st  | 1 ... 1 | F |   |
| └ hl7:templateId              | II  | 1 ... 1 | M | C-CDA Result Observation (atc...try)            |

└ @root uid 1 ... 1 F 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2

└ @extension st 1 ... 1 F 2015-08-01

└ hl7:id

II

0 ... 1

C

ID des Ergebnis Entrys

Empfohlen wird UUIDv4. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ aus dem allgemeinen Leitfaden zu befolgen.

(atc...try)

Constraint

Im Fall, dass das übergeordnete Observation-Element in einem Component-Element (\*/\*component/observation/id) liegt, **MUSS** dieses Element angegeben sein (**M [1..1]**). In allen anderen Fällen **MUSS** das Element komplett entfallen (**NP [0..0]**). Damit soll verhindert werden, dass ein Messergebnis-Unterelement oder Serienmessung-Unterelement aus seinem Kontext entfernt wird.

└ hl7:code

CD.IPS

1 ... 1

M

Code des Ergebnisses.

Die Art des angegebenen Messergebnisses (Blutzuckerwert, Aktivität, Schritte, Wohlbefinden, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben. Codes, die im aktuellen ValueSet nicht vorhanden sind, werden von der ELGA GmbH ergänzt. Bitte dazu einen Vorschlag aus einer Codierungsart (SNOMED CT, LOINC, etc., ausgenommen MDC) frei wählen und an cda@elga.gv.at zusenden.

(atc...try)

CONF

Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.28 TGD\_Messergebnis\_Codes\_VS (DYNAMIC)

Eingefügt

1 ... 1

M

von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 Original Text Reference (DYNAMIC)

└ hl7:originalText

ED

1 ... 1

M

Textinhalt, der codiert wurde.

(atc...try)

└ hl7:reference

TEL

1 ... 1

M

Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx']. Die Referenz ist mit einem content-Element mit ID-Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente.

(atc...try)



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |                   |         |   |   |             |
|-------------------|-------------------|---------|---|---|-------------|
| └ @value          |                   | 1 ... 1 | R   |   |             |
|                   | Schematron assert | role    | error   |   |             |
|                   |                   | test    | starts-with(@value,'#')   |   |             |
|                   |                   | Meldung | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |   |             |
| └ hl7:translation | CD                | 1 ... 1 | M   | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt.                   | (atc...try) |
| └ @code           |                   | 1 ... 1 | R   |   |             |
| └ @codeSystem     | uid               | 1 ... 1 | F   | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └ @codeSystemName | st                | 0 ... 1 | F   | MDC   |             |
| └ @displayName    |                   | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ hl7:translation | CD                | 0 ... * |   | Hier können weitere Übersetzungen des Codes aus weiteren Codesys-<br>temen bereitgestellt werden. | (atc...try) |
| Eingefügt         |                   | 1 ... 1 | M   | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.1 <i>Narrative Text Reference</i> (DYNAMIC)                              |             |
| └ hl7:text        | ED                | 1 ... 1 | M   |   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |   |  |   |  |             |
|---|---|--|---|--|-------------|
| <div> <div> <div></div> <div>hl7:reference</div> </div> </div>  | TEL                                       | 1 ... 1  | M | <div> <p>Die Referenz auf den entsprechenden Text im menschenlesbaren Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx'].</p> <p>Die Referenz ist mit einem /D-Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts mit Zusatzinformationen umschließen.</p> <p>Alternativ kann @value auch mit dem url-scheme "http" oder "https" beginnen.</p> </div> | (atc...try) |
| <div> <div> <div></div> <div>@value</div> </div> </div>         |   | 1 ... 1  | R |  |             |
|   | <div> <div>Schematron assert</div> </div> | <div> <div>role</div> <div>error</div> </div>  |   |  |             |
|   |   | <div> <div>test</div> <div>starts-with(@value,'#') or starts-with(@value,'http')</div> </div>  |   |  |             |
|   |   | <div> <div>Meldung</div> <div>The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element, or begin with the 'http' or 'https' url-scheme.</div> </div>   |   |  |             |
| <div> <div> <div></div> <div>hl7:statusCode</div> </div> </div> | CS  | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| <div> <div> <div></div> <div>@code</div> </div> </div>          | <div> <div>CONF</div> </div>              | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| Auswahl   |   | 0 ... 1  |   | <div> <div>Elemente in der Auswahl:</div> <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:effectiveTime[@value]</li> <li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']</li> <li>hl7:effectiveTime</li> </ul> </div>  |             |
|   | <div> <div>Constraint</div> </div>        | <div> <p>Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.</p> <p>Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.</p> </div> |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |          |   |   |   |             |
|------------------------|----------|---|---|---|-------------|
| └─ hl7:effectiveTime   | TS.AT.TZ | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt                                      | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |   |   |   |             |
| └─ @value              |          | 1 ... 1   | R |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 --><br><effectiveTime value="20110527133000+0200"/>   |   |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt --><br><effectiveTime value="20110527"/>   |   |   |             |
| └─ hl7:effectiveTime   | TS.AT.TZ | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt<br>Fixierter nullFlavor: UNK | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |   |   |   |             |
| └─ @nullFlavor         | cs       | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen unbekannt --><br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>   |   |   |             |
| └─ hl7:effectiveTime   | IVL_TS   | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät in einer Zeitspanne.<br>Zugelassene nullFlavor: UNK         | (atc...try) |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime> |   |   |             |
|                        | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low nullFlavor="UNK"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>                         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high nullFlavor="UNK"/><br></effectiveTime>   |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)</b><br><!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527"/><br><high value="20110528140000+0200"/><br></effectiveTime> |

|           |         |   |   |  |  |
|-----------|---------|---|---|--|--|
| Eingefügt | 0 ... 1 | C | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 Time Interval Information minimal (DYNAMIC) |  |  |
| Auswahl   | 0 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl:  |  |  |
|           |         |   | ▪ hl7:low[@value]   |  |  |
|           |         |   | ▪ hl7:low[@nullFlavor='UNK']  |  |  |

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

|             |  |          |         |   |   |
|-------------|--|----------|---------|---|---|
|             | <div><div></div><div>@nullFlavor</div></div> | CS       | 1 ... 1 | F | UNK   |
| Auswahl     |  |          | 0 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:high[@value]</li><li>hl7:high[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |
|             | <div><div></div><div>hl7:high</div></div>    | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |   |
| wo [@value] |  |          |         |   | (atc...try)   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |  |            |  |         |  |             |
|------------------------|--|------------|--|---------|--|-------------|
| └ h17:high             |  | TS.AT.TZ   | 0 ... 1  |         |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |  |            |  |         |  |             |
| └ @nullFlavor          |  | cs         | 1 ... 1  | F       | UNK  |             |
| Auswahl                |  |            |  | 1 ... 1 | Es sind fünf verschiedenen Datentypen nach IEEE 11073 20601 möglich.<br>Es werden die Datentypen Numerisch (numeric), Reihe (sample array metrics / waveforms), Aufzählung (enumeration), Codiert (coded) und den unstrukturierten Daten als Zeichenketten (string) bei den Messergebnissen bereitgestellt. Die ELGA Vitalparameter ermöglichen es Daten als numerische Daten (numeric) und Reihe (sample array metrics / waveforms) zu dokumentieren. |             |
|                        |  |            |  |         | Der Datentyp Reihe (sample array metrics / waveforms) unterscheidet sich zu den anderen Elementen durch eine komplexere Struktur. Dieser Datentyp wird in einem eigenen Template abgebildet.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ hl7:value</li><li>▪ hl7:value</li><li>▪ hl7:value</li><li>▪ hl7:value</li></ul>   |             |
|                        |  | Constraint | Bei der Verwendung der folgenden Typen ist jeweils eine bestimmte TemplateID zu verwenden: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Numerisch (numeric) -&gt; 2.16.840.1.113883.10.20.36.33</li><li>▪ Aufzählung (enumeration) -&gt; 2.16.840.1.113883.10.20.36.38</li><li>▪ Codiert (coded) -&gt; 2.16.840.1.113883.10.20.36.34</li><li>▪ Zeichenketten (string) -&gt; 2.16.840.1.113883.10.20.36.35</li></ul> |         |  |             |
|                        |  |            |  |         |  |             |
| └ hl7:value            |  | PQ         | 0 ... 1  | R       | Datentyp Numerisch (numeric)   | (atc...try) |
| └ @xsi:type            |  |            | 1 ... 1  | F       | PQ   |             |
| └ @value               |  | real       | 1 ... 1  | R       |  |             |

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ @unit         | cs  | 1 ... 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden.  |             |
| └ hl7:value     | INT | 0 ... 1 | R | Datentyp Aufzählung (enumeration)  | (atc...try) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | INT  |             |
| └ @value        | int | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ hl7:value     | CD  | 0 ... 1 | R | Datentyp Codiert (coded)   | (atc...try) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | CD   |             |
| └ hl7:value     | ST  | 0 ... 1 | R | Datentyp Zeichenketten (string)  | (atc...try) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST   |             |
| └ hl7:performer |     | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ hl7:author    |     | 1 ... 1 | M | Messgerät, mit welchem dieser Messwert gemessen wurde oder die Person, die den Wert eingegeben hat. Im author.time wird der Zeitpunkt dokumentiert, an dem das Gerät den Messwert übertragen hat bzw. die Person den Messwert eingegeben hat.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |
| └ hl7:informant |     | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |    |         |   |  |             |
|--------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └─ hl7:participant       |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| Auswahl                  |    | 0 ... * |   | Komponente zur Aufnahme von Zusatzinformationen als untergeordnetes, eigenes Messergebnis-Entry oder Serienmessungs-Entry.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:entryRelationship welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:entryRelationship welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 <i>Serienmessung Entry</i> (DYNAMIC)</li></ul> |             |
| └─ hl7:entryRelationship |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └─ @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F | COMP   |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

::
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:id root="2.25" extension="urn:uuid:784134ee-e04b-4cf7-8884-9362a30cc253" assigningAuth-
    rityName="HerzMobil Tirol"/>
    <hl7:code code="86047003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"
    displayName="Active physical exercise (observable entity)">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype3"/>
      </hl7:originalText>
      <hl7:translation code="MDC_UNKNOWN" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemNa-
      me="MDC" displayName="MDC_UNKNOWN: Code unknown"/>
      <hl7:translation code="62812-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC"
      displayName="Physical Activity"/>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <!-- Zeit der Messung -->
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="CD" code="418060005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemNa-
    me="SNOMED CT" displayName="Running">
      <hl7:translation code="8455155" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC"
      displayName="MDC_HF_ACT_RUN: Activity: Running"/>
    </hl7:value>
    <hl7:author>
      <!-- Zeit an dem das Gerät den Messwert übertragen hat -->
      <hl7:time value="20150822170952+0200"/>
      <hl7:assignedAuthor>
        <hl7:id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="0E-ED-AB-EE-DE-AD-BE-09"
        assigningAuthorityName="EUI-64"/>
        <hl7:assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
      </hl7:assignedAuthor>
    </hl7:author>
    <hl7:entryRelationship typeCode="COMP">
      <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
        <hl7:code code="66266-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" dis-
        playName="Time doing this activity">
          <hl7:originalText>
            <hl7:reference value="#resultstype31"/>
          </hl7:originalText>
          </hl7:code>
          <hl7:text>
            <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
          </hl7:text>
          <hl7:statusCode code="completed"/>
        </hl7:code>
      </hl7:observation>
    </hl7:entryRelationship>
  </hl7:observation>
</hl7:ClinicalDocument>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
<hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
<hl7:value xsi:type="PQ" value="30.0" unit="min"/>
</hl7:observation>
</hl7:entryRelationship>
<hl7:entryRelationship typeCode="COMP">
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:code code="66270-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" displayName="Activity intensity">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype32"/>
      </hl7:originalText>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="ST">Mittel</hl7:value>
  </hl7:observation>
</hl7:entryRelationship>
</hl7:observation>

::
</hl7:ClinicalDocument>
```

|                          |    |         |   |  |             |
|--------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └─ hl7:entryRelationship |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 <i>Serienmessung Entry</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |
| └─ @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F | COMP   |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └─ hl7:referenceRange    |    | 0 ... 1 |   |  | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

::
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:id root="2.25" extension="urn:uuid:04eb4803-4b8f-4609-9876-1c33a8bf5553" assigningAuth-
horityName="HerzMobil Tirol"/>
    <hl7:code code="405176005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"
displayName="Blood glucose status">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype4"/>
      </hl7:originalText>
      <hl7:translation code="160184" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC"
displayName="MDC_CONC_GLU_CAPILLARY_WHOLEBLOOD: Blood Glucose Level"/>
      <hl7:translation code="41653-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC"
displayName="Blood glucose status"/>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultsugar2"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="PQ" value="201.5" unit="[mg/dL]"/>
    <hl7:author>
      <!-- Zeit an dem das Gerät den Messwert übertragen hat -->
      <hl7:time value="20150822170952+0200"/>
      <hl7:assignedAuthor>
        <hl7:id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="12-34-56-78-9A-BC-DE-
F1"/>
        <hl7:assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
      </hl7:assignedAuthor>
    </hl7:author>
    <hl7:referenceRange>
      <hl7:observationRange>
        <hl7:text>
          <hl7:reference value="#resultsugarRefRange"/>
        </hl7:text>
        <hl7:value xsi:type="IVL_PQ">
          <hl7:low value="80" unit="[mg/dL]"/>
          <hl7:high value="160" unit="[mg/dL]"/>
        </hl7:value>
      </hl7:observationRange>
    </hl7:referenceRange>
  </hl7:observation>


::
</hl7:ClinicalDocument>
```

|  |  |         |   |  |             |
|--|--|---------|---|--|-------------|
|  hl7:observationRange |  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
|--|--|---------|---|--|-------------|

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|               |                   |   |                         |  |             |
|---------------|-------------------|---|-------------------------|--|-------------|
| h17:text      |                   | 1 ... 1   | M                       |  | (atc...try) |
| h17:reference | TEL               | 1 ... 1   | M                       | Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx'].<br>Die Referenz ist mit einem <i>content</i> -Element mit <i>ID</i> -Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente. | (atc...try) |
| @value        |                   | 1 ... 1   | R                       |  |             |
|               | Schematron assert | role  | error                   |  |             |
|               |                   | test  | starts-with(@value,'#') |  |             |
|               | Meldung           | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |                         |  |             |
| h17:value     | IVL_PQ            | 1 ... 1   | R                       |  | (atc...try) |

12.4.4.6 Serienmessung Vitalparameter Entry

|        |   |                 |                |  |
|--------|---|-----------------|----------------|--|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100  | ref at-cda-bbr- | Gültigkeit     | 2021-01-28 14:50:03<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_SerienmessungVitalparameterEntry vom 2020-10-07 07:51:58</li><li>atcdabbr_entry_SerienmessungVitalparameterEntry vom 2020-06-02 10:24:26</li></ul> |
| Status |  Aktiv |                 | Versions-Label | 1.1.1+20210303   |
| Name   | atcdabbr_entry_SerienmessungVitalparameterEntry   |                 | Bezeichnung    | Serienmessung Vitalparameter Entry   |

## Beschreibung







Das Serienmessung Entry dokumentiert eine kontinuierliche Messungen eines Gerätes. Eine kontinuierliche Messung beinhaltet mehrere Datenpunkte und eine Zeitspanne. Diese Messwerte sind als Vitalparameter definiert!

**Kontext** Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100

**Klassifikation** CDA Entry Level Template

**Offen/Geschlossen** Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

### Benutzt 6 Templates

| Benutzt                  | als         | Name  | Version |
|--------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15  | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13  | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628)                  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 | Containment |  Serienmessungs-Gruppe Entry (1.0.0+20210219)       | DYNAMIC |

**Beziehung** Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 *Serienmessung Vitalparameter Entry* (2020-10-07 07:51:58) ref at-cda-bbr-  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100 *Serienmessung Vitalparameter Entry* (2020-06-02 10:24:26) ref at-cda-bbr-  
Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.54 (2020-06-02 07:03:02) ref ?

## Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.100"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Metric Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Metric Waveform Vital Signs Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.51" extension="2015-11-25"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the C-CDA Result Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.27" extension="2014-06-09"/>
  <id root="FDBD831B-5919-4FFF-9467-76B07022F8E9"/>
  <!-- If the data contained samples of different types, the code value(s) indicated here would have to indicate some
type of generic description that would cover all the types. -->
  <code code="8867-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="HEART RATE">
    <!-- The IEEE 11073 10101 reference identifier is MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE. -->
    <translation code="149530" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE: Pulse
rate"/>
  </code>
  <text>
    <!-- This reference identifies content in human readable formatted text-->
    <reference value="#PulseOx_StreamingPulseRate"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <!--Effective measurement times containing accuracy greater than a day SHALL contain the local time zone-->
  <effectiveTime>
    <low value="20150822170922.86-0400"/>
    <high value="20150822170942.86-0400"/>
  </effectiveTime>
  <!-- The C-CDA Vital Signs observation does not directly support waveforms. Thus to maintain compliance with the C-CDA Vital Signs
observation the waveform related observations need to be wrapped in an entryRelationship. This allows C-CDA readers to
parse this document and ignore the waveform series material which it might not understand. However, the C-CDA vital signs
observation shall contain a value element thus here it is entered with a nullFlavor of not applicable. The actual
'value' is contained in the waveform series. -->
  <value nullFlavor="NA"/>
  <author>
    <!-- Times or time intervals found in the ClinicalDocument/effectiveTime, author/time, dataEnterer/time, legalAuthenticator/time,
authenticator/time and encompassingEncounter/effectiveTime elements SHALL be precise to the day, SHALL include a
time zone if more precise than to the day, and SHOULD be precise to the second -->
    <time value="20150822170952-0400"/>
    <assignedAuthor>
      <!--The @root, @extension, and @assigningAuthorityName *SHALL* be taken from the equivalent attributes of the Device
PHMR Product Instance participantRole/id element that generated the measurements referenced in this observation.-->
      <id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="0E-ED-AB-EE-DE-AD-BE-09" assigningAuthorityName="EUI-64"/>
      <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!-- Observation contains the PHM Measurement Waveform Series Observation which is a container for the
PHM Measurement Waveform Sample Period observation and PHM Metric Waveform observation -->
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!-- A reference to a jpg showing the waveform would go here in an observationMedia element. -->
  </entryRelationship>
</observation>
```

Beispiel

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                                     | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Serienmessung Vitalparameter Entry | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.100                         |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Metric Waveform Vital Signs Observation      | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.51                    |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-11-25                                       |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | C-CDA Vital Signs Observation                    | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.27                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2014-06-09                                       |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |            |  |   |   |             |
|--------------------|------------|--|---|---|-------------|
| └ h17:id           | II         | 1 ... 1  | M | ID des Reihen-Vitalparameters<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.  | (atc...try) |
| └ h17:code         | CD.IPS     | 1 ... 1  | M | Code des Vitalparameters.<br><br>Die Art des angegebenen Vitalparameters (Puls, Blutdruck systolisch, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben. Die Angabe der Art des Vitalparameters bestimmt auch die möglichen Einheiten des Werts.<br><br><b>Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden:</b> Welche der Vitalparameterarten angegeben werden müssen bzw. sollen, kann im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden eingeschränkt werden. | (atc...try) |
|                    | Constraint | Wenn dieses Observation-Element im Dokument mit der TemplateID "1.2.40.0.34.6.0.11.0.10" (Telemonitoring Episodenbericht) verwendet wird ist eine Translation zu diesem Code mit dem Attribut codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" verpflichtend! |   |   |             |
|                    | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.34 <i>ELGA_Vitalparameterarten</i> (DYNAMIC)   |   |   |             |
| └ h17:originalText | ED         | 1 ... 1  | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Textbereich, in dem die Vitalparameterart beschrieben ist ( <b>ohne</b> zusätzliche Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc).   | (atc...try) |
| └ h17:reference    | TEL        | 1 ... 1  | M |   | (atc...try) |
| └ @value           | st         | 1 ... 1  | R |   |             |
| └ h17:translation  | CD         | 0 ... *  |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.   | (atc...try) |
| └ @code            | cs         | 1 ... 1  | R |   |             |
| └ @codeSystem      | uid        | 1 ... 1  | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |            |         |   |  |             |
|-------------------|------------|---------|---|--|-------------|
| └ @codeSystemName | st         | 0 ... 1 |   |  |             |
| └ @displayName    | st         | 0 ... 1 |   |  |             |
| └ ips:designation | ST         | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.  | (atc...try) |
| └ @language       | cs         | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ hl7:text        | ED         | 1 ... 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc).  | (atc...try) |
| └ hl7:reference   | TEL        | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| └ hl7:statusCode  | CS         | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| └ @code           | CONF       | 1 ... 1 | F | completed  |             |
| Auswahl           |            | 0 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:effectiveTime[@value]</li><li>hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']</li><li>hl7:effectiveTime</li></ul>  |             |
|                   | Constraint |         |   | Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.<br><br>Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein. |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |           |   |   |   |             |
|------------------------|-----------|---|---|---|-------------|
| └ hl7:effectiveTime    | TS.AT.TZ  | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt                                      | (atc...try) |
| wo [@value]            |           |   |   |   |             |
| └ @value               | 1 ... 1 R |   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 --><br><effectiveTime value="20110527133000+0200"/>   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt --><br><effectiveTime value="20110527"/>   |   |   |             |
| └ hl7:effectiveTime    | TS.AT.TZ  | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt<br>Fixierter nullFlavor: UNK | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |           |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs        | 1 ... 1 F UNK   |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen unbekannt --><br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>   |   |   |             |
| └ hl7:effectiveTime    | IVL_TS    | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät in einer Zeitspanne.<br>Zugelassene nullFlavor: UNK         | (atc...try) |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime> |   |   |             |
|                        | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low nullFlavor="UNK"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>                         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |  |
|----------|--|
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high nullFlavor="UNK"/><br></effectiveTime>   |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)</b><br><!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527"/><br><high value="20110528140000+0200"/><br></effectiveTime> |

Eingefügt 0 ... 1 C von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 Time Interval Information minimal (DYNAMIC)

Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:low[@value]  
▪ hl7:low[@nullFlavor='UNK']

|                        |          |         |  |  |             |
|------------------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |  |  |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |  |  |             |

└ @nullFlavor cs 1 ... 1 F UNK  
Auswahl 0 ... 1  
Elemente in der Auswahl:  
▪ hl7:high[@value]  
▪ hl7:high[@nullFlavor='UNK']

|             |          |         |  |  |             |
|-------------|----------|---------|--|--|-------------|
| └ hl7:high  | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |  |  | (atc...try) |
| wo [@value] |          |         |  |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |            |   |   |   |             |
|-------------------------|------------|---|---|---|-------------|
| └ h17:high              | TS.AT.TZ   | 0 ... 1   |   |   | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK']  |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor           | CS         | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
| └ h17:value             | PQ         | 1 ... 1   | R |   | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='NA']   |            |   |   |   |             |
| └ @nullFlavor           | CS         | 1 ... 1   | F | NA  |             |
| └ h17:performer         |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ h17:author            |            | 0 ... *   | C | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
|                         | Constraint | Wenn dieses Observation-Element im Dokument mit der TemplateID "1.2.40.0.34.6.0.11.0.10" (Telemonitoring Episodenbericht) verwendet wird, ist genau ein author-Element verpflichtend anzugeben! (1..1 M)<br>Sonst gilt 0..* |   |   |             |
| └ h17:informant         |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ h17:participant       |            | 0 ... *   | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ h17:entryRelationship |            | 1 ... 1   | R | Komponente zur Aufnahme des Containers Serienmessungs-Reihe, welcher wiederum eine bis mehrere Serienmessungen und ein Serienmessungs-Intervall beinhaltet.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 <i>Serienmessungs-Gruppe Entry</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |

└ @typecode

cs

1 ... 1 F

COMP

#### 12.4.4.7 Serienmessung Entry

Id

1.2.40.0.34.6.0.11.3.101

ref at-cda-bbr-

Gültigkeit

2021-01-21 08:12:21

Andere Versionen mit dieser Id:

- atcdabbr\_entry\_SerienmessungEntry vom 2020-10-07 08:03:31
- atcdabbr\_entry\_SerienmessungEntry vom 2020-06-02 07:03:02

Status

● Aktiv

Versions-Label

1.2.0+20210303

Name

atcdabbr\_entry\_SerienmessungEntry

Bezeichnung

Serienmessung Entry

#### Beschreibung

Das Serienmessung Entry dokumentiert eine oder mehrere kontinuierliche Messungen eines Gerätes. Eine kontinuierliche Messung beinhaltet mehrere Datenpunkte und eine Zeitspanne. Diese Messwerte sind **nicht** als Vitalparameter definiert!

Kontext

Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101

Klassifikation

CDA Entry Level Template










Offen/Geschlossen

Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)



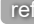

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 9 Templates

| Benutzt                  | als         | Name   | Version |
|--------------------------|-------------|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2   | Inklusion   |  Original Text Reference (1.0.0+20210219)           | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15  | Inklusion   |  Time Interval Information minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  | Containment |  Performer Body (1.0.0+20210219)                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36  | Containment |  Author Body (1.0.0+20210219)                       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3   | Containment |  Informant Body (2.0.0+202109)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13  | Containment |  Participant Body (1.0.1+20210628)                  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 | Containment |  Serienmessungs-Gruppe Entry (1.0.0+20210219)       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71  | Containment |  Messergebnis Entry (1.1.0+20210218)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 | Containment |  Serienmessung Entry (1.2.0+20210303)               | DYNAMIC |

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 *Serienmessung Entry* (2020-10-07 08:03:31)    
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 *Serienmessung Entry* (2020-06-02 07:03:02)  

## Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.101"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Metric Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Metric Waveform Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.8" extension="2015-11-19"/>
  <!-- This templateId indicates conformance to the C-CDA Result Observation. -->
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
  <id root="FDBD831B-5919-4F06-9467-76B07022F8E9"/>
  <!-- If the data contained samples of different types, the code value(s) indicated here would have to indicate some
type of generic description that would cover all the types. -->
  <code code="277923006" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED-CT" displayName="Pulse Oximetry Waveform">
    <!-- The IEEE 11073 10101 reference identifier is MDC_PULSE_OXIM_PLETH. -->
    <translation code="150452" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_PULSE_OXIM_PLETH: Pulse
Oximeter Plethysmograph"/>
  </code>
  <text>
    <!-- This reference identifies content in human readable formatted text-->
    <reference value="#PulseOx_Pleth"/>
  </text>
  <statusCode code="completed"/>
  <!--Effective measurement times containing accuracy greater than a day SHALL contain the local time zone-->
  <effectiveTime>
    <low value="20150822170922.86-0400"/>
    <high value="20150822170923.86-0400"/>
  </effectiveTime>
  <!-- The C-CDA Results observation does not directly support waveforms. Thus to maintain compliance with the C-CDA Results
observation the waveform related observations need to be wrapped in an entryRelationship. This allows C-CDA readers to
parse this document and ignore the waveform series material which it might not understand. However, the C-CDA results
observation shall contain a value element thus here it is entered with a nullFlavor of not applicable. The actual
'value' is contained in the waveform series. -->
  <value nullFlavor="NA"/>
  <author>
    <!-- Times or time intervals found in the ClinicalDocument/effectiveTime, author/time, dataEnterer/time, legalAuthenticator/
time,
authenticator/time and encompassingEncounter/effectiveTime elements SHALL be precise to the day, SHALL include a
time zone if more precise than to the day, and SHOULD be precise to the second -->
    <time value="20150822170952-0400"/>
    <assignedAuthor>
      <!--The @root, @extension, and @assigningAuthorityName *SHALL* be taken from the equivalent attributes of the Device
PHMR Product Instance participantRole/id element that generated the measurements referenced in this observation.-->
      <id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="OE-ED-AB-EE-DE-AD-BE-09" assigningAuthorityName="EUI-64"/>
      <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
    </assignedAuthor>
  </author>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!-- The PHM Measurement Waveform Series Observation is placed here -->
  </entryRelationship>
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <!-- A reference to a jpg showing the waveform would go here in an observationMedia element. -->
  </entryRelationship>
</observation>
```

## Beispiel

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                      | Label       |
|------------------|-----|---------|------|-----------------------------------|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |                                   | (atc...try) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS                               |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN                               |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Serienmessung Entry | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101          |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Metric Observation            | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.32     |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17                        |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Metric Waveform Observation   | (atc...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.8      |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-11-19                        |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |            |   |   |   |             |
|---------------------|------------|---|---|---|-------------|
| └─ hl7:templateId   | II         | 1 ... 1   | M | C-CDA Result Observation  | (atc...try) |
| └─ @root            | uid        | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2  |             |
| └─ @extension       | st         | 1 ... 1   | F | 2015-08-01  |             |
| └─ hl7:id           | II         | 0 ... 1   | C | ID des Ergebnis Eintrys<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.  | (atc...try) |
|                     | Constraint | Im Fall, dass das übergeordnete Observation-Element in einem Component-Element (*/component/observation/id) liegt, <b>MUSS</b> dieses Element angegeben sein ( <b>M [1..1]</b> ).<br>In allen anderen Fällen <b>MUSS</b> das Element komplett entfallen ( <b>NP [0..0]</b> ).<br>Damit soll verhindert werden das ein Messergebnis-Unterelement oder Serienmessung-Unterelement aus seinem Kontext entfernt wird. |   |   |             |
| └─ hl7:code         | CD.IPS     | 1 ... 1   | M | Code des Ergebnisses.<br>Die Art des angegebenen Messergebnisses (Blutzuckerwert, Aktivität, Schritte, Wohlbefinden, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben.<br>Codes, die im aktuellen ValueSet nicht vorhanden sind, werden von der ELGA GmbH ergänzt. Bitte dazu einen Vorschlag aus einer Codierungsart (SNOMED CT, LOINC, etc., ausgenommen MDC) frei wählen und an cda@elga.gv.at zusenden. | (atc...try) |
|                     | CONF       | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.28 TGD_Messergebnis_Codes_VS (DYNAMIC)  |   |   |             |
| Eingefügt           |            | 1 ... 1   | M | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 Original Text Reference (DYNAMIC)  |             |
| └─ hl7:originalText | ED         | 1 ... 1   | M | Textinhalt, der codiert wurde.  | (atc...try) |
| └─ hl7:reference    | TEL        | 1 ... 1   | M | Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx'].<br>Die Referenz ist mit einem content-Element mit ID-Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente.  | (atc...try) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |                   |         |   |   |             |
|-------------------|-------------------|---------|---|---|-------------|
| └ @value          |                   | 1 ... 1 | R   |   |             |
|                   | Schematron assert | role    | error   |   |             |
|                   |                   | test    | starts-with(@value,'#')   |   |             |
|                   |                   | Meldung | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |   |             |
| └ hl7:translation | CD                | 1 ... 1 | M   | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt.   | (atc...try) |
| └ @code           |                   | 1 ... 1 | R   |   |             |
| └ @codeSystem     | uid               | 1 ... 1 | F   | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └ @codeSystemName | st                | 0 ... 1 | F   | MDC   |             |
| └ @displayName    |                   | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ hl7:translation | CD                | 0 ... * |   | Hier können weitere Übersetzungen des Codes aus weiteren Codesystemen bereitgestellt werden.  | (atc...try) |
| └ hl7:text        | ED                | 1 ... 1 | M   | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der das gegebene Ergebnis narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (atc...try) |
| └ hl7:reference   | TEL               | 1 ... 1 | M   |   | (atc...try) |
| └ hl7:statusCode  | CS                | 1 ... 1 | M   |   | (atc...try) |

└ @code

CONF

1 ... 1 F completed

Auswahl

0 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:effectiveTime[@value]
- hl7:effectiveTime[@nullFlavor='UNK']
- hl7:effectiveTime

Constraint

Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime angeführt wird KANN, O [0..1] dieses Element komplett entfallen oder mit @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.

Wenn im übergeordneten Container-Element organizer/effectiveTime NICHT angeführt wird MUSS, R [1..1] dieses Element angegeben werden und KANN mittels @nullFlavor == "UNK" oder /low/@nullFlavor == "UNK" und /high/@nullFlavor == "UNK" strukturiert sein.

└ hl7:effectiveTime

TS.AT.TZ

0 ... 1

C

Messung mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt

(atc...try)

wo [@value]

└ @value

1 ... 1 R

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30 -->
<effectiveTime value="20110527133000+0200"/>
```

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<!-- Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt -->
<effectiveTime value="20110527"/>
```

└ hl7:effectiveTime

TS.AT.TZ

0 ... 1

C

Messung mit dem Gerät zu einem unbekannten Zeitpunkt  
Fixierter nullFlavor: UNK

(atc...try)

wo [@nullFlavor='UNK']

└ @nullFlavor

cs

1 ... 1

F

UNK

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |          |   |   |  |             |
|---------------------|----------|---|---|--|-------------|
|                     | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Messungen unbekannt --><br><effectiveTime nullFlavor="UNK"/>   |   |  |             |
| └ hl7:effectiveTime | IVL_TS   | 0 ... 1   | C | Messung mit dem Gerät in einer Zeitspanne.<br>Zugelassene nullFlavor: UNK  | (atc...try) |
|                     | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>   |   |  |             |
|                     | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start unbekannt und Ende am 27.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low nullFlavor="UNK"/><br><high value="20110527140000+0200"/><br></effectiveTime>   |   |  |             |
|                     | Beispiel | Strukturbeispiel<br><!-- Start am 27.05.2011 um 13:30 und Ende Unbekannt --><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high nullFlavor="UNK"/><br></effectiveTime>   |   |  |             |
|                     | Beispiel | Strukturbeispiel (auch high auf Sekunde genau und low auf Tag genau möglich)<br><!-- Start am 27.05.2011, Uhrzeit unbekannt, und Ende am 28.05.2011 um 14:00 --><br><effectiveTime><br><low value="20110527"/><br><high value="20110528140000+0200"/><br></effectiveTime> |   |  |             |
| Eingefügt           |          | 0 ... 1   | C | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (DYNAMIC)   |             |
| Auswahl             |          | 0 ... 1   |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:low[@value]</li> <li>hl7:low[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |             |
| └ hl7:low           | TS.AT.TZ | 0 ... 1   |   |  | (atc...try) |
| wo [@value]         |          |   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |          |         |   |  |             |
|------------------------|----------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |   |  |             |
| └ @nullFlavor          | CS       | 1 ... 1 | F | UNK  |             |
| Auswahl                |          | 0 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ h17:high[@value]</li> <li>▪ h17:high[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |             |
| └ h17:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |  | (atc...try) |
| wo [@value]            |          |         |   |  |             |
| └ h17:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |   |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |   |  |             |
| └ @nullFlavor          | CS       | 1 ... 1 | F | UNK  |             |
| └ h17:performer        |          | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ h17:author           |          | 1 ... 1 | M | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ h17:informant        |          | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ h17:participant      |          | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |    |         |   |   |             |
|-------------------------|--|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:entryRelationship |  |    | 1 ... 1 | M | Komponente zur Aufnahme des Containers Serienmessungs-Reihe, welcher wiederum eine bis mehrere Serienmessungen und ein Serienmessungs-Intervall beinhaltet.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 <i>Serienmessungs-Gruppe Entry</i> (DYNAMIC)   | (atc...try) |
| └ @typecode             |  | CS | 1 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
| Auswahl                 |  |    | 0 ... * |   | Komponente zur Aufnahme von Zusatzinformationen als untergeordnetes, eigenes Messergebnis-Entry oder Serienmessungs-Entry.<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:entryRelationship welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:entryRelationship welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 <i>Serienmessung Entry</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ hl7:entryRelationship |  |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.71 <i>Messergebnis Entry</i> (DYNAMIC)  | (atc...try) |
| └ @typecode             |  | CS | 1 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd |  | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

::
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:id root="2.25" extension="urn:uuid:784134ee-e04b-4cf7-8884-9362a30cc253" assigningAuth-
    orityName="HerzMobil Tirol"/>
    <hl7:code code="86047003" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT"
    displayName="Active physical exercise (observable entity)">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype3"/>
      </hl7:originalText>
      <hl7:translation code="MDC_UNKNOWN" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemNa-
      me="MDC" displayName="MDC_UNKNOWN: Code unknown"/>
      <hl7:translation code="62812-3" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC"
      displayName="Physical Activity"/>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <!-- Zeit der Messung -->
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="CD" code="418060005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemNa-
    me="SNOMED CT" displayName="Running">
      <hl7:translation code="8455155" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC"
      displayName="MDC_HF_ACT_RUN: Activity: Running"/>
    </hl7:value>
    <hl7:author>
      <!-- Zeit an dem das Gerät den Messwert übertragen hat -->
      <hl7:time value="20150822170952+0200"/>
      <hl7:assignedAuthor>
        <hl7:id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="0E-ED-AB-EE-DE-AD-BE-09"
        assigningAuthorityName="EUI-64"/>
        <hl7:assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
      </hl7:assignedAuthor>
    </hl7:author>
    <hl7:entryRelationship typeCode="COMP">
      <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
        <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
        <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
        <hl7:code code="66266-8" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" dis-
        playName="Time doing this activity">
          <hl7:originalText>
            <hl7:reference value="#resultstype31"/>
          </hl7:originalText>
          </hl7:code>
          <hl7:text>
            <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
          </hl7:text>
          <hl7:statusCode code="completed"/>
        </hl7:code>
      </hl7:observation>
    </hl7:entryRelationship>
  </hl7:observation>
</hl7:ClinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
<hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
<hl7:value xsi:type="PQ" value="30.0" unit="min"/>
</hl7:observation>
</hl7:entryRelationship>
<hl7:entryRelationship typeCode="COMP">
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:code code="66270-0" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" displayName="Activity intensity">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype32"/>
      </hl7:originalText>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultactivity1"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="ST">Mittel</hl7:value>
  </hl7:observation>
</hl7:entryRelationship>
</hl7:observation>

::
</hl7:ClinicalDocument>
```

|                          |    |         |   |   |             |
|--------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:entryRelationship |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101 Serienmessung Entry (DYNAMIC) | (atc...try) |
| └─ @typecode             | CS | 1 ... 1 | F | COMP  |             |
| └─ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └─ hl7:referenceRange    |    | 0 ... 1 |   |   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

::
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.71"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.32" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.33" extension="2015-11-19"/>
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.2" extension="2015-08-01"/>
    <hl7:id root="2.25" extension="urn:uuid:04eb4803-4b8f-4609-9876-1c33a8bf5553" assigningAuthorityName="HerzMobil Tirol"/>
    <hl7:code code="405176005" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.96" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="Blood glucose status">
      <hl7:originalText>
        <hl7:reference value="#resultstype4"/>
      </hl7:originalText>
      <hl7:translation code="160184" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_CONC_GLU_CAPILLARY_WHOLEBLOOD: Blood Glucose Level"/>
      <hl7:translation code="41653-7" codeSystem="2.16.840.1.113883.1.3" codeSystemName="LOINC" displayName="Blood glucose status"/>
    </hl7:code>
    <hl7:text>
      <hl7:reference value="#resultsugar2"/>
    </hl7:text>
    <hl7:statusCode code="completed"/>
    <hl7:effectiveTime value="20160501120000+0200"/>
    <hl7:value xsi:type="PQ" value="201.5" unit="[mg/dL]"/>
    <hl7:author>
      <!-- Zeit an dem das Gerät den Messwert übertragen hat -->
      <hl7:time value="20150822170952+0200"/>
      <hl7:assignedAuthor>
        <hl7:id root="1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680" extension="12-34-56-78-9A-BC-DEF1"/>
        <hl7:assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"/>
      </hl7:assignedAuthor>
    </hl7:author>
    <hl7:referenceRange>
      <hl7:observationRange>
        <hl7:text>
          <hl7:reference value="#resultsugarRefRange"/>
        </hl7:text>
        <hl7:value xsi:type="IVL_PQ">
          <hl7:low value="80" unit="[mg/dL]"/>
          <hl7:high value="160" unit="[mg/dL]"/>
        </hl7:value>
      </hl7:observationRange>
    </hl7:referenceRange>
  </hl7:observation>

::
</hl7:ClinicalDocument>
```


|  |  |         |   |  |             |
|--|--|---------|---|--|-------------|
|  hl7:observationRange |  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
|--|--|---------|---|--|-------------|





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |                   |         |   |  |             |
|-----------------|-------------------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text      |                   | 1 ... 1 | M   |  | (atc...try) |
| └ h17:reference | TEL               | 1 ... 1 | M   | Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx'].<br>Die Referenz ist mit einem <i>content</i> -Element mit <i>ID</i> -Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente. | (atc...try) |
| └ @value        |                   | 1 ... 1 | R   |  |             |
|                 | Schematron assert | role    | error   |  |             |
|                 |                   | test    | starts-with(@value,'#')   |  |             |
|                 |                   | Meldung | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |  |             |
| └ h17:value     | IVL_PQ            | 1 ... 1 | R   |  | (atc...try) |

12.4.4.8 Serienmessungs-Gruppe Entry

|  |   |                |   |
|--|---|----------------|---|
| Id   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 <small>ref at-cda-bbr-</small>                                   | Gültigkeit     | 2021-02-19 12:59:10<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_SerienmessungsGruppeEntry vom 2020-06-02 07:48:02</li></ul> |
| Status   |  Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20210219  |
| Name   | atcdabbr_entry_SerienmessungsGruppeEntry  | Bezeichnung    | Serienmessungs-Gruppe Entry   |
| Beschreibung   |   |                |   |
| Das Serienmessungs-Gruppe Entry verknüpft die Perioden-Information mit den Messwerten. Dieses Entry beinhaltet mindestens zwei entryRelationship/observation Elemente, wobei eines die Perioden-Information und das andere die Messwerte dokumentiert. |   |                |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |             |  |
|-------------------|--|-------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102  |             |  |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template   |             |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |             |  |
| Benutzt           | Benutzt 2 Templates  |             |  |
|                   | Benutzt  | als         | NameVersion  |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103   | Containment |  Serienmessungs-Werte Entry (1.0.1+20210303)DYNAMIC   |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104   | Containment |  Serienmessungs-Periode Entry (1.0.0+20210219)DYNAMIC |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 <i>Serienmessungs-Gruppe Entry</i> (2020-06-02 07:48:02) <span>ref at-cda-bbr-</span>   |             |  |
| Beispiel          | Beispiel   |             |  |
|                   | <pre>&lt;observation classCode="OBSSER" moodCode="EVN"&gt;   &lt;templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.102"/&gt;   &lt;!-- This templateId indicates conformance to the PHM Measurement Waveform Series Observation.--&gt;   &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.37" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;code nullFlavor="NA"/&gt;   &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;     &lt;!-- Observation element containing the PHM Measurement Waveform Sample Period observation goes here --&gt;   &lt;/entryRelationship&gt;   &lt;!-- There could be many of these but the data must all have the SAME start time and period and elements --&gt;   &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;     &lt;!-- Observation containing the PHM Measurement Waveform observation goes here --&gt;   &lt;/entryRelationship&gt; &lt;/observation&gt;</pre> |             |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                    | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-------------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation         |     |         |      |  | (atc...try) |
| └ @classCode            | cs  | 1 ... 1 | F    | OBSSER   |             |
| └ @moodCode             | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId        | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Serienmessungs-Gruppe Entry  | (atc...try) |
| └ @root                 | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102   |             |
| └ hl7:templateId        | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Measurement Waveform Series Observation  | (atc...try) |
| └ @root                 | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.37  |             |
| └ @extension            | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:code              | CE  | 1 ... 1 | R    |  | (atc...try) |
| wo [@nullFlavor='NA']   |     |         |      |  |             |
| └ @nullFlavor           | cs  | 1 ... 1 | F    | NA   |             |
| └ hl7:entryRelationship |     | 1 ... * | M    | Komponente zur Aufnahme einen bis mehreren Serienmessungen.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103 <i>Serienmessungs-Werte Entry</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |  |    |         |   |  |             |
|-------------------------|--|----|---------|---|--|-------------|
| └ @typecode             |  | cs | 1 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd |  | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └ hl7:entryRelationship |  |    | 1 ... 1 | M | Komponente zur Aufnahme des Elementes Serienmessungs-Intervall.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104 <i>Serienmessungs-Periode Entry</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |
| └ @typecode             |  | cs | 1 ... 1 | F | COMP   |             |
| └ @contextConductionInd |  | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

12.4.4.9 Serienmessungs-Werte Entry

Id

1.2.40.0.34.6.0.11.3.103 ref at-cda-bbr-

Status

 Aktiv

Name

SerienmessungsWerteEntry

Gültigkeit

2021-01-28 14:58:41  
Andere Versionen mit dieser Id:

- ☐ SerienmessungsWerteEntry vom 2021-01-28 14:58:40
- ☐ SerienmessungsWerteEntry vom 2021-01-28 14:58:39
- ☐ SerienmessungsWerteEntry vom 2020-06-02 08:05:24

Versions-Label

1.0.1+20210303

Bezeichnung

Serienmessungs-Werte Entry

Beschreibung

Das Serienmessungs-Werte Entry dokumentiert die kontinuierlichen Messwerte in einem SLIST\_PQ Datentyp. Dieses Element ist Teil einer Serienmessungs-Gruppe Entry neben der zeitliche Komponente (Start und Zeitraum zwischen den Messungen) der kontinuierlichen Messung. Wenn die Serienmessung von einem IEEE 11073 kompatiblen Gerät empfangen wird, sind die Messungen im Real Time Sample Array (RTSA) metric objects zu finden.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103   |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103 <i>Serienmessungs-Werte Entry</i> (2020-06-02 08:05:24) <a href="#">ref at-cda-bbr-</a>  |
| Beispiel          | <div><div>Beispiel</div><pre>&lt;ClinicalDocument&gt;  ::    &lt;observation classCode="OBSCOR" moodCode="EVN"&gt;     &lt;!-- This templateId indicates conformance to the PHM Measurement Waveform Observation.--&gt;     &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.36" extension="2015-08-17"/&gt;     &lt;!-- This duplication of the code element is a necessary side effect of allowing this template to be     ported into a C-CDA. --&gt;     &lt;code code="8867-4" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.1" codeSystemName="LOINC" displayName="HEART RATE"&gt;       &lt;!-- The IEEE 11073 10101 reference identifier is MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE. --&gt;       &lt;translation code="149530" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayNa- me="MDC_PULS_OXIM_PULS_RATE: Pulse rate"/&gt;     &lt;/code&gt;     &lt;text&gt;       &lt;!-- This reference identifies content in human readable formatted text--&gt;       &lt;reference value="#PulseOx_PulseRate_data"/&gt;     &lt;/text&gt;     &lt;statusCode code="completed"/&gt;     &lt;value type="SLIST_PQ"&gt;       &lt;origin value="0" unit="1"/&gt;       &lt;scale value="1" unit="1"/&gt;       &lt;digits&gt;44 42 42 41 40 40 39 38 36 35 34 35 35 34 35 35 36 36 35 36&lt;/digits&gt;     &lt;/value&gt;   &lt;/observation&gt;  ::  &lt;/ClinicalDocument&gt;</pre></div> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT         | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|------------|--|------|---|-------------|
| hl7:observation  |            |  |      |   | (Ser...try) |
| └ @classCode     | cs         | 1 ... 1  | F    | OBSCOR  |             |
| └ @moodCode      | cs         | 1 ... 1  | F    | EVN   |             |
| └ hl7:templateId | II         | 1 ... 1  | M    | HL7 Austria - Serienmessungs-Werte Entry  | (Ser...try) |
| └ @root          | uid        | 1 ... 1  | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.103  |             |
| └ hl7:templateId | II         | 1 ... 1  | M    | PHM Measurement Waveform Observation  | (Ser...try) |
| └ @root          | uid        | 1 ... 1  | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.36   |             |
| └ @extension     | st         | 1 ... 1  | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS     | 1 ... 1  | M    | Code des Serienmessungs-Wertes, kopiert vom darüberliegenden Serienmessung Entry oder Serienmessung Vitalparameter Entry.<br><br>Die Art des angegebenen Vitalparameters (Puls, Blutdruck systolisch, etc.) wird codiert in diesem Element angegeben. Die Angabe der Art des Vitalparameters bestimmt auch die möglichen Einheiten des Werts.<br><br><b>Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden:</b> Welche der Vitalparameterarten angegeben werden müssen bzw. sollen, kann im jeweiligen speziellen Implementierungsleitfaden eingeschränkt werden. | (Ser...try) |
|                  | Constraint | Muss mit Code darüberliegenden "Serienmessung Entry" oder "Serienmessung Vitalparameter Entry" übereinstimmen. |      |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |     |         |   |   |             |
|---------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:originalText | ED  | 1 ... 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Textbereich, in dem die Vitalparameterart beschrieben ist ( <b>ohne</b> zusätzliche Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (Ser...try) |
| └─ hl7:reference    | TEL | 1 ... 1 | M |   | (Ser...try) |
| └─ @value           | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ hl7:translation  | CD  | 1 ... 1 | M | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt.   | (Ser...try) |
| └─ @code            |     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem      | uid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName  | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName     |     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ hl7:translation  | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.   | (Ser...try) |
| └─ @code            | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem      | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName  | st  | 0 ... 1 |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |          |         |   |   |             |
|-------------------|----------|---------|---|---|-------------|
| └ @displayName    | st       | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST       | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.   | (Ser...try) |
| └ @language       | cs       | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        | ED       | 1 ... 1 | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (Ser...try) |
| └ hl7:reference   | TEL      | 1 ... 1 | M |   | (Ser...try) |
| └ hl7:statusCode  | CS       | 1 ... 1 | M |   | (Ser...try) |
| └ @code           | CONF     | 1 ... 1 | F | completed   |             |
| └ hl7:value       | SLIST_PQ | 0 ... 1 |   |   | (Ser...try) |
| └ hl7:origin      | PQ       | 1 ... 1 | M |   | (Ser...try) |
| └ @value          | real     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @unit           | cs       | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ hl7:scale       | PQ       | 1 ... 1 | M |   | (Ser...try) |




└ @value real 1 ... 1 R

└ @unit cs 0 ... 1

└ hl7:digits list\_int 1 ... 1 M (Ser...try)

#### 12.4.4.10 Serienmessungs-Periode Entry

|        |   |                |   |
|--------|---|----------------|---|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104 <small>ref at-cda-bbr-</small>                                 | Gültigkeit     | 2021-02-19 12:59:19<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> SerienmessungsPeriodeEntry vom 2020-06-02 09:22:17</li></ul> |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20210219  |
| Name   | SerienmessungsPeriodeEntry  | Bezeichnung    | Serienmessungs-Periode Entry  |

##### Beschreibung

Das Serienmessungs-Periode Entry beschreibt die zeitliche Komponente (Start und Zeitraum zwischen den Messungen) der kontinuierlichen Messung. Dieses Element ist Teil einer Serienmessungs-Gruppe Entry neben den kontinuierlichen Messwerten. Wenn die Serienmessung von einem IEEE 11073 20601 PHM Gerät empfangen wird, ist die Zeit zwischen den Messungen in dem Sample-period Attribut zu finden.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104   |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104 <i>Serienmessungs-Periode Entry</i> (2020-06-02 09:22:17) <small>ref at-cda-bbr-</small> |

## Beispiel

### Beispiel

```
<hl7:ClinicalDocument>

::
  <hl7:observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <!-- This templateId indicates conformance to the PHM Measurement Waveform Sample Period Observation.-->
    <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.13" extension="2015-08-17"/>
    <hl7:code code="TIME_ABSOLUTE" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="ActCode" displayName="Absolute
time"/>
    <hl7:text>
      <!-- This reference identifies content in human readable formatted text-->
      <hl7:reference value="#PulseOx_PulseRate_Period"/>
    </hl7:text>
    <hl7:value xsi:type="GLIST_TS">
      <hl7:head value="20150822170922.86-0400"/>
      <!-- time interval between data points is 1 second -->
      <hl7:increment value="1.0" unit="s"/>
    </hl7:value>
  </hl7:observation>

::
</hl7:ClinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item              | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                                       | Label       |
|-------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation   |     |         |      |  | (Ser...try) |
| └ @classCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode       | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Serienmessungs-Periode Entry         | (Ser...try) |
| └ @root           | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.104                           |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M    | PHM Measurement Waveform Sample Period Observation | (Ser...try) |
| └ @root           | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.13                      |             |
| └ @extension      | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:code        | CE  | 1 ... 1 | M    |  | (Ser...try) |
| └ @hl7:code       | cs  | 1 ... 1 | F    | TIME_ABSOLUTE                                      |             |
| └ @hl7:codeSystem | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.5.4                              |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |          |         |         |   |   |             |
|-----------------------|----------|---------|---------|---|---|-------------|
| └ @hl7:codeSystemName |          | st      | 1 ... 1 | F | ActCode   |             |
| └ hl7:text            | ED       | 1 ... 1 | M       |   | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der der gegebene Vitalparameter narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (Ser...try) |
| └ hl7:reference       | TEL      | 1 ... 1 | M       |   |   | (Ser...try) |
| └ hl7:value           | GLIST_TS | 1 ... 1 | M       |   |   | (Ser...try) |
| └ hl7:head            | TS       | 1 ... 1 | M       |   | Hier wird der Start der Serienmessung dokumentiert.   | (Ser...try) |
| └ @value              |          | ts      | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:increment       | PQ       | 1 ... 1 | M       |   | Hier wird der Abstand zwischen den einzelnen Messungen der Serienmessung dokumentiert.  | (Ser...try) |
| └ @value              |          | real    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @unit               |          | cs      | 1 ... 1 | R |   |             |

12.4.4.11 Medikation Verordnung Entry eMedikation



















|        |                        |              |                |
|--------|------------------------|--------------|----------------|
| Id     | 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 | ref elgabbr- | Gültigkeit     |
| Status | Entwurf                |              | Versions-Label |

2014-09-01  
Andere Versionen mit dieser Id:  
▪ ☐ MedikationVerordnungEntryemed vom 2014-01-31

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |   |                    |   |
|--------------------------|---|--------------------|---|
| <b>Name</b>              | MedikationVerordnungEntryemed                                   | <b>Bezeichnung</b> | Medikation Verordnung Entry eMedikation |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 |                    |   |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                    |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                    |   |

## Benutzt 18 Templates

| Benutzt              | als         | Name  | Version |
|----------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.11.90012 | Inklusion   |  Sbadm TemplateId Options  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30006 | Inklusion   |  Einnahmedauer   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30007 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung effectiveTime                        | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30008 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung                                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30009 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause                    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30010 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30037 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung doseQuantity                         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30039 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung doseQuantity                        | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30041 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause doseQuantity       | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30043 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause doseQuantity      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.2.3.4 | Containment |  Arznei Entry (1.0.1+20210518)   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.90004 | Inklusion   |  AuthorElements  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30040 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung entryRelationship                   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30044 | Inklusion   |  Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause entryRelationship | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30033 | Inklusion   |  Patient Instructions (2020.1)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30034 | Inklusion   |  Pharmacist Instructions (2020.1)  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.30045 | Inklusion   |  Therapieart   | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.11.90013 | Inklusion   |  ID des Containers   | DYNAMIC |

Benutzt

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1 *Medikation Verordnung Entry eMedikation* (2014-09-01) [ref elgabbr-](#)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel

```

<ClinicalDocument>
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
    <!-- ELGA -->
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.1"/>
    <!-- HL7 CCD -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>
    <!-- IHE PCC -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>
    <!-- IHE PHARM -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2"/>
    <!-- IHE PHARM Dosage Instructions -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>
    <!-- „Delay Start Dosing“ bei Verwendung von „width“ in Einnahmedauer -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.21"/>
    <!-- ***** Dosierungsarten Anfang ***** -->
    <!-- Dosierungsart 1 und 3, „Normal dosing“ -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>
    ... oder ...
    <!-- Dosierungsart 2, „Split dosing“ -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9"/>
    <!-- ***** Dosierungsarten Ende ***** -->
    <!-- ID des MedikationVerordnung-Entry -->
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="VerordnungsId" assigningAuthorityName="Ordination Dr. Muster"/>
    <!--Referenz zum narrativen Abschnitt dieses MedikationVerordnung-Entry im Text-Bereich der Sektion-->
    <text>
      <reference value="#vpos-1"/>
    </text>
    <!-- Statuscode des MedikationVerordnung-Entry -->
    <statusCode code="completed"/>
    <!-- Einnahmedauer -->
    <effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
      <low value="20131009000000+0200"/>
      <high value="20131020235959+0200"/>
    </effectiveTime>
    <!-- ***** Dosierungsart 1 und 3 Anfang, Teil 1 *****
    Im Falle von Dosierungsart 1 und 3 („Normal dosing“) werden die
    Einnahmezeitpunkte + Dosis in Form eines weiteren effectiveTime
    und eines doseQuantity Elements angegeben
    -->
    <effectiveTime xsi:type="PIVL_TS|SXPR_TS"/>
    <!-- ***** Dosierungsart 1 und 3 Ende, Teil 1 ***** -->
    <!-- Maximale Anzahl der zusätzlichen Einlösungen -->
    <repeatNumber value="3"/>
    <!-- Art der Anwendung -->
    <routeCode code="100000073633" displayName="Subkutane Anwendung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.4" codeSystemName="MedikationArtAnwendung"/>
    <!-- ***** Dosierungsart 1 und 3 Anfang, Teil 2 ***** -->
    <doseQuantity value=" " unit=" "/>
    <!-- ***** Dosierungsart 1 und 3 Ende, Teil 2 ***** -->
    <!-- Arznei -->
    <consumable>
      <!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) -->
      <manufacturedProduct classCode="MANU">
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
        <!-- IHE PCC -->
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
        <!-- HL7 CCD -->

```



```

<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
  <!-- ELGA Arznei-Entry -->
  <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
  <!-- ELGA -->
  :
</manufacturedMaterial>
</manufacturedProduct>
</consumable>
<!-- Verfasser der Verordnung (nur bei Verwendung im Rahmen der Medikationsliste) -->
<author> : </author>
<!--
***** Dosierungsart 2 und 4 Anfang *****
Im Falle von Dosierungsart 2 und 4 („Split dosing“) werden die
Einnahmezeitpunkte + Dosis in Form von untergeordneten
entryRelationship Elementen angegeben (Morgens, Mittags, ...)
-->
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <sequenceNumber value="1"/>
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>
      <effectiveTime operator="A" xsi:type="EIVL_TS">
        <event code="ACM"/>
        <offset value="0" unit="s"/>
      </effectiveTime>
      <doseQuantity value="2"/>
    </substanceAdministration>
  </entryRelationship>
  :
  <!-- ***** Dosierungsart 2 und 4 Ende ***** -->
  <!-- Packungsanzahl -->
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
      <independentInd value="false"/>
      <quantity value="1"/>
    </supply>
  </entryRelationship>
  <!-- Zusatzinformationen für den Patienten -->
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>
      <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
    </act>
  </entryRelationship>
  <!-- Ergänzende Informationen zu magistralen Zubereitungen -->
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>
      <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
    </act>
  </entryRelationship>
  <!-- Therapieart -->
  <entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
      <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.4"/>
      <code code="EINZEL" displayName="Einzelverordnung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.6" codeSystemName="MedikationTherapieArt"/>
    </act>
  </entryRelationship>

```








1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

```
</act>  
</entryRelationship>  
</substanceAdministration>  
</ClinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                        | DT         | Kard  | Konf | Beschreibung                 | Label       |
|-----------------------------|------------|---|------|------------------------------|-------------|
| hl7:substanceAdministration |            |   |      |                              | (Med...med) |
| └ @classCode                | cs         | 1 ... 1   | F    | SBADM                        |             |
| └ @moodCode                 | cs         | 1 ... 1   | F    | INT                          |             |
|                             | Constraint | Bei Dosierungsart 1 "Normal dosing" oder 3 "Tagesdosierung an bestimmten Tagen" (templateId = 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1) wird kein entryRelationship typeCode COMP als Dosiskomponente verwendet                  |      |                              |             |
|                             | Constraint | Wiederholung der Komponente zur Aufnahme eines Einnahmezeitpunkts und -dosis bei Dosierungsvariante 2 und 4 höchstens einmal je Zeitcode!   |      |                              |             |
|                             | Constraint | Konditionale Konformität für ID des Verordnungs-Entry Containers (Rezept-Dokument) <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Element wird in Medikationsliste verwendet: Card 1..1 Conf M</li> <li>▪ Sonst NP</li> </ul> |      |                              |             |
| └ hl7:templateId            | II         | 1 ... 1   | M    | ELGA.                        | (Med...med) |
| └ @root                     | uid        | 1 ... 1   | F    | 1.2.40.0.34.11.8.1.3.1       |             |
| └ hl7:templateId            | II         | 1 ... 1   | M    | HL7 CCD 3.9.                 | (Med...med) |
| └ @root                     | uid        | 1 ... 1   | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.24 |             |
| └ hl7:templateId            | II         | 1 ... 1   | M    | IHE PCC Medications Entry.   | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |            |  |   |   |             |
|-----------|--|------------|--|---|---|-------------|
|           |  @root          | uid        | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7   |             |
|           |  hl7:templateId | II         | 1 ... 1  | M | IHE PHARM Prescription Entry.   | (Med...med) |
|           |  @root          | uid        | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.2   |             |
|           |  hl7:templateId | II         | 1 ... 1  | M | IHE PHARM Dosage Instructions.  | (Med...med) |
|           |  @root          | uid        | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6   |             |
| Eingefügt |  |            |  |   | von 1.2.40.0.34.11.90012 <i>Sbadm TemplateId Options</i> (DYNAMIC)<br>„Delay Start Dosing“ Markierung bei Verwendung eines „width“ Elements in Einnahmedauer.<br>Siehe Kapitel 6.4.1.2.6, „Einnahmedauer“   |             |
|           |  hl7:templateId | II         |  | C | Dosierungsart, mögliche Werte:<br>a) Normal: @root = <b>1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1</b><br>b) Split: @root = <b>1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9</b><br>Es ist in jedem Fall die TemplateId für „Normal dosing“ (a) anzugeben (auch wenn keine strukturierten Dosierungsinformationen angegeben sind), außer es ist gemäß Kapitel „Dosierungsvarianten/Zeitpunkt(e) der Einnahme“ die Angabe von „Split dosing“ (b) vorgeschrieben | (Med...med) |
|           |  @root        | uid        | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.21  |             |
|           |  | Constraint | <b>Konditionale Konformität</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Einnahmedauer beinhaltet low/high Elemente Conf: <b>NP</b></li><li>Einnahmedauer beinhaltet ein width Element: Card 1..1 Conf <b>M</b></li></ul> |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Auswahl

1 ... 1

Dosierungsart: Normal (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1) oder Split (1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9)

Elemente in der Auswahl:

- hl7:templateId[not(@nullFlavor)]
- hl7:templateId[not(@nullFlavor)]

|                  |     |         |   |                                 |             |
|------------------|-----|---------|---|---------------------------------|-------------|
| └ hl7:templateId | II  | ... 1   | M |                                 | (Med...med) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1 |             |
| └ hl7:templateId | II  | ... 1   | M |                                 | (Med...med) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9   |             |
| └ hl7:id         | II  | 0 ... 1 | C | ID des MedikationAbgabe-Entry.  | (Med...med) |
| wo [1]           |     |         |   |                                 |             |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | R |                                 |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | R |                                 |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |         |  |         |   |   |
|-------------------|---------|--|---------|---|---|
| Constraint        |         | <p><b>Für e-Medikation:</b> ID eines MedikationVerordnungs-Entry gemäß Projekt e-Medikation: Das erste ID Element enthält eine von Zentralkomponenten der e-Medikation vergebene neue ID des Verordnungs-Entry, welche durch eine eigene OID im @root-Attribut gekennzeichnet ist. Diese neue ID ist notwendig, da das Verordnungs-Entry bei Rückgabe in der Medikationsliste durch die Zentralkomponenten mit verschiedenen zusätzlichen Informationen ergänzt wird.</p> <p><b>Nur für andere e-Befunde</b> (also Befundklassen außerhalb dieses Leitfadens, wie z.B. Entlassungsbrief ärztlich) ist eine lokale OID zulässig, sofern keine VerordnungsID vorliegt.</p> <p><b>Bedingung:</b><br/>Bei Medikationsliste @root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2.1" @extension=VerordnungsID<br/>Sonst @root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" @extension=VerordnungsID</p> |         |   |   |
| Beispiel          |         | <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="WYE82A2G8EWE_4711" assigningAuthorityName="Ordination Dr. Muster"/>  |         |   |   |
| Schematron assert | role    | error  |         |   |   |
|                   | test    | not(ancestor::hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@root='1.2.40.0.34.11.8.3']) or hl7:id[1][@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2']   |         |   |   |
|                   | Meldung | Bei Medikationslisten muss die erste ID die @root OID 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2.1 tragen.  |         |   |   |
| Schematron assert | role    | error  |         |   |   |
|                   | test    | not(ancestor::hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@root='1.2.40.0.34.11.8.1']) or hl7:id[1][@root='1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2']   |         |   |   |
|                   | Meldung | Bei Verordnungen muss die erste ID die @root OID 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2 tragen.   |         |   |   |
| Schematron assert | role    | error  |         |   |   |
|                   | test    | not(ancestor::hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[starts-with(@root, '1.2.40.0.34.11.8')]) or hl7:id[1]  |         |   |   |
|                   | Meldung | Für e-Medikation Dokumente muss die erste ID angegeben sein.   |         |   |   |
| └ hl7:id          |         | II   | 0 ... 1 | C | ID des MedikationVerordnungs-Entry. (Med...med) |
| wo [2]            |         |  |         |   |   |
| └ @root           |         | uid  | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2                         |

|                                       |                       |  |   |   |             |
|---------------------------------------|-----------------------|--|---|---|-------------|
|                                       |                       | Wurzel OID der ID eines MedikationAbgabe-Entry gemäß Projekt e-Medikation.   |   |   |             |
|                                       |                       | VerordnungsID.   |   |   |             |
| <div><div>└ @extension</div></div>    | st                    | 1 ... 1  | R |   |             |
|                                       | <div>Constraint</div> | <div><b>Für e-Medikation:</b><br/>Das zweite ID Element enthält die ID des ursprünglich im Rezept-Dokument angegebenen Verordnungs-Entry, welcher der Ausgangspunkt des vorliegenden Verordnungs-Entry darstellt.</div> <div><b>Konditionale Konformität</b><br/>Verordnungs-Entry liegt in Medikationsliste vor: Card 1..1 Conf M<br/>Sonst: NP</div> |   |   |             |
| hl7:text                              | ED                    | 1 ... 1  | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die gegebene Medikation narrativ beschrieben ist ( <u>mit</u> zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (Med...med) |
|                                       | Beispiel              | <div>Strukturbeispiel</div> <div>&lt;text&gt;<br/>&lt;reference value="#vpos-1"/&gt;<br/>&lt;/text&gt;</div>   |   |   |             |
| <div><div>└ hl7:reference</div></div> | TEL                   | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| <div><div>└ @value</div></div>        |                       | 1 ... 1  | R | #vpos-{generierteID},<br>z.B.: #vpos-1  |             |
| hl7:statusCode                        | CS                    | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| <div><div>└ @code</div></div>         | <div>CONF</div>       | 1 ... 1  | F | completed   |             |
| fügt                                  |                       | von 1.2.40.0.34.11.30006 Einnahmedauer (DYNAMIC)   |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |   |
|----------|---|
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><cda:ClinicalDocument><br><!--<br>Einnahme von 27.05.2011, Ende unbekannt<br>--><br><cda:effectiveTime xsi:type="IVL_TS"><br><cda:low value="20110527000000+0200"/><br><cda:high nullFlavor="UNK"/><br></cda:effectiveTime><br></cda:ClinicalDocument>                   |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><cda:ClinicalDocument><br><!--<br>Einnahmestart unbekannt, Dauer 2 Wochen lang<br>--><br><cda:effectiveTime xsi:type="IVL_TS"><br><cda:width value="2" unit="wk"/><br></cda:effectiveTime><br></cda:ClinicalDocument>  |
| Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><cda:ClinicalDocument><br><!--<br>Dosierungsinformationen sind angegeben, aber Einnahmedauer unbekannt<br>--><br><cda:effectiveTime xsi:type="IVL_TS"><br><cda:low nullFlavor="UNK"/><br><cda:high nullFlavor="UNK"/><br></cda:effectiveTime><br></cda:ClinicalDocument> |

Auswahl

0 ... 1

- Elemente in der Auswahl:
- hl7:effectiveTime[1][hl7:low]
  - hl7:effectiveTime[1][hl7:width]
  - hl7:effectiveTime[1][@nullFlavor]

|                     |        |         |   |   |             |
|---------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:effectiveTime | IVL_TS |         |   | Zeitelement zur Dokumentation der Einnahmedauer.                    | (Med...med) |
| wo [1] [hl7:low]    |        |         |   |   |             |
| └ hl7:low           | TS     | 1 ... 1 | R | Zeitpunkt des Einnahmestarts.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b> | (Med...med) |
| └ hl7:high          | TS     | 1 ... 1 | R | Zeitpunkt des Einnahmeendes.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>  | (Med...med) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| <div><div></div><div>hl7:effectiveTime</div></div> | IVL_TS                |   |   | Dauer der Einnahme, wenn Einnahmestart unbekannt  | (Med...med) |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|--|-----------------------|---|---|---|-------------|------|------|----------|------|---|--|--|----|-------|
| wo [1] [hl7:width]                                 |                       |   |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| <div><div></div><div>hl7:width</div></div>         | PQ                    | 1 ... 1   | R | Dauer der Einnahme, wenn Einnahmestart unbekannt<br>Bemerkung: Wenn ein width Element angegeben wird, MUSS auch die templateld für „Delay Start Dosing“ angegeben werden.<br>Siehe Kapitel „Template IDs“ | (Med...med) |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| <div><div></div><div>@unit</div></div>             | cs                    | 0 ... 1   |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|  | <div>CONF</div>       | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.69 ELGA_MedikationFrequenz (DYNAMIC)  |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| <div><div></div><div>hl7:effectiveTime</div></div> | IVL_TS                |   |   |   | (Med...med) |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| wo [1] [@nullFlavor]                               |                       |   |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| <div><div></div><div>@nullFlavor</div></div>       | cs                    | 1 ... 1   | F | NA  |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|  | <div>Constraint</div> | <div>Konditionale Konformität</div> <table><tr><th>Card</th><th>Conf</th><th>Prädikat</th></tr><tr><td>1..1</td><td>M</td><td>Es wird in einer Verordnung (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) die Dosierungsvariante "Split" mit templateld 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 verwendet wird.</td></tr><tr><td></td><td>NP</td><td>Sonst</td></tr></table> |   |   |             | Card | Conf | Prädikat | 1..1 | M | Es wird in einer Verordnung (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) die Dosierungsvariante "Split" mit templateld 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 verwendet wird. |  | NP | Sonst |
| Card   | Conf                  | Prädikat  |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| 1..1   | M                     | Es wird in einer Verordnung (1.2.40.0.34.11.8.1.3.1) die Dosierungsvariante "Split" mit templateld 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9 verwendet wird.  |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|  | NP                    | Sonst   |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Auswahl

... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:effectiveTime[hl7:period and not(hl7:phase)] eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30007 *Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung effectiveTime* (DYNAMIC)
- hl7:effectiveTime[2] eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30008 *Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung* (DYNAMIC)
- ein Element eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30009 *Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause* (DYNAMIC)
- hl7:effectiveTime[2] eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30010 *Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause* (DYNAMIC)

Eingefügt

von 1.2.40.0.34.11.30007 *Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung effectiveTime* (DYNAMIC)

|                                    |            |   |   |  |             |
|------------------------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ hl7:effectiveTime                | PIVL_TS    |   | C | Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3.  | (Med...med) |
| wo [hl7:period and not(hl7:phase)] |            |   |   |  |             |
| └ @operator                        | cs         | 1 ... 1   | F | A  |             |
| └ @institutionSpecified            | bl         | 1 ... 1   | F | true   |             |
|                                    | Constraint | Konditionale Konformität:<br>Dosierung angegeben -> 1..1 M<br>Dosierung nicht angegeben -> NP |   |  |             |
| └ hl7:period                       | PQ         | 1 ... 1   | R | Zeitraum für den die Dosis in doseQuantity vorgesehen ist. | (Med...med) |
| └ @value                           |            | 1 ... 1   | F | 1  |             |
| └ @unit                            | cs         | 1 ... 1   | R |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

CONF

Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.69 *ELGA\_MedikationFrequenz* (DYNAMIC)

|                               |         |  |  |  |
|-------------------------------|---------|--|--|--|
| Eingefügt                     |         | von 1.2.40.0.34.11.30008 <i>Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung</i> (DYNAMIC)                  |  |  |
| └ h17:effectiveTime           |         |  | NP   | Das weitere effectiveTime-Element und das doseQuantity-Element nach dem effectiveTime-Element für die Einnahmedauer entfallen. Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3. (Med...med) |
| wo [2]                        |         |  |  |  |
| Eingefügt                     |         | von 1.2.40.0.34.11.30009 <i>Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause</i> (DYNAMIC) |  |  |
| Auswahl                       |         | ... 1  | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>h17:effectiveTime[h17:period and h17:phase]</li><li>h17:effectiveTime[h17:comp]</li></ul> |  |
| └ h17:effectiveTime           | PIVL_TS |  | C  | Für EIN Wochentag. Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3. (Med...med)   |
| wo [h17:period and h17:phase] |         |  |  |  |
| └ @operator                   | cs      | 1 ... 1  | F  | A  |
| └ h17:phase                   | IVL_TS  | 1 ... 1  | R  | Erstes Datum des entsprechenden Wochentags nach Einnahmebeginn (z.B.: 01.10.2013 -> Dienstag) (Med...med)  |
| └ h17:period                  | PQ      | 1 ... 1  | R  | (Med...med)  |
| └ @value                      |         | 1 ... 1  | F  | 1  |
| └ @unit                       | cs      | 1 ... 1  | F  | wk   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |            |   |   |  |             |
|---------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:effectiveTime | SXPR_TS    |   | C | Für mehrere Wochentage, z. B. wöchentlich montags und mittwochs                                  | (Med...med) |
| wo [hl7:comp]       |            |   |   |  |             |
| └ @operator         | cs         | 1 ... 1   | F | A  |             |
|                     | Constraint | Konditionale Konformität:<br>Dosierung angegeben -> 1..1 M<br>Dosierung nicht angegeben -> NP<br><br>1. Komponentencontainer ohne @operator, ggf. folgende Komponentencontainer mit @operator=l |   |  |             |
| └ h17:comp          | PIVL_TS    | 1 ... 1   | R | Komponentencontainer.  | (Med...med) |
| wo [not(@operator)] |            |   |   |  |             |
| └ h17:phase         | IVL_TS     | 1 ... 1   | R | Erstes Datum des entsprechenden Wochentags nach Einnahmebeginn<br>(z.B.: 01.10.2013 -> Dienstag) | (Med...med) |
| └ h17:period        | PQ         | 1 ... 1   | R |  | (Med...med) |
| └ @value            |            | 1 ... 1   | F | 1  |             |
| └ @unit             | cs         | 1 ... 1   | F | wk   |             |
| └ h17:comp          | PIVL_TS    | 0 ... *   |   |  | (Med...med) |
| wo [@operator='l']  |            |   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |  |        |         |    |  |             |
|---------------------|--|--------|---------|----|--|-------------|
| └ @operator         |  | cs     | 1 ... 1 | F  | I  |             |
| └ hl7:phase         |  | IVL_TS | 1 ... 1 | R  |  | (Med...med) |
| └ hl7:period        |  | PQ     | 1 ... 1 | R  |  | (Med...med) |
| └ @value            |  |        | 1 ... 1 | F  | 1  |             |
| └ @unit             |  | cs     | 1 ... 1 | F  | wk   |             |
| Eingefügt           |  |        |         |    | von 1.2.40.0.34.11.30010 Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:effectiveTime |  |        |         | NP | Das weitere effectiveTime-Element und das doseQuantity-Element nach dem effectiveTime-Element für die Einnahmedauer entfallen. Zeitelement zur Aufnahme der Dosierungsvarianten 1 und 3.   | (Med...med) |
| wo [2]              |  |        |         |    |  |             |
| Auswahl             |  |        | ... 1   |    | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>ein Element eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30037 <i>Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung doseQuantity</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:doseQuantity eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30039 <i>Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung doseQuantity</i> (DYNAMIC)</li><li>ein Element eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30041 <i>Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause doseQuantity</i> (DYNAMIC)</li><li>hl7:doseQuantity eingefügt vom Template 1.2.40.0.34.11.30043 <i>Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause doseQuantity</i> (DYNAMIC)</li></ul> |             |
| Eingefügt           |  |        |         |    | von 1.2.40.0.34.11.30037 <i>Dosierungsvariante 1: Tagesdosierung doseQuantity</i> (DYNAMIC)  |             |
| Auswahl             |  |        | ... 1   |    | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:doseQuantity[not(hl7:low hl7:high)]</li><li>hl7:doseQuantity[hl7:low hl7:high]</li></ul>  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                   |        |   |   |   |  |             |
|-----------------------------------|--------|---|---|---|--|-------------|
|                                   |        | Constraint  | Konditionale Konformität:<br>Menge in nicht-zählbaren Einheiten -> @unit 1..1 (required) aus Value-Set ELGA_MedikationMengenart<br>Menge in zählbaren Einheiten (Tabletten, Kapseln, etc.) -> @unit 0..1 (otional) mit @unit aus Value-Set ELGA_MedikationMengenartAlternativ |   |  |             |
| └ h17:doseQuantity                | IVL_PQ |   | R   | Dosis.<br>mit doseQuantity als IVL_PQ, aber als PQ instantiiert |  | (Med...med) |
| wo [not(hl7:lowoder<br>hl7:high)] |        |   |   |   |  |             |
| └ @value                          |        | 1 ... 1   | R   | Tagesdosierung.   |  |             |
| └ @unit                           | cs     | 0 ... 1   |   |   |  |             |
|                                   | CONF   | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 ELGA_Medikation-Mengenart_VS (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 ELGA_Medikation-MengenartAlternativ (DYNAMIC) |   |   |  |             |
| └ h17:doseQuantity                | IVL_PQ |   | R   | mit doseQuantity als IVL_PQ                                     |  | (Med...med) |
| wo [hl7:lowoder<br>hl7:high]      |        |   |   |   |  |             |
| └ h17:low                         | PQ     |   |   |   |  | (Med...med) |
| └ @value                          |        | 1 ... 1   | R   |   |  |             |
| └ @unit                           | cs     | 0 ... 1   |   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |  |      |   |   |
|--------------------|--|------|---|---|
|                    |  | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_Medikation-Mengenart_VS</i> (DYNAMIC)        |   |
|                    |  |      | oder  |   |
|                    |  |      | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_Medikation-MengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |   |
| L h17:high         |  | PQ   |   | (Med...med)   |
| L @value           |  |      | 1 ... 1   | R   |
| L @unit            |  | cs   | 0 ... 1   |   |
|                    |  | CONF | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_Medikation-Mengenart_VS</i> (DYNAMIC)        |   |
|                    |  |      | oder  |   |
|                    |  |      | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_Medikation-MengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |   |
| Eingefügt          |  |      | von 1.2.40.0.34.11.30039 <i>Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung doseQuantity</i> (DYNAMIC)                                    |   |
| L h17:doseQuantity |  |      | NP  | Das weitere effectiveTime-Element und das doseQuantity-Element nach dem effectiveTime-Element für die Einnahmedauer entfallen.<br>Dosis bei Dosierungsvariante 1 und 3. |
| Eingefügt          |  |      | von 1.2.40.0.34.11.30041 <i>Dosierungsvariante 3: Tagesdosierung mit Einnahmepause doseQuantity</i> (DYNAMIC)                   |   |
| Auswahl            |  |      | ... 1   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>h17:doseQuantity[not(hl7:low hl7:high)]</li><li>h17:doseQuantity[hl7:low hl7:high]</li></ul>             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                   |        |   |  |   |             |
|-----------------------------------|--------|---|--|---|-------------|
|                                   |        | Constraint  | Konditionale Konformität:<br>Menge in nicht-zählbaren Einheiten -> @unit 1..1 (required) aus Value-Set ELGA_MedikationMengenart<br>Menge in zählbaren Einheiten (Tabletten, Kapseln, etc.) -> @unit 0..1 (optional) aus Value-Set ELGA_MedikationMengenartAlternativ |   |             |
| └ h17:doseQuantity                | IVL_PQ |   | R  | Dosis.<br>mit doseQuantity als IVL_PQ, aber als PQ instantiiert | (Med...med) |
| wo [not(h17:lowoder<br>h17:high)] |        |   |  |   |             |
| └ @value                          |        | 1 ... 1   | R  | Tagesdosierung.   |             |
| └ @unit                           | cs     | 0 ... 1   |  |   |             |
|                                   | CONF   | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_Medikation-Mengenart_VS</i> (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_Medikation-MengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |  |   |             |
| └ h17:doseQuantity                | IVL_PQ |   | R  | mit doseQuantity als IVL_PQ                                     | (Med...med) |
| wo [h17:lowoder<br>h17:high]      |        |   |  |   |             |
| └ h17:low                         | PQ     |   |  |   | (Med...med) |
| └ @value                          |        | 1 ... 1   | R  |   |             |
| └ @unit                           | cs     | 0 ... 1   |  |   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |                   |         |   |   |  |             |
|--------------------|-------------------|---------|---|---|--|-------------|
|                    |                   | CONF    | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_Medikation-Mengenart_VS</i> (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_Medikation-MengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| L h17:high         | PQ                |         |   |   |  | (Med...med) |
| L @value           |                   |         | 1 ... 1   | R   |  |             |
| L @unit            | cs                |         | 0 ... 1   |   |  |             |
|                    |                   | CONF    | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_Medikation-Mengenart_VS</i> (DYNAMIC)<br>oder<br>Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_Medikation-MengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| Eingefügt          |                   |         |   |   | von 1.2.40.0.34.11.30043 <i>Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause doseQuantity</i> (DYNAMIC) |             |
| L h17:doseQuantity |                   |         | NP  | Das weitere effectiveTime-Element und das doseQuantity-Element nach dem effectiveTime-Element für die Einnahmedauer entfallen.<br>Dosis bei Dosierungsvariante 1 und 3. |  | (Med...med) |
|                    | Schematron report | role    | warning   |   |  |             |
|                    |                   | test    | not(not(hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']) or hl7:effectiveTime[2])   |   |  |             |
|                    |                   | Meldung | effectiveTime[2] muss in den Dosierungsvarianten 1 und 3 anwesend sein  |   |  |             |
|                    | Schematron report | role    | warning   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |          |   |         |  |             |
|-------------------------------|----------|---|---------|--|-------------|
|                               |          |   | test    | not(not(hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']) or hl7:doseQuantity)  |             |
|                               |          |   | Meldung | doseQuantity muss in den Dosierungsvarianten 1 und 3 anwesend sein   |             |
|                               |          | Schematron report                             | role    | warning  |             |
|                               |          |   | test    | hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] and hl7:effectiveTime[2]   |             |
|                               |          |   | Meldung | effectiveTime[2] darf in den Dosierungsvariante 'Split dosing' nicht anwesend sein   |             |
|                               |          | Schematron report                             | role    | warning  |             |
|                               |          |   | test    | hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.9'] and hl7:doseQuantity   |             |
|                               |          |   | Meldung | doseQuantity darf in den Dosierungsvariante 'Split dosing' nicht anwesend sein   |             |
| <div>└ hl7:repeatNumber</div> | IVL_INT  | 1 ... 1                                       | R       | <div>Anzahl der Einlösungen.<br/>Dieses Element MUSS angegeben werden. Dieses Element beschreibt die mögliche maximale Anzahl von zusätzlichen Einlösungen dieser Verordnung. Bei Verwendung in der Medikationsliste wird immer der ursprüngliche Wert angegeben (ändert sich nicht nach einer Einlösung).</div> <div>Beispiele :<ul style="list-style-type: none"><li>Ein Wert von „0“ bedeutet, dass die Verordnung kein weiteres Mal eingelöst werden kann (Standardfall)</li><li>Ein Wert von „3“ bedeutet, dass die Verordnung insgesamt vier Mal eingelöst werden kann.</li></ul></div> <div>Alle Verordnungen eines Rezepts MÜSSEN denselben Wert aufweisen.<br/>Zugelassene nullFlavor: <b>MSK</b>Wird die Anzahl der zusätzlichen Einlösungen nicht angegeben (nullFlavor = MSK, Maskiert), kann die Anzahl vom empfangenden System nur mit 0 angenommen werden (keine zusätzlichen Einlösungen).</div> <div>Maximale Anzahl der zusätzlichen Einlösungen<br/>Bei Kassenrezepten:<br/>Fixer Wert: 0<br/>Bei Privatrezepten:<br/>Maximaler Wert: 5</div> | (Med...med) |
|                               | Beispiel | Strukturbeispiel<br><repeatNumber value="0"/> |         |  |             |
| <div>└ hl7:routeCode</div>    | CE       | 0 ... 1                                       |         | Art der Anwendung der Arznei.  | (Med...med) |

└ @codeSystem

CONF

0 ... 1 F 1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.4

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<routeCode code="100000073633" displayName="Subkutane Anwendung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.4"
codeSystemName="ELGA_MedikationArtAnwendung"/>
```

└ hl7:consumable

1 ... 1

M

Komponente zur Aufnahme der Arznei auf die sich der MedikationVerordnungs-Entry bezieht.  
Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.2.3.4 *Arznei Entry* (DYNAMIC)

(Med...med)

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<consumable>
  <!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) -->
  <manufacturedProduct classCode="MANU">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
    <!-- IHE PCC -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
    <!-- HL7 CCD -->
    <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
      <!-- ELGA Arznei-Entry -->
      <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
      :
    </manufacturedMaterial>
  </manufacturedProduct>
</consumable>
```

von 1.2.40.0.34.11.90004 *AuthorElements* (DYNAMIC)

**Dieses Element wird nur bei ELGA MedikationVerordnungs-Entrys verwendet, welche im Rahmen der Medikationsliste vorliegen.**

Es beinhaltet den **Verfasser des Rezepts** auf dem diese Verordnung ausgestellt wurde. Das author/time Element hat dabei die Bedeutung „Datum der Verordnung“. Siehe Kapitel „Teilnehmende Parteien“, Abschnitt „Verfasser des Dokuments (author)“ (bezogen auf das Rezept-Dokument).

Eingefügt

0 ... 1

C

Constraint

**Konditionale Konformität:**

Element wird in Medikationsliste verwendet und eine Referenz zu einer Verdnung ist vorhanden: Card 1..1  
Conf M  
Sonst NP

Auswahl

0 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:author[not(@nullFlavor)]
- hl7:author[@nullFlavor]

└ hl7:author

Verfasser des Dokuments.

(Med...med)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |   |         |   |   |             |
|-----------------------|---|---------|---|---|-------------|
| wo [not(@nullFlavor)] |   |         |   |   |             |
| └ @typeCode           | cs  | 0 ... 1 | F | AUT   |             |
| └ @contextControlCode | cs  | 0 ... 1 | F | OP  |             |
| └ hl7:functionCode    | CE  | 0 ... 1 |   | Funktionscode des Verfassers des Dokuments<br>z.B: „Diensthabender Oberarzt“, „Verantwortlicher Arzt für Dokumentati-<br>on“, „Stationsschwester“, ...<br>Eigene Codes und Bezeichnungen können verwendet werden.<br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „code-Element CE CWE“ zu befolgen. | (Med...med) |
| └ hl7:time            | TS.DATE.MIN   | 1 ... 1 | R | Der Zeitpunkt an dem das Dokument verfasst wurde.Grundsätzlich<br>sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.<br><br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>  | (Med...med) |
| └ hl7:assignedAuthor  |   | 1 ... 1 | M | Organisation, in deren Auftrag der Verfasser des Dokuments die Dokumen-<br>tation verfasst hat.   | (Med...med) |
| └ @classCode          | cs  | 0 ... 1 | F | ASSIGNED  |             |
| Beispiel              | <pre>&lt;assignedAuthor classCode="ASSIGNED"&gt;<br/>  &lt;id extension="ied8984938" root="1.2.276.0.76.3.1.139.933"/&gt;<br/>  &lt;assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;<br/>    &lt;!-- ... --&gt;<br/>  &lt;/assignedPerson&gt;<br/>&lt;/assignedAuthor&gt;</pre> |         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |        |   |   |   |             |
|---|--------|---|---|---|-------------|
| <div>L</div> <div>hl7:id</div>  | II     | 1 ... *   | R | <div>Identifikation des Verfassers des Dokuments im lokalen System/ des/der datenerstellenden Gerätes/Software.</div> <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.</div>  | (Med...med) |
| <div>L</div> <div>hl7:code</div>  | CE     | 0 ... 1   |   | <div>Angabe der Fachrichtung des Verfassers des Dokuments („Sonderfach“ gem. Ausbildungsordnung)z.B: „Facharzt/Fachärztin für Gynäkologie“,</div> <div>Wenn ein Autor mehreren ärztlichen Sonderfächern zugeordnet ist, kann das anzugebende Sonderfach gewählt werden. Additivfächer werden nicht angegeben.</div> <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „code-Element CE CWE“ zu befolgen.</div> | (Med...med) |
|   | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpecialty</i> (DYNAMIC) |   |   |             |
| <div>L</div> <div>hl7:telecom</div>   | TEL.AT | 0 ... *   |   | <div>Kontaktdaten des Verfassers des Dokuments.</div> <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.</div>  | (Med...med) |
| Auswahl   |        | 1 ... 1   |   | <div>Elemente in der Auswahl:</div> <div><div>hl7:assignedPerson</div><div>hl7:assignedAuthoringDevice</div></div>  |             |
| <div>L</div> <div>hl7:assignedPerson</div>                                    |        | ... 1   |   | <div>Personendaten des Verfassers des Dokuments.</div> <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen.</div>   | (Med...med) |
| Eingefügt <div>von 1.2.40.0.34.11.90001 <i>PersonElements</i> (DYNAMIC)</div> |        |   |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                    |  |    |         |   |   |             |
|------------------------------------|--|----|---------|---|---|-------------|
| └ @classCode                       |  | CS | 0 ... 1 | F | PSN   |             |
| └ @determinerCode                  |  | CS | 0 ... 1 | F | INSTANCE  |             |
| └ h17:name                         |  | PN | 1 ... 1 | M | Name der Person<br><br><b>Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 („strukturierte Angabe des Namens“) anzuwenden!</b><br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Namen-Elemente von Personen PN“ zu befolgen. | (Med...med) |
| └ h17:assignedAutho-<br>ringDevice |  |    | ... 1   |   |   | (Med...med) |
| └ @classCode                       |  | CS | 0 ... 1 | F | DEV   |             |
| └ @determinerCode                  |  | CS | 0 ... 1 | F | INSTANCE  |             |
| └ h17:manufacturer<br>ModelName    |  | SC | 0 ... 1 |   | Hersteller und Modellbezeichnung des datenerstellenden Gerätes.   | (Med...med) |
| └ h17:softwareName                 |  | SC | 0 ... 1 |   | Bezeichnung (und ggf Version) der datenerstellenden Software.   | (Med...med) |
| └ h17:representedOrga-<br>nization |  |    | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
| Eingefügt                          |  |    |         |   | von 1.2.40.0.34.11.90002 OrganizationElements (DYNAMIC)   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |          |  |   |   |             |
|--------------------|----------|--|---|---|-------------|
| └ @classCode       |          | 0 ... 1  | F | ORG                                     |             |
| └ @determinerCode  |          | 0 ... 1  | F | INSTANCE                                |             |
| └ hl7:id           | II       | 0 ... *  |   |   | (Med...med) |
| └ hl7:name         | ON       | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| └ hl7:telecom      | TEL.AT   | 0 ... *  |   |   | (Med...med) |
| └ hl7:addr         | AD       | 0 ... 1  |   |   | (Med...med) |
| └ hl7:author       |          |  |   | Verfasser nicht bekannt/nicht anwendbar | (Med...med) |
| wo [ @nullFlavor ] |          |  |   |   |             |
| └ @nullFlavor      | cs       | 1 ... 1  | F | NA                                      |             |
|                    | Beispiel | <author nullFlavor="NA"><br><time nullFlavor="NA"/><br><assignedAuthor nullFlavor="NA"><br><id nullFlavor="NA"/><br></assignedAuthor><br></author> |   |   |             |
| └ hl7:time         |          | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @nullFlavor      | cs       | 1 ... 1  | F | NA                                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |            |   |   |  |             |
|--|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:assignedAuthor   |            | 1 ... 1   | R |  | (Med...med) |
| └ @nullFlavor  | cs         | 1 ... 1   | F | NA   |             |
| └ h17:id   |            | 1 ... 1   | R |  | (Med...med) |
| └ @nullFlavor  | cs         | 1 ... 1   | F | NA   |             |
| Eingefügt  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.11.30040 Dosierungsvariante 2: Einzeldosierung entryRelationship (DYNAMIC)   |             |
| └ h17:entryRelationship  |            |   | C | Komponente zur Aufnahme eines Einnahmezeitpunkts und –dosis bei Dosierungsvariante 2 und 4.<br><b>Wiederholung höchstens einmal je Zeitcode!</b> | (Med...med) |
| wo [h17:substanceAdministration/h17:effectiveTime [@xsi:type='EIVL_TS']] |            |   |   |  |             |
| └ @typeCode  | cs         | 1 ... 1   | F | COMP   |             |
|  | Constraint | Konditionale Konformität:<br>Dosierung angegeben -> 1..* M<br>Dosierung nicht angegeben -> NP |   |  |             |
| └ h17:sequenceNumber   | INT        | 1 ... 1   | M | Aufsteigende Nummerierung der Unterelemente.   | (Med...med) |
| Eingefügt  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.11.30046 Splitdose-Einnahmezeitpunkte 1 (DYNAMIC)  |             |
| └ h17:substanceAdministration  |            | 1 ... 1   | M | Abbildung eines Einnahmezeitpunkts und –dosis als untergeordnetes substanceAdministration-Element.   | (Med...med) |
| └ @classCode   | cs         | 1 ... 1   | F | SBADM  |             |





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |            |   |   |  |             |
|--|------------|---|---|--|-------------|
| └ h17:doseQuantity   | IVL_PQ     | 1 ... 1   | M | Dosis.   | (Med...med) |
| └ h17:consumable   |            | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ h17:manufacturedProduct  |            | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ h17:manufacturedMaterial   |            | 1 ... 1   | R |  | (Med...med) |
| └ @nullFlavor  | cs         | 1 ... 1   | F | NA   |             |
| Eingefügt  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.11.30044 Dosierungsvariante 4: Einzeldosierung mit Einnahmepause entryRelationship (DYNAMIC)                                     |             |
| └ h17:entryRelationship  |            |   | C | Komponente zur Aufnahme eines Einnahmezeitpunkts und –dosis bei Dosierungsvariante 2 und 4.<br><b>Wiederholung höchstens einmal je Zeitcode!</b> | (Med...med) |
| wo [h17:substanceAdministration/h17:effectiveTime [@xsi:type='SXPR_TS']] |            |   |   |  |             |
| └ @typeCode  | cs         | 1 ... 1   | F | COMP   |             |
|  | Constraint | Konditionale Konformität:<br>Dosierung angegeben -> 1..* M<br>Dosierung nicht angegeben -> NP |   |  |             |
| └ h17:sequenceNumber   | INT        | 1 ... 1   | M | Aufsteigende Nummerierung der Unterelemente.   | (Med...med) |
| Eingefügt  |            |   |   | von 1.2.40.0.34.11.30047 Splittdose-Einnahmezeitpunkte 2 (DYNAMIC)   |             |
| └ h17:substanceAdministration  |            | 1 ... 1   | M | Abbildung eines Einnahmezeitpunkts und –dosis als untergeordnetes substanceAdministration-Element.   | (Med...med) |

└ @classCode cs 1 ... 1 F SBADM

└ @moodCode cs 1 ... 1 F INT

| Constraint | Konditionale Konformität |      |  |
|------------|--------------------------|------|--|
|            | Card                     | Conf | Prädikat   |
|            | 1..1                     | M    | Menge in nicht-zählbaren Einheiten, zulässige Werte gemäß Value-Set "ELGA_MedikationMengenart_VS"                                    |
|            | 0..1                     | O    | Menge in zählbaren Einheiten (Tabletten, Kapseln, etc.), zulässige Werte gemäß Value-Set "ELGA_MedikationMengenart_VS" oder Freitext |

└ h17:effectiveTime SXPR\_TS 1 ... 1 M Zeitelement zur Aufnahme des Einnahmezeitpunkts. (Med...med)

wo [@xsi:type='SXPR\_TS']

Constraint Die comp-Komponenten mit PIVL\_TS müssen bei allen Einnahmezeitpunkten gleich angegeben werden!

Constraint 1. Komponentencontainer mit @operator=A, ggf. folgende Komponentencontainer mit @operator=I

└ h17:comp EIVL\_TS 1 ... 1 M Komponentencontainer (Med...med)

wo [@xsi:type='EIVL\_TS']

└ h17:event 1 ... 1 M Einnahmezeitpunkt. (Med...med)

└ @code cs 1 ... 1 R

CONF Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.59 ELGA\_Einnahmezeitpunkte (DYNAMIC)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |         |         |   |  |             |
|--|---------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:offset                             | IVL_PQ  | 1 ... 1 | M | Zeitversatz (immer mit 0 Sekunden angegeben).  | (Med...med) |
| └ @value                                 |         | 1 ... 1 | F | 0  |             |
| └ @unit                                  | cs      | 1 ... 1 | F | s  |             |
| └ h17:comp                               | PIVL_TS | 1 ... 1 | M | Komponentencontainer zur Aufnahme der Einnahmetage.<br><b>Diese Komponenten MÜSSEN bei allen Einnahmezeitpunkten (SequenceNumber) gleich angegeben werden!</b> | (Med...med) |
| wo [@xsi:type='PIVL_TS'] [@operator='A'] |         |         |   |  |             |
| └ @operator                              | cs      | 1 ... 1 | F | A  |             |
| └ h17:phase                              | IVL_TS  | 1 ... 1 | R | Phase der Einnahme.  | (Med...med) |
| └ h17:value                              | TS      |         |   | <b>Erstes Datum des entsprechenden Wochentags nach Einnahmebeginn</b><br>(z.B.: 01.10.2013 -> Dienstag).   | (Med...med) |
| └ h17:period                             | PQ      | 1 ... 1 | R |  | (Med...med) |
| └ @value                                 |         | 1 ... 1 | F | 1  |             |
| └ @unit                                  | cs      | 1 ... 1 | F | wk   |             |
| └ h17:comp                               | PIVL_TS | 0 ... * |   | 2.+ Komponentencontainer zur Aufnahme der Einnahmetage   | (Med...med) |
| wo [@xsi:type='PIVL_TS'] [@operator='I'] |         |         |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                            |        |         |   |        |             |
|----------------------------|--------|---------|---|--------|-------------|
| └ h17:phase                | IVL_TS | 1 ... 1 | R   |        | (Med...med) |
| └ h17:value                | TS     |         |   |        | (Med...med) |
| └ h17:period               | PQ     | 1 ... 1 | R   |        | (Med...med) |
| └ @value                   |        | 1 ... 1 | F   | 1      |             |
| └ @unit                    | cs     | 1 ... 1 | F   | wk     |             |
| └ h17:doseQuantity         | IVL_PQ | 1 ... 1 | M   | Dosis. | (Med...med) |
| └ h17:consumable           |        | 1 ... 1 | M   |        | (Med...med) |
| └ h17:manufacturedProduct  |        | 1 ... 1 | M   |        | (Med...med) |
| └ h17:manufacturedMaterial |        | 1 ... 1 | R   |        | (Med...med) |
| └ @nullFlavor              | cs     | 1 ... 1 | F   | NA     |             |
| Schematron assert          |        | role    | error   |        |             |
|                            |        | test    | not(hl7:templateId[@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1']) or not(hl7:entryRelationship[@typeCode='COMP'][hl7:substanceAdministration]) |        |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                                    |   |   |   |  |
|--|------------------------------------|---|---|---|--|
|  |                                    |   | Meldung   | Bei Dosierungsart 1 "Normal dosing" oder 3 "Tagesdosierung an bestimmten Tagen" (templated = 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1) wird kein entryRelationship typeCode COMP als Dosiskomponente verwendet |  |
|  | Variable let                       | Name  | seq   |   |  |
|  |                                    | Value   | hl7:entryRelationship/hl7:substanceAdministration/hl7:effectiveTime[@value='0' (https://hl7:offset)]/hl7:event/@code                      |   |  |
|  | Schematron assert                  | role  | error   |   |  |
|  |                                    | test  | empty(\$seq[position() = index-of(\$seq,.)[2]])   |   |  |
|  |                                    | Meldung   | Wiederholung der Komponente zur Aufnahme eines Einnahmezeitpunkts und -dosis bei Dosierungsvariante 2 und 4 höchstens einmal je Zeitcode! |   |  |
|  | └ hl7:entryRelationship            |   | 1 ... 1   | M   | Komponente zur Aufnahme der Packungsanzahl.<br><br>Da sich die Angaben zur Arznei (siehe Vorkapitel) jeweils auf eine Packung der Arznei beziehen, MUSS die Anzahl der auszugebenden Packungen der Arznei in einer eigenen Komponente zusätzlich angegeben werden (mindestens 1). Bei magistralen Zubereitungen wird die Anzahl der auszugebenden Einheiten der Arznei in derselben Art und Weise gehandhabt wie bei Arzneyspezialitäten. Die Menge einer Einheit der Arznei (z.B. 200g einer magistral zubereiteten Salbe in einer gewissen Zusammensetzung) ist in den ergänzenden Informationen zu der magistralen Zubereitung anzugeben. |
|  | wo [@typeCode='COMP'] [hl7:supply] |   |   |   |  |
|  | └ @typeCode                        | cs  | 1 ... 1   | F   | COMP   |
|  | Beispiel                           | <b>Strukturbeispiel</b><br><entryRelationship typeCode="COMP"><br><supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"><br><independentInd value="false"/><br><quantity value="1"/><br></supply><br></entryRelationship> |   |   |  |
|  | └ hl7:supply                       |   | 1 ... 1   | M   | Abbildung der Packungsanzahl als untergeordnetes supply-Element. (Med...med)   |

└ @classCode cs 1 ... 1 F SPLY

└ @moodCode cs 1 ... 1 F RQO

Beispiel

```
<supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">  
  <independentInd value="false"/>  
  <quantity value="1"/>  
</supply>
```

└ hl7:independentInd BL 1 ... 1 M Indikator, ob die Komponente unabhängig verwendet werden darf. (Med...med)

└ @value 1 ... 1 F false

└ hl7:quantity PQ 1 ... 1 R Packungsanzahl  
Zugelassene nullFlavor: **MSK**  
MSK= Wird die Anzahl der auszugebenden Packungen nicht angegeben  
(nullFlavor = MSK, Maskiert), kann die Anzahl vom empfangenden System  
nur mit 1 angenommen werden. (Med...med)

└ hl7:entryRelationship 0 ... 1 Komponente zur Aufnahme der Zusatzinformationen, Informationen zur al-  
ternativen Einnahme und Informationen zur Arznei (Med...med)

wo [ @typeCode='SUBJ' ] [ hl7:act/hl7:templateId [ @root='2.16.840.1.113883.10.20.1.49' ] ]

└ @typeCode cs 1 ... 1 F SUBJ

└ @inversionInd bl 1 ... 1 F true

Eingefügt 1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.11.30033 Patient Instructions (DYNAMIC)

└ hl7:act 1 ... 1 M Abbildung der Zusatzbemerkungen als untergeordnetes act-Element. (Med...med)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                  |      |         |   |  |             |
|--|------------------|------|---------|---|--|-------------|
|  | └ @classCode     | CS   | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
|  | └ @moodCode      | CS   | 1 ... 1 | F | INT  |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.49   |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3  |             |
|  | └ hl7:code       | CE   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @code          | CONF | 1 ... 1 | F | PINSTRUCT  |             |
|  | └ @codeSystem    |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)  |             |
|  | └ hl7:text       | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei angeführt sind) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference  | TEL  | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @value         |      | 1 ... 1 | R | #patinfo-{generierteID}, z.B.: #patinfo-1  |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |      |  |   |  |             |
|-------------------------|------|--|---|--|-------------|
| └ h17:statusCode        | CS   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @code                 | CONF | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| └ h17:entryRelationship |      | 1 ... 3  | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein). | (Med...med) |
| └ @typeCode             | cs   | 1 ... 1  | F | SUBJ   |             |
| └ @inversionInd         | bl   | 1 ... 1  | F | true   |             |
| └ h17:act               |      | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @classCode            | cs   | 1 ... 1  | F | ACT  |             |
| └ @moodCode             | cs   | 1 ... 1  | F | INT  |             |
| └ h17:templateId        | II   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @root                 | uid  | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.1   |             |
| └ h17:code              | CE   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|                         | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.161 <i>ELGA_Act-Code_PatInfo</i> (DYNAMIC) |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |            |  |   |  |             |
|---|------------|--|---|--|-------------|
| └ h17:text  | ED         | 1 ... 1  | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |
| └ h17:reference   | TEL        | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @value  |            | 1 ... 1  | R | #zinfo altein arzneiinfo-{generierteID} Der Prefix muss dem gewählten Code entsprechen.<br>z.B.: #altein-1               |             |
| └ h17:statusCode  | CS         | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @code   | CONF       | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| └ h17:entryRelationship   |            | 0 ... 1  |   | Komponente zur Aufnahme der ergänzenden Informationen zur Abgabe oder zu der magistralen Zubereitung.                    | (Med...med) |
| wo [ @typeCode='SUBJ' ] [ h17:act/h17:templateId [ @root='2.16.840.1.113883.10.20.1.43' ] ] |            |  |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs         | 1 ... 1  | F | SUBJ   |             |
| └ @inversionInd   | bl         | 1 ... 1  | F | true   |             |
|   | Constraint | Konditionale Konformität:<br>Arznei ist eine magistrale Zubereitung: Card 1..1 Conf M<br>Arznei ist keine magistrale Zubereitung: Card 0..1 Conf O |   |  |             |
| Eingefügt   |            | 1 ... 1  | M | von 1.2.40.0.34.11.30034 <i>Pharmacist Instructions</i> (DYNAMIC)  |             |
| └ h17:act   |            | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @classCode  | cs         | 1 ... 1  | F | ACT  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                  |      |         |   |   |             |
|--|------------------|------|---------|---|---|-------------|
|  | └ @moodCode      | CS   | 1 ... 1 | F | INT   |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.43  |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1   |             |
|  | └ hl7:code       | CE   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @code          | CONF | 1 ... 1 | F | FINSTRUCT   |             |
|  | └ @codeSystem    |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)   |             |
|  | └ hl7:text       | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die ergänzenden Informationen zur Abgabe oder zu der magistralen Zubereitungen angeführt sind) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference  | TEL  | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @value         |      | 1 ... 1 | R | #abginfo-{generierteID}, z.B.: #abginfo-1   |             |
|  | └ hl7:statusCode | CS   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                                |      |  |   |  |             |
|--|--------------------------------|------|--|---|--|-------------|
|  | <b>L</b> @code                 | CONF | 1 ... 1  | F | completed  |             |
|  | <b>L</b> hl7:entryRelationship |      | 1 ... 2  | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein).       | (Med...med) |
|  | <b>L</b> @typeCode             | cs   | 1 ... 1  | F | SUBJ   |             |
|  | <b>L</b> @inversionInd         | bl   | 1 ... 1  | F | true   |             |
|  | <b>L</b> hl7:act               |      | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|  | <b>L</b> @classCode            | cs   | 1 ... 1  | F | ACT  |             |
|  | <b>L</b> @moodCode             | cs   | 1 ... 1  | F | INT  |             |
|  | <b>L</b> hl7:templateId        | II   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|  | <b>L</b> @root                 | uid  | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.2   |             |
|  | <b>L</b> hl7:code              | CE   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|  |                                | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.160 <i>ELGA_Act-Code_AbgInfo</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
|  | <b>L</b> hl7:text              | ED   | 1 ... 1  | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |          |  |   |   |             |
|---|----------|--|---|---|-------------|
| h17:reference   | TEL      | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| @value  |          | 1 ... 1  | R | #erginfo magzub-{generiertelD} Der Prefix muss dem gewählten Code entsprechen. z.B.:<br>#magzub-1 |             |
| h17:statusCode  | CS       | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| @code   | CONF     | 1 ... 1  | F | completed   |             |
| Eingefügt   |          | 0 ... 1  |   | von 1.2.40.0.34.11.30045 Therapieart (DYNAMIC)  |             |
| h17:entryRelationship   |          | 0 ... 1  |   | Therapieart dieses MedikationVerordnung-Entry   | (Med...med) |
| wo [/@typeCode='COMP'] [h17:act/h17:templateId [/@root='1.2.40.0.34.11.8.1.3.4']] |          |  |   |   |             |
| @typeCode   |          | 1 ... 1  | F | COMP  |             |
|   | Beispiel | <pre>&lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;   &lt;act classCode="ACT" moodCode="INT"&gt;     &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.4"/&gt;     &lt;code code="EINZEL" displayName="Einzelverordnung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.6" codeSystemName="MedikationTherapieArt"/&gt;   &lt;/act&gt; &lt;/entryRelationship&gt;</pre> |   |   |             |
| h17:act   |          | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| @classCode  |          | 1 ... 1  | F | ACT   |             |
| @moodCode   |          | 1 ... 1  | F | INT   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25










|                        |      |   |   |  |             |
|------------------------|------|---|---|--|-------------|
| └ h17:templateId       | II   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ @root                |      | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.34.11.8.1.3.4   |             |
| └ h17:code             | CE   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|                        | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.30 <i>ELGA_Medikation-TherapieArt</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ h17:originalText     | ED   | 0 ... 1   |   | Textinhalt, der codiert wurde. Gemäß Vorgaben im „Allgemeinen Implementierungsleitfaden“, Kapitel „Codierungs-Elemente“. | (Med...med) |
| Eingefügt              |      | 0 ... 1   | C | von 1.2.40.0.34.11.90013 <i>ID des Containers</i> (DYNAMIC)<br>ID des Verordnungs-Entry Containers (Rezept-Dokument)     |             |
| └ h17:reference        |      | 0 ... 1   | C | ID des Verordnungs-Entry Containers (Rezept-Dokument).   | (Med...med) |
| └ @typeCode            | cs   | 1 ... 1   | F | XCRPT  |             |
| └ h17:externalDocument |      | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ h17:id               | II   | 1 ... 1   | M | ID des MedikationVerordnung-Entry.   | (Med...med) |
| └ @root                | uid  | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.1  |             |
| └ @extension           | st   | 1 ... 1   | R | eMED-ID  |             |

@assigningAuthorityName

1 ... 1 F

e-MedAT

#### 12.4.4.12 Medikation Abgabe Entry eMedikation

|                          |   |                       |  |
|--------------------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1 <small>ref elgabbr-</small>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2014-09-10<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> MedikationAbgabeEntryemed vom 2014-01-31</li></ul> |
| <b>Status</b>            |  Entwurf | <b>Versions-Label</b> |  |
| <b>Name</b>              | MedikationAbgabeEntryemed   | <b>Bezeichnung</b>    | Medikation Abgabe Entry eMedikation  |
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1                           |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                             |                       |  |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 8 Templates   |                       |  |
|                          | <b>Benutzt</b>  | <b>als</b>            | <b>Name</b>  |
|                          |   |                       | <b>Version</b>   |
|                          | 1.2.40.0.34.11.2.3.4  | Containment           |  Arznei Entry (1.0.1+20210518)  |
|                          | 1.2.40.0.34.11.90003  | Inklusion             |  AssignedEntityElements   |
|                          | 1.2.40.0.34.11.90004  | Inklusion             |  AuthorElements   |
|                          | 1.2.40.0.34.11.30033  | Inklusion             |  Patient Instructions (2020.1)  |
|                          | 1.2.40.0.34.11.30034  | Inklusion             |  Pharmacist Instructions (2020.1)   |
|                          | 1.2.40.0.34.11.30045  | Inklusion             |  Therapieart  |
|                          | 1.2.40.0.34.11.30035  | Containment           |  Altered Dosage Instructions  |
|                          | 1.2.40.0.34.11.90013  | Inklusion             |  ID des Containers  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

**Beziehung**

Version: Template 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1 *Medikation Abgabe Entry eMedikation* (2014-09-10) ref elgabbr-



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel

```

<entry typeCode="DRIV">
  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.2.3.1"/>
    <!-- ELGA -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.34"/>
    <!-- HL7 CCD -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3"/>
    <!-- IHE PCC -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4"/>
    <!-- IHE PHARM -->
    <!-- ID des MedikationAbgabe-Entry -->
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3" extension="...AbgabeId..." assigningAuthorityName="Heilsapotheker"/>
    <!-- Abgabeart -->
    <code code="FFC" displayName="First Fill - Complete" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="HL7:ActCode"/>
    <!--
Referenz zum narrativen Abschnitt dieses MedikationAbgabe-Entry
im Text-Bereich der Sektion
-->
    <text>
      <reference value="#apos-1"/>
    </text>
    <!-- Abgegebene Packungsanzahl -->
    <quantity value="1"/>
    <!-- Abgegebene Arznei -->
    <product>
      <!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) -->
      <manufacturedProduct classCode="MANU">
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
        <!-- IHE PCC -->
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
        <!-- HL7 CCD -->
        <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
          <!-- ELGA Arznei-Entry -->
          <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
          <!-- ELGA -->
          :
        </manufacturedMaterial>
      </manufacturedProduct>
    </product>
    <!--
Verfasser der Verordnung, falls Referenz zu Verordnung vorhanden
(nur bei Verwendung im Rahmen der Medikationsliste)
-->
    <author> : </author>
    <!--
Verfasser der Abgabe
(nur bei Verwendung im Rahmen der Medikationsliste)
-->
    <author> : </author>
    <!-- Verordnung zu dieser Abgabe (falls vorhanden) -->
    <entryRelationship typeCode="REFR">
      <!-- ELGA MedikationVerordnung-Entry -->
      <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
        <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="...VerordnungsID..." />
        <consumable>
          <manufacturedProduct>
            <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>

```

```

        </manufacturedProduct>
    </consumable>
</substanceAdministration>
</entryRelationship>
<!-- Zusatzinformationen für den Patienten -->
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>
        <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
        :
    </act>
</entryRelationship>
<!-- Ergänzende Informationen zu magistralen Zubereitungen -->
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>
        <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
        :
    </act>
</entryRelationship>
<!-- Dosierungsinformationen -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>
        : ... Art der Anwendung ... : ... Einnahmedauer ... : ... Dosierungsvarianten 1 + 3 ... :
    <consumable>
        <manufacturedProduct>
            <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
        </manufacturedProduct>
    </consumable>
    : ... Dosierungsvarianten 2 + 4 ... :
    </substanceAdministration>
</entryRelationship>
<!-- Therapieart -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.4"/>
        <code code="EINZEL" displayName="Einzelverordnung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.6" codeSystemName="MedikationTherapieArt"/>
    </act>
</entryRelationship>
</supply>
</entry>

```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|----|--|------|---|-------------|
| hl7:supply       |    |  |      |   | (Med...med) |
| └ @classCode     | cs | 1 ... 1  | F    | SPLY  |             |
| └ @moodCode      | cs | 1 ... 1  | F    | EVN   |             |
| Constraint       |    | Konditionale Konformität für die author-Elemente:                                  |      |   |             |
|                  |    | Card   | Conf | Prädikat  |             |
|                  |    |  | NP   | Dieses Element (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) wird nicht in der Medikationsliste verwendet. Die author-Elemente werden nur bei ELGA MedikationAbgabe-Entries verwendet, welche im Rahmen der Medikationsliste vorliegen.  |             |
|                  |    | 1..  | R    | Dieses Element (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) wird in der Medikationsliste verwendet, dann:<br>wenn eine Referenz zu einer Verordnung vorhanden ist ,wird im 1. Author-Element der Verfasser der Verordnung genannt;<br>wenn keine Referenz zu einer Verordnung vorhanden ist, muss das Author-Element null sein (siehe Beispiel) |             |
|                  |    | ..2  | M    | Dieses Element (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) wird in der Medikationsliste verwendet, dann wird im 2. Author-Element der Verfasser der Abgabe genannt.  |             |
|                  |    | Konditionale Konformität für ID des Verordnungs-Entry Containers (Abgabe-Dokument) |      |   |             |
| Constraint       |    | Card   | Conf | Prädikat  |             |
|                  |    | 1..1   | M    | Element wird in Medikationsliste verwendet  |             |
|                  |    |  | NP   | Sonst   |             |
| └ hl7:templateId | II | 1 ... 1  | R    |   | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                  |          |  |   |   |             |
|------------------|----------|--|---|---|-------------|
| └ @root          | uid      | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1  |             |
| └ hl7:templateId | II       | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @root          | uid      | 1 ... 1  | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.34  |             |
| └ hl7:templateId | II       | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @root          | uid      | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.3   |             |
| └ hl7:templateId | II       | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @root          | uid      | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.4   |             |
| └ hl7:id         | II       | 1 ... 1  | M | ID des MedikationAbgabe-Entry.  | (Med...med) |
| wo [1]           |          |  |   |   |             |
| └ @root          | uid      | 1 ... 1  | R | Wurzel OID der ID eines MedikationAbgabe-Entry gemäß Projekt e-Medikation |             |
| └ @extension     | st       | 1 ... 1  | R | AbgabeID = {eMedID}_{lokal vergebene ID}                                  |             |
|                  | Beispiel | <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3" extension="2b4x6qA2p40La53i4dyt_081511" ssigningAuthorityName="Apothekexyz"/> |   |   |             |
| └ hl7:id         | II       | 0 ... 1  | C | ID des ursprünglichen MedikationAbgabe-Entry (aus dem Abgabe-Dokument)    | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |   |  |      |   |             |
|--------------------|---|--|------|---|-------------|
| wo [2]             |   |  |      |   |             |
| └ @root            | uid   | 1 ... 1  | F    | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3   |             |
|                    | Wurzel OID der ID eines MedikationAbgabe-Entry gemäß Projekt e-Medikation |  |      |   |             |
| └ @extension       | st  | 1 ... 1  | R    | AbgabeID = {eMedID}_{lokal vergebene ID}  |             |
|                    | Constraint  | Konditionale Konformität:  |      |   |             |
|                    |   | Card   | Conf | Prädikat  |             |
|                    |   | 1..1   | M    | Abgabe-Entry liegt in Medikationsliste vor  |             |
|                    |   |  | NP   | Sonst   |             |
| Beispiel           |   | <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3" extension="2b4x6qA2p40La53i4dyt_081511" assigningAuthorityName="Ordnation Dr. Meier"/>                  |      |   |             |
| └ hl7:code         | CE  | 0 ... 1  |      | Code des MedikationAbgabe-Entry (Abgabeart). Dieses Element dient zur Kennzeichnung, ob die Abgabe eine zugrundeliegende Verordnung vollständig oder partiell (z.B. im Falle einer Bestellung) erfüllt. | (Med...med) |
|                    | CONF  | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.159 <i>EL-GA_MedikationAbgabeArt</i> (DYNAMIC)                     |      |   |             |
|                    | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><code code="FFC" displayName="First Fill - Complete" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" codeSystemName="HL7:ActCode"/> |      |   |             |
| └ hl7:originalText | ED  | 0 ... 1  |      | Textinhalt, der codiert wurde. Gemäß Vorgaben im „Allgemeinen Implementierungsleitfaden“, Kapitel „Codierungs-Elemente“.  | (Med...med) |
| └ hl7:text         | ED  | 1 ... 1  | M    | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die gegebene Medikation narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc).                             | (Med...med) |
|                    | Beispiel  | Strukturbeispiel<br><text><br><reference value="#apos-1"/><br></text>  |      |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |          |  |   |  |             |
|-----------------|----------|--|---|--|-------------|
| └ hl7:reference | TEL      | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @value        |          | 1 ... 1  | R | #apos-{generiertelD}, z.B.: #apos-1  |             |
| └ hl7:quantity  | PQ       | 1 ... 1  | R | Packungsanzahl.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>MSK</b><br><i>Einschränkung:</i> Negative Werte ergeben keinen Sinn und sind daher ungültig.           | (Med...med) |
|                 | Beispiel | Strukturbeispiel<br><pre>&lt;!-- Abgegebene Packungsanzahl --&gt; &lt;quantity value="1"/&gt;</pre>  |   |  |             |
| └ hl7:product   |          | 1 ... 1  | M | Komponente zur Aufnahme der Arznei auf die sich der MedikationAbgabe-Entry bezieht.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.2.3.4 <i>Arznei Entry</i> (DYNAMIC) | (Med...med) |
|                 | Beispiel | Strukturbeispiel<br><pre>&lt;!-- Abgegebene Arznei --&gt; &lt;product&gt;   &lt;!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) --&gt;   &lt;manufacturedProduct classCode="MANU"&gt;     &lt;templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/&gt;     &lt;!-- IHE PCC --&gt;     &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/&gt;     &lt;!-- HL7 CCD --&gt;     &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;       &lt;!-- ELGA Arznei-Entry --&gt;       &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/&gt;       &lt;!-- ELGA --&gt;       : &lt;/manufacturedMaterial&gt;     &lt;/manufacturedProduct&gt;   &lt;/product&gt;</pre> |   |  |             |
| └ hl7:performer |          | 0 ... 1  | C |  | (Med...med) |
| └ @typeCode     | cs       | 1 ... 1  | F | PRF  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                      |             |  |      |  |  |             |
|----------------------|-------------|--|------|--|--|-------------|
|                      | Constraint  | Konditionale Konformität für das performer-Element:<TBODY></TBODY> |      |  |  |             |
|                      |             | Card   | Conf | Prädikat   |  |             |
|                      |             | 1..1   | M    | Dieses Element (1.2.40.0.34.11.8.2.3.1) wird in Medikationsliste verwendet und eine Referenz zu einer Vordnung ist vorhanden |  |             |
|                      |             |  | NP   | Sonst  |  |             |
| └ h17:time           | TS.DATE.MIN | 1 ... 1  | R    |  |  | (Med...med) |
| └ h17:assignedEntity |             | 1 ... 1  | M    |  |  | (Med...med) |
| Eingefügt            |             |  |      | von 1.2.40.0.34.11.90003 AssignedEntityElements (DYNAMIC)  |  |             |
| └ h17:id             | II          | 1 ... *  | R    | Mindestens eine Id der validierenden Person.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>   |  | (Med...med) |
| └ h17:addr           | AD          | 0 ... 1  |      | Ein Adress-Element der validierenden Person.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>   |  | (Med...med) |
| └ h17:telecom        | TEL.AT      | 0 ... *  |      | Mindestens ein Telecom-Element der validierenden Person.<br>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b>                               |  | (Med...med) |
| └ h17:assignedPerson |             | 1 ... 1  | M    | Personendaten der validierenden Person.  |  | (Med...med) |
| Eingefügt            |             |  |      | von 1.2.40.0.34.11.90001 PersonElements (DYNAMIC)  |  |             |
| └ @classCode         | CS          | 0 ... 1  | F    | PSN  |  |             |
| └ @determinerCode    | CS          | 0 ... 1  | F    | INSTANCE   |  |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |        |         |  |  |             |
|-------------------------------|--------|---------|--|--|-------------|
| └ h17:name                    | PN     | 1 ... 1 | M  | Name der Person  | (Med...med) |
|                               |        |         |  | <b>Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 („strukturierte Angabe des Namens“) anzuwenden!</b><br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Namen-Elemente von Personen PN“ zu befolgen. |             |
| └ h17:representedOrganization |        | 0 ... 1 |  | Organisationsdaten der validierenden Person.   | (Med...med) |
| Eingefügt                     |        |         |  | von 1.2.40.0.34.11.90002 OrganizationElements (DYNAMIC)  |             |
| └ @classCode                  |        | 0 ... 1 | F  | ORG  |             |
| └ @determinerCode             |        | 0 ... 1 | F  | INSTANCE   |             |
| └ h17:id                      | II     | 0 ... * |  |  | (Med...med) |
| └ h17:name                    | ON     | 1 ... 1 | M  |  | (Med...med) |
| └ h17:telecom                 | TEL.AT | 0 ... * |  |  | (Med...med) |
| └ h17:addr                    | AD     | 0 ... 1 |  |  | (Med...med) |
| Schematron assert             |        | role    | error  |  |             |
|                               |        | test    | count(ancestor::h17:templateId[@root='1.2.40.0.34.11.8.3'])=0 or count(h17:author)=2 |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Eingefügt

|          |  |
|----------|--|
|          | <div>Meldung</div> <div>In einer Medikationsliste muss der Verfasser der Verordnung / der Abgabe (author-Element) angegeben werden.</div> <div>von 1.2.40.0.34.11.90004 <i>AuthorElements</i> (DYNAMIC)</div> <div><b>1. &lt;author&gt; Element: Verfasser der Verordnung zu dieser Abgabe.</b><br/>Das erste &lt;author&gt; Element beinhaltet den Verfasser des Rezepts auf dem die Verordnung ausgestellt wurde, auf die eine Referenz existiert. Das author/time Element hat dabei die Bedeutung „Datum der Verordnung“.</div> <div>Zugelassene nullFlavor: <b>NA</b></div> <div>Da das &lt;author&gt; Element im CDA Schema gewisse Unterelemente zwingend benötigt, ist ein einfaches &lt;author nullFlavor='NA'/&gt; nicht ausreichend und würde zu einer CDA Schema Verletzung führen. Im Falle der Anwendung von nullFlavor='NA' sind demnach die erforderlichen Unterelemente mit diesem Attribut zu versehen.</div> <div>0 ... 2 C</div> <div>Diese Elemente werden nur bei ELGA MedikationAbgabe-Entries verwendet, welche im Rahmen der Medikationsliste vorliegen.</div> <div><b>2. &lt;author&gt; Element: Verfasser der Abgabe</b><br/>Das zweite &lt;author&gt; Element beinhaltet den Verfasser der Abgabe. Das author/time Element hat dabei die Bedeutung „Datum der Abgabe“.</div> <div>Diese Elemente werden nur bei ELGA MedikationAbgabe-Entries verwendet, welche im Rahmen der Medikationsliste vorliegen.</div> |
| Beispiel | 1. <author> Element: Verfasser der Verordnung, falls Referenz zu Verordnung vorhanden<br><author> : Author Element, übernommen aus dem zugrundeliegenden Rezept-Dokument zu der Abgabe : </author>   |
| Beispiel | 1. <author> Element: Keine Referenz zu einer Vordnung vorhanden, Verfasser der Verordnung (1. Author-Element) ist null<br><author nullFlavor="NA"><br><time nullFlavor="NA"/><br><assignedAuthor nullFlavor="NA"><br><id nullFlavor="NA"/><br></assignedAuthor><br></author>   |

Beispiel

### Verfasser einer Abgabe (2. Author-Element)

```

<author>
  <functionCode code="P" displayName="Pharmazeut" codeSystem="1.2.40.0.34.99.111.2.1" code-
SystemName="Heilsapotheke Funktionscodes"/>
  <time value="20130327082015+0100"/>
  <assignedAuthor>
    <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.4" extension="1111" assigningAuthorityName="Heilsapothe-
ke"/>
    <telecom use="WP" value="tel:+43.6138.3453446.1111"/>
    <assignedPerson>
      <!-- .. -->
    </assignedPerson>
    <representedOrganization>
      <!-- .. -->
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</author>

```

|                       |    |         |   |   |             |
|-----------------------|----|---------|---|---|-------------|
| Auswahl               |    | 0 ... 2 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:author[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:author[@nullFlavor]</li> </ul>  |             |
| └ h17:author          |    |         |   | Verfasser des Dokuments.  | (Med...med) |
| wo [not(@nullFlavor)] |    |         |   |   |             |
| └ @typeCode           | CS | 0 ... 1 | F | AUT   |             |
| └ @contextControlCode | CS | 0 ... 1 | F | OP  |             |
| └ h17:functionCode    | CE | 0 ... 1 |   | Funktionscode des Verfassers des Dokuments<br>z.B: „Diensthabender Oberarzt“, „Verantwortlicher Arzt für Doku-<br>mentation“, „Stationsschwester“, ...<br>Eigene Codes und Bezeichnungen können verwendet werden. | (Med...med) |
|                       |    |         |   | Grundsätzlich sind die Vorgaben für „code-Element CE CWE“ zu befolgen.  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                 |             |   |   |  |             |
|---------------------------------|-------------|---|---|--|-------------|
| <div>└ h17:time</div>           | TS.DATE.MIN | 1 ... 1   | R | <div>Der Zeitpunkt an dem das Dokument verfasst wurde.Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Zeit-Elemente“ zu befolgen.</div> <div>Zugelassene nullFlavor: <b>UNK</b></div>                                   | (Med...med) |
| <div>└ h17:assignedAuthor</div> |             | 1 ... 1   | M | <div>Organisation, in deren Auftrag der Verfasser des Dokuments die Dokumentation verfasst hat.</div>  | (Med...med) |
| <div>└ @classCode</div>         | cs          | 0 ... 1   | F | ASSIGNED   |             |
|                                 | Beispiel    | <pre>&lt;assignedAuthor classCode="ASSIGNED"&gt;   &lt;id extension="ied8984938" root="1.2.276.0.76.3.1.139.933"/&gt;   &lt;assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;     &lt;!-- ... --&gt;   &lt;/assignedPerson&gt; &lt;/assignedAuthor&gt;</pre> |   |  |             |
| <div>└ h17:id</div>             | II          | 1 ... *   | R | <div>Identifikation des Verfassers des Dokuments im lokalen System/ des/der datenerstellenden Gerätes/Software.</div> <div>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.</div> | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |   |        |   |   |   |             |
|--|---|--------|---|---|---|-------------|
| <div> <div></div> <div>h17:code</div> </div>           |   | CE     | 0 ... 1   |   | <p>Angabe der Fachrichtung des Verfassers des Dokuments („Sonderfach“ gem. Ausbildungsordnung)z.B: „Facharzt/ Fachärztling für Gynäkologie“,</p> <p>Wenn ein Autor mehreren ärztlichen Sonderfächern zugeordnet ist, kann das anzugebende Sonderfach gewählt werden. Additivfächer werden nicht angegeben. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „code-Element CE CWE“ zu befolgen.</p> | (Med...med) |
|  |   | CONF   | <p>Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC)</p> |   |   |             |
| <div> <div></div> <div>h17:telecom</div> </div>        |   | TEL.AT | 0 ... *   |   | <p>Kontaktdaten des Verfassers des Dokuments. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.</p>   | (Med...med) |
| Auswahl  |   |        | 1 ... 1   |   | <p>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h17:assignedPerson</li> <li>h17:assignedAuthoringDevice</li> </ul>   |             |
| <div> <div></div> <div>h17:assignedPerson</div> </div> |   |        | ... 1   |   | <p>Personendaten des Verfassers des Dokuments. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen.</p>  | (Med...med) |
| Eingefügt  |   |        |   |   | <p>von 1.2.40.0.34.11.90001 <i>PersonElements</i> (DYNAMIC)</p>   |             |
|  | <div> <div></div> <div>@classCode</div> </div>      | cs     | 0 ... 1   | F | PSN   |             |
|  | <div> <div></div> <div>@determinerCode</div> </div> | cs     | 0 ... 1   | F | INSTANCE  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |    |         |   |          |   |             |
|-------------------------------|----|---------|---|----------|---|-------------|
|                               |    |         |   |          | Name der Person   |             |
| └ h17:name                    | PN | 1 ... 1 | M |          | <b>Für den Namen ist verpflichtend Granularitätsstufe 2 („strukturierte Angabe des Namens“) anzuwenden!</b> | (Med...med) |
|                               |    |         |   |          | Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Namen-Elemente von Personen PN“ zu befolgen.                           |             |
| └ h17:assignedAuthoringDevice |    | ... 1   |   |          |   | (Med...med) |
| └ @classCode                  | CS | 0 ... 1 | F | DEV      |   |             |
| └ @determinerCode             | CS | 0 ... 1 | F | INSTANCE |   |             |
| └ h17:manufacturerModelName   | SC | 0 ... 1 |   |          | Hersteller und Modellbezeichnung des datenerstellenden Gerätes.   | (Med...med) |
| └ h17:softwareName            | SC | 0 ... 1 |   |          | Bezeichnung (und ggf Version) der datenerstellenden Software.   | (Med...med) |
| └ h17:representedOrganization |    | 1 ... 1 | M |          |   | (Med...med) |
| Eingefügt                     |    |         |   |          | von 1.2.40.0.34.11.90002 OrganizationElements (DYNAMIC)   |             |
| └ @classCode                  |    | 0 ... 1 | F | ORG      |   |             |
| └ @determinerCode             |    | 0 ... 1 | F | INSTANCE |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                      |          |  |   |   |             |
|----------------------|----------|--|---|---|-------------|
| └ h17:id             | II       | 0 ... *  |   |   | (Med...med) |
| └ h17:name           | ON       | 1 ... 1  | M |   | (Med...med) |
| └ h17:telecom        | TEL.AT   | 0 ... *  |   |   | (Med...med) |
| └ h17:addr           | AD       | 0 ... 1  |   |   | (Med...med) |
| └ h17:author         |          |  |   | Verfasser nicht bekannt/nicht anwendbar | (Med...med) |
| wo [@nullFlavor]     |          |  |   |   |             |
| └ @nullFlavor        | cs       | 1 ... 1  | F | NA                                      |             |
|                      | Beispiel | <pre>&lt;author nullFlavor="NA"&gt;   &lt;time nullFlavor="NA"/&gt;   &lt;assignedAuthor nullFlavor="NA"&gt;     &lt;id nullFlavor="NA"/&gt;   &lt;/assignedAuthor&gt; &lt;/author&gt;</pre> |   |   |             |
| └ h17:time           |          | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @nullFlavor        | cs       | 1 ... 1  | F | NA                                      |             |
| └ h17:assignedAuthor |          | 1 ... 1  | R |   | (Med...med) |
| └ @nullFlavor        | cs       | 1 ... 1  | F | NA                                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |    |         |   |  |             |
|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:id                |    | 1 ... 1 | R |  | (Med...med) |
| └ @nullFlavor           | cs | 1 ... 1 | F | NA   |             |
| └ h17:entryRelationship |    | 0 ... 1 | C | Referenz zur Verordnung.<br>Falls vorhanden, ist die VerordnungsID zum abgegebenen Medikament als Beziehung angeführt. | (Med...med) |
| wo [@typeCode='REFR']   |    |         |   |  |             |

ACHTUNG: Es ist immer die VerordnungsID des Verordnungs-Entry anzugeben, welches ursprünglich im Rezept-Dokument angegeben wurde, unabhängig von etwaigen darauffolgenden Korrekturen mittels Pharmazeutischer Empfehlungen.

└ @typeCode                      cs                      1 ... 1                      F                      REFR

|            |   |      |                                     |
|------------|---|------|-------------------------------------|
| Constraint | Konditionale Konformität  |      |                                     |
|            | Card  | Conf | Prädikat                            |
|            | 1..1  | M    | Referenz zu VerordnungsID vorhanden |
| Beispiel   | Strukturbeispiel  |      |                                     |
|            | <!-- Verordnung dieser Abgabe (falls vorhanden) -->                   |      |                                     |
|            | <entryRelationship typeCode="REFR">                                   |      |                                     |
|            | <!-- ELGA MedikationVerordnung-Entry -->                              |      |                                     |
|            | <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">            |      |                                     |
|            | <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="...VerordnungsID..." /> |      |                                     |
|            | <consumable>  |      |                                     |
|            | <manufacturedProduct>   |      |                                     |
|            | <manufacturedMaterial nullFlavor="NA" />                              |      |                                     |
|            | </manufacturedProduct>  |      |                                     |
|            | </consumable>   |      |                                     |
|            | </substanceAdministration>  |      |                                     |
|            | </entryRelationship>  |      |                                     |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                |     |         |   |  |             |
|--------------------------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └─ hl7:substanceAdministration |     |         |   |  | (Med...med) |
| └─ @classCode                  | cs  | 1 ... 1 | F | SBADM  |             |
| └─ @moodCode                   | cs  | 1 ... 1 | F | INT  |             |
| └─ hl7:id                      | II  | 1 ... 1 | M | VerordnungsID.   | (Med...med) |
| └─ @root                       | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2  |             |
|                                |     |         |   | Wurzel OID der ID eines MedikationVerordnungs-Entry gemäß Projekt e-Medikation.  |             |
| └─ @extension                  | st  | 1 ... 1 | R | VerordnungsID. Strukturvorschrift: VerordnungsID = {eMedID}_{lokal vergebene ID} |             |
| └─ hl7:consumable              |     | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └─ hl7:manufacturedProduct     |     | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └─ hl7:manufacturedMaterial    |     | 1 ... 1 | R |  | (Med...med) |
| └─ @nullFlavor                 | cs  | 1 ... 1 | F | NA   |             |
| Eingefügt                      |     | 0 ... 1 | R | von 1.2.40.0.34.11.30033 Patient Instructions (DYNAMIC)                          |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                  |      |         |   |  |             |
|------------------|------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:act        |      | 0 ... 1 | R | Abbildung der Zusatzbemerkungen als untergeordnetes act-Element.   | (Med...med) |
| └ @classCode     | cs   | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
| └ @moodCode      | cs   | 1 ... 1 | F | INT  |             |
| └ h17:templateId | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.49   |             |
| └ h17:templateId | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3  |             |
| └ h17:code       | CE   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @code          | CONF | 1 ... 1 | F | PINSTRUCT  |             |
| └ @codeSystem    |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)  |             |
| └ h17:text       | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei angeführt sind) | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |      |         |   |  |             |
|-------------------------|------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:reference         | TEL  | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @value                |      | 1 ... 1 | R | #patinfo-{generierteID}, z.B.: #patinfo-1  |             |
| └ h17:statusCode        | CS   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | completed  |             |
| └ h17:entryRelationship |      | 1 ... 3 | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein). | (Med...med) |
| └ @typeCode             | cs   | 1 ... 1 | F | SUBJ   |             |
| └ @inversionInd         | bl   | 1 ... 1 | F | true   |             |
| └ h17:act               |      | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @classCode            | cs   | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
| └ @moodCode             | cs   | 1 ... 1 | F | INT  |             |
| └ h17:templateId        | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.1   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                  |      |  |   |  |             |
|------------------|------|--|---|--|-------------|
| └ h17:code       | CE   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.161 <i>EL-GA_ActCode_PatInfo</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ h17:text       | ED   | 1 ... 1  | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |
| └ h17:reference  | TEL  | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @value         |      | 1 ... 1  | R | #zinfo altein arzneiinfo-{generiertelD} Der Prefix muss dem gewählten Code entsprechen. z.B.: #altein-1                  |             |
| └ h17:statusCode | CS   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @code          | CONF | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| Eingefügt        |      | 0 ... 1  | R | von 1.2.40.0.34.11.30034 <i>Pharmacist Instructions</i> (DYNAMIC)  |             |
| └ h17:act        |      | 0 ... 1  | R |  | (Med...med) |
| └ @classCode     | cs   | 1 ... 1  | F | ACT  |             |
| └ @moodCode      | cs   | 1 ... 1  | F | INT  |             |
| └ h17:templateId | II   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                         |      |         |   |   |             |
|--|-------------------------|------|---------|---|---|-------------|
|  | └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.43  |             |
|  | └ hl7:templateId        | II   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1   |             |
|  | └ hl7:code              | CE   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | FINSTRUCT   |             |
|  | └ @codeSystem           |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)   |             |
|  | └ hl7:text              | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die ergänzenden Informationen zur Abgabe oder zu der magistralen Zubereitungen angeführt sind) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference         | TEL  | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @value                |      | 1 ... 1 | R | #abginfo-{generierteID}, z.B.: #abginfo-1   |             |
|  | └ hl7:statusCode        | CS   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | completed   |             |
|  | └ hl7:entryRelationship |      | 1 ... 2 | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein).  | (Med...med) |

|                   |      |   |   |  |             |
|-------------------|------|---|---|--|-------------|
| └─ hl7:act        |      | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └─ @classCode     | CS   | 1 ... 1   | F | ACT  |             |
| └─ @moodCode      | CS   | 1 ... 1   | F | INT  |             |
| └─ hl7:templateId | II   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └─ @root          | uid  | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.2   |             |
| └─ hl7:code       | CE   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|                   | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.160 EL-GA_ActCode_AbgInfo (DYNAMIC) |   |  |             |
| └─ hl7:text       | ED   | 1 ... 1   | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |
| └─ hl7:reference  | TEL  | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |   |         |   |  |             |
|---|---|---------|---|--|-------------|
| └ h17:statusCode  | CS  | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @code   | CONF  | 1 ... 1 | F | completed  |             |
| └ h17:entryRelationship   |   | 0 ... 1 |   | Komponente zur Aufnahme der Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei. | (Med...med) |
| wo [/@typeCode='SUBJ'] [hl7:act/hl7:templateId [/@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.49']] |   |         |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs  | 1 ... 1 | F | SUBJ   |             |
| └ @inversionInd   | bl  | 1 ... 1 | F | true   |             |
| Beispiel  | <div>Strukturbeispiel</div> <pre>&lt;text&gt;   &lt;content ID="patinfo-{generierteID}"&gt;     &lt;content ID="zinfo-{generierteID}"&gt;       &lt;!--... Hier stehen Zusatzinformationen für den Patienten ...--&gt;     &lt;/content&gt;     &lt;content ID="altein-{generierteID}"&gt;       &lt;!--... Hier stehen Informationen zur alternative Einnahme ...--&gt;     &lt;/content&gt;     &lt;content ID="arzneiinfo_{generierteID}"&gt;       &lt;!--... Hier stehen Informationen zur Arznei ...       (nur im Rahmen der Medikationsliste)--&gt;     &lt;/content&gt;   &lt;/content&gt; &lt;/text&gt;</pre> |         |   |  |             |

Beispiel

### Strukturbeispiel

```
<entry typeCode="DRIV">
  :
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.49"/>
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3"/>
      <code code="PINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEAct-Code"/>
      <text>
        <reference value="#patinfo-{generierteID}"/>
      </text>
      <statusCode code="completed"/>
    <!--
    Eine oder mehrere Referenzen zu Informationskategorien:
    "Zusatzinformationen für den Patienten",
    "Informationen zur alternative Einnahme",
    "Informationen zur Arznei"
    -->
    <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
      <act classCode="ACT" moodCode="INT">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.0.3.1"/>
        <code code="ZINFO|ALTEIN|ARZNEIINFO" codeSystem="1.2.40.0.34.5.103" codeSystemName="ELGA_ActCode"/>
        <text>
          <reference value="#zinfo|altein|arzneiinfo-{generierteID}"/>
        </text>
        <statusCode code="completed"/>
      </act>
    </entryRelationship>
  </act>
</entryRelationship>
: </entry>
```

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.11.30033 Patient Instructions (DYNAMIC)

|                |    |         |   |  |             |
|----------------|----|---------|---|--|-------------|
| h17:act        |    | 1 ... 1 | M | Abbildung der Zusatzbemerkungen als untergeordnetes act-Element. | (Med...med) |
| @classCode     | cs | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
| @moodCode      | cs | 1 ... 1 | F | INT  |             |
| h17:templateId | II | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                  |      |         |   |  |             |
|--|------------------|------|---------|---|--|-------------|
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.49   |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3  |             |
|  | └ hl7:code       | CE   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @code          | CONF | 1 ... 1 | F | PINSTRUCT  |             |
|  | └ @codeSystem    |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)  |             |
|  | └ hl7:text       | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Zusatzinformationen für den Patienten, Informationen zur alternativen Einnahme und Informationen zur Arznei angeführt sind) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference  | TEL  | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @value         |      | 1 ... 1 | R | #patinfo-{generierteID}, z.B.: #patinfo-1  |             |
|  | └ hl7:statusCode | CS   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
|  | └ @code          | CONF | 1 ... 1 | F | completed  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |      |   |   |  |             |
|-------------------------|------|---|---|--|-------------|
| └ h17:entryRelationship |      | 1 ... 3   | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein).       | (Med...med) |
| └ @typeCode             | cs   | 1 ... 1   | F | SUBJ   |             |
| └ @inversionInd         | bl   | 1 ... 1   | F | true   |             |
| └ h17:act               |      | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ @classCode            | cs   | 1 ... 1   | F | ACT  |             |
| └ @moodCode             | cs   | 1 ... 1   | F | INT  |             |
| └ h17:templateId        | II   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
| └ @root                 | uid  | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.1   |             |
| └ h17:code              | CE   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|                         | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.161 EL-GA_ActCode_PatInfo (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ h17:text              | ED   | 1 ... 1   | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |
| └ h17:reference         | TEL  | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |      |  |      |   |             |
|---|------|--|------|---|-------------|
| └ @value  |      | 1 ... 1  | R    | #zinfo altein arzneiinfo-{generierteID} Der Prefix muss dem gewählten Code entsprechen. z.B.: #altein-1 |             |
| └ hl7:statusCode  | CS   | 1 ... 1  | M    |   | (Med...med) |
| └ @code   | CONF | 1 ... 1  | F    | completed   |             |
| └ hl7:entryRelationship   |      | 0 ... 1  |      | Ergänzende Informationen zur Abgabe und magistralen Zubereitung.  | (Med...med) |
| wo [@typeCode='SUBJ'] [hl7:act/hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.43']] |      |  |      |   |             |
| └ @typeCode   | cs   | 1 ... 1  | F    | SUBJ  |             |
| └ @inversionInd   | bl   | 1 ... 1  | F    | true  |             |
| Constraint  |      | Konditionale Konformität   |      |   |             |
|   |      | Card   | Conf | Prädikat  |             |
|   |      | 1..1   | M    | Arznei ist eine magistrale Zubereitung  |             |
|   |      | 0..1   | O    | Arznei ist keine magistrale Zubereitung   |             |
| Beispiel  |      | Strukturbeispiel   |      |   |             |
|   |      | <pre>&lt;text&gt; : &lt;content ID="abginform-{generierteID}"&gt;   &lt;content ID="erginform-{generierteID}"&gt; ... Hier stehen ergänzende Informationen zur Abgabe ... &lt;/content&gt;   &lt;content ID="magzub-{generierteID}"&gt; ... Hier stehen ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung ... &lt;/content&gt; &lt;/content&gt; : &lt;/text&gt;</pre> |      |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

```
Strukturbeispiel
<entry typeCode="DRIV">
:
  <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
    <act classCode="ACT" moodCode="INT">
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>
      <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEAct-Code"/>
      <text>
        <reference value="#abginfo-{generierteID}"/>
      </text>
      <statusCode code="completed"/>
      <!-- Eine oder mehrere Referenzen zu Informationskategorien:
      "Ergänzende Informationen zur Abgabe",
      "Ergänzende Informationen zur magistralen Zubereitung"
      -->
      <entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
        <act classCode="ACT" moodCode="INT">
          <templateId root="1.2.40.0.34.11.8.0.3.2"/>
          <code code="ERGINFO|MAGZUB" codeSystem="1.2.40.0.34.5.103" codeSystemName="EL-GA_ActCode"/>
          <text>
            <reference value="#erginfo|magzub-{generierteID}"/>
          </text>
          <statusCode code="completed"/>
        </act>
      </entryRelationship>
    </act>
  </entryRelationship>
</entry>
```

|                |    |         |   |   |             |
|----------------|----|---------|---|---|-------------|
| Eingefügt      |    | 1 ... 1 | M | von 1.2.40.0.34.11.30034 <i>Pharmacist Instructions</i> (DYNAMIC) |             |
| h17:act        |    | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
| @classCode     | cs | 1 ... 1 | F | ACT   |             |
| @moodCode      | cs | 1 ... 1 | F | INT   |             |
| h17:templateId | II | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                         |      |         |   |   |             |
|--|-------------------------|------|---------|---|---|-------------|
|  | └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.43  |             |
|  | └ hl7:templateId        | II   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1   |             |
|  | └ hl7:code              | CE   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | FINSTRUCT   |             |
|  | └ @codeSystem           |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary)   |             |
|  | └ hl7:text              | ED   | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die ergänzenden Informationen zur Abgabe oder zu der magistralen Zubereitungen angeführt sind) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference         | TEL  | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @value                |      | 1 ... 1 | R | #abginfo-{generierteID}, z.B.: #abginfo-1   |             |
|  | └ hl7:statusCode        | CS   | 1 ... 1 | M |   | (Med...med) |
|  | └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | completed   |             |
|  | └ hl7:entryRelationship |      | 1 ... 2 | M | Komponente zur Aufnahme der Referenz zu einer Unterkategorie (mindestens eine Unterkategorie muss angegeben sein).  | (Med...med) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                  |      |   |   |  |             |
|--|------------------|------|---|---|--|-------------|
|  | └ @typeCode      | cs   | 1 ... 1   | F | SUBJ   |             |
|  | └ @inversionInd  | bl   | 1 ... 1   | F | true   |             |
|  | └ hl7:act        |      | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|  | └ @classCode     | cs   | 1 ... 1   | F | ACT  |             |
|  | └ @moodCode      | cs   | 1 ... 1   | F | INT  |             |
|  | └ hl7:templateId | II   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|  | └ @root          | uid  | 1 ... 1   | F | 1.2.40.0.34.11.8.0.3.2   |             |
|  | └ hl7:code       | CE   | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|  |                  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.160 EL-GA_ActCode_AbgInfo (DYNAMIC) |   |  |             |
|  | └ hl7:text       | ED   | 1 ... 1   | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die entsprechende Unterkategorie angeführt ist) | (Med...med) |
|  | └ hl7:reference  | TEL  | 1 ... 1   | M |  | (Med...med) |
|  | └ @value         |      | 1 ... 1   | R | #erginfo magzub-{generiertelD} Der Prefix muss dem gewählten Code entsprechen. z.B.: #magzub-1                           |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |  |  |         |   |  |             |
|---|--|--|---------|---|--|-------------|
| └ h17:statusCode  |  | CS   | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @code   |  | CONF   | 1 ... 1 | F | completed  |             |
| Eingefügt   |  |  | 0 ... 1 |   | von 1.2.40.0.34.11.30045 Therapieart (DYNAMIC) Therapieart.<br>Im Falle von Abgaben zu einer Verordnung nur anzugeben, falls dieses sich von der Therapieart der Verordnung unterscheidet. |             |
| Beispiel  |  | Strukturbeispiel<br><pre> &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;   &lt;act classCode="ACT" moodCode="INT"&gt;     &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.4"/&gt;     &lt;code code="EINZEL" displayName="Einzelverordnung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.6" codeSystemName="MedikationTherapieArt"/&gt;   &lt;/act&gt; &lt;/entryRelationship&gt; </pre> |         |   |  |             |
| └ h17:entryRelationship   |  |  | 0 ... 1 |   | Therapieart dieses MedikationVerordnung-Entry  | (Med...med) |
| wo [@typeCode='COMP'] [h17:act/h17:templateId [@root='1.2.40.0.34.11.8.1.3.4']] |  |  |         |   |  |             |
| └ @typeCode   |  |  | 1 ... 1 | F | COMP   |             |
| Beispiel  |  | <pre> &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;   &lt;act classCode="ACT" moodCode="INT"&gt;     &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.8.1.3.4"/&gt;     &lt;code code="EINZEL" displayName="Einzelverordnung" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.6" codeSystemName="MedikationTherapieArt"/&gt;   &lt;/act&gt; &lt;/entryRelationship&gt; </pre>                     |         |   |  |             |
| └ h17:act   |  |  | 1 ... 1 | M |  | (Med...med) |
| └ @classCode  |  |  | 1 ... 1 | F | ACT  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |      |  |   |  |             |
|--|------|--|---|--|-------------|
| └ @moodCode  |      | 1 ... 1  | F | INT  |             |
| └ hl7:templateId   | II   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
| └ @root  |      | 1 ... 1  | F | 1.2.40.0.34.11.8.1.3.4   |             |
| └ hl7:code   | CE   | 1 ... 1  | M |  | (Med...med) |
|  | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.30 <i>ELGA_MedikationTherapieArt</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ hl7:originalText   | ED   | 0 ... 1  |   | Textinhalt, der codiert wurde. Gemäß Vorgaben im „Allgemeinen Implementierungsleitfaden“, Kapitel „Codierungs-Elemente“.                     | (Med...med) |
| └ hl7:entryRelationship  |      | 0 ... 1  |   | Komponente zur Aufnahme der optionalen Dosierungsinformationen. Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.30035 <i>Altered Dosage Instructions</i> (DYNAMIC) | (Med...med) |
| wo [@typeCode='COMP'] [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6']] |      |  |   |  |             |

└ @typeCode                      cs                      1 ... 1      F                      COMP

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.6"/>
    : ... Einnahmedauer ... : ... Dosierungsvarianten 1 + 3 ... : ... Art der Anwendung
  ... :
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
    : ... Dosierungsvarianten 2 + 4 ... :
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Eingefügt

0 ... 1

C

von 1.2.40.0.34.11.90013 ID des Containers (DYNAMIC)  
ID des Verordnungs-Entry Containers (Abgabe-Dokument).

Wird das ELGA MedikationAbgabe-Entry im Rahmen der Medikationsliste verwendet, MUSS die ID des Abgabe-Dokuments, welches das Abgabe-Entry ursprünglich beinhaltete, angegeben sein.

Beispiel

Strukturbeispiel

```
<reference typeCode="XCRPT">  
  <externalDocument>  
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.1" extension="C8688SC242CY" assigningAuthorityName="e-MedAT"/>  
  </externalDocument>  
</reference>
```

└ h17:reference

0 ... 1

C

ID des Verordnungs-Entry Containers (Rezept-Dokument).

(Med...med)

└ @typeCode

cs

1 ... 1

F

XCRPT

└ h17:externalDocument

1 ... 1

M

(Med...med)

└ h17:id

II

1 ... 1

M

ID des MedikationVerordnung-Entry.

(Med...med)

└ @root

uid

1 ... 1

F

1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.1

└ @extension

st

1 ... 1

R

eMED-ID

└ @assigningAuthorityName

1 ... 1

F

e-MedAT

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

12.4.4.13 Arznei Entry

|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| Id                |   | 1.2.40.0.34.11.2.3.4 <span>ref elgabbr-</span> |
| Status            |  Aktiv           |  |
| Name              | ArzneiEntry   |  |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template  |  |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)                                     |  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.11.2.3.4 <i>Arznei Entry</i> (2014-02-05) <span>ref elgabbr-</span> |  |

|                |                |
|----------------|----------------|
| Gültigkeit     |                |
| Versions-Label | 1.0.1+20210518 |
| Bezeichnung    | Arznei Entry   |

- 2021-05-18 15:51:59  
Andere Versionen mit dieser Id:
- ☐ ArzneiEntry vom 2014-02-05
  - ☐ ArzneiEntry vom 2014-01-31
  - ☐ ArzneiEntry vom 2013-12-17
  - ☐ ArzneiEntry vom 2013-09-09
  - ☐ ArzneiEntry vom 2012-07-14

## Beispiel

### Strukturbeispiel

```
<ClinicalDocument>
  <consumable>
    <manufacturedProduct classCode="MANU">
      <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
      <!-- IHE PCC -->
      <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
      <!-- HL7 CCD -->
      <manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
        <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
        <!-- ELGA -->
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>
        <!-- IHE PHARM -->
        <!-- Code der Arznei (PZN) oder nullFlavor -->
        <code code="533363" displayName="PARKEMED FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.16" codeSystemName="Pharmazentralnummer"/>
        <translation code="16288" displayName="Parkemed 500 mg - Filmtabletten" codeSystem="1.2.40.0.34.4.17" codeSystemName="Zulas-
sungsnummer"/>
        <!-- Name der Arznei -->
        <name>Parkemed 500 mg - Filmtabletten</name>
        <!-- Darreichungsform -->
        <formCode code="100000073665" displayName="Filmtablette" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.5" codeSystemName="MedikationDar-
reichungsform"/>
        <!-- Angaben zur Packung (nur wenn PZN oder Zul.nummer vorhanden) -->
        <asContent classCode="CONT">
          <containerPackagedMedicine classCode="CONT" determinerCode="INSTANCE">
            <!-- Packungsgröße -->
            <capacityQuantity value="20"/>
          </containerPackagedMedicine>
        </asContent>
        <!--
Optional ein oder mehrere Wirkstoff(e)
-->
        <!-- Wirkstoff 1 -->
        <ingredient classCode="ACTI">
          <!-- Wirkstoff aus dem ATC Codesystem -->
          <ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
            <code code="M01AG01" displayName="Mefenamic acid" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="whoATC"/>
            <name>Mefenaminsäure</name>
          </ingredient>
        </ingredient>
      </manufacturedMaterial>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
</ClinicalDocument>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                       | DT  | Kard                      | Konf | Beschreibung                              | Label       |
|----------------------------|-----|---------------------------|------|---|-------------|
| hl7:manufacturedProduct    |     |                           |      |   | (Arz...try) |
| └ @classCode               | cs  | 1 ... 1                   | F    | MANU                                      |             |
| └ hl7:templateId           | II  | 1 ... 1                   | R    |   | (Arz...try) |
| └ @root                    | uid | 1 ... 1                   | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2           |             |
| └ hl7:templateId           | II  | 1 ... 1                   | R    |   | (Arz...try) |
| └ @root                    | uid | 1 ... 1                   | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.53              |             |
| └ hl7:manufacturedMaterial |     | 1 ... 1                   | M    |   | (Arz...try) |
| └ @classCode               | cs  | 1 ... 1                   | F    | MMAT                                      |             |
| └ @determinerCode          | cs  | 1 ... 1                   | F    | KIND                                      |             |
| Constraint                 |     | Konditionale Konformität: |      |   |             |
|                            |     | Card                      | Conf | Prädikat                                  |             |
|                            |     | 0..1                      | O    | PZN oder Zulassungsnummer vorhanden       |             |
|                            |     |                           | NP   | PZN oder Zulassungsnummer nicht vorhanden |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                  |     |         |   |   |             |
|------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | R |   | (Arz...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.2.40.0.34.11.2.3.4  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | R |   | (Arz...try) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1   |             |
| └ hl7:code       | CE  | 1 ... 1 | R | <div> Pharmazentralnummer (OID 1.2.40.0.34.4.16) oder Zulassungsnummer (OID 1.2.40.0.34.4.17) der Arznei<br/> Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>'NA' Arznei ist eine magistrale Zubereitung</li> </ul> <br/> Die Pharmazentralnummer (PZN) der Arznei. Bei magistralen Anwendungen, bei denen keine Pharmazentralnummer existiert, wird der nullFlavor 'NA' angewandt. </div> <div> Das Codesystem „Pharmazentralnummer“ {1.2.40.0.34.4.16} wird am Terminologieserver in der „ASP-Liste“ (<i>Liste der humanen Arzneispezialitäten gelistet nach PZN</i>) publiziert, die ASP-Liste enthält neben der Pharmazentralnummer auch die korrespondierende Zulassungsnummer {1.2.40.0.34.4.17}.<br/><br/> Die Codeliste kann über den Terminologieserver (<a href="https://tempub.gesundheit.gv.at/">https://tempub.gesundheit.gv.at/</a>) abgerufen werden. </div> | (Arz...try) |
| └ @nullFlavor    | cs  | 0 ... 1 |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |  |   |         |   |  |
|--------------------|--|---|---------|---|--|
| CONF               |  | @nullFlavor muss "NA" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "NI" sein<br>oder<br>@nullFlavor muss "UNK" sein   |         |   |  |
| CONF               |  | @codeSystem muss "1.2.40.0.34.4.16" sein<br>oder<br>@codeSystem muss "1.2.40.0.34.4.17" sein  |         |   |  |
| Beispiel           |  | Code der Arznei (PZN)<br><code code="981417" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.16" codeSystem-<br>Name="Pharmazentralnummer"/>  |         |   |  |
| Beispiel           |  | Code der Arznei (Zulassungsnummer)<br><code code="1-18296" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.17" codeSystem-<br>Name="Zulassungsnummer"/>   |         |   |  |
| Beispiel           |  | Code der Arznei (PZN) mit Zulassungsnummer<br><code code="981417" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.16" codeSystem-<br>Name="Pharmazentralnummer"><br><translation code="1-18296" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.17"<br>codeSystemName="Zulassungsnummer"/><br></code> |         |   |  |
| Beispiel           |  | Magistrale Zubereitung ohne PZN oder Zulassungsnummer<br><code nullFlavor="NA"/>  |         |   |  |
| L hl7:originalText |  | ED  | 0 ... 1 |   | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-bereich, in dem die Pharma-<br>zentralnummer beschrieben ist.<br>Gemäß Vorgaben im „Allgemeinen Implementierungsleitfaden“, Kapitel<br>„Codierungs-Elemente“. (Arz...try) |
| L hl7:translation  |  | CE  | 0 ... * | C | <b>Zulassungsnummer der Arznei.</b><br><i>Dieses Element wird nur verwendet, wenn der Arznei-Entry im Rahmen<br/>der Medikationsliste verwendet wird.</i> (Arz...try)  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |            |   |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|-------------------|------------|---|-------------------------------------|---|--|-------------|------|------|----------|------|---|------------------------------|--|----|-------|
| └ @codeSystem     | Constraint | Konditionale Konformität: <table><tr><td>Card</td><td>Conf</td><td>Prädikat</td></tr><tr><td>0..*</td><td>O</td><td>Dokumenttyp Medikationsliste</td></tr><tr><td></td><td>NP</td><td>sonst</td></tr></table> |                                     |   |  |             | Card | Conf | Prädikat | 0..* | O | Dokumenttyp Medikationsliste |  | NP | sonst |
|                   | Card       | Conf  | Prädikat                            |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | 0..*       | O   | Dokumenttyp Medikationsliste        |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   |            | NP  | sonst                               |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
| CONF              | 0 ... 1    | F   | 1.2.40.0.34.4.17 (Zulassungsnummer) |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
| Schematron assert | role       | error   |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | test       | not(hl7:translation) or //hl7:templateId[@root='1.2.40.0.34.11.8.3']  |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | Meldung    | Optionale Übersetzung des Codes nur bei Medikationsliste zugelassen   |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
| └ hl7:name        | EN         | 1 ... 1   | R                                   | <b>Bezeichnung der Arznei.</b> Zugelassenes nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"><li>▪ NA Arznei ist eine magistrale Zubereitung</li></ul> Die vollständige Bezeichnung der Arznei gemäß ihrer PZN („Handelsname“). Für magistrale Zubereitungen, bei denen keine Pharmazentralnummer und damit auch kein Handelsname existiert, MUSS eine Bezeichnung der magistralen Zubereitung angegeben werden. Die Bezeichnung der magistralen Zubereitung sollte kürzer als die Langbeschreibung sein (siehe Kapitel 4.4.1.2.14 bzw. 4.4.2.2.12), aber mindestens den Hauptwirkstoff und dessen Stärke enthalten. |  | (Arz...try) |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
| └ @nullFlavor     | cs         | 0 ... 1   |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | CONF       | @nullFlavor muss "NA" sein  |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | Beispiel   | Name der Arznei<br><name>Parkemed 500mg</name>  |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
|                   | Beispiel   | Magistrale Zubereitungen ohne Handelsname<br><name nullFlavor="NA"/>  |                                     |   |  |             |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |
| └ pharm:formCode  |            | 0 ... 1   |                                     | Darreichungsform, z.B. bei magistraler Zubereitung.   |  | (Arz...try) |      |      |          |      |   |                              |  |    |       |

└ @codeSystem

CONF

0 ... 1

F

1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.5

Beispiel

Darreichungsform bei magistraler Zubereitung

<formCode code="100000073665" displayName="Filmtablette" codeSystem="1.2.40.0.10.1.4.3.4.3.5" codeSystemName="ELGA\_MedikationDarreichungsform"/>

Schematron assert

role error

test hl7:code/@code or (hl7:code/@nullFlavor and count(pharm:asContent)=0)

Meldung

pharm:asContent Komponente zur Aufnahme der Packungsangaben nur zulässig wenn PZN oder Zulassungsnummer nicht vorhanden

└ pharm:asContent

0 ... 1

**Angaben zur Packung.**

Angaben zur Packung werden nur angegeben, wenn die Arznei eine Pharmazentralnummer besitzt. In allen anderen Fällen werden keine Angaben zur Packung gemacht.

(Arz...try)

└ @classCode

CS

1 ... 1

F

CONT

└ pharm:containerPackaged  
Medicine

1 ... 1

M

Abbildung der Packungsangaben als untergeordnetes containerPackagedMedicine Element.

(Arz...try)

└ @classCode

CS

1 ... 1

F

CONT

└ @determinerCode

CS

1 ... 1

F

INSTANCE

└ pharm:capacityQuantity

PQ

1 ... 1

M

Menge der Arznei in der Packung.

(Arz...try)

└ @value

1 ... 1

R





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |  |   |   |  |             |
|--------------------|--|---|---|--|-------------|
| └ @unit            |  | cs  | 0 ... 1   |  |             |
|                    |  | CONF  | Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 <i>ELGA_MedikationMengenart_VS</i> (DYNAMIC)<br><br>oder<br><br>Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 <i>ELGA_MedikationMengenartAlternativ</i> (DYNAMIC) |  |             |
|                    |  | Constraint  | Konditionale Konformität:<br>Menge in nicht-zählbaren Einheiten -> 1..1 M mit @unit aus Value-Set ELGA_MedikationMengenart<br>Menge in zählbaren Einheiten (Tabletten, Kapseln, etc.) -> 0..1 O mit @unit aus Value-Set ELGA_MedikationMengenartAlternativ                |  |             |
| └ pharm:ingredient |  |   | 0 ... *   | <p>Komponente zur Aufnahme des Wirkstoffs.</p> <p>Bei magistralen Zubereitungen MUSS mindestens ein Wirkstoff angegeben werden. Bei Arzneien ist die Angabe von Wirkstoffen optional. Wirkstoff-Codes stammen aus der ATC-Klassifikation (Anatomical Therapeutic Chemical Classification), die von der WHO herausgegeben wird. Die deutsche Bezeichnung der Codes entspricht der Übersetzung des GKV-Arzneimittelindex im Wissenschaftlichen Institut der AOK (WiDO), AOK Bundesverband GbR, Deutschland. Zusätzlich kommen ergänzende Codes aus dem Arzneimittelverzeichnis der AGES zum Einsatz.</p> | (Arz...try) |
| └ @classCode       |  | cs  | 1 ... 1   | F  | ACTI        |
| Beispiel           |  | <p>Wirkstoff 1 (codiert, Value-Set ELGA_whoATC_VS) Beispiel Arznei</p> <pre>&lt;ingredient classCode="ACTI"&gt;<br/>  &lt;ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;<br/>    &lt;code code="M01AG01" displayName="Mefenamic acid" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.73" codeSystemName="whoATC"/&gt;<br/>    &lt;name&gt;Mefenaminsäure&lt;/name&gt;<br/>  &lt;/ingredient&gt;<br/>&lt;/ingredient&gt;</pre> |   |  |             |





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |            |   |   |  |             |
|--------------------|------------|---|---|--|-------------|
|                    | Beispiel   | Wirkstoff 2 (nur Name), Beispiel magistrale Zubereitung<br><ingredient classCode="ACTI"><br><ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"><br><name>Mefenaminsäure</name><br></ingredient><br></ingredient>  |   |  |             |
|                    | Beispiel   | Wirkstoff 1 (codiert, Value-Set ELGA_Wirkstoffe_AGES_VS), 2795 Beispiel Arznei, wird nur in der Medikationsliste verwendet<br><ingredient classCode="ACTI"><br><ingredient classCode="MMAT" determinerCode="KIND"><br><code code="100000090680" displayName="SENNAE FOLIUM" codeSystem="1.2.40.0.34.5.156" codeSystemName="Medikation_AGES_Wirkstoffe"/><br><name>Mefenaminsäure</name><br></ingredient><br></ingredient> |   |  |             |
| L pharm:ingredient |            | 1 ... 1   | M | Code und Name des Wirkstoffs.  | (Arz...try) |
| L @classCode       | cs         | 1 ... 1   | F | MMAT   |             |
| L @determinerCode  | cs         | 1 ... 1   | F | KIND   |             |
| L pharm:code       | CE         | 0 ... 1   |   | Code und Klartext des Wirkstoffs.  | (Arz...try) |
|                    | Constraint | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_whoATC_VS“ z.B.: M01AG01, Mefenamic acid. Bei Verwendung im Rahmen der Medikationsliste sind auch Werte gemäß Value-Set „ELGA_Wirkstoffe_AGES_VS“ zugelassen.   |   |  |             |
|                    | CONF       | @codeSystem muss "2.16.840.1.113883.6.73" sein<br>oder<br>@codeSystem muss "1.2.40.0.34.5.156" sein   |   |  |             |
| L hl7:originalText | ED         | 0 ... 1   |   | Textinhalt, der codiert wurde. Gemäß Vorgaben im „Allgemeinen Implementierungsleitfaden“, Kapitel „Codierungs-Elemente“. | (Arz...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  hl7:translation  | CE   | 0 ... *                                    |   | <div>Wird das Element in der Medikationsliste verwendet, ist hier die Wirkstoffklasse zum Wirkstoff angegeben.</div> <div>Dieses Element wird nur verwendet, wenn der Arznei-Entry im Rahmen der Medikationsliste verwendet wird.</div> | (Arz...try) |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|--|------|--|---|---|-------------|------|------|----------|------|---|--|--|----|-------|
| <div>Konditionale Konformität:</div> <table><tr><th>Card</th><th>Conf</th><th>Prädikat</th></tr><tr><td>1..1</td><td>M</td><td>Element wird in Medikationsliste verwendet</td></tr><tr><td></td><td>NP</td><td>Sonst</td></tr></table> |      |  |   |   |             | Card | Conf | Prädikat | 1..1 | M | Element wird in Medikationsliste verwendet |  | NP | Sonst |
| Card   | Conf | Prädikat                                   |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
| 1..1   | M    | Element wird in Medikationsliste verwendet |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|  | NP   | Sonst                                      |   |   |             |      |      |          |      |   |  |  |    |       |
|  pharm:name   | EN   | 1 ... 1                                    | M | Name des Wirkstoffs.<br>z.B.: Mefenaminsäure  | (Arz...try) |      |      |          |      |   |  |  |    |       |

12.4.4.14 Medikationseinnahme Entry

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72  at-cda-bbr- | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-19 12:52:22<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li> atcdabbr_entry_MedikationsEinnahmeEntry vom 2020-10-02 07:51:21</li><li> atcdabbr_entry_MedikationsEinnahmeEntry vom 2020-07-29 11:35:17</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv                             | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210219   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_MedikationsEinnahmeEntry   | <b>Bezeichnung</b>    | Medikationseinnahme Entry  |
| <b>Beschreibung</b> <div>Die dokumentierte Einnahme der überwachten Medikamente wird in diesem Element maschinenlesbar gespeichert. Es soll die Referenz zu dem jeweils dazugehörigen Medication Treatment Plan (noch nicht in HL7 Austria / ELGA existent), Verordnung, Abgabe oder pharmazeutischen Empfehlung gespeichert werden, wenn diese Information vorhanden ist.</div> |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72  |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template  |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |   |             |                               |
|-------------------|---|-------------|-------------------------------|
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |             |                               |
| Benutzt           | Benutzt 2 Templates   |             |                               |
|                   | Benutzt   | als         | Name                          |
|                   | Version   |             |                               |
|                   | 1.2.40.0.34.11.2.3.4  | Containment | Arznei Entry (1.0.1+20210518) |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36   | Containment | Author Body (1.0.0+20210219)  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72 Medikationseinnahme Entry (2020-10-02 07:51:21) ref at-cda-bbr- |             |                               |
|                   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72 Medikationseinnahme Entry (2020-07-29 11:35:17) ref at-cda-bbr- |             |                               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Strukturbeispiel

```

<ClinicalDocument>
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="EVN" negationInd="false|true">
    <templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.72"/>
    <!-- HL7 CCD -->
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.24"/>
    <!-- IHE PCC -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7"/>
    <!-- IHE PHARM -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.16"/>
    <!-- die Einnahme eines Medikamentes ist eindeutig. Bei einer komplexen Einnahme, wie einer während der Vergabe anpassbaren Infusi-
on, werden mehrere MedikationsEinnahme-Entrys verwendet und das nachfolgende MedikationsEinnahme-Entry per 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.14
mit dem Vorgänger verknüpft -->
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1"/>
    <!-- ID des Medikationeinnahme-Entry, bestehend aus UUIDv4 -->
    <id root="9F3DABA8-025F-490D-FFE1-B1D80A7A3DE0"/>
    <!-- Der Code berichtet über den Zustand der Einnahme, dies kann vollständig, gescheitert oder im Gange sein -->
    <code code="completed" displayName="Vollständig" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/>
    <!-- oder -->
    <code code="aborted" displayName="Gescheitert" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/>
    <!-- oder -->
    <code code="in-progress" displayName="im Gange" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/>
    <!--Referenz zum narrativen Abschnitt dieses MedikationVerordnung-Entry im Text-Bereich der Sektion-->
    <text>
      <reference value="#vpos-1"/>
    </text>
    <!-- Statuscode des MedikationVerordnung-Entry, festgesetzt auf completed -->
    <statusCode code="completed"/>
    <!-- Einnahmezeitpunkt oder -dauer -->
    <effectiveTime xsi:type="TS.AT.TZ" value="20110527133000+0200"/>
    <!-- oder nur auf den Tag genau -->
    <effectiveTime xsi:type="TS.AT.TZ" value="20110527"/>
    <!-- oder als Zeitspanne dokumentiert -->
    <effectiveTime xsi:type="IVL TS">
      <low value="20110527133000+0200"/>
      <high value="20110527144500+0200"/>
    </effectiveTime>
    <!-- Medikationsfrequenz (zweites effectiveTime) bringt im einzigen UseCase der einzelnen dokumentierten Einnahmen keinen Mehrwert,
wird explizit im MedikationEinnahme-Entry verboten -->
    <!-- Art der Anwendung -->
    <routeCode nullFlavor="NA"/>
    <!-- Der Ort der Anwendung bzw. die Körperstelle, an der das Medikament angewendet wurde. -->
    <approachSiteCode nullFlavor="NA"/>
    <!-- Die Dosis welche eingenommen wurde -->
    <doseQuantity value="500" unit="mg"/>
    <!-- Identifiziert die Geschwindigkeit mit welcher die Substanz eingenommen wurde -->
    <rateQuantity nullFlavor="NA"/>
    <!-- Arznei laut ELGA Vorgaben, siehe https://elga.art-decor.org/elga-html-20161130T162035/
tmp-1.2.40.0.34.11.2.3.4-2014-02-05T000000.html -->
    <consumable>
      <!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) -->
      <manufacturedProduct classCode="MANU">
        <!-- IHE PCC -->
        <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/>
        <!-- HL7 CCD -->
        <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/>
        <!-- ELGA Arznei-Entry -->

```

```

<manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND">
  <templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/>
  <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/>
  <!-- nur ein code-Element kann verwendet werden -->
  <code code="981417" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.16" codeSystemName="Pharmazentralnummer"/>
  <!-- ODER -->
  <code code="1-18296" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.17" codeSystemName="Zulassungsnummer"/>
  <!-- ODER nur bei magistraler Zubereitung erlaubt -->
  <code nullFlavor="NA"/>
  <name>Parkemed 500mg</name>
</manufacturedMaterial>
</manufacturedProduct>
</consumable>
<!-- Ergänzende Informationen zur Einnahme, z.B. als Reaktion auf das Medikament ist der Patient ohnmächtig geworden. -->
<entryRelationship typeCode="SUBJ" inversionInd="true">
  <act classCode="ACT" moodCode="INT">
    <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.43"/>
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1"/>
    <code code="FINSTRUCT" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2" codeSystemName="IHEActCode"/>
    <text>
      <reference value="#comment-2"/>
    </text>
    <statusCode code="completed"/>
  </act>
</entryRelationship>
<!-- Anzahl eingenommener Medikamente -->
<entryRelationship typeCode="COMP">
  <supply classCode="SPLY" moodCode="RQO">
    <independentInd value="false"/>
    <quantity value="2"/>
  </supply>
</entryRelationship>
<!-- Referenz zu einem MedicationTreatmentPlan-Entry, wird in der ELGA eMedikation mit Stand 2020 NICHT VERWENDET! -->
<!-- Im MTS sind Information über den Medikationsplan eines Patienten gespeichert. Beinhaltet Medication Treatment Plan Items (ähn-
lich MedikationsVerordnung Entries). Rezepte und Abgaben können MTP Items referenzieren. -->
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <substanceAdministration classCode="SBADM" moodCode="INT">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10"/>
    <id root="17931678-20b4-11e6-b67b-9e71128cae77"/>
    <code code="MTPItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Medication Treatment Plan Item" codeSystemName="IHE
Pharmacy Item Type List"/>
    <consumable>
      <manufacturedProduct>
        <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
      </manufacturedProduct>
    </consumable>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
<!-- Referenz zu einem MedikationVerordnung-Entry -->
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <substanceAdministration classCode="SBCMA" moodCode="INT">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11"/>
    <!-- PHARM -->
    <!-- ID des MedikationVerordnung-Entry -->
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="VerordnungsId" assigningAuthorityName="Ordnation Dr. Muster"/>
    <code code="PREItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Prescription Item" codeSystemName="IHE Pharmacy Item

```

```

Type List"/>
  <consumable>
    <manufacturedProduct>
      <manufacturedMaterial nullFlavor="NA"/>
    </manufacturedProduct>
  </consumable>
</substanceAdministration>
</entryRelationship>
<!-- Referenz zu einem MedikationAbgabe-Entry -->
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <supply classCode="SPLY" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.12"/>
    <!-- ID des MedikationAbgabe-Entry -->
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3" extension="...AbgabeId..." assigningAuthorityName="Heilsapotheke"/>
    <!-- Dispense Item Id -->
    <code code="DISItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Dispense Item" codeSystemName="IHE Pharmacy Item Type
List"/>
  </supply>
</entryRelationship>
<!-- Referenz zu einem MedikationPharmazeutischeEmpfehlung-Entry -->
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.13"/>
    <!-- ID des MedikationAbgabe-Entry -->
    <id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.4" extension="...PharmazeutischeEmpfehlungId..." assigningAuthorityName="Ordnation Dr. Mei-
er"/>
    <!-- Pharmaceutical Advice Item Id -->
    <code code="PADVItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Pharmaceutical Advice Item" codeSystemName="IHE Phar-
macy Item Type List"/>
  </observation>
</entryRelationship>
<!-- Referenz zu einem anderen MedikationEinnahme-Entry, z.B. um einzelne MedikationsEinnahmen wie bei komplexen Intervalle zu ver-
knüpfen -->
<entryRelationship typeCode="REFR">
  <substanceAdministration classCode="SBCMA" moodCode="EVN">
    <templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.14"/>
    <!-- ID des anderen MedikationEinnahme-Entry, bestehend aus UUIDv4 -->
    <id root="9F3DABA8-025F-490D-FFE1-B1D80A7A3DE1"/>
    <!-- Medication Administration Item Id -->
    <code code="CMAItem" codeSystem="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2" displayName="Medication Administration Item" codeSystemName="IHE
Pharmacy Item Type List"/>
  </substanceAdministration>
</entryRelationship>
</substanceAdministration>
</ClinicalDocument>

```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                        | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:substanceAdministration |     |         |      |   | (atc...try) |
| └ @classCode                | cs  | 1 ... 1 | F    | SBADM   |             |
| └ @moodCode                 | cs  | 1 ... 1 | F    | EVN   |             |
| └ @negationInd              | bl  | 1 ... 1 | R    | SOLL standardmäßig auf false gesetzt werden.<br>Kann auf true gesetzt werden, um anzuzeigen, dass das dokumentierte Medikament nicht eingenommen wurde. |             |
| └ hl7:templateId            | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Medikationseinnahme Entry   | (atc...try) |
| └ @root                     | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72   |             |
| └ hl7:templateId            | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 CCD 3.9.  | (atc...try) |
| └ @root                     | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.1.24  |             |
| └ hl7:templateId            | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PCC Medications Entry.  | (atc...try) |
| └ @root                     | uid | 1 ... 1 | F    | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7   |             |
| └ hl7:templateId            | II  | 1 ... 1 | M    | IHE PHARM Medication Administration Item.   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |        |          |   |   |  |             |
|-------------------|--------|----------|---|---|--|-------------|
| └ @root           |        | uid      | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.16   |             |
| └ hl7:templateId  | II     |          | 1 ... 1   | M | IHE PHARM Dosage Instructions - normal dosing.   | (atc...try) |
| └ @root           |        | uid      | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.1  |             |
| └ hl7:id          | II     |          | 1 ... 1   | M | ID des Medikationeinnahme-Entry.<br>Empfohlen wird UUIDv4. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ aus dem allgemeinen Leitfaden zu befolgen. | (atc...try) |
| └ @root           |        | uid      | 1 ... 1   | R |  |             |
|                   |        | Beispiel | <id root="9F3DABA8-025F-490D-FFE1-B1D80A7A3DE0"/> |   |  |             |
| └ hl7:code        | CD.IPS |          | 1 ... 1   | M | Der Code berichtet über den Zustand der Einnahme. Diese kann vollständig, gescheitert oder im Gange sein.  | (atc...try) |
| └ @code           |        | cs       | 1 ... 1   | R |  |             |
| └ @codeSystem     |        | uid      | 1 ... 1   | F | 2.16.840.1.113883.4.642.1.101  |             |
| └ @codeSystemName |        | st       | 0 ... 1   | F | HL7 EventStatus  |             |
| └ @displayName    |        | st       | 0 ... 1   |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |          |  |   |   |             |
|-------------------|----------|--|---|---|-------------|
|                   | Beispiel | <pre>&lt;code code="completed" displayName="Vollständig" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/&gt; &lt;!-- oder --&gt; &lt;code code="aborted" displayName="Gescheitert" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/&gt; &lt;!-- oder --&gt; &lt;code code="in-progress" displayName="im Gange" codesystem="2.16.840.1.113883.4.642.1.101" codeSystemName="HL7 EventStatus"/&gt;</pre> |   |   |             |
| └ h17:translation | CD       | 0 ... *  |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden.   | (atc...try) |
| └ @code           | cs       | 1 ... 1  | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid      | 1 ... 1  | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st       | 0 ... 1  |   |   |             |
| └ @displayName    | st       | 0 ... 1  |   |   |             |
| └ ips:designation | ST       | 0 ... *  |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.   | (atc...try) |
| └ @language       | cs       | 1 ... 1  | R |   |             |
| └ h17:text        | ED       | 1 ... 1  | M | Verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die gegebene Medikation narrativ beschrieben ist (mit zusätzlichen Informationen, wie Datum, Beschreibung, etc). | (atc...try) |
|                   | Beispiel | Strukturbeispiel<br><pre>&lt;text&gt;   &lt;reference value="#vpos-1"/&gt; &lt;/text&gt;</pre>   |   |   |             |
| └ h17:reference   | TEL      | 1 ... 1  | M |   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |          |  |   |  |             |
|---------------------|----------|--|---|--|-------------|
| └ @value            |          | 1 ... 1  | R | #vpos-{generierteID},<br>z.B.: #vpos-1   |             |
| └ hl7:statusCode    | CS       | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ @code             | CONF     | 1 ... 1  | F | completed  |             |
| Auswahl             |          | 1 ... 1  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:effectiveTime</li><li>hl7:effectiveTime</li></ul> |             |
| └ hl7:effectiveTime | TS.AT.TZ |  |   | Medikationseinnahme zu einem Zeitpunkt   | (atc...try) |
| └ @value            |          | 1 ... 1  | R |  |             |
|                     | Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><hl7:ClinicalDocument><br><!--<br>Einnahme am 27.05.2011 um 13:30<br>--><br><hl7:effectiveTime xsi:type="TS" value="20110527133000+0200"/><br></hl7:ClinicalDocument> |   |  |             |
|                     | Beispiel | <b>Strukturbeispiel</b><br><hl7:ClinicalDocument><br><!--<br>Einnahme am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt<br>--><br><hl7:effectiveTime xsi:type="TS" value="20110527"/><br></hl7:ClinicalDocument>   |   |  |             |
| └ hl7:effectiveTime | IVL_TS   |  |   | Medikationseinnahme innerhalb einer Zeitspanne   | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

**Strukturbeispiel**  

```
<hl7:ClinicalDocument>
  <!--
    Einnahme am 27.05.2011 von 13:30 bis 14:45
  -->
  <hl7:effectiveTime xsi:type="IVL_TS">
    <hl7:low value="20110527133000+0200"/>
    <hl7:high value="20110527144500+0200"/>
  </hl7:effectiveTime>
</hl7:ClinicalDocument>
```

|                         |    |         |   |   |             |
|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:low              |    | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └─ @value               |    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ hl7:high             |    | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └─ @value               |    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ hl7:routeCode        | CE | 1 ... 1 | R | Die Art der Anwendung (des Medikamentes) z.B. oral, anal.<br><b>Wird nicht verwendet!</b> Für dieses Element wird daher immer der nullFlavor='NA' angegeben.                            | (atc...try) |
| └─ @nullFlavor          | cs | 1 ... 1 | F | NA  |             |
| └─ hl7:approachSiteCode | CD | 1 ... 1 | R | Der Ort der Anwendung bzw. die Körperstelle, an der das Medikament angewendet wurde.<br><b>Wird nicht verwendet!</b> Für dieses Element wird daher immer der nullFlavor='NA' angegeben. | (atc...try) |
| └─ @nullFlavor          | cs | 1 ... 1 | F | NA  |             |
| └─ hl7:doseQuantity     | PQ | 1 ... 1 | R | Die Dosis welche verabreicht wurde, bezogen auf das "consumable".   | (atc...try) |

└ @value 1 ... 1 R

└ @unit cs 0 ... 1

CONF

Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.32 *ELGA\_MedikationMengenart\_VS* (DYNAMIC)

oder

Der Wert von @unit muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.67 *ELGA\_MedikationMengenartAlternativ* (DYNAMIC)

Beispiel

`<doseQuantity value="500" unit="mg"/>`

└ hl7:rateQuantity

CE

1 ... 1 R

Identifiziert die Geschwindigkeit mit welcher die Substanz eingenommen wurde. Die Geschwindigkeit wird üblicherweise in physischen Einheiten über die verstrichene Zeit. Beispielsweise 100ml/h, 1 g/d, 40 mmol/h, etc. (Identifies the speed with which the substance is introduced into the subject. Expressed as a physical (extensive) quantity over elapsed time.)

(atc...try)

**Wird nicht verwendet!**

Für dieses Element wird daher immer der **nullFlavor='NA'** angegeben.

└ @nullFlavor

cs

1 ... 1 F

NA

└ hl7:consumable

1 ... 1 M

Komponente zur Aufnahme der Arznei auf die sich der MedikationEinnahme-Entry bezieht.

(atc...try)

Beinhaltet 1.2.40.0.34.11.2.3.4 *Arznei Entry* (DYNAMIC)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|          |  |  |  |  |
|----------|--|--|--|--|
| Beispiel | Strukturbeispiel   |  |  |  |
|          | <pre>&lt;consumable&gt;   &lt;!-- ELGA Arznei Element (1.2.40.0.34.11.2.3.4) --&gt;   &lt;manufacturedProduct classCode="MANU"&gt;     &lt;templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.7.2"/&gt;     &lt;!-- IHE PCC --&gt;     &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.1.53"/&gt;     &lt;!-- HL7 CCD --&gt;     &lt;manufacturedMaterial classCode="MMAT" determinerCode="KIND"&gt;       &lt;!-- ELGA Arznei-Entry --&gt;       &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.2.3.4"/&gt;       &lt;templateId root="1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.1"/&gt;       &lt;!-- nur ein code-Element kann verwendet werden --&gt;       &lt;code code="981417" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.16" codeSystemName="Pharmazentralnummer"/&gt;       &lt;!-- ODER --&gt;       &lt;code code="1-18296" displayName="CIPROXIN FTBL 500MG" codeSystem="1.2.40.0.34.4.17" codeSystemName="Zulassungsnummer"/&gt;       &lt;!-- ODER nur bei magistraler Zubereitung erlaubt --&gt;       &lt;code nullFlavor="NA"/&gt;       &lt;name&gt;Parkemed 500mg&lt;/name&gt;     &lt;/manufacturedMaterial&gt;   &lt;/manufacturedProduct&gt; &lt;/consumable&gt;</pre> |  |  |  |

|  |  |         |    |   |             |
|--|--|---------|----|---|-------------|
| └ h17:author   |  | 0 ... 1 | R  | Gerät oder Software, mit welchem die Medikationseinnahme bestätigt wurde oder die Person, die den Wert eingegeben hat. Im author.time wird der Zeitpunkt dokumentiert, an dem das Gerät/die Software die Bestätigung übertragen hat bzw. die Person die Bestätigung eingegeben hat. Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (DYNAMIC) | (atc...try) |
| └ h17:author   |  |         | NP | Der Autor des ursprünglichen Dokuments aus welchem das Medikamentsionseinnahme-Entry kommt.<br><b>Wird nicht verwendet!</b>   | (atc...try) |
| └ h17:entryRelationship  |  |         | NP | Ergänzende Informationen zum Einnahmegrund, z.B. doppelte Dosis aufgrund plötzlichen Kopfschmerzen.<br><b>Wird nicht verwendet!</b>   | (atc...try) |
| wo [@typeCode='RSON'] [h17:act/h17:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1']] |  |         |    |   |             |

|                         |    |         |   |      |
|-------------------------|----|---------|---|------|
| └ @typeCode             | cs | 1 ... 1 | F | RSON |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |   |     |         |   |  |             |
|--|---|-----|---------|---|--|-------------|
|  | └ @inversionInd   | bl  | 1 ... 1 | F | true   |             |
|  | └ hl7:act   |     | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
|  | └ @classCode  | cs  | 1 ... 1 | F | ACT  |             |
|  | └ @moodCode   | cs  | 1 ... 1 | F | EVN  |             |
|  | └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
|  | └ @root   | uid | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.4.1  |             |
|  | └ hl7:id  | II  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
|  | └ @root   | uid | 1 ... 1 | R |  |             |
|  | └ @extension  | st  | 1 ... 1 | R |  |             |
|  | └ hl7:entryRelationship   |     | 0 ... 1 |   | Ergänzende Informationen zur Einnahme, z.B. als Rekation auf das Medikament ist der Patient ohnmächtig geworden. | (atc...try) |
|  | wo [@typeCode='SUBJ'] [hl7:act/hl7:templateId [@root='2.16.840.1.113883.10.20.1.43']] |     |         |   |  |             |
|  | └ @typeCode   | cs  | 1 ... 1 | F | SUBJ   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |      |         |   |   |             |
|-------------------------|------|---------|---|---|-------------|
|                         |      |         |   |   | true        |
| └ @contextConductionInd | cs   | 0 ... 1 | F |   |             |
|                         |      |         |   |   | true        |
| └ @inversionInd         | bl   | 1 ... 1 | F |   |             |
| └ hl7:act               |      | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @classCode            | cs   | 1 ... 1 | F | ACT   |             |
| └ @moodCode             | cs   | 1 ... 1 | F | INT   |             |
| └ hl7:templateId        | II   | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.1.43                      |             |
| └ hl7:templateId        | II   | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @root                 | uid  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.1.4.3.1                   |             |
| └ hl7:code              | CE   | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @code                 | CONF | 1 ... 1 | F | FINSTRUCT   |             |
| └ @codeSystem           |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.5.3.2 (IHEActCode Vocabulary) |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                                    |  |   |         |   |   |             |
|------------------------------------|--|---|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName                  |  |   | 1 ... 1 | F | IHEActCode  |             |
| └ hl7:text                         |  | ED  | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die ergänzenden Informationen zur Abgabe oder zu der magistralen Zubereitungen angeführt sind) | (atc...try) |
| └ hl7:reference                    |  | TEL   | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @value                           |  |   | 1 ... 1 | R | #comment-{generierteID}, z.B.: #comment-1   |             |
| └ hl7:statusCode                   |  | CS  | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @code                            |  | CONF  | 1 ... 1 | F | completed   |             |
| └ hl7:entryRelationship            |  |   | 0 ... 1 |   | Komponente zur Aufnahme der Packungsanzahl.   | (atc...try) |
| wo [@typeCode='COMP'] [hl7:supply] |  |   |         |   |   |             |
| └ @typeCode                        |  | cs  | 1 ... 1 | F | COMP  |             |
| └ @contextConductionInd            |  | cs  | 0 ... 1 | F | true  |             |
| Beispiel                           |  | <pre>Strukturbeispiel &lt;entryRelationship typeCode="COMP"&gt;   &lt;supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"&gt;     &lt;independentInd value="false"/&gt;     &lt;quantity value="1"/&gt;   &lt;/supply&gt; &lt;/entryRelationship&gt;</pre> |         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |          |   |   |   |             |
|---|----------|---|---|---|-------------|
| └ h17:supply  |          | 1 ... 1   | M | Abbildung der eingenommenen Medikamentenanzahl als untergeordnetes supply-Element.  | (atc...try) |
| └ @classCode  | cs       | 1 ... 1   | F | SPLY  |             |
| └ @moodCode   | cs       | 1 ... 1   | F | RQO   |             |
|   | Beispiel | <pre>&lt;supply classCode="SPLY" moodCode="RQO"&gt;   &lt;independentInd value="false"/&gt;   &lt;quantity value="1"/&gt; &lt;/supply&gt;</pre> |   |   |             |
| └ h17:independentInd  | BL       | 1 ... 1   | M | Indikator, ob die Komponente unabhängig verwendet werden darf.  | (atc...try) |
| └ @value  |          | 1 ... 1   | F | false   |             |
| └ h17:quantity  | PQ       | 1 ... 1   | R | Anzahl des eingenommenen Medikamentes.<br><br>Zugelassene nullFlavor: <b>MSK</b><br>MSK= Wird die Anzahl des eingenommenen Medikamentes nicht angegeben (NullFlavor = MSK, Maskiert), kann die Anzahl nur mit 1 angenommen werden.  | (atc...try) |
| └ @nullFlavor   | cs       | 0 ... 1   | F | MSK   |             |
| └ h17:entryRelationship   |          | 0 ... 1   | R | Referenz zu einem MedicationTreatmentPlan-Entry.<br>Im MTP sind Information über den Medikationsplan eines Patienten gespeichert. Beinhaltet Medication Treatment Plan Items (ähnlich MedikationsVerordnung Entries). Rezepte und Abgaben können MTP Items referenzieren. | (atc...try) |
| wo [ @typeCode='REFR' ] [h17:substanceAdministration/h17:templateId [ @root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10' ]] |          |   |   |   |             |
| └ @typeCode   | cs       | 1 ... 1   | F | REFR  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                               |            |  |   |                              |             |
|-------------------------------|------------|--|---|------------------------------|-------------|
| └ @contextConductionInd       | cs         | 0 ... 1  | F | true                         |             |
|                               | Constraint | Wird zur Zeit im österreichischen Umfeld nicht verwendet!                      |   |                              |             |
| └ hl7:substanceAdministration |            |  |   |                              | (atc...try) |
| └ @classCode                  | cs         | 1 ... 1  | F | SBADM                        |             |
| └ @moodCode                   | cs         | 1 ... 1  | F | INT                          |             |
| └ hl7:templateId              | II         | 1 ... 1  | M |                              | (atc...try) |
| └ @root                       | uid        | 1 ... 1  | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.10 |             |
| └ hl7:id                      | II         | 1 ... 1  | M | ID des MTP-Entry             | (atc...try) |
| └ @root                       | uid        | 1 ... 1  | R |                              |             |
| └ @extension                  | st         | 1 ... 1  | R |                              |             |
|                               | Beispiel   | <!-- ID des MTP-Entry --><br><id root="17931678-20b4-11e6-b67b-9e71128cae77"/> |   |                              |             |
| └ hl7:code                    | CE         | 1 ... 1  | M |                              | (atc...try) |
| └ @code                       | CONF       | 1 ... 1  | F | MTPItem                      |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |    |  |         |   |  |             |
|---|----|--|---------|---|--|-------------|
| <div>└ @codeSystem</div>  |    |  | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2                    |             |
| <div>└ @codeSystemName</div>  |    |  | 1 ... 1 | F | IHE Pharmacy Item Type List                  |             |
| <div>└ @displayName</div>   |    |  | 1 ... 1 | F | Medication Treatment Plan Item               |             |
| <div>└ hl7:consumable</div>   |    |  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| <div>└ hl7:manufacturedProduct</div>  |    |  | 1 ... 1 | M |  | (atc...try) |
| <div>└ hl7:manufacturedMaterial</div>   |    |  | 1 ... 1 | R |  | (atc...try) |
| <div>└ @nullFlavor</div>  | cs |  | 1 ... 1 | F | NA   |             |
| <div>└ hl7:entryRelationship</div>  |    |  | 0 ... 1 | R | Referenz zu einem MedikationVerordnung-Entry | (atc...try) |
| wo [/@typeCode='REFR'] [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId [/@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11']] |    |  |         |   |  |             |
| <div>└ @typeCode</div>  | cs |  | 1 ... 1 | F | REFR   |             |
| <div>└ @contextConductionInd</div>  | cs |  | 0 ... 1 | F | true   |             |
| <div>└ hl7:substanceAdministration</div>  |    |  |         |   |  | (atc...try) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |          |   |   |                                   |             |
|-------------------|--|----------|---|---|-----------------------------------|-------------|
| └ @classCode      |  | cs       | 1 ... 1   | F | SBADM                             |             |
| └ @moodCode       |  | cs       | 1 ... 1   | F | INT                               |             |
| └ hl7:templateId  |  | II       | 1 ... 1   | M |                                   | (atc...try) |
| └ @root           |  | uid      | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.11      |             |
| └ hl7:id          |  | II       | 1 ... 1   | M | ID des MedikationVerordnung-Entry | (atc...try) |
| └ @root           |  | uid      | 1 ... 1   | R |                                   |             |
| └ @extension      |  | st       | 1 ... 1   | R |                                   |             |
|                   |  | Beispiel | <!-- ID des MedikationVerordnung-Entry --><br><id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.2" extension="VerordnungsId" assigningAuthorityName="Ordnation<br>Dr. Muster"/> |   |                                   |             |
| └ hl7:code        |  | CE       | 1 ... 1   | M |                                   | (atc...try) |
| └ @code           |  | CONF     | 1 ... 1   | F | PREItem                           |             |
| └ @codeSystem     |  |          | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2         |             |
| └ @codeSystemName |  |          | 1 ... 1   | F | IHE Pharmacy Item Type List       |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |  |    |         |   |   |             |
|--|--|----|---------|---|---|-------------|
|  | └ @displayName   |    | 1 ... 1 | F | Prescription Item                         |             |
|  | └ hl7:consumable   |    | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
|  | └ hl7:manufacturedProduct  |    | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
|  | └ hl7:manufacturedMaterial   |    | 1 ... 1 | R |   | (atc...try) |
|  | └ @nullFlavor  | cs | 1 ... 1 | F | NA  |             |
|  | └ hl7:entryRelationship  |    | 0 ... 1 | R | Referenz zu einerm MedikationAbgabe-Entry | (atc...try) |
|  | wo [@typeCode='REFR'] [hl7:supply/hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.12']] |    |         |   |   |             |
|  | └ @typeCode  | cs | 1 ... 1 | F | REFR                                      |             |
|  | └ @contextConductionInd  | cs | 0 ... 1 | F | true                                      |             |
|  | └ hl7:supply   |    |         |   |   | (atc...try) |
|  | └ @classCode   | cs | 1 ... 1 | F | SPLY                                      |             |
|  | └ @moodCode  | cs | 1 ... 1 | F | EVN                                       |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |          |   |   |   |             |
|-------------------------|----------|---|---|---|-------------|
| └ h17:templateId        | II       | 1 ... 1   | M |   | (atc...try) |
| └ @root                 | uid      | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.12                                |             |
| └ h17:id                | II       | 1 ... 1   | M | ID des MedikationAbgabe-Entry                               | (atc...try) |
| └ @root                 | uid      | 1 ... 1   | R |   |             |
| └ @extension            | st       | 1 ... 1   | R |   |             |
|                         | Beispiel | <!-- ID des MedikationAbgabe-Entry --><br><id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.3" extension="...AbgabeId..." assigningAuthorityName="Heilsapo-<br>theke"/> |   |   |             |
| └ h17:code              | CE       | 1 ... 1   | M |   | (atc...try) |
| └ @code                 | CONF     | 1 ... 1   | F | DISItem   |             |
| └ @codeSystem           |          | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2                                   |             |
| └ @codeSystemName       |          | 1 ... 1   | F | IHE Pharmacy Item Type List                                 |             |
| └ @displayName          |          | 1 ... 1   | F | Dispense Item   |             |
| └ h17:entryRelationship |          | 0 ... 1   | R | Referenz zu einem MedikationPharmazeutischeEmpfehlung-Entry | (atc...try) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |     |   |   |  |             |
|---|-----|---|---|--|-------------|
| wo [@typeCode='REFR'] [hl7:substanceAdministration/hl7:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.13']] |     |   |   |  |             |
| └ @typeCode   | cs  | 1 ... 1   | F | REFR                                   |             |
| └ @contextConductionInd   | cs  | 0 ... 1   | F | true                                   |             |
| └ hl7:substanceAdministration   |     |   |   |  | (atc...try) |
| └ @classCode  | cs  | 1 ... 1   | F | OBS                                    |             |
| └ @moodCode   | cs  | 1 ... 1   | F | EVN                                    |             |
| └ hl7:templateId  | II  | 1 ... 1   | M |  | (atc...try) |
| └ @root   | uid | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.13           |             |
| └ hl7:id  | II  | 1 ... 1   | M | ID des PharmazeutischeEmpfehlung-Entry | (atc...try) |
| └ @root   | uid | 1 ... 1   | R |  |             |
| └ @extension  | st  | 1 ... 1   | R |  |             |
| Beispiel  |     | <!-- ID des PharmazeutischeEmpfehlung-Entry --><br><id root="1.2.40.0.10.1.4.3.4.2.4" extension="...PharmazeutischeEmpfehlungId..." assigningAutho-<br>rityName="Ordnation Dr. Meier"/> |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|   |      |         |   |   |             |
|---|------|---------|---|---|-------------|
| └ h17:code  | CE   | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └ @code   | CONF | 1 ... 1 | F | PADVItem  |             |
| └ @codeSystem   |      | 1 ... 1 | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2   |             |
| └ @codeSystemName   |      | 1 ... 1 | F | IHE Pharmacy Item Type List   |             |
| └ @displayName  |      | 1 ... 1 | F | Pharmaceutical Advice Item  |             |
| └ h17:entryRelationship   |      | 0 ... 1 |   | Referenz zu einem anderen MedikationEinnahme-Entry, z.B. um einzelne MedikationsEinnahmen wie bei komplexen Intervalle zu verknüpfen. | (atc...try) |
| wo [@typeCode='REFR'] [h17:substanceAdministration/h17:templateId [@root='1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.14']] |      |         |   |   |             |
| └ @typeCode   | cs   | 1 ... 1 | F | REFR  |             |
| └ @contextConductionInd   | cs   | 0 ... 1 | F | true  |             |
| └ h17:substanceAdministration   |      |         |   |   | (atc...try) |
| └ @classCode  | cs   | 1 ... 1 | F | SBADM   |             |
| └ @moodCode   | cs   | 1 ... 1 | F | EVN   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |          |   |   |   |             |
|-------------------|----------|---|---|---|-------------|
| └ h17:templateId  | II       | 1 ... 1   | M |   | (atc...try) |
| └ @root           | uid      | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.1.3.14  |             |
| └ h17:id          | II       | 1 ... 1   | M | ID des anderen Medikationeinnahme-Entry, bestehend aus UUIDv4.<br>Dabei muss die Vorgabe "5.1. Identifikations-Elemente" aus dem Allgemeinen Leitfadens eingehaltet werden.<br>Diese gibt den Standard ISO/IEC 9834-8:2005 welcher ident zum öffentlich verfügbaren Standard <a href="https://tools.ietf.org/html/rfc4122">https://tools.ietf.org/html/rfc4122</a> ist, wobei die Buchstaben A-F der Hexadezimalzahlen in Großschreibung angegeben werden MÜSSEN. | (atc...try) |
| └ @root           | uid      | 1 ... 1   | R |   |             |
| └ @extension      | st       | 1 ... 1   | R |   |             |
|                   | Beispiel | <id root="9F3DABA8-025F-490D-FFE1-B1D80A7A3DE1"/> |   |   |             |
| └ h17:code        | CE       | 1 ... 1   | M |   | (atc...try) |
| └ @code           | CONF     | 1 ... 1   | F | CMAItem   |             |
| └ @codeSystem     |          | 1 ... 1   | F | 1.3.6.1.4.1.19376.1.9.2.2   |             |
| └ @codeSystemName |          | 1 ... 1   | F | IHE Pharmacy Item Type List   |             |
| └ @displayName    |          | 1 ... 1   | F | Medication Administration Item  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                            |            |  |   |  |             |
|----------------------------|------------|--|---|--|-------------|
| └ h17:consumable           |            | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ h17:manufacturedProduct  |            | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ h17:manufacturedMaterial |            | 1 ... 1  | R |  | (atc...try) |
| └ @nullFlavor              | cs         | 1 ... 1  | F | NA   |             |
| └ h17:reference            |            | 0 ... 1  | C | Beinhaltet im ID-Element die Dokumenten-ID aus welchem das Medikationseinnahme-Entry ursprünglich kommt. | (atc...try) |
| └ @typeCode                | cs         | 1 ... 1  | F | XCRPT  |             |
|                            | Constraint | Dieses Element muss angegeben werden wenn das Medikationseinnahme-Entry aus einem anderen Dokument kommt.<br>Es muss leer bleiben wenn das Medikationseinnahme-Entry für dieses Dokument erstellt wurde. |   |  |             |
| └ h17:externalDocument     |            | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ h17:id                   | II         | 1 ... 1  | M |  | (atc...try) |
| └ @root                    | uid        | 1 ... 1  | R |  |             |
| └ @extension               | st         | 0 ... 1  |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |     |         |   |   |             |
|---------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:precondition |     | 0 ... 1 |   | Die Vorbedingungen zur Einnahme der Medikation. Zeigt auf den Inhalt im Text.   | (atc...try) |
| └─ hl7:criterion    |     | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └─ hl7:text         | ED  | 1 ... 1 | M | Text Element (verweist auf die Stelle im narrativen Text-Bereich, an der die Vorbedingungen zur Einnahme der Medikation angeführt sind) | (atc...try) |
| └─ hl7:reference    | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...try) |
| └─ @value           |     | 1 ... 1 | R | #comment-{generierteID}, z.B.: #comment-1   |             |

12.4.4.15 Device Information Organizer

|        |  |   |                |  |  |
|--------|--|---|----------------|--|--|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73                   | Gültigkeit     |  | 2021-08-31 13:26:17<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceInformationOrganizer vom 2021-02-18 13:26:44</li><li>atcdabbr_entry_DeviceInformationOrganizer vom 2020-10-07 13:54:54</li><li>atcdabbr_entry_DeviceInformationOrganizer vom 2019-02-28 10:41:30</li></ul> |
| Status |  | Entwurf                                   | Versions-Label |  | 1.1.1+20210831   |
| Name   |  | atcdabbr_entry_DeviceInformationOrganizer | Bezeichnung    |  | Device Information Organizer   |

## Beschreibung

Der Device Information Organizer kodiert Informationen über die Identität und beinhaltet die Eigenschaften des verwendeten Gerätes. Ein Organizer-Element steht immer nur für ein verwendetes Gerät. Mindestens eine eindeutige ID, die Klassifizierung und der Name (samt Hersteller) des Gerätes sind für jedes verwendete Gerät anzugeben. Diese verpflichtenden Informationen befinden sich im Device Product Instance Template.



















Die weiteren Eigenschaften können in 17 verschiedenen "component"-Elementen dokumentiert werden. 13 der 17 Elemente können maximal einmal im "Organizer" vorkommen. Darunter sind die Elemente Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinproduktregister), Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwarerevision, unspezifizierte Information, Seriennummer, Regulierungsstatus, PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung und Protokoll. Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich sind Elemente, welche zusätzlich auch mehrmals in einem jeweils eigenen "component"-Element vorkommen können. Wenn das Gerät die Daten über die Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Benutzt 18 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 | Containment |  Device Product Instance Template (1.1.0+20210218)                         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 | Containment |  Device Firmware Revision Information Observation (1.1.0+20210218)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 | Containment |  Device GMDN Information Observation (1.1.0+20210218)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 | Containment |  Device Hardware Revision Information Observation (1.1.0+20210218)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 | Containment |  Device Manufacturer Information Observation (1.1.0+20210218)              | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 | Containment |  Device Model Number Information Observation (1.1.0+20210218)              | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 | Containment |  Device Part Number Information Observation (1.1.0+20210218)               | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 | Containment |  Device Software Revision Information Observation (1.1.0+20210218)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 | Containment |  Device Specification Unspecified Information Observation (1.1.0+20210218) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 | Containment |  Device Serial Number Information Observation (1.1.0+20210218)             | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 | Containment |  Device Regulation Status Information Observation (1.1.0+20210218)         | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 | Containment |  Device PCHA Version Information Observation (1.1.0+20210218)            | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 | Containment |  Device Time Synchronization Information Observation (1.1.0+20210218)    | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 | Containment |  Device Protocol Information Observation (1.1.0+20210218)                | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 | Containment |  Device Accuracy Observation (1.1.0+20210218)                            | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 | Containment |  Device Sampling Frequency Observation (1.1.0+20210218)                  | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 | Containment |  Device Resolution Observation (1.1.0+20210218)                          | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 | Containment |  Device Measurement Range Observation (1.1.0+20210218)                   | DYNAMIC |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |   |
|-----------|---|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 Device Information Organizer (2020-10-07 13:54:54) <div>ref elgatgd-</div><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73 Device Information Organizer (2019-02-28 10:41:30) <div>ref elgatgd-</div>  |
| Beispiel  | <div>Strukturbeispiel</div> <pre>&lt;organizer classCode="CLUSTER" moodCode="EVN"&gt;   &lt;templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.73"/&gt;   &lt;templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.4" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;id root="2.25" extension="urn:uuid:9F3DABA8-025F-490D-AAE1-C1E80A8A3DE0" assigningAuthorityName="HerzMobil Tirol"/&gt;   &lt;!-- Optional kann ein Code verwendet werden, welche die Kategorie der Geräte spezifiziert.   &lt;code code="123232" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.123" displayName="AIT KIT Devices"/&gt; --&gt;   &lt;statusCode code="completed"/&gt;   &lt;effectiveTime&gt;     &lt;!-- Wenn die Messwerte nicht in einem Zeitintervall sondern nur einem Zeitpunkt gemessen worden sind,     dann soll stattdessen das Value-Attribut genutzt werden, zum Beispiel &lt;effectiveTime value="20150322170922.86+0200" /&gt; --&gt;     &lt;low value="20151001083753+0200"/&gt;     &lt;high value="20151028075542+0200"/&gt;   &lt;/effectiveTime&gt;   &lt;participant typeCode="DEV"&gt;     &lt;!-- PHMR Product Instance --&gt;      ::      &lt;/participant&gt;     &lt;!-- Jede der folgenden Component-Elemente ist optional. Sie beinhalten rechtliche und handelsübliche Informationen über die     Geräte.     Die möglichen Component-Elemente beinhalten Informationen über Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinpro-     duktregister),     Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwarerevision, unspezifizierte Information als Text, Seriennummer,     Regulierungsstatus,     PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung, Protokoll-Informationen, Genauigkeit, Aufnahmefre-     quenz, Messauflösung und Messbereich. --&gt;     &lt;!-- ===== Device Manufacturer Information Observation     ===== --&gt;      ::    &lt;/organizer&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:organizer    |        |         |      |  | (atc...zer) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | CLUSTER  |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | EVN  |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Information Organizer   | (atc...zer) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73  |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Information Organizer   | (atc...zer) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.4   |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:id         |        | 1 ... 1 | M    | ID des Device Information Organizer.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen.  | (atc...zer) |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 0 ... * |      | Code des Device Information Organizer-Entry (die Gruppe/Kategorie des verwendeten Gerätes).<br><br>Dieser Code ist streng optional und nicht limitiert auf ein ValueSet oder Code-System. Implementierer können hier nach Wunsch zusätzliche codierte Informationen über die Gruppe/Kategorie des verwendeten Gerätes bereitstellen. | (atc...zer) |

└ @code cs 1 ... 1 R

└ @codeSystem uid 1 ... 1 R

└ @codeSystemName st 0 ... 1

└ @displayName st 0 ... 1

|                   |    |         |   |   |             |
|-------------------|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:translation | CD | 1 ... 1 | M | Hier wird die verpflichtende Übersetzung des Codes als MDC-Code bereitgestellt. | (atc...zer) |
|-------------------|----|---------|---|---|-------------|

└ @code 1 ... 1 R

└ @codeSystem uid 1 ... 1 F 2.16.840.1.113883.6.24

└ @codeSystemName st 0 ... 1 F MDC

└ @displayName 0 ... 1

|                   |    |         |  |   |             |
|-------------------|----|---------|--|---|-------------|
| └ hl7:translation | CD | 0 ... * |  | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...zer) |
|-------------------|----|---------|--|---|-------------|

└ @code cs 1 ... 1 R

└ @codeSystem uid 1 ... 1 R

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|         |                          |   |         |   |  |
|---------|--------------------------|---|---------|---|--|
|         | <b>@codeSystemName</b>   | st  | 0 ... 1 |   |  |
|         | <b>@displayName</b>      | st  | 0 ... 1 |   |  |
|         | <b>ips:designation</b>   | ST  | 0 ... * | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. | (atc...zer)  |
|         | <b>@language</b>         | cs  | 1 ... 1 | R   |  |
|         | <b>hl7:statusCode</b>    | CS  | 1 ... 1 | M   | (atc...zer)  |
|         | <b>@code</b>             | CONF  | 1 ... 1 | F   | completed  |
| Auswahl |                          |   | 1 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:effectiveTime</li><li>hl7:effectiveTime</li></ul> |
|         | <b>hl7:effectiveTime</b> | IVL_TS  | 0 ... 1 |   | Messungen mit dem Gerät innerhalb einer Zeitspanne (atc...zer)   |
|         | Beispiel                 | <b>Strukturbeispiel</b><br><ClinicalDocument><br><!--<br>Messungen von 27.05.2011 von 13:30 bis 30.6.2011 14:45<br>--><br><effectiveTime><br><low value="20110527133000+0200"/><br><high value="20110630144500+0200"/><br></effectiveTime><br></ClinicalDocument> |         |   |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |  |          |  |   |  |             |
|---------------------|--|----------|--|---|--|-------------|
|                     |  | Beispiel | <div>Strukturbeispiel&lt;ClinicalDocument&gt;&lt;!--Messungen am 27.05.2011 von 13:30 bis 14:45--&gt;&lt;effectiveTime&gt;&lt;low value="20110527133000+0200"/&gt;&lt;high value="20110527144500+0200"/&gt;&lt;/effectiveTime&gt;&lt;/ClinicalDocument&gt;</div> |   |  |             |
| └ h17:low           |  |          | 0 ... 1  |   |  | (atc...zer) |
| └ @value            |  |          | 1 ... 1  | R |  |             |
| └ h17:high          |  |          | 0 ... 1  |   |  | (atc...zer) |
| └ @value            |  |          | 1 ... 1  | R |  |             |
| └ h17:effectiveTime |  | TS.AT.TZ | 0 ... 1  |   | Messungen mit dem Gerät nur zu einem Zeitpunkt | (atc...zer) |
| └ @value            |  |          | 1 ... 1  | R |  |             |
|                     |  | Beispiel | <div>Strukturbeispiel&lt;ClinicalDocument&gt;&lt;!--Messungen nur am 27.05.2011 um 13:30--&gt;&lt;effectiveTime value="20110527133000+0200"/&gt;&lt;/ClinicalDocument&gt;</div>  |   |  |             |
|                     |  | Beispiel | <div>Strukturbeispiel&lt;ClinicalDocument&gt;&lt;!--Messungen am 27.5.2011, Uhrzeit unbekannt--&gt;&lt;effectiveTime value="20110527"/&gt;&lt;/ClinicalDocument&gt;</div>  |   |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |  |    |         |   |   |             |
|-----------------------|--|----|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:participant     |  |    | 1 ... 1 | M | Beschreibt das Gerät und seinen Typ (z.B. mobiles Blutsauerstoffgerät)<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 <i>Device Product Instance Template</i> (DYNA-MIC) | (atc...zer) |
| └ @typeCode           |  | cs | 1 ... 1 | F | DEV   |             |
| └ @contextControlCode |  | cs | 0 ... 1 | F | OP  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Auswahl

0 ... \*

Jede der folgenden Component-Elemente ist optional und kann maximal einmal vorkommen. Sie beinhalten rechtliche und handelsübliche Informationen über die Geräte. Die möglichen Component-Elemente beinhalten Informationen über Firmware, GMDN (Global Medical Device Nomenclature - Medizinproduktregister), Hardwareversion, Hersteller, Modellnummer, Teilenummer, Softwareversion, unspezifizierte Information als Text, Seriennummer, Regulierungsstatus, PCHA (Personal Connected Healthcare Alliance) Version, Zeitsynchronisierung und Protokoll-Informationen.

Elemente in der Auswahl:

- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 *Device Firmware Revision Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 *Device GMDN Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 *Device Hardware Revision Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 *Device Manufacturer Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 *Device Model Number Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 *Device Part Number Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 *Device Software Revision Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 *Device Specification Unspecified Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 *Device Serial Number Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 *Device Regulation Status Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 *Device PCHA Version Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 *Device Time Synchronization Information Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 *Device Protocol Information Observation* (DYNAMIC)

└ hl7:component

0 ... 1 R

Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 *Device Firmware Revision Information Observation* (DYNAMIC)

(atc...zer)

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                         |    |         |   |   |             |
|--|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 Device GMDN Information Observation (DYNAMIC)              | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 Device Hardware Revision Information Observation (DYNAMIC) | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 Device Manufacturer Information Observation (DYNAMIC)      | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 Device Model Number Information Observation (DYNAMIC)      | (atc...zer) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                         |    |         |   |  |             |
|--|-------------------------|----|---------|---|--|-------------|
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 <i>Device Part Number Information Observation</i> (DYNAMIC)               | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 <i>Device Software Revision Information Observation</i> (DYNAMIC)         | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 <i>Device Specification Unspecified Information Observation</i> (DYNAMIC) | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | CS | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
|  | └ @contextConductionInd | CS | 0 ... 1 | F | true   |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 <i>Device Serial Number Information Observation</i> (DYNAMIC)             | (atc...zer) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |                         |    |         |   |   |             |
|--|-------------------------|----|---------|---|---|-------------|
|  | └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 <i>Device Regulation Status Information Observation</i> (DYNAMIC)    | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 <i>Device PCHA Version Information Observation</i> (DYNAMIC)         | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 <i>Device Time Synchronization Information Observation</i> (DYNAMIC) | (atc...zer) |
|  | └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP  |             |
|  | └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true  |             |
|  | └ h17:component         |    | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 <i>Device Protocol Information Observation</i> (DYNAMIC)             | (atc...zer) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                         |    |         |   |      |
|-------------------------|----|---------|---|------|
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

Auswahl

0 ... \*

Die folgenden Component-Elemente Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich können für jede Messmöglichkeit des Gerätes einmal vorkommen. Beispielsweise hat ein Blutdruckmessgerät Genauigkeit, Aufnahmefrequenz, Messauflösung und Messbereich für jeweils BD-Systolisch, BD-Diastolisch und Puls.  
Elemente in der Auswahl:

- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 *Device Accuracy Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 *Device Sampling Frequency Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 *Device Resolution Observation* (DYNAMIC)
- hl7:component welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 *Device Measurement Range Observation* (DYNAMIC)

|                 |  |         |   |   |             |
|-----------------|--|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:component |  | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 <i>Device Accuracy Observation</i> (DYNAMIC) | (atc...zer) |
|-----------------|--|---------|---|---|-------------|

|                         |    |         |   |      |
|-------------------------|----|---------|---|------|
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

|                 |  |         |   |   |             |
|-----------------|--|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:component |  | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 <i>Device Sampling Frequency Observation</i> (DYNAMIC) | (atc...zer) |
|-----------------|--|---------|---|---|-------------|

|                         |    |         |   |      |
|-------------------------|----|---------|---|------|
| └ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP |
| └ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |    |         |   |  |             |
|--------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └─ h17:component         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 <i>Device Resolution Observation</i> (DYNAMIC)        | (atc...zer) |
| └─ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |
| └─ h17:component         |    | 0 ... * | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 <i>Device Measurement Range Observation</i> (DYNAMIC) | (atc...zer) |
| └─ @typeCode             | cs | 0 ... 1 | F | COMP   |             |
| └─ @contextConductionInd | cs | 0 ... 1 | F | true   |             |

12.4.4.15.1 Device Firmware Revision Information Observation

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:24:34<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>○ atcdabbr_entry_DeviceFirmwareRevisionInformationObservation vom 2020-02-19 12:14:27</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_DeviceFirmwareRevisionInformationObservation                               | <b>Bezeichnung</b>    | Device Firmware Revision Information Observation   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                       |  |
| Die Device Firmware Revision Information Observation dokumentiert die Firmware-Version des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, wird diese Information vom Production Specification Attribute oder dem Device Information Service des Bluetooth Low Energy health devices bereitgestellt. |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74                          |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |
|-------------------|--|
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74 <i>Device Firmware Revision Information Observation</i> (2020-02-19 12:14:27) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel          | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.74"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.18" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="531976" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_FW: Firmware revision"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="ST"&gt;value&lt;/hl7:value&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Firmware Revision Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.74  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                                 | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Firmware Revision Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.18                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                           |               |                |          |   |             |
|---------------------------|---------------|----------------|----------|---|-------------|
| └─ <b>hl7:code</b>        | <b>CD.IPS</b> | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |   | (atc...ion) |
| └─ <b>@code</b>           | cs            | <b>1 ... 1</b> | F        | 531976  |             |
| └─ <b>@codeSystem</b>     | oid           | <b>1 ... 1</b> | F        | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ <b>@codeSystemName</b> | st            | <b>1 ... 1</b> | F        | MDC   |             |
| └─ <b>@displayName</b>    | st            | <b>1 ... 1</b> | F        | MDC_ID_PROD_SPEC_FW: Firmware revision  |             |
| └─ <b>hl7:translation</b> | <b>CD</b>     | <b>0 ... *</b> |          | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ <b>@code</b>           | cs            | <b>1 ... 1</b> | R        |   |             |
| └─ <b>@codeSystem</b>     | uid           | <b>1 ... 1</b> | R        |   |             |
| └─ <b>@codeSystemName</b> | st            | <b>0 ... 1</b> |          |   |             |
| └─ <b>@displayName</b>    | st            | <b>0 ... 1</b> |          |   |             |
| └─ <b>ips:designation</b> | <b>ST</b>     | <b>0 ... *</b> |          | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ <b>@language</b>       | cs            | <b>1 ... 1</b> | R        |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |   |             |
|-----------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Firmware Revision beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST  |             |

12.4.4.15.2 Device GMDN Information Observation

|   |   |                |  |
|---|---|----------------|--|
| Id  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:24:55<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceGMDNInformationObservation vom 2020-02-19 12:19:08</li></ul> |
| Status  |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218   |
| Name  | atcdabbr_entry_DeviceGMDNInformationObservation   | Bezeichnung    | Device GMDN Information Observation  |
| Beschreibung  |   |                |  |
| Die Device GMDN Information Observation dokumentiert die GMDN (Global Medical Device Nomenclature) des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, sind das Informationen aus dem Production Specification Attribut. Diese Information wird nicht übertragen von Bluetooth Low Energy health devices. |   |                |  |
| Kontext   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75                        |                |  |
| Klassifikation  | CDA Entry Level Template  |                |  |
| Offen/Geschlossen   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |   |
|-----------|---|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75 <i>Device GMDN Information Observation</i> (2020-02-19 12:19:08) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel  | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.75"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.19" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="531978" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_GMDN: Global Medical Device Nomenclature"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="ST"&gt;value&lt;/hl7:value&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                                      | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device GMDN Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.75                           |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                    | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                     |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                    | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                     |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:templateId  | II     | 1 ... 1 | M | Device GMDN Information Observation   | (atc...ion) |
| └─ @root           | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.19   |             |
| └─ @extension      | st     | 1 ... 1 | F | 2015-08-17  |             |
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531978  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_GMDN: Global Medical Device Nomenclature   |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |     |         |           |   |             |
|-------------------|-----|---------|-----------|---|-------------|
| └ @displayName    |     | st      | 0 ... 1   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |           | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @language       |     | cs      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M         | Hier wird auf den Text referenziert welcher die GMDN beinhaltet.                        | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @value          |     | st      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:value       | ST  | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type       |     |         | 1 ... 1 F | ST  |             |

12.4.4.15.3 Device Hardware Revision Information Observation

|        |  |   |                |  |  |
|--------|--|---|----------------|--|--|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76   | Gültigkeit     |  | 2021-02-18 13:26:18<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceHardwareRevisionInformationObservation vom 2020-02-19 12:31:16</li></ul> |
| Status |  |  Aktiv | Versions-Label |  | 1.1.0+20210218   |
| Name   |  | atcdabbr_entry_DeviceHardwareRevisionInformationObservation                               | Bezeichnung    |  | Device Hardware Revision Information Observation   |

## Beschreibung

Die Device Hardware Revision Information Observation dokumentiert die Hardware-Version des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, sind die Informationen aus dem Production Specification Attribut oder dem Device Information Service bei Bluetooth Low Energy health devices.

**Kontext** Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76

**Klassifikation** CDA Entry Level Template

**Offen/Ge-  
schlossen** Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

**Beziehung** Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76 *Device Hardware Revision Information Observation* (2020-02-19 12:31:16) [ref elgatgd-](#)

### Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.76"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.20" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="531974" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_HW: Hardware revision">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```

### Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.20" extension="2015-08-17"/>
  <code code="531974" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_HW: Hardware revision"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher die Hardware-Revision beinhaltet.-->
    <reference value="#deviceHardwareRevision"/>
  </text>
  <value xsi:type="ST">2.3.1</value>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Hardware Revision Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.76  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                                 | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Hardware Revision Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.20                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ h17:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531974  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_HW: Hardware revision  |             |
| └─ h17:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |   |             |
|-----------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Hardware-Revision beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST  |             |

12.4.4.15.4 Device Manufacturer Information Observation

|   |   |                       |  |
|---|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:27:16<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceManufacturerInformationObservation vom 2020-10-05 19:01:56</li><li>atcdabbr_entry_DeviceManufacturerInformationObservation vom 2020-02-19 11:13:45</li></ul> |
| <b>Status</b>   |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_entry_DeviceManufacturerInformationObservation                                   | <b>Bezeichnung</b>    | Device Manufacturer Information Observation  |
| <b>Beschreibung</b>   |   |                       |  |
| Die Device Manufacturer Information Observation dokumentiert den Herstellernamen des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem System Model Attribut oder dem Device Information Service on Bluetooth Low Energy health devices. |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77                          |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>   | CDA Entry Level Template  |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |   |
|-------------------|---|
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 <i>Device Manufacturer Information Observation</i> (2020-10-05 19:01:56) <span>ref elgatgd-</span><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77 <i>Device Manufacturer Information Observation</i> (2020-02-19 11:13:45) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel          | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.77" extension="2015-08-17"/&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.21" extension="2015-08-17"/&gt;<br/>  &lt;hl7:code code="531970" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_MODEL_MANUFACTURER: Manufacturer Name"&gt;<br/>    &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;<br/>    &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;<br/>  &lt;/hl7:code&gt;<br/>  &lt;hl7:text&gt;<br/>    &lt;hl7:reference value="value"/&gt;<br/>  &lt;/hl7:text&gt;<br/>  &lt;hl7:value xsi:type="ST"&gt;value&lt;/hl7:value&gt;<br/>&lt;/hl7:observation&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Manufacturer Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77                                   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                            | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Manufacturer Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.21                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531970  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_MODEL_MANUFACTURER: Manufacturer Name  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |   |             |
|-----------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher den Geräteherstellernamen beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST  |             |

12.4.4.15.5 Device Model Number Information Observation

|  |   |                       |   |
|--|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:28:09<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>○ atcdabbr_entry_DeviceModelNumberInformationObservation vom 2020-02-19 12:00:43</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218  |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_DeviceModelNumberInformationObservation                                  | <b>Bezeichnung</b>    | Device Model Number Information Observation   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                       |   |
| Die Device Model Number Information Observation dokumentiert die Modell-Nummer des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem System Model Attribut oder dem Device Information Service bei Bluetooth Low Energy health devices. |   |                       |   |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78                        |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template  |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                       |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78 *Device Model Number Information Observation* (2020-02-19 12:00:43) [ref elgatgd-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.78"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.22" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="531969" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_MODEL_NUMBER: Model number">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.22" extension="2015-08-17"/>
  <code code="531969" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_MODEL_NUMBER: Model number"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher die Modellnummer beinhaltet. -->
    <reference value="#deviceModelNumber"/>
  </text>
  <value xsi:type="ST">WFBTSscalev1</value>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Model Number Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.78                                   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                            | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    |   | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.22                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |        |         |   |   |             |
|-------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └ h17:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531969  |             |
| └ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_MODEL_NUMBER: Model number   |             |
| └ h17:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Modellnummer beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST   |             |

12.4.4.15.6 Device Part Number Information Observation

|  |   |                |  |
|--|---|----------------|--|
| Id   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:28:45<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>○ atcdabbr_entry_DevicePartNumberInformationObservation vom 2020-02-19 12:42:35</li></ul> |
| Status   |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218   |
| Name   | atcdabbr_entry_DevicePartNumberInformationObservation                                   | Bezeichnung    | Device Part Number Information Observation   |
| Beschreibung   |   |                |  |
| Die Device Part Number Information Observation dokumentiert die Teilenummer des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production Specification Attribut. Diese Information wird nicht übertragen von Bluetooth Low Energy health devices. |   |                |  |
| Kontext  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79                        |                |  |
| Klassifikation   | CDA Entry Level Template  |                |  |
| Offen/Geschlossen  | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |
|-----------|--|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79 <i>Device Part Number Information Observation</i> (2020-02-19 12:42:35) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel  | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.79"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.23" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="531973" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_PART: Part Number"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="ST"&gt;value&lt;/hl7:value&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Part Number Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.79                                  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                            |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                           | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                            |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:templateId  | II     | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @root           | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.23   |             |
| └─ @extension      | st     | 1 ... 1 | F | 2015-08-17  |             |
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531973  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_PART: Part Number  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |     |         |           |   |             |
|-------------------|-----|---------|-----------|---|-------------|
| └ @displayName    |     | st      | 0 ... 1   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |           | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @language       |     | cs      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M         | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Teilenummer beinhaltet.                 | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @value          |     | st      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:value       | ST  | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type       |     |         | 1 ... 1 F | ST  |             |

12.4.4.15.7 Device Software Revison Information Observation

|        |  |   |                |  |   |
|--------|--|---|----------------|--|---|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80   | Gültigkeit     |  | 2021-02-18 13:32:55<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceSoftwareRevisonInformationObser-<br/>vation vom 2020-02-19 16:41:49</li></ul> |
| Status |  |  Aktiv | Versions-Label |  | 1.1.0+20210218  |
| Name   |  | atcdabbr_entry_DeviceSoftwareRevisonInformationObservation                                | Bezeichnung    |  | Device Software Revison Information Observation   |

## Beschreibung

Die Device Software Revision Information Observation dokumentiert die Software-Version des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production Specification Attribut und aus dem Device Information Service bei Bluetooth Low Energy health devices.

**Kontext** Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80

**Klassifikation** CDA Entry Level Template

**Offen/Geschlossen** Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

**Beziehung** Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80 *Device Software Revision Information Observation* (2020-02-19 16:41:49) [ref elgatgd-](#)

### Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.80"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.24" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="531975" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_SW: Software revision">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```

### Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.24" extension="2015-08-17"/>
  <code code="531975" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_SW: Software revision"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher die Software-Revisions-Nummer beinhaltet.-->
    <reference value="#deviceSoftware"/>
  </text>
  <value xsi:type="ST">27.212</value>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Software Revision Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.80  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                                 | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Software Revision Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.24                                  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531975  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_SW: Software revision  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |   |             |
|-----------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Software-Revisions-Nummer beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST  |             |

12.4.4.15.8 Device Specification Unspecified Information Observation

|  |  |                       |  |
|--|--|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81  | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:33:15<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>○ atcdabbr_entry_DeviceSpecificationUnspecifiedInformationObservation vom 2020-02-19 16:44:54</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_DeviceSpecificationUnspecifiedInformationObservation                      | <b>Bezeichnung</b>    | Device Specification Unspecified Information Observation   |
| <b>Beschreibung</b>  |  |                       |  |
| Die Device Specification Unspecified Information Observation dokumentiert Informationen über das Gerät, welches nicht in den vorhandenen vordefinierten Elementen dokumentiert werden kann. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production Specification attribute. Diese Information wird nicht übertragen von Bluetooth Low Energy health devices. |  |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81                         |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template   |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Offen/Ge-  
schlossen

Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81 *Device Specification Unspecified Information Observation* (2020-02-19 16:44:54) ref elgatgd-

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.81"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.25" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="531971" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_UNSPECIFIED: Unspecified but additional
information">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Specification Unspecified Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.81  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation   | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Specification Unspecified Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.25  |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531971  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_UNSPECIFIED: Unspecified but additional information  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die unspezifizierte Information des Geräts beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST   |             |

12.4.4.15.9 Device Serial Number Information Observation

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:32:30<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>○ atcdabbr_entry_DeviceSerialNumberInformationObservation vom 2020-02-19 12:04:48</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_DeviceSerialNumberInformationObservation                                 | <b>Bezeichnung</b>    | Device Serial Number Information Observation   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                       |  |
| Die Device Serial Number Information Observation dokumentiert die Seriennummer des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production Specification Attribut oder dem Device Information Service bei Bluetooth Low Energy health devices. |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82                        |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template  |                       |  |
| <b>Offen/Geschlossen</b>   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |
|-----------|--|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82 <i>Device Serial Number Information Observation</i> (2020-02-19 12:04:48) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel  | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.82"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.26" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="531972" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_SERIAL: Serial Number"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="ST"&gt;value&lt;/hl7:value&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Serial Number Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.82                                    |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                             | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                              |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Serial Number Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.26                              |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531972  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_SERIAL: Serial Number  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Seriennummer beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST   |             |

12.4.4.15.10 Device Regulation Status Information Observation

|  |   |                       |  |
|--|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:30:16<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceRegulationStatusInformationObservation vom 2020-02-19 16:34:02</li></ul> |
| <b>Status</b>  |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>  | atcdabbr_entry_DeviceRegulationStatusInformationObservation                             | <b>Bezeichnung</b>    | Device Regulation Status Information Observation   |
| <b>Beschreibung</b>  |   |                       |  |
| Die Device Regulation Status Information Observation dokumentiert den Regulations-Status des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem RegCertDataList Attribut oder dem RegCertData Werten des Device Information Service eines Bluetooth Low Energy Health device. Ein Gerät ist entweder reguliert oder nicht reguliert. |   |                       |  |
| <b>Kontext</b>   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83                        |                       |  |
| <b>Klassifikation</b>  | CDA Entry Level Template  |                       |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Offen/Geschlossen

Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83 *Device Regulation Status Information Observation* (2020-02-19 16:34:02) [ref elgatgd-](#)

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.83"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.28" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="532354" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_REG_STATUS: Regulation
status">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="BN" value="false"/>
</hl7:observation>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25


| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Regulation Status Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.83  |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Regulation Status Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.28                                  |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ion) |
| └ @code          | cs     | 1 ... 1 | F    | 532354   |             |
| └ @codeSystem    | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.24   |             |

|                   |  |     |         |   |   |             |
|-------------------|--|-----|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName |  | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └ @displayName    |  | st  | 1 ... 1 | F | MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_REG_STATUS: Regulation status  |             |
| └ hl7:translation |  | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           |  | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     |  | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName |  | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    |  | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation |  | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       |  | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        |  |     | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher besagt ob das Gerät PCHA-reguliert ist.                                   | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   |  |     | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value          |  | st  | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |    |         |   |    |             |
|-----------|----|---------|---|----|-------------|
| hl7:value | BN | 1 ... 1 | M |    | (atc...ion) |
| @xsi:type |    | 1 ... 1 | F | BN |             |

12.4.4.15.11 Device PCHA Version Information Observation

|   |  |                |   |
|---|--|----------------|---|
| Id  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84  | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:29:12<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DevicePCHAVersionInformationObservation vom 2020-02-19 12:49:25</li></ul> |
| Status  |  Aktiv  | Versions-Label | 1.1.0+20210218  |
| Name  | atcdabbr_entry_DevicePCHAVersionInformationObservation   | Bezeichnung    | Device PCHA Version Information Observation   |
| Beschreibung  |  |                |   |
| Die Device PCHA Version Information Observation dokumentiert die PCHA (Continua) Version des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem RegCertDataList Attribut oder dem RegCertData Werten des Device Information Service eines Bluetooth Low Energy Health device. |  |                |   |
| Kontext   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84   |                |   |
| Klassifikation  | CDA Entry Level Template   |                |   |
| Offen/Geschlossen   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |                |   |
| Beziehung   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84 <i>Device PCHA Version Information Observation</i> (2020-02-19 12:49:25) <span>ref elgatgd-</span> |                |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.84"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.27" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="532352" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_VERSION: Continua
Version">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```

Beispiel

Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.27" extension="2015-08-17"/>
  <code code="532352" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_VERSION: Continua Ver-
sion"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher die PCHA-Version beinhaltet.-->
    <reference value="#deviceIpchaVersion"/>
  </text>
  <value xsi:type="ST">5.0</value>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device PCHA Version Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.84                                   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device PCHA Version Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                            | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                             |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:templateId  | II     | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @root           | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.10.20.36.27   |             |
| └─ @extension      | st     | 1 ... 1 | F | 2015-08-17  |             |
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 532352  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_REG_CERT_DATA_CONTINUA_VERSION: Continua Version  |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |     |         |           |   |             |
|-------------------|-----|---------|-----------|---|-------------|
| └ @displayName    |     | st      | 0 ... 1   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |           | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @language       |     | cs      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M         | Hier wird auf den Text referenziert welcher die PCHA-Version beinhaltet.                | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @value          |     | st      | 1 ... 1 R |   |             |
| └ hl7:value       | ST  | 1 ... 1 | M         |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type       |     |         | 1 ... 1 F | ST  |             |

12.4.4.15.12 Device Time Synchronization Information Observation

|        |  |   |                |  |   |
|--------|--|---|----------------|--|---|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85   | Gültigkeit     |  | 2021-02-18 13:33:37<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceTimeSynchronizationInformationObservation vom 2020-02-19 16:50:04</li></ul> |
| Status |  |  Aktiv | Versions-Label |  | 1.1.0+20210218  |
| Name   |  | atcdabbr_entry_DeviceTimeSynchronizationInformationObservation                            | Bezeichnung    |  | Device Time Synchronization Information Observation   |

## Beschreibung

Die Device Time Synchronization Information Observation dokumentiert die Zeit-Synchronisierung Methode des verwendeten Gerätes. In PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem MdsTimeInfo Attribut.

**Kontext** Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85

**Klassifikation** CDA Entry Level Template

**Offen/Geschlossen** Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

**Beziehung** Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85 *Device Time Synchronization Information Observation* (2020-02-19 16:50:04) [ref elgatgd-](#)

### Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.85"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.29" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="68220" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_TIME_SYNC_PROTOCOL: Time synchronization protocol">
    <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
    <designation language="cs">designation</designation>
  </hl7:code>
  <hl7:text>
    <hl7:reference value="value"/>
  </hl7:text>
  <hl7:value xsi:type="CD" code="cs" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC"/>
</hl7:observation>
```

### Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.29" extension="2015-08-17"/>
  <code code="68220" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_TIME_SYNC_PROTOCOL: Time synchronization protocol"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher die Zeit Synchronisierungs Methode beschreibt.-->
    <reference value="#deviceTimeSync"/>
  </text>
  <value xsi:type="CD" code="532234" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_TIME_SYNC_EBWW: Time synchronization via eyeball and wrist watch"/>
</observation>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25


| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|--------|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Time Synchronization Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.85   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Time Synchronization Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.29                                     |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    |   | (atc...ion) |
| └ @code          | cs     | 1 ... 1 | F    | 68220   |             |
| └ @codeSystem    | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |

|   |                 |     |         |   |   |             |
|---|-----------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ | @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | MDC_TIME_SYNC_PROTOCOL: Time synchronization protocol   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | hl7:translation | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @code           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @codeSystem     | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @codeSystemName | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @displayName    | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | ips:designation | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @language       | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | hl7:text        |     | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Zeit Synchronisierungs Methode beschreibt.                            | (atc...ion) |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | hl7:reference   |     | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
|   |                 |     |         |   |   |             |
| └ | @value          | st  | 1 ... 1 | R |   |             |
|   |                 |     |         |   |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |                        |             |
|-----------------|-----|---------|---|------------------------|-------------|
| hl7:value       | CD  | 1 ... 1 | M |                        | (atc...ion) |
| @xsi:type       |     | 1 ... 1 | F | CD                     |             |
| @code           | cs  | 1 ... 1 | R |                        |             |
| @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24 |             |
| @codeSystemName | cs  | 1 ... 1 | F | MDC                    |             |

12.4.4.15.13 Device Protocol Information Observation

|                   |   |                |  |
|-------------------|---|----------------|--|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:29:54<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_DeviceProtocolInformationObservation vom 2020-02-19 16:27:43</li></ul> |
| Status            |  Aktiv   | Versions-Label | 1.1.0+20210218   |
| Name              | atcdabbr_entry_DeviceProtocolInformationObservation   | Bezeichnung    | Device Protocol Information Observation  |
| Beschreibung      | Die Device Protocol Information Observation dokumentiert das interne Protokoll des verwendeten Gerätes. Bei PCHA konformen Geräten, kommen die Informationen aus dem Production specification Attribut. |                |  |
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86  |                |  |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template  |                |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                |  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86 <i>Device Protocol Information Observation</i> (2020-02-19 16:27:43) <span>ref elgatgd-</span>  |                |  |

## Beispiel

### Beispiel

```
<hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.86"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.17" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.30" extension="2015-08-17"/>
  <hl7:code code="531977" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ID_PROD_SPEC_PROTOCOL: Protocol Information"/>
  <hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/>
  <designation language="cs">designation</designation>
</hl7:code>
<hl7:text>
  <hl7:reference value="value"/>
</hl7:text>
<hl7:value xsi:type="ST">value</hl7:value>
</hl7:observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|-----|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |     |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs  | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs  | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Protocol Information Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.86                               |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Information Observation                        | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.17                         |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:templateId | II  | 1 ... 1 | M    | Device Protocol Information Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.30                         |             |
| └ @extension     | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                    |        |         |   |   |             |
|--------------------|--------|---------|---|---|-------------|
| └─ hl7:code        | CD.IPS | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | F | 531977  |             |
| └─ @codeSystem     | oid    | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └─ @displayName    | st     | 1 ... 1 | F | MDC_ID_PROD_SPEC_PROTOCOL: Protocol Information   |             |
| └─ hl7:translation | CD     | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └─ @code           | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystem     | uid    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └─ @codeSystemName | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ @displayName    | st     | 0 ... 1 |   |   |             |
| └─ ips:designation | ST     | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └─ @language       | cs     | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:text      | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher das verwendete Protokoll beinhaltet. | (atc...ion) |
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @value        | st  | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:value     | ST  | 1 ... 1 | M |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |     | 1 ... 1 | F | ST   |             |

12.4.4.15.14 Device Accuracy Observation

|  |   |                |   |
|--|---|----------------|---|
| Id   | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:24:04<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceAccuracyObservation vom 2020-02-19 17:10:35</li></ul> |
| Status   |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218  |
| Name   | atcdabbr_entry_DeviceAccuracyObservation  | Bezeichnung    | Device Accuracy Observation   |
| Beschreibung   |   |                |   |
| Die Device Accuracy Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Die Genauigkeit oder Präzession einer Messung sagt aus wie viel der Messwert vom tatsächlichen Wert abweichen könnte. Beispielsweise können die Werte eines Geräts mit +/-3% vom tatsächlichen Wert abweichen. Die Genauigkeit wird hier angegeben in den Einheiten der Messgröße, und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Accuracy Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über die Genauigkeit oder den anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden. |   |                |   |
| Kontext  | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87                        |                |   |
| Klassifikation   | CDA Entry Level Template  |                |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |
|-------------------|--|
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87 <i>Device Accuracy Observation</i> (2020-02-19 17:10:35) <a href="#">ref elgatgd-</a>  |
| Beispiel          | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.87"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.3" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="67194" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_ACCUR_MSMT: Measure- ment accuracy"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="PQ" value="1" unit="cs"/&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                              | Label       |
|------------------|--------|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS                                       |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF                                       |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Accuracy Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.87                   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Accuracy Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.3              |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17                                |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    |   | (atc...ion) |
| └ @code          | cs     | 1 ... 1 | F    | 67194                                     |             |
| └ @codeSystem    | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.24                    |             |

|                   |     |         |   |   |             |
|-------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | MDC_ATTR_NU_ACCUR_MSMT: Measurement accuracy  |             |
| └ hl7:translation | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Genauigkeit der Messung beschreibt.                                   | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value          | st  | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|             |      |         |   |   |             |
|-------------|------|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:value | PQ   | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @xsi:type |      | 1 ... 1 | F | PQ  |             |
| └ @value    | real | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @unit     | cs   | 1 ... 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden. |             |

12.4.4.15.15 Device Sampling Frequency Observation

|   |   |                |  |
|---|---|----------------|--|
| Id  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:32:08<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceSamplingFrequencyObservation vom 2020-02-19 18:35:34</li></ul> |
| Status  |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218   |
| Name  | atcdabbr_entry_DeviceSamplingFrequencyObservation                                       | Bezeichnung    | Device Sampling Frequency Observation  |
| Beschreibung  |   |                |  |
| Die Device Sampling Frequency Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Die Abtastfrequenz oder Samplefrequenz einer Messung sagt aus wie schnell hintereinander ein Messwert gemessen werden kann. Beispielsweise kann ein Pulsmesser jede Sekunde einen Wert messen. Die Abtastfrequenz wird hier in Millisekunden angegeben und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Sampling Frequency Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über die Abtastfrequenz oder die anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden. |   |                |  |
| Kontext   | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88                        |                |  |
| Klassifikation  | CDA Entry Level Template  |                |  |
| Offen/Geschlossen   | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)                                      |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |
|-----------|--|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88 <i>Device Sampling Frequency Observation</i> (2020-02-19 18:35:34) <span>ref elgatgd-</span>   |
| Beispiel  | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.88"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.10" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="67981" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP: Frequency that the device sends measurements"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;hl7:value xsi:type="PQ" value="1" unit="ms"/&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------|--------|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Sampling Frequency Observation   | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.88   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Sampling Frequency Observation   | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.10   |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17  |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    | <p>Hinweis aus HL7 CDA PHMR: Even though the MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP IEEE 11073 10101 reference id is used to specify the code, the value for this entry does not come from the</p> <p>MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP attribute of the RTSA metric object in IEEE 11073 20601 devices. That value is placed in the Phm Measurement Waveform</p> <p>Observation entry. Das Phm Measurement Waveform wird in diesem Leitfaden durch das template "Serienmessungs-Gruppe Entry", OID 1.2.40.0.34.6.0.11.3.102 modelliert.</p> | (atc...ion) |

|                   |     |         |   |   |             |
|-------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | F | 67981   |             |
| └ @codeSystem     | oid | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24  |             |
| └ @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | MDC_ATTR_TIME_PD_SAMP: Frequency that the device sends measurements   |             |
| └ hl7:translation | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Abtastfrequenz der Messung beschreibt.                                | (atc...ion) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                 |      |         |   |    |             |
|-----------------|------|---------|---|----|-------------|
| └ hl7:reference | TEL  | 1 ... 1 | M |    | (atc...ion) |
| └ @value        | st   | 1 ... 1 | R |    |             |
| └ hl7:value     | PQ   | 1 ... 1 | M |    | (atc...ion) |
| └ @xsi:type     |      | 1 ... 1 | F | PQ |             |
| └ @value        | real | 1 ... 1 | R |    |             |
| └ @unit         | cs   | 1 ... 1 | F | ms |             |

12.4.4.15.16 Device Resolution Observation

|              |   |                |   |
|--------------|---|----------------|---|
| Id           | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89   | Gültigkeit     | 2021-02-18 13:30:37<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_entry_DeviceResolutionObservation vom 2020-02-19 18:27:04</li></ul> |
| Status       |  Aktiv | Versions-Label | 1.1.0+20210218  |
| Name         | atcdabbr_entry_DeviceResolutionObservation  | Bezeichnung    | Device Resolution Observation   |
| Beschreibung |   |                |   |

Die Device Resolution Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Die Auflösung einer Messung sagt aus wie klein der Unterschied zwischen zwei Messungen sein muss, um vom Gerät erkannt zu werden. Beispielsweise kann ein Thermometer eine Auflösung von 0,1 Grad Celsius haben. Die Auflösung wird hier angegeben in den Einheiten der Messgröße und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Accuracy Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über die Auflösung oder die anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89   |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89 <i>Device Resolution Observation</i> (2020-02-19 18:27:04) <span>ref elgatgd-</span>   |
| Beispiel          | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.89"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.6" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="17441009" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.9" codeSystemName="SNOMED CT" displayName="device measurement resolu- tion"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;!-- choice: 1..1 element hl7:value element hl7:value --&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                                | Label       |
|------------------|--------|---------|------|---|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |   | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS   |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF   |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Resolution Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.89                     |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Resolution Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.6                |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17                                  |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    |   | (atc...ion) |
| └ @code          | cs     | 1 ... 1 | F    | 17441009                                    |             |
| └ @codeSystem    | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.9                       |             |

|                   |     |         |   |   |             |
|-------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | SNOMED CT   |             |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | device measurement resolution   |             |
| └ hl7:translation | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        | ED  | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Auflösung der Messung beschreibt.                                     | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   | TEL | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value          | st  | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|             |      |         |   |  |             |
|-------------|------|---------|---|--|-------------|
| Auswahl     |      | 1 ... 1 |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:value</li><li>hl7:value</li></ul> |             |
| └ hl7:value | PQ   | 0 ... 1 | R |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type |      | 1 ... 1 | F | PQ   |             |
| └ @value    | real | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @unit     | cs   | 1 ... 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden.    |             |
| └ hl7:value | ST   | 0 ... 1 | R |  | (atc...ion) |
| └ @xsi:type |      | 1 ... 1 | F | ST   |             |

12.4.4.15.17 Device Measurement Range Observation

|        |  |   |                |  |   |
|--------|--|---|----------------|--|---|
| Id     |  | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90   | Gültigkeit     |  | 2021-02-18 13:27:41<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation vom 2020-02-19 18:08:20</li></ul> |
| Status |  |  Aktiv | Versions-Label |  | 1.1.0+20210218  |
| Name   |  | atcdabbr_entry_DeviceMeasurementRangeObservation  | Bezeichnung    |  | Device Measurement Range Observation  |

Beschreibung

Die Device Measurement Range Observation kann mit einem oder mehreren Elementen in einem Device Information Organizer vorhanden sein. Der Messbereich oder die Messspanne einer Messung sagt aus, in welchem Bereich ein Messwert liegen kann, um noch vom Gerät gemessen werden zu können. Beispielsweise kann der Messbereich eines Thermometers zwischen 0 und 100 Grad Celsius liegen. Der Messbereich wird hier in den Einheiten der Messgröße angegeben und weil ein Gerät mehr als nur eine Messgröße messen kann, können mehrere Device Measurement Range Observation-Elemente existieren. Wenn das Gerät die Daten über den Messbereich oder die anderen Geräte-Details nicht zurückgibt, können diese, wenn gewünscht, auch manuell oder über andere Wege eingetragen werden.

|                   |  |
|-------------------|--|
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90   |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90 <i>Device Measurement Range Observation</i> (2020-02-19 18:08:20) <a href="#">ref elgatgd-</a>   |
| Beispiel          | <div><p>Beispiel</p><pre>&lt;hl7:observation classCode="OBS" moodCode="DEF"&gt;   &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.3.90"/&gt;   &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.5" extension="2015-08-17"/&gt;   &lt;hl7:code code="67198" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range"&gt;     &lt;hl7:translation code="cs" codeSystem="1.2.3.999" codeSystemName="codeSystemName" displayName="displayName"/&gt;     &lt;designation language="cs"&gt;designation&lt;/designation&gt;   &lt;/hl7:code&gt;   &lt;hl7:text&gt;     &lt;hl7:reference value="value"/&gt;   &lt;/hl7:text&gt;   &lt;!-- choice: 1..1   element hl7:value[@xsi:type='IVL_PQ']   element hl7:value[@xsi:type='ST']   --&gt; &lt;/hl7:observation&gt;</pre></div> |

## Beispiel

### Beispiel

```
<observation classCode="OBS" moodCode="DEF">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.5" extension="2015-08-17"/>
  <code code="67198" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range"/>
  <text>
    <!-- Hier wird auf den Text referenziert welcher den Messbereich der Messung beschreibt.-->
    <reference value="#deviceImeasRange"/>
  </text>
  <!-- Für Werte welche nicht mit Zahlen ausgedrückt werden können kann einfach ST verwendet werden.
  Beispielsweise für Messung des Wohlbefindens wird der Messbereich wie folgt angegeben:
  <value xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:type="ST">
    Gerät kann zwischen den drei Zuständen Gut, Gemischt und Schlecht abfragen.</value-->
    <value xsi:type="IVL_PQ">
      <low value="0.5" unit="%"/>
      <high value="100" unit="%"/>
    </value>
</observation>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item             | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung                                       | Label       |
|------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| hl7:observation  |        |         |      |  | (atc...ion) |
| └ @classCode     | cs     | 1 ... 1 | F    | OBS  |             |
| └ @moodCode      | cs     | 1 ... 1 | F    | DEF  |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Measurement Range Observation | (atc...ion) |
| └ @root          | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.3.90                            |             |
| └ hl7:templateId | II     | 1 ... 1 | M    | Device Measurement Range Observation               | (atc...ion) |
| └ @root          | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.5                       |             |
| └ @extension     | st     | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17   |             |
| └ hl7:code       | CD.IPS | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ion) |
| └ @code          | cs     | 1 ... 1 | F    | 67198  |             |
| └ @codeSystem    | oid    | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.6.24                             |             |

|                   |     |         |   |   |             |
|-------------------|-----|---------|---|---|-------------|
| └ @codeSystemName | st  | 1 ... 1 | F | MDC   |             |
| └ @displayName    | st  | 1 ... 1 | F | MDC_ATTR_NU_RANGE_MSMT: Measurement range   |             |
| └ hl7:translation | CD  | 0 ... * |   | Hier können Code-Übersetzungen, aus dem selben Codesystem oder auch aus weiteren Codesystemen, bereitgestellt werden. | (atc...ion) |
| └ @code           | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystem     | uid | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @codeSystemName | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ @displayName    | st  | 0 ... 1 |   |   |             |
| └ ips:designation | ST  | 0 ... * |   | Hier können sprachliche Übersetzungen des hier verwendeten Codes bereitgestellt werden.                               | (atc...ion) |
| └ @language       | cs  | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ hl7:text        |     | 1 ... 1 | M | Hier wird auf den Text referenziert welcher die Genauigkeit der Messung beschreibt.                                   | (atc...ion) |
| └ hl7:reference   |     | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value          | st  | 1 ... 1 | R |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Auswahl

1 ... 1

Elemente in der Auswahl:

- hl7:value[@xsi:type='IVL\_PQ']
- hl7:value[@xsi:type='ST']

|                         |         |         |   |   |             |
|-------------------------|---------|---------|---|---|-------------|
| └ hl7:value             | IVL_PQ  | 0 ... 1 | R |   | (atc...ion) |
| wo [@xsi:type='IVL_PQ'] |         |         |   |   |             |
| └ @xsi:type             |         | 1 ... 1 | F | IVL_PQ  |             |
| └ hl7:low               | IVXB_PQ | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value                | real    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @unit                 | cs      | 1 ... 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden. |             |
| └ hl7:high              | IVXB_PQ | 1 ... 1 | M |   | (atc...ion) |
| └ @value                | real    | 1 ... 1 | R |   |             |
| └ @unit                 | cs      | 1 ... 1 | R | Es MUSS die „case sensitive“ Variante (c/s) der maschinenlesbaren Form des UCUM verwendet werden. |             |
| └ hl7:value             | ST      | 0 ... 1 | R |   | (atc...ion) |
| wo [@xsi:type='ST']     |         |         |   |   |             |
| └ @xsi:type             |         | 1 ... 1 | F | ST  |             |



# 12.4.4.16 Eingebettetes Objekt Entry

|                   |   |                |   |
|-------------------|---|----------------|---|
| Id                | 1.2.40.0.34.11.1.3.1 <span>ref el-gabbr-</span>   | Gültigkeit     | 2017-05-05<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> EingebettetesObjektEntry vom 2011-12-19</li></ul> |
| Status            |  Aktiv   | Versions-Label |   |
| Name              | EingebettetesObjektEntry  | Bezeichnung    | Eingebettetes Objekt Entry  |
| Beschreibung      | Achtung: Grafiken mit Transparenz (z.B: bei GIF oder PNG möglich) können zu schweren Problemen bei der Wiedergabe oder Konvertierung zu PDF/A-1 führen und sind daher NICHT ERLAUBT   |                |   |
| Kontext           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.11.1.3.1   |                |   |
| Klassifikation    | CDA Entry Level Template  |                |   |
| Offen/Geschlossen | Offen (auch andere als die definierten Elemente sind erlaubt)   |                |   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.1 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (2017-05-05) <span>ref elgabbr-</span><br>Version: Template 1.2.40.0.34.11.1.3.1 <i>Eingebettetes Objekt Entry</i> (2011-12-19) <span>ref elgabbr-</span>  |                |   |
| Beispiel          | <div>Strukturbeispiel</div> <pre>&lt;observationMedia classCode="OBS" moodCode="EVN" ID="Beilage-1"&gt;   &lt;templateId root="1.2.40.0.34.11.1.3.1"/&gt;   &lt;value mediaType="application/pdf" representation="B64"&gt; JVB Ei0xLjMKJcfsj6IKNSAwIG9iago8PC9MZW5ndGggNiAwIFIvRmlsdGVyI C9GbGF0ZURlY29kZT4+CnN0cmVhbQp4nMlaW28dtxFGnLfzK/ap3S0ihveLU AQYydpBSJcJICNvggu1TrSI4kN0H+bF76M/LQ4S7Jmd3DlY/kg6IO4NBDch M5z5OHt+bjgTznIVGh7/o/84Xi0+PwjN+d3i54Vh1nNjezltH6+a50sYJngj AuOu2Z5thB9n2gcZ55r2XjoEzBjuVq0Tbf8V5wAUhjvQqhNUJyZ4E2c8KZ90 e0opgNXrv2p40zBn/YAZU0HLR+cb3lnW Tbf8V5wAUhjvQqhNUJyZ4E2c8KZ : : &lt;/value&gt; &lt;/observationMedia&gt;</pre> |                |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                        | DT   | Kard           | Konf     | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------------|------|----------------|----------|--|-------------|
| <b>hl7:observationMedia</b> |      | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | Container zur Angabe eines eingebetteten Objekts.  | (Ein...try) |
| └ @classCode                | cs   | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | OBS  |             |
| └ @moodCode                 | cs   | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | EVN  |             |
| └ @ID                       |      | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | ID des eingebetteten Objekts.<br>Wird vom Element <render-MultiMedia referencedObject=" "/> im narrativen Text-Bereich referenziert.     |             |
| └ hl7:templateId            | II   | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> |  | (Ein...try) |
| └ @root                     | uid  | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | 1.2.40.0.34.11.1.3.1   |             |
| └ hl7:value                 | ED   | <b>1 ... 1</b> | <b>M</b> | Das eingebettete Objekt (PDF, Bild), unkomprimiert, Base64 enkodiert.<br>Siehe „Größenbeschränkung von eingebetteten Objekten“           | (Ein...try) |
| └ @mediaType                |      |                |          | Medientyp des eingebetteten Objekts.   |             |
|                             | cs   | <b>1 ... 1</b> | <b>R</b> | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_Medientyp“   |             |
|                             |      |                |          | Verweis auf speziellen Implementierungsleitfaden:<br>Spezielle Implementierungsleitfäden können zusätzliche Medientypen (MIME) erlauben. |             |
|                             | CONF |                |          | Der Wert von @mediaType muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.42 <i>ELGA_Medientyp</i> (DYNAMIC)                          |             |
| └ @representation           | cs   | <b>1 ... 1</b> | <b>F</b> | B64  |             |

## 12.4.5 Weitere CDA Fragmente

Die weiteren CDA Fragmente, oder auch Compilation Templates genannt, wurden aus dem bestehenden "Allgemeiner Implementierungsleitfaden für ELGA CDA Dokumente" übernommen. Diese sind auch unter [Allgemeiner Leitfaden - Kapitel Sonstige Templates \(Fragmente\)](#) zu finden.

### 12.4.5.1 Device Product Instance Template


|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-18 13:29:34<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> DeviceProductInstanceTemplate vom 2020-10-05 18:35:34</li><li><input type="radio"/> DeviceProductInstanceTemplate vom 2020-02-19 10:22:45</li></ul> |
| <b>Status</b> |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.1.0+20210218   |
| <b>Name</b>   | DeviceProductInstanceTemplate   | <b>Bezeichnung</b>    | Device Product Instance Template   |

#### Beschreibung

Das "Device Product Instance Template" beschreibt die verpflichtenden Eigenschaften des verwendeten Gerätes. Mindestens eine eindeutige ID, die Klassifizierung und der Name (samt Hersteller) des Gerätes sind für jedes verwendetes Gerät anzugeben. Dieses Template definiert das participantRole-Element des Device Information Organizer. In vielen Fällen ist das Gerät ein IEEE 11073 kompatibles Gerät. In diesem Dokument vorhandene medizinische Beobachtungen besitzen ein author-Element, welches in den Daten dieses Templates vorhanden sein muss. Alle weiteren Informationen zum verwendeten Gerät können im darüberliegenden Device Information Organizer kodiert werden.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kontext</b>           | Elternknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 |
| <b>Klassifikation</b>    | CDA Entry Level Template   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)               |

#### Benutzt 1 Template

| Benutzt                | als  | Name                                     | Version |
|------------------------|--|--|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 | Inklusion  | Original Text Reference (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |   |
|-----------|---|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 <i>Device Product Instance Template</i> (2020-10-05 18:35:34) <span>ref elgatgd-</span><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43 <i>Device Product Instance Template</i> (2020-02-19 10:22:45) <span>ref elgatgd-</span>  |
| Beispiel  | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;hl7:participantRole classCode="MANU"&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.9.43"/&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.22.4.37"/&gt;<br/>  &lt;hl7:templateId root="2.16.840.1.113883.10.20.36.9" extension="2015-08-17"/&gt;<br/>  &lt;hl7:id root="1.2.3.999" extension="extension" assigningAuthorityName="assigningAuthorityName"/&gt;<br/>  &lt;hl7:playingDevice&gt;<br/>    &lt;hl7:code code="4103" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.24" codeSystemName="MDC" displayName="MDC_DEV_SPEC_PROFILE_BP"&gt;<br/>      &lt;hl7:translation/&gt;<br/>    &lt;/hl7:code&gt;<br/>    &lt;hl7:manufacturerModelName&gt;manufacturerModelName&lt;/hl7:manufacturerModelName&gt;<br/>  &lt;/hl7:playingDevice&gt;<br/>&lt;/hl7:participantRole&gt;</pre> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                | DT  | Kard    | Konf | Beschreibung                                   | Label       |
|---------------------|-----|---------|------|--|-------------|
| hl7:participantRole |     |         |      | PHMR Product Instance                          | (Dev...ate) |
| └ @classCode        | cs  | 1 ... 1 | F    | MANU   |             |
| └ hl7:templateId    | II  | 1 ... 1 | M    | HL7 Austria - Device Product Instance Template | (Dev...ate) |
| └ @root             | uid | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43                        |             |
| └ hl7:templateId    | II  | 1 ... 1 | M    | C-CDA Product Instance                         | (Dev...ate) |
| └ @root             | uid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.22.4.37                |             |
| └ hl7:templateId    | II  | 1 ... 1 | M    | Device PHMR Product Instance                   | (Dev...ate) |
| └ @root             | oid | 1 ... 1 | F    | 2.16.840.1.113883.10.20.36.9                   |             |
| └ @extension        | st  | 1 ... 1 | F    | 2015-08-17                                     |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                           |     |        |         |   |  |             |
|---------------------------|-----|--------|---------|---|--|-------------|
| └ h17:id                  |     |        | 1 ... * | M | Das @root-Element soll die OID des Gerätenummervergebers sein und die @extension eine valide ID innerhalb.<br><br>Für PCHA Geräte soll das @root-Element 1.2.840.10004.1.1.1.0.0.1.0.0.1.2680 sein und das @extension-Element eine valide EUI-64 Geräte-ID, wie die welche erhalten wird aus dem "system ID"-Attribut von IEEE 11073 20601 Geräten oder dem "system ID"-Attribut von Bluetooth-Low-Energy-Geräten. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß Kapitel „Identifikations-Elemente“ zu befolgen. | (Dev...ate) |
| └ @root                   | oid |        | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @extension              | st  |        | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @assigningAuthorityName | st  |        | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ h17:playingDevice       |     |        | 1 ... 1 | M | Informationen zum Gerätehersteller und Gerätetyp. Dieses Element kann eine Wiederholung der Daten aus dem "Device Manufacturer Information Observation"-Entry oder "Device Model Number Information Observation"-Entry beinhalten.   | (Dev...ate) |
| └ h17:code                |     | CE.IPS | 1 ... 1 | M | Hier MUSS die Klassifizierung des Gerätetyps als MDC-Code bereitgestellt werden.   | (Dev...ate) |
| └ @code                   |     |        | 1 ... 1 | R |  |             |
| └ @codeSystem             | uid |        | 1 ... 1 | F | 2.16.840.1.113883.6.24   |             |
| └ @codeSystemName         | st  |        | 0 ... 1 | F | MDC  |             |

└ @displayName 0 ... 1

Eingefügt

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.2 Original Text Reference (DYNAMIC)

|                    |    |         |   |                                |             |
|--------------------|----|---------|---|--------------------------------|-------------|
| └ h17:originalText | ED | 1 ... 1 | M | Textinhalt, der codiert wurde. | (Dev...ate) |
|--------------------|----|---------|---|--------------------------------|-------------|

|                 |     |         |   |  |             |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:reference | TEL | 1 ... 1 | M | Die Referenz auf den entsprechenden Text im narrativen Teil muss durch Bezugnahme auf den Inhalt[@ID] angegeben werden: reference[@value='#xxx'].<br>Die Referenz ist mit einem <i>content</i> -Element mit <i>ID</i> -Attribut anzugeben, dieses Element DARF NUR den Textinhalt des codierten Inhalts umschließen und KEINE zusätzlichen Markup oder Strukturelemente. | (Dev...ate) |
|-----------------|-----|---------|---|--|-------------|

└ @value 1 ... 1 R

|                   |         |   |
|-------------------|---------|---|
| Schematron assert | role    | error   |
|                   | test    | starts-with(@value,'#')   |
|                   | Meldung | The @value attribute content MUST conform to the format '#xxx', where xxx is the ID of the corresponding 'content'-element. |


|                   |    |         |  |  |             |
|-------------------|----|---------|--|--|-------------|
| └ h17:translation | CD | 0 ... * |  | Hier können weitere Übersetzungen des Codes aus weiteren Codesystemen bereitgestellt werden. | (Dev...ate) |
|-------------------|----|---------|--|--|-------------|

|                             |    |         |   |  |             |
|-----------------------------|----|---------|---|--|-------------|
| └ h17:manufacturerModelName | ST | 1 ... 1 | M | Folgender Eintrag kann redundente Informationen erhalten, da auch das "Device Manufacturer Information Observation"-Element oder das "Device Model Number Information Observation" den Hersteller nennt. | (Dev...ate) |
|-----------------------------|----|---------|---|--|-------------|

|                      |  |  |    |   |             |
|----------------------|--|--|----|---|-------------|
| └ h17:scopingEntitiy |  |  | NP | Dieses Element zur Dokumentation des Geräteherstellers dient zur Rückwärtskompatibilität zu Implementierungen von PHMR Leitfäden vor Jänner 2017. Diese Information ist bereits in anderen Elementen vorhanden. | (Dev...ate) |
|----------------------|--|--|----|---|-------------|

|            |    |  |    |                                 |             |
|------------|----|--|----|---------------------------------|-------------|
| └ h17:desc | ST |  | NP | Der Name des Geräteherstellers. | (Dev...ate) |
|------------|----|--|----|---------------------------------|-------------|

## 12.4.5.2 Time Interval Information minimal

|                          |  |                       |   |
|--------------------------|--|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <small>ref at-cda-bbr-</small>   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 14:02:29<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_TimeIntervallInformationMinimal vom 2021-02-19 13:37:11</li> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_TimeIntervallInformationMinimal vom 2019-04-08 08:15:46</li> </ul> |
| <b>Status</b>            |  Aktiv  | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628  |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_other_TimeIntervallInformationMinimal   | <b>Bezeichnung</b>    | Time Interval Information minimal   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |                       |   |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (2021-02-19 13:37:11) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.15 <i>Time Interval Information minimal</i> (2019-04-08 08:15:46) <small>ref at-cda-bbr-</small> |                       |   |
| <b>Beispiel</b>          | <b>Strukturbeispiel</b> <pre> &lt;placeholder&gt;   &lt;low value="20190704123315+0200"/&gt;   &lt;high value="20190704123315+0200"/&gt; &lt;/placeholder&gt; </pre>   |                       |   |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                   | DT       | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|------------------------|----------|---------|------|---|-------------|
| Auswahl                |          | 1 ... 1 |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:low[@value]</li><li>hl7:low[@nullFlavor='UNK']</li></ul>   |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      |   | (atc...mal) |
| wo [@value]            |          |         |      |   |             |
| └ hl7:low              | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      |   | (atc...mal) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |      |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs       | 1 ... 1 | F    | UNK   |             |
| Auswahl                |          | 1 ... 1 |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:high[@value]</li><li>hl7:high[@nullFlavor='UNK']</li></ul> |             |
| └ hl7:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      |   | (atc...mal) |
| wo [@value]            |          |         |      |   |             |
| └ hl7:high             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      |   | (atc...mal) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |      |   |             |
| └ @nullFlavor          | cs       | 1 ... 1 | F    | UNK   |             |

12.4.5.3 Performer Body

| Id                      | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <span>ref at-cda-bbr-</span>   | Gültigkeit  | 2021-02-19 13:36:15<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_PerformerBody vom 2019-01-17 12:44:16</li></ul> |      |         |                         |           |   |         |  |
|-------------------------|--|---|---|------|---------|-------------------------|-----------|---|---------|--|
| Status                  |  Aktiv  | Versions-Label  | 1.0.0+20210219  |      |         |                         |           |   |         |  |
| Name                    | atcdabbr_other_PerformerBody   | Bezeichnung   | Performer Body  |      |         |                         |           |   |         |  |
| Beschreibung            | Durchführende Entität der Gesundheitsdienstleistung  |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Kontext                 | Geschwisterknoten des Template-Element mit Id 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Klassifikation          | Template-Typ nicht spezifiziert  |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Offen/Geschlossen       | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Benutzt                 | Benutzt 1 Template   |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
|                         | <table><tr><th>Benutzt</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr><tr><td>1.2.40.0.34.6.0.11.9.16</td><td>Inklusion</td><td> Assigned Entity Body (1.0.1+20210526)</td><td>DYNAMIC</td></tr></table>   | Benutzt   | als   | Name | Version | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 | Inklusion |  Assigned Entity Body (1.0.1+20210526) | DYNAMIC |  |
| Benutzt                 | als  | Name  | Version   |      |         |                         |           |   |         |  |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 | Inklusion  |  Assigned Entity Body (1.0.1+20210526) | DYNAMIC   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Beziehung               | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17 <i>Performer Body</i> (2019-01-17 12:44:16) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.323 <i>CDA Performer (Body)</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>   |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |
| Beispiel                | <div>Beispiel</div> <pre>&lt;templateId root="1.2.40.0.34.6.0.11.9.17"/&gt; &lt;time&gt;   &lt;low value="20191025100000+0100"/&gt;   &lt;high value="20191025120000+0100"/&gt; &lt;/time&gt; &lt;assignedEntity&gt;   &lt;!-- include template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 'Assigned Entity Body' (dynamic) .. 0 --&gt; &lt;/assignedEntity&gt;</pre> |   |   |      |         |                         |           |   |         |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| @typeCode             | cs     | 1 ... 1 | R    |  |             |
|                       | CONF   |         |      | Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.43 <i>ELGA_ServiceEventPerformer</i> (DYNAMIC)   |             |
| hl7:templateId        | II     | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ody) |
| └ @root               | uid    | 1 ... 1 | F    | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.17  |             |
| hl7:time              | IVL_TS | 0 ... 1 |      | Zeit, in der der Performer mit der Gesundheitsdienstleistung beschäftigt war, wenn abweichend von effectiveTime im übergeordneten Act  | (atc...ody) |
| hl7:assignedEntity    |        | 1 ... 1 | M    |  | (atc...ody) |
| Eingefügt             |        |         |      | von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 <i>Assigned Entity Body</i> (DYNAMIC)  |             |
| └ @classCode          | cs     | 0 ... 1 | F    | ASSIGNED   |             |
| Auswahl               |        | 1 ... * |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul>   |             |
| └ hl7:id              | II     | 0 ... * |      | Mindestens eine Id der Person.<br>Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li>UNK ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |         |      |  |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |            |   |   |   |             |
|------------------------|------------|---|---|---|-------------|
| └─ hl7:id              | II         | 0 ... 1   |   |   | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |            |   |   |   |             |
| └─ @nullFlavor         | cs         | 1 ... 1   | F | NI  |             |
| └─ hl7:id              | II         | 0 ... 1   |   |   | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |            |   |   |   |             |
| └─ @nullFlavor         | cs         | 1 ... 1   | F | UNK   |             |
| └─ hl7:code            | CE         | 0 ... 1   | R | Funktionscode der angegebenen Person.<br>Das zu verwendende Value-Set ist in den abgeleiteten Templates zu spezifizieren.   | (atc...ody) |
| └─ hl7:addr            |            | 0 ... *   | R | Adresse der angegebenen Person.<br>Keine vollständig strukturierte Adressangabe nötig.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)   | (atc...ody) |
|                        | Constraint | Werden mehrere address-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.                |   |   |             |
| └─ hl7:telecom         | TEL.AT     | 0 ... *   | R |   | (atc...ody) |
| └─ @value              | url        | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.)<br>Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“ |             |
| └─ @use                | cs         | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                        | Constraint | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beschreibung

Der Autor (author) ist der Verfasser bzw. geistige Urheber eines bestimmten Inhalts. In der Regel ist das eine Person oder mehrere Personen, es kann aber auch ein "Gerät" - ein Programm oder Software den Inhalt automatisiert erstellen.  
Element für Sections und Entries.  
Wenn nicht angegeben, gilt das jeweils "darüberlegende" Author-Element (Section, Document).

|                   |   |             |   |
|-------------------|---|-------------|---|
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert   |             |   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |             |   |
| Benutzt           | Benutzt 4 Templates   |             |   |
|                   | Benutzt   | als         | Name  |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25   | Containment | Address Compilation (1.0.0+20210219)                    |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6  | Inklusion   | Person Name Compilation G2 (1.0.0+20210219)             |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18   | Containment | Device Compilation (1.0.1+20210628)                     |
|                   | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5  | Containment | Organization Compilation with id, name (1.0.1+20210628) |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.36 <i>Author Body</i> (2019-11-20 12:13:04) <a href="#">ref at-cda-bbr-</a><br>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.318 <i>CDA Author (Body)</i> (2005-09-07) <a href="#">ref ad1bbr-</a> |             |   |

## Beispiel

### Beispiel

```
<placeholder typeCode="AUT" contextControlCode="OP">
  <time value="20190710153549+0200"/>
  <assignedAuthor classCode="ASSIGNED">
    <id root="1.2.3.999" extension="--example only--"/>
    <code code="100" codeSystem="1.2.40.0.34.5.2" displayName="Ärztin/Arzt für Allgemeinmedizin"/>
    <addr>
      <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 'Address Compilation' (2019-02-28T14:24:14) -->
    </addr>
    <telecom value="tel:+1-12345678"/>
    <assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 'Person Name Compilation G2' -->
    </assignedPerson>
    <representedOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 'Organization Compilation with id, name' (2019-03-25T13:43:57) -->
    </representedOrganization>
  </assignedAuthor>
</placeholder>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                   | DT       | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|------------------------|----------|---------|------|--|-------------|
| @typeCode              | CS       | 0 ... 1 | F    | AUT  |             |
| @contextControlCode    | CS       | 0 ... 1 | F    | OP   |             |
| hl7:functionCode       | CE       | 0 ... 1 |      | Funktionscode des Verfassers des Dokuments<br>z.B: „Diensthabender Oberarzt“, „Verantwortlicher Arzt für Dokumentation“, „Stationsschwester“, ...<br>Eigene Codes und Bezeichnungen können verwendet werden.<br><br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „code-Element CE CWE“ zu befolgen. | (atc...ody) |
| Auswahl                |          | 1 ... 1 |      | Zeitpunkt der Freigabe der Dokumentation<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:time[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:time[@nullFlavor='UNK']</li> </ul>   |             |
| └ hl7:time             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      |  | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |          |         |      |  |             |
| └ hl7:time             | TS.AT.TZ | 0 ... 1 |      | nullFlavor   | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |          |         |      |  |             |
| └ @nullFlavor          | CS       | 1 ... 1 | F    | UNK  |             |
| hl7:assignedAuthor     |          | 1 ... 1 | R    |  | (atc...ody) |
| └ @classCode           | CS       | 0 ... 1 | F    | ASSIGNED   |             |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                        |        |  |   |  |             |
|------------------------|--------|--|---|--|-------------|
| Auswahl                |        | 1 ... *  |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"><li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li><li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li></ul>    |             |
| └ hl7:id               | II     | 0 ... *  |   |  | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |        |  |   |  |             |
| └ hl7:id               | II     | 0 ... 1  |   |  | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |        |  |   |  |             |
| └ @nullFlavor          | cs     | 1 ... 1  | F | UNK  |             |
| └ hl7:code             | CE     | 0 ... 1  |   |  | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |        |  |   |  |             |
|                        | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.6 <i>ELGA_AuthorSpeciality</i> (DYNAMIC) |   |  |             |
| └ hl7:addr             | AD     | 0 ... 1  |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |        |  |   |  |             |
| └ hl7:telecom          | TEL.AT | 0 ... *  |   | Kontaktdaten der Organisation des Verfassers des Dokuments.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen. | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |        |  |   |  |             |
| └ @value               | st     | 1 ... 1  | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.)<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“                     |             |

**@use** set\_cs 0 ... 1 Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_TelecomAddressUse“

**Constraint** Werden mehrere gleichartige telecom Element strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.

**Auswahl** 1 ... 1 Elemente in der Auswahl:  

- hl7:assignedPerson
- hl7:assignedAuthoringDevice welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 *Device Compilation* (DYNAMIC)

**hl7:assignedPerson** 0 ... 1 (atc...ody)

**Beispiel**

```
<assignedPerson classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
  <name>
    <prefix qualifier="AC">Univ.-Prof. Dr.</prefix>
    <given>Isabella</given>
    <family>Stern</family>
  </name>
</assignedPerson>
```

**Eingefügt** 1 ... 1 R von 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 *Person Name Compilation G2* (DYNAMIC)

**@classCode** cs 0 ... 1 F PSN

**@determinerCode** cs 0 ... 1 F INSTANCE

**Auswahl** 1 ... 1 Namen-Element (Person)  
Elemente in der Auswahl:  

- hl7:name[not(@nullFlavor)]
- hl7:name[@nullFlavor='UNK']
- hl7:name[@nullFlavor='MSK']

**hl7:name** PN 0 ... 1 (atc...ody)

wo [not(@nullFlavor)]

|                         |      |         |   |   |             |
|-------------------------|------|---------|---|---|-------------|
| <div>└ @use</div>       | cs   | 0 ... 1 |   | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, beispielsweise dass der angegebene Personen-Name ein „Künstlername“ ist, z.B. A („Artist“).<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNameUse“.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“). |             |
| <div>└ hl7:prefix</div> | ENXP | 0 ... * |   | Beliebig viele Präfixe zum Namen, z.B. Akademische Titel<br>Achtung: Die Angabe der Anrede („Frau“, „Herr“), ist im CDA nicht vorgesehen!   | (atc...ody) |
| <div>└ @qualifier</div> | cs   | 0 ... 1 |   | Die genaue Bedeutung eines prefix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Präfix einen akademischen Titel darstellt, z.B. AC („Academic“).<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“   |             |
|                         | CONF |         |   | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |             |
| <div>└ hl7:family</div> | ENXP | 1 ... * | M | Mindestens ein Hauptname (Nachname)   | (atc...ody) |
| <div>└ @qualifier</div> | cs   | 0 ... 1 |   | Die genaue Bedeutung eines family-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet, z.B. BR („Birth“)<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“   |             |
|                         | CONF |         |   | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |             |
| <div>└ hl7:given</div>  | ENXP | 1 ... * | M | Mindestens ein Vorname  | (atc...ody) |
| <div>└ @qualifier</div> | cs   | 0 ... 1 |   | Die genaue Bedeutung eines given-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet.<br>z.B.: BR („Birth“)<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“  |             |
|                         | CONF |         |   | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |             |
| <div>└ hl7:suffix</div> | ENXP | 0 ... * |   | Beliebig viele Suffixe zum Namen  | (atc...ody) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|  |          |   |   |   |             |
|--|----------|---|---|---|-------------|
| <div>└ @qualifier</div>                  | cs       | 0 ... 1   | Die genaue Bedeutung eines suffix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Suffix einen akademischen Titel darstellt, z.B. AC („Academic“).<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“ |   |             |
|  | CONF     | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |   |   |             |
| <div>└ h17:name</div>                    | PN       | 0 ... 1   |   |   | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='UNK']                   |          |   |   |   |             |
| <div>└ @nullFlavor</div>                 | cs       | 1 ... 1   | F   | UNK   |             |
| <div>└ h17:name</div>                    | PN       | 0 ... 1   |   |   | (atc...ody) |
| wo [@nullFlavor='MSK']                   |          |   |   |   |             |
| <div>└ @nullFlavor</div>                 | cs       | 1 ... 1   | F   | MSK   |             |
| <div>└ h17:assignedAuthoringDevice</div> |          | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (DYNAMIC)  | (atc...ody) |
|  | Beispiel | <assignedAuthoringDevice classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE"><br><manufacturerModelName>xxx</manufacturerModelName><br><softwareName>yyy</softwareName><br></assignedAuthoringDevice> |   |   |             |
| <div>└ h17:representedOrganization</div> |          | 0 ... 1   |   | Organisation, in deren Auftrag und Verantwortlichkeit der Inhalt erstellt wurde<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 <i>Organization Compilation with id, name</i> (DY-<br>NAMIC) | (atc...ody) |
| <div>└ @classCode</div>                  | cs       | 0 ... 1   | F   | ORG   |             |

└─ @determinerCode                      cs                      0 ... 1 F                      INSTANCE

#### 12.4.5.5 Informant Body

|        |   |                |  |
|--------|---|----------------|--|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <span>ref at-cda-bbr-</span>                                       | Gültigkeit     | 2021-10-04 08:03:25<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br><ul style="list-style-type: none"> <li>○ atcdabbr_other_InformantBody vom 2021-10-01 14:13:11</li> <li>○ atcdabbr_other_InformantBody vom 2021-02-19 13:12:43</li> <li>○ atcdabbr_other_InformantBody vom 2019-02-07 13:29:32</li> </ul> |
| Status |  Entwurf | Versions-Label | 2.0.0+202109   |
| Name   | atcdabbr_other_InformantBody  | Bezeichnung    | Informant Body   |

#### Beschreibung

Template für die Angabe des Informanten im CDA Body (Section oder Entry). Als Informanten können auftreten:

- **relatedEntity**: der Patient selbst oder eine verwandte / bekannte Person
- **assignedEntity**: ein Gesundheitsdiensteanbieter (GDA)

|                   |  |
|-------------------|--|
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert                    |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |             |  |
|-----------|--|-------------|--|
| Benutzt   | Benutzt 3 Templates  |             |  |
|           | Benutzt  | als         | Name   |
|           | Version  |             |  |
| Beziehung | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16  | Containment | Assigned Entity Body (1.0.1+20210526)        |
|           | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10  | Containment | Address Compilation Minimal (1.0.1+20210628) |
|           | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6   | Containment | Person Name Compilation G2 (1.0.0+20210219)  |
| Beispiel  | Informant ist verwandte Person   |             |  |
|           | <relatedEntity classCode="PRS"><br><!-- Verwandtschaftsverhältnis des Angehörigen zum Patienten --><br><code code="MTH" displayName="mother" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" codeSystemName="ELGA_PersonalRelationship"/><br></relatedEntity> |             |  |
|           | Informant ist der Patient selbst   |             |  |

|                         |  |  |         |
|-------------------------|--|--|---------|
| Benutzt 3 Templates     |  |  |         |
| Benutzt                 | als  | Name   | Version |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 | Containment  | Assigned Entity Body (1.0.1+20210526)        | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 | Containment  | Address Compilation Minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6  | Containment  | Person Name Compilation G2 (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC |
| Beziehung               | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (2021-02-19 13:12:43) <span>ref at-cda-bbr-</span>  |  |         |
|                         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.3 <i>Informant Body</i> (2019-02-07 13:29:32) <span>ref at-cda-bbr-</span>  |  |         |
|                         | Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.319 <i>CDA Informant (Body)</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>   |  |         |
| Beispiel                | Informant ist verwandte Person   |  |         |
|                         | <relatedEntity classCode="PRS"><br><!-- Verwandtschaftsverhältnis des Angehörigen zum Patienten --><br><code code="MTH" displayName="mother" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.111" codeSystemName="ELGA_PersonalRelationship"/><br></relatedEntity> |  |         |
|                         | Informant ist der Patient selbst   |  |         |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT     | Kard  | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------|--------|---|------|---|-------------|
| @typeCode             | CS     | 0 ... 1   | F    | INF   |             |
| @contextControlCode   | CS     | 0 ... 1   | F    | OP  |             |
| Auswahl               |        | 1 ... 1   |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:assignedEntity welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 <i>Assigned Entity Body</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:relatedEntity</li> </ul> |             |
| └ hl7:assignedEntity  |        | 0 ... 1   |      | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 <i>Assigned Entity Body</i> (DYNAMIC)  | (atc...ody) |
| └ hl7:relatedEntity   |        | 0 ... 1   |      |   | (atc...ody) |
| └ @classCode          | CS     | 1 ... 1   | F    | PRS   |             |
| └ hl7:code            | CE     | 0 ... 1   | R    |   | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |   |      |   |             |
|                       | CONF   | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.10.17 <i>ELGA_PersonalRelationship</i> (DYNAMIC) |      |   |             |
| └ hl7:addr            | AD     | 0 ... *   | R    | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)   | (atc...ody) |
| wo [not(@nullFlavor)] |        |   |      |   |             |
| └ hl7:telecom         | TEL.AT | 0 ... *   | R    |   | (atc...ody) |

|                       |  |         |   |  |             |
|-----------------------|--|---------|---|--|-------------|
| wo [not(@nullFlavor)] |  |         |   |  |             |
| h17:relatedPerson     |  | 0 ... 1 | R | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 Person Name Compilation G2 (DYNAMIC) | (atc...ody) |

#### 12.4.5.6 Participant Body

|                          |  |                       |  |                |
|--------------------------|--|-----------------------|--|----------------|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <span>ref at-cda-bbr-</span>   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 14:00:23<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><span>atcdabbr_other_ParticipantBody</span> vom 2021-02-19 13:35:21</li><li><span>atcdabbr_other_ParticipantBody</span> vom 2019-04-03 12:08:16</li></ul> |                |
| <b>Status</b>            | <span>●</span> Aktiv   | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628   |                |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_other_ParticipantBody   | <b>Bezeichnung</b>    | Participant Body   |                |
| <b>Klassifikation</b>    | Template-Typ nicht spezifiziert  |                       |  |                |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |                       |  |                |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 3 Templates  |                       |  |                |
|                          | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>            | <b>Name</b>  | <b>Version</b> |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25  | Containment           | <span>●</span> Address Compilation (1.0.0+20210219)  | DYNAMIC        |
|                          | 2.16.840.1.113883.10.12.815  | Containment           | <span>●</span> CDA Device SDTC   | DYNAMIC        |
|                          | 2.16.840.1.113883.10.12.813  | Containment           | <span>●</span> CDA PlayingEntity SDTC  | DYNAMIC        |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (2021-02-19 13:35:21) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.13 <i>Participant Body</i> (2019-04-03 12:08:16) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.821 <i>CDA Participant (Body) SDTC</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span><br>Adaptation: Template 2.16.840.1.113883.10.12.321 <i>CDA Participant (Body)</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span> |                       |  |                |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                | DT     | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|---------------------|--------|---------|------|--|-------------|
| @typeCode           | cs     | 1 ... 1 | R    |  |             |
|                     | CONF   |         |      | Der Wert von @typeCode muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10901 <i>ParticipationType</i> (DYNAMIC) |             |
| @contextControlCode | cs     | 0 ... 1 | F    | OP   |             |
| hl7:time            | IVL_TS | 0 ... 1 |      |  | (atc...ody) |
| hl7:awarenessCode   | CE     | 0 ... 1 |      |  | (atc...ody) |
|                     | CONF   |         |      | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.10310 <i>TargetAwareness</i> (DYNAMIC)       |             |
| hl7:participantRole |        | 1 ... 1 | R    |  | (atc...ody) |
| └ @classCode        | cs     | 0 ... 1 | F    | ROL  |             |
| └ hl7:id            | II     | 0 ... * |      |  | (atc...ody) |
| └ hl7:code          | CE     | 0 ... 1 |      |  | (atc...ody) |
|                     | CONF   |         |      | muss aus der Konzeptdomäne "RoleCode" gewählt werden   |             |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                     |            |   |   |  |             |
|---------------------|------------|---|---|--|-------------|
| └ hl7:addr          | AD         | 0 ... 1   |   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)  | (atc...ody) |
| └ hl7:telecom       | TEL.AT     | 0 ... *   | R | Optionale Kontaktdaten.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | (atc...ody) |
| └ @value            | st         | 1 ... 1   | R | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“   |             |
| └ @use              | set_cs     | 0 ... 1   |   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|                     | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |  |             |
| Auswahl             |            | 0 ... 1   |   | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:playingDevice welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.815 <i>CDA Device SDTC</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:playingEntity welches enthält Template 2.16.840.1.113883.10.12.813 <i>CDA PlayingEntity SDTC</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |             |
| └ hl7:playingDevice |            |   |   | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.815 <i>CDA Device SDTC</i> (DYNAMIC)  | (atc...ody) |
| └ hl7:playingEntity |            |   |   | Beinhaltet 2.16.840.1.113883.10.12.813 <i>CDA PlayingEntity SDTC</i> (DYNAMIC)   | (atc...ody) |
| └ hl7:scopingEntity |            | 0 ... 1   |   |  | (atc...ody) |
| └ @classCode        | cs         | 0 ... 1   | F | ENT  |             |
| └ @determinerCode   | cs         | 0 ... 1   | F | INSTANCE   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|            |      |  |  |  |             |
|------------|------|--|--|--|-------------|
| └ h17:id   | II   | 0 ... *  |  |  | (atc...ody) |
| └ h17:code | CE   | 0 ... 1  |  |  | (atc...ody) |
|            | CONF | Der Wert von @code muss gewählt werden aus dem Value Set 2.16.840.1.113883.1.11.16040 <i>Entity-Code</i> (DYNAMIC) |  |  |             |
| └ h17:desc | ED   | 0 ... 1  |  |  | (atc...ody) |

12.4.5.7 Device Compilation

|                   |   |                |  |
|-------------------|---|----------------|--|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <span>ref at-cda-bbr-</span>  | Gültigkeit     | 2021-06-28 13:57:36<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_DeviceCompilation vom 2021-02-19 13:12:38</li><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_DeviceCompilation vom 2019-02-13 10:11:00</li></ul> |
| Status            |  Aktiv   | Versions-Label | 1.0.1+20210628   |
| Name              | atcdabbr_other_DeviceCompilation  | Bezeichnung    | Device Compilation   |
| Beschreibung      | Datenerstellende Geräte/Software  |                |  |
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                |  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (2021-02-19 13:12:38) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (2019-02-13 10:11:00) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 <i>CDA Device</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span> |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Beispiel

Software

```
<placeholder classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">  
  <manufacturerModelName>Good Health System</manufacturerModelName>  
  <softwareName>Best Health Software Application</softwareName>  
</placeholder>
```

| Item                      | DT | Kard    | Konf | Beschreibung                                    | Label       |
|---------------------------|----|---------|------|---|-------------|
| @classCode                | cs | 0 ... 1 | F    | DEV   |             |
| @determinerCode           | cs | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |             |
| hl7:manufacturerModelName | SC | 1 ... 1 | M    | Modellbezeichnung des datenerstellenden Gerätes | (atc...ion) |
| hl7:softwareName          | SC | 1 ... 1 | M    | Bezeichnung der datenerstellenden Software.     | (atc...ion) |

12.4.5.8 Address Compilation

|        |   |                |  |
|--------|---|----------------|--|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <span>ref at-cda-bbr-</span>                                      | Gültigkeit     | 2021-02-19 13:05:47<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_AddressCompilation vom 2019-02-28 14:24:14</li></ul> |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | 1.0.0+20210219   |
| Name   | atcdabbr_other_AddressCompilation   | Bezeichnung    | Address Compilation  |

## Beschreibung

Adressen von Personen und Organisationen werden über das Element `addr` abgebildet. Das Adress-Element kann in verschiedenen Kontexten mit unterschiedlicher Detailgenauigkeit vorkommen. Daher werden drei Granularitätsstufen definiert, auf die je nach Anwendung entsprechend verwiesen wird, wobei für EIS Enhanced und EIS Full Support die Granularitätsstufe 2 oder 3 angegeben werden **MUSS**.

Die Adressangabe in Granularitätsstufe 2 (G2) erlaubt die gemeinsame Angabe Straße und Hausnummer im Element `streetAddressLine`, Granularitätsstufe 3 (G3) schreibt die strukturierte Angabe von Straße und Hausnummer in den Elementen `streetName` und `houseNumber` vor.

Sind keine Adressdaten vorhanden, kann das Element entweder weggelassen werden oder mit `nullFlavor` angegeben werden – je nachdem wie das Adress-Element im Kontext spezifiziert wurde.

### Klassifikation

Template-Typ nicht spezifiziert

### Offen/Geschlossen

Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)

### Beziehung

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 *Address Compilation* (2019-02-28 14:24:14) [ref at-cda-bbr-](#)

### Beispiel

#### Österreichische Postadresse - G2

```
<addr use="WP">
  <streetAddressLine>Mozartgasse 1-7/2/1</streetAddressLine>
  <postalCode>7000</postalCode>
  <city>Eisenstadt</city>
  <state>Burgenland</state>
  <country>AUT</country>
  <additionalLocator>Station A, Zimmer 9</additionalLocator>
</addr>
```

### Beispiel

#### Österreichische Postadresse - G3

```
<addr use="WP">
  <streetName>Mozartgasse</streetName>
  <houseNumber>1-7/2/1</houseNumber>
  <postalCode>7000</postalCode>
  <city>Eisenstadt</city>
  <state>Burgenland</state>
  <country>AUT</country>
  <additionalLocator>Station A, Zimmer 9</additionalLocator>
</addr>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT                | Kard   | Konf  | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------|-------------------|--|---|---|-------------|
| @use                  | cs                | 0 ... 1  |   | Die genaue Bedeutung der angegebenen Adresse kann über das @use Attribut angegeben werden.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt bei Personen die Adresse als Wohnadresse „H“ und bei Organisationen als Büroadresse „WP“. |             |
|                       |                   |  |   | Wird ein Hauptwohnsitz "HP" angegeben, gelten die mit "H" deklarierten Wohnsitze als Nebenwohnsitze.  |             |
|                       |                   |  |   | Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_AddressUse“.  |             |
| hl7:streetAddressLine | ADXP              | 0 ... 1  | C   | Straße mit Hausnummer, z.B. Musterstraße 11a/2/1  | (atc...ion) |
|                       | Constraint        | Es muss entweder streetAddressLine oder streetName UND houseNumber angegeben werden. |   |   |             |
| hl7:streetName        | ADXP              | 0 ... 1  | C   | Straße ohne Hausnummer, z.B. Musterstraße   | (atc...ion) |
| hl7:houseNumber       | ADXP              | 0 ... 1  | C   | Hausnummer, z.B. 11a/2/1  | (atc...ion) |
| hl7:postalCode        | ADXP              | 1 ... 1  | M   | Postleitzahl  | (atc...ion) |
| hl7:city              | ADXP              | 1 ... 1  | M   | Stadt   | (atc...ion) |
| hl7:state             | ADXP              | 0 ... 1  |   | Bundesland  | (atc...ion) |
| hl7:country           | ADXP              | 1 ... 1  | M   | Staat.<br>Es wird EMPFOHLEN, den Staat im ISO 3 Ländercode (ISO-3166-1 Alpha 3) anzugeben, z.B. „AUT“ für Österreich, „DEU“ für Deutschland.  | (atc...ion) |
|                       | Schematron assert | role   | info  |   |             |
|                       |                   | test   | string-length(text()) = 3                                   |   |             |
|                       |                   | Meldung  | Es wird EMPFOHLEN, den Staat im ISO 3 Ländercode anzugeben. |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25


|                       |                   |         |  |  |             |
|-----------------------|-------------------|---------|--|--|-------------|
| hl7:additionalLocator | ADXP              | 0 ... 1 |  | Zusätzliche Addressinformationen, z.B. Station, Zimmernummer im Altersheim | (atc...ion) |
|                       | Schematron assert | role    | error  |  |             |
|                       |                   | test    | not(hl7:streetAddressLine and (hl7:streetName or hl7:houseNumber)) or ((hl7:streetAddressLine or (hl7:streetName and hl7:houseNumber)) and not((hl7:streetAddressLine and hl7:streetName and hl7:houseNumber) or (hl7:streetAddressLine and (hl7:streetName or hl7:houseNumber)))) |  |             |
|                       |                   | Meldung | Es muss entweder streetAddressLine oder streetName UND houseNumber angegeben werden.   |  |             |

12.4.5.9 Person Name Compilation G2 M

Id

1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 ref at-cda-bbr-

Status

 Aktiv

Name

atcdabbr\_other\_PersonNameCompilationG2M

Gültigkeit

2021-02-19 13:36:55  
Andere Versionen mit dieser Id:

- ☐ atcdabbr\_other\_PersonNameCompilationG2M vom 2019-04-02 10:09:43

Versions-Label

1.0.0+20210219

Bezeichnung

Person Name Compilation G2 M

Beschreibung

In Granularitätsstufe 2 wird der Personen-Name strukturiert angegeben. Die einzelnen Elemente des Namens (mindestens der Vorname und Nachname) werden getrennt angegeben.

**Name ist Mandatory.**  
Die **korrekte Reihenfolge** der einzelnen Namenselemente ist wichtig. Als Richtlinie gilt, dass diese in der "natürlichen" Reihenfolge der Benutzung des Namens angegeben werden. Das ist besonders in den folgenden Fällen relevant:

- Präfixe (prefix) **MÜSSEN** immer vor dem Namen stehen, zu dem sie gehören.
- Vornamen (given) **MÜSSEN** immer in der offiziellen (gesetzlichen) Sequenz stehen.
- Nachnamen (family) und ein eventuelles Trennzeichen (meistens '-') **MÜSSEN** in der offiziellen Sequenz stehen, abhängig von der Wahl bei der Eheschließung.
- Suffixe (suffix) **MÜSSEN** immer hinter dem Namen stehen, zu dem sie gehören.

Für die Namenselemente kann zur näheren Bestimmung ein Qualifier angegeben werden (aus dem Value Set ELGA\_EntityNamePartQualifier), v.a. für Prefix/Suffix. Es gibt auch nicht näher bestimmte Präfixe/Suffixe, z.B. trifft das für die Angabe von "Junior" oder "Senior" bzw "Jun."/"Sen" oder "Jr."/"Sr" zu.

Klassifikation

Template-Typ nicht spezifiziert

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                   |  |
|-------------------|--|
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (2019-04-02 10:09:43) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 <i>Person Name Compilation G2</i> (2019-02-12 14:00:33) <span>ref at-cda-bbr-</span>   |
| Beispiel          | <div>Strukturbeispiel</div> <pre>&lt;name use="L"&gt;<br/>  &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Gräfin&lt;/prefix&gt;<br/>  &lt;given&gt;Sissi&lt;/given&gt;<br/>  &lt;family&gt;Österreich&lt;/family&gt;<br/>  &lt;family qualifier="BR"&gt;Habsburg&lt;/family&gt;<br/>  &lt;suffix qualifier="AC"&gt;MSc&lt;/suffix&gt;<br/>&lt;/name&gt;</pre> |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item            | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------|------|---------|------|--|-------------|
| @classCode      | CS   | 0 ... 1 | F    | PSN  |             |
| @determinerCode | CS   | 0 ... 1 | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:name        | PN   | 1 ... 1 | M    | Namen-Element (Person)   | (atc...G2M) |
| └ @use          | CS   | 0 ... 1 |      | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, z.B. Angabe eines Künstlernamens mit „A“ für „Artist“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNameUse“.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“). |             |
| └ hl7:prefix    | ENXP | 0 ... * |      | Beliebig viele Präfixe zum Namen, z.B. Akademische Titel<br>Achtung: Die Angabe der Anrede („Frau“, „Herr“), ist im CDA nicht vorgesehen!  | (atc...G2M) |
| └ @qualifier    | CS   | 0 ... 1 |      | Bedeutung eines prefix-Elements, z.B. Angabe eines akademischen mit "AC" für „Academic“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.  |             |
|                 | CONF |         |      | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:family    | ENXP | 1 ... * | M    | Mindestens ein Hauptname (Nachname).   | (atc...G2M) |
| └ @qualifier    | CS   | 0 ... 1 |      | Bedeutung eines family-Elements, z.B. Angabe eines Geburtsnamen mit „BR“ für „Birth“.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“.   |             |
|                 | CONF |         |      | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:given     | ENXP | 1 ... * | M    | Mindestens ein Vorname   | (atc...G2M) |

└ @qualifier

cs

0 ... 1

Die genaue Bedeutung eines given-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet, z.B. BR („Birth“).  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_EntityNamePartQualifier“

CONF

Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 *ELGA\_EntityNamePartQualifier\_VS* (DYNAMIC)

└ hl7:suffix

ENXP

0 ... \*

Beliebig viele Suffixe zum Namen

(atc...G2M)

└ @qualifier

cs


0 ... 1

Die genaue Bedeutung eines suffix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Suffix einen akademischen Titel darstellt, z.B.: AC („Academic“).  
Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA\_EntityNamePartQualifier“.

CONF

Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 *ELGA\_EntityNamePartQualifier\_VS* (DYNAMIC)

#### 12.4.5.10 Person Name Compilation G1 M


|                   |   |                |  |
|-------------------|---|----------------|--|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <span>ref at-cda-bbr-</span>  | Gültigkeit     | 2021-02-19 13:36:43<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_PersonNameCompilationG1M vom 2019-04-02 12:34:04</li></ul> |
| Status            |  Aktiv   | Versions-Label | 1.0.0+20210219   |
| Name              | atcdabbr_other_PersonNameCompilationG1M   | Bezeichnung    | Person Name Compilation G1 M   |
| Beschreibung      | In Granularitätsstufe 1 wird der Personen-Name unstrukturiert angegeben. Die einzelnen Elemente des Namens (Vorname, Nachname) werden nicht getrennt.<br><b>Name ist Mandatory.</b> |                |  |
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |   |
|-----------|---|
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (2019-04-02 12:34:04) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.26 <i>Person Name Compilation G1</i> (2019-03-11 11:40:35) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 <i>Person Name Compilation G2</i> (2019-02-12 14:00:33) <span>ref at-cda-bbr-</span> |
| Beispiel  | <div>Strukturbeispiel</div> <pre>&lt;placeholder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;<br/>  &lt;name&gt;Dr. Herbert Mustermann&lt;/name&gt;<br/>&lt;/placeholder&gt;</pre>   |
| Beispiel  | <div>Künstlername</div> <pre>&lt;placeholder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;<br/>  &lt;name use="A"&gt;Dr. Kurt Ostbahn &lt;/name&gt;<br/>&lt;/placeholder&gt;</pre>  |
| Beispiel  | <div>Unbekannte Person (z.B. „An den Hausarzt“)</div> <pre>&lt;placeholder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE"&gt;<br/>  &lt;name&gt;Hausarzt&lt;/name&gt;<br/>&lt;/placeholder&gt;</pre>   |


| Item            | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------|----|---------|------|---|-------------|
| @classCode      | CS | 0 ... 1 | F    | PSN   |             |
| @determinerCode | CS | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |             |
| h17:name        | PN | 1 ... 1 | M    | Namen-Element (Person)  | (atc...G1M) |
| L @use          | CS | 0 ... 1 |      | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, beispielsweise dass der angegebene Personen-Name ein „Künstlername“ ist, z.B. A („Artist“).<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_EntityNameUse“.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“). |             |

### 12.4.5.11 Organization Name Compilation

|                          |   |                       |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.27 <small>ref at-cda-bbr-</small>  | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 14:00:14<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationNameCompilation vom 2021-02-19 13:31:42</li> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationNameCompilation vom 2019-03-11 12:06:20</li> </ul> |
| <b>Status</b>            |  Aktiv   | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628  |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_other_OrganizationNameCompilation  | <b>Bezeichnung</b>    | Organization Name Compilation   |
| <b>Beschreibung</b>      | Organisations-Namen werden über das Element name abgebildet.<br>Dieser Implementierungsleitfaden lässt nur die unstrukturierte Angabe des Organisations-namens zu.  |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                       |   |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.27 <i>Organization Name Compilation</i> (2021-02-19 13:31:42) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.27 <i>Organization Name Compilation</i> (2019-03-11 12:06:20) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.26 <i>Person Name Compilation G1</i> (2019-03-11 11:40:35) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 <i>Person Name Compilation G2</i> (2019-02-12 14:00:33) <small>ref at-cda-bbr-</small> |                       |   |
| <b>Beispiel</b>          | <b>Beispiel 1</b><br><pre>&lt;name&gt;Krankenhaus Wels&lt;/name&gt;</pre>   |                       |   |

| Item            | DT | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------|----|---------|------|---|-------------|
| @classCode      | cs | 0 ... 1 | F    | ORG   |             |
| @determinerCode | cs | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |             |
| hl7:name        | ON | 1 ... 1 | M    | Name der Organisation. Bei Organisationen die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden.<br>Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden. | (atc...ion) |

## 12.4.5.12 Address Compilation Minimal

|                   |   |                |   |
|-------------------|---|----------------|---|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <small>ref at-cda-bbr-</small>  | Gültigkeit     | 2021-06-28 13:44:14<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li>atcdabbr_other_AddressCompilationMinimal vom 2021-02-19 13:05:57</li> <li>atcdabbr_other_AddressCompilationMinimal vom 2019-03-27 11:26:08</li> </ul> |
| Status            |  Aktiv   | Versions-Label | 1.0.1+20210628  |
| Name              | atcdabbr_other_AddressCompilationMinimal  | Bezeichnung    | Address Compilation Minimal   |
| Beschreibung      | Adressangabe in Granularitätsstufe 2 oder 3   |                |   |
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                |   |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                |   |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (2021-02-19 13:05:57) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (2019-03-27 11:26:08) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC) <small>ref at-cda-bbr-</small><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.4 <i>Address Information Compilation</i> (2019-02-11 13:19:54) <small>ref at-cda-bbr-</small> |                |   |
| Beispiel          | <b>Österreichische Postadresse</b><br><br><pre>&lt;addr&gt;   &lt;streetName&gt;Musterstraße&lt;/streetName&gt;   &lt;houseNumber&gt;11a/2/1&lt;/houseNumber&gt;   &lt;postalCode&gt;7000&lt;/postalCode&gt;   &lt;city&gt;Eisenstadt&lt;/city&gt;   &lt;state&gt;Burgenland&lt;/state&gt;   &lt;country&gt;Österreich&lt;/country&gt;   &lt;additionalLocator&gt;Station A, Zimmer 9&lt;/additionalLocator&gt; &lt;/addr&gt;</pre>   |                |   |
| Beispiel          | <b>Besuchsadresse</b><br><br><pre>&lt;addr use="PHYS"&gt;   &lt;!-- Ort abweichend von der Adresse der Person oder Organisation, zB bei einem Hausbesuch --&gt;   &lt;!-- Weitere Adresselemente können angegeben werden --&gt;   &lt;additionalLocator&gt;Volksschule Brittenau, Klasse 3b&lt;/additionalLocator&gt; &lt;/addr&gt;</pre>   |                |   |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT                | Kard   | Konf                          | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------|-------------------|--|-------------------------------|---|-------------|
| @use                  | cs                | 0 ... 1  |                               | Die genaue Bedeutung der angegebenen Adresse kann über das @use Attribut angegeben werden.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt bei Personen die Adresse als Wohnadresse „H“ und bei Organisationen als Büroadresse „WP“. |             |
|                       |                   |  |                               | Wird ein Hauptwohnsitz "HP" angegeben, gelten die mit "H" deklarierten Wohnsitze als Nebenwohnsitze.  |             |
|                       |                   |  |                               | <b>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_AddressUse“.</b>   |             |
| hl7:streetAddressLine | ADXP              | 0 ... 1  | C                             | Straße mit Hausnummer<br>Bsp: Musterstraße 11a/2/1  | (atc...mal) |
|                       | Constraint        | Es muss entweder streetAddressLine oder streetName UND houseNumber angegeben werden. |                               |   |             |
| hl7:streetName        | ADXP              | 0 ... 1  | C                             | Straße ohne Hausnummer<br>z.B. Musterstraße   | (atc...mal) |
| hl7:houseNumber       | ADXP              | 0 ... 1  | C                             | Hausnummer<br>z.B. 11a/2/1  | (atc...mal) |
| hl7:postalCode        | ADXP              | 0 ... 1  |                               | Postleitzahl  | (atc...mal) |
| hl7:city              | ADXP              | 0 ... 1  |                               | Stadt   | (atc...mal) |
| hl7:state             | ADXP              | 0 ... 1  |                               | Bundesland  | (atc...mal) |
| hl7:country           | ADXP              | 0 ... 1  |                               | Staat.<br>Es wird EMPFOHLEN, den Staat im ISO 3 Ländercode (ISO-3166-1 Alpha 3) anzugeben, z.B. „AUT“ für Österreich, „DEU“ für Deutschland.  | (atc...mal) |
|                       | Schematron assert | role   | info                          |   |             |
|                       |                   | test   | string-length(text()) = 3     |   |             |
|                       |                   | Meldung  | content length = 3 characters |   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                       |                   |         |  |  |             |
|-----------------------|-------------------|---------|--|--|-------------|
| hl7:additionalLocator | ADXP              | 0 ... 1 |  | Zusätzliche Addressinformationen, z.B. Station, Zimmernummer im Altersheim | (atc...mal) |
|                       | Schematron assert | role    | error  |  |             |
|                       |                   | test    | not(hl7:streetAddressLine and (hl7:streetName or hl7:houseNumber)) or ((hl7:streetAddressLine or (hl7:streetName and hl7:houseNumber)) and not((hl7:streetAddressLine and hl7:streetName and hl7:houseNumber) or (hl7:streetAddressLine and (hl7:streetName or hl7:houseNumber)))) |  |             |
|                       |                   | Meldung | Es muss entweder streetAddressLine oder streetName UND houseNumber angegeben werden.   |  |             |

12.4.5.13 Device Compilation

|                   |  |                |  |
|-------------------|--|----------------|--|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <div>ref at-cda-bbr-</div>   | Gültigkeit     | 2021-06-28 13:57:36<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><div><input type="radio"/></div> atcdabbr_other_DeviceCompilation vom 2021-02-19 13:12:38</li><li><div><input type="radio"/></div> atcdabbr_other_DeviceCompilation vom 2019-02-13 10:11:00</li></ul> |
|                   |  |                |  |
| Status            | <div><div></div> Aktiv</div>   | Versions-Label | 1.0.1+20210628   |
| Name              | atcdabbr_other_DeviceCompilation   | Bezeichnung    | Device Compilation   |
| Beschreibung      | Datenerstellende Geräte/Software   |                |  |
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert  |                |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |                |  |
| Beziehung         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (2021-02-19 13:12:38) <div>ref at-cda-bbr-</div> |                |  |
|                   | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.18 <i>Device Compilation</i> (2019-02-13 10:11:00) <div>ref at-cda-bbr-</div> |                |  |
|                   | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.315 <i>CDA Device</i> (2005-09-07) <div>ref ad1bbr-</div>          |                |  |


## Beispiel

### Software

```
<placeholder classCode="DEV" determinerCode="INSTANCE">
  <manufacturerModelName>Good Health System</manufacturerModelName>
  <softwareName>Best Health Software Application</softwareName>
</placeholder>
```

| Item                      | DT | Kard    | Konf | Beschreibung                                    | Label       |
|---------------------------|----|---------|------|---|-------------|
| @classCode                | cs | 0 ... 1 | F    | DEV   |             |
| @determinerCode           | cs | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |             |
| hl7:manufacturerModelName | SC | 1 ... 1 | M    | Modellbezeichnung des datenerstellenden Gerätes | (atc...ion) |
| hl7:softwareName          | SC | 1 ... 1 | M    | Bezeichnung der datenerstellenden Software.     | (atc...ion) |

## 12.4.5.14 Organization Compilation with id, name

|                          |   |                       |   |
|--------------------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 <span>ref at-cda-bbr-</span>                                       | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-06-28 13:57:53<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithId-Name vom 2021-02-19 13:31:10</li> <li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithId-Name vom 2019-03-25 13:43:57</li> </ul> |
| <b>Status</b>            |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210628  |
| <b>Name</b>              | atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithIdName  | <b>Bezeichnung</b>    | Organization Compilation with id, name  |
| <b>Beschreibung</b>      | Wiederverwendbare Compilation mit verpflichtender Angabe von name und id.                 |                       |   |
| <b>Klassifikation</b>    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                       |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                       |   |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |             |   |         |
|-----------|--|-------------|---|---------|
| Benutzt   | Benutzt 1 Template   |             |   |         |
|           | Benutzt  | als         | Name  | Version |
|           | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25  | Containment |  Address Compilation (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 <i>Organization Compilation with id, name</i> (2021-02-19 13:31:10) <span>ref at-cda-bbr-</span>  |             |   |         |
|           | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5 <i>Organization Compilation with id, name</i> (2019-03-25 13:43:57) <span>ref at-cda-bbr-</span>  |             |   |         |
|           | Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 (2019-02-12 15:50:47) <span>ref ?</span>  |             |   |         |
|           | Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 <i>CDA Organization</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>  |             |   |         |
| Beispiel  | Strukturbeispiel   |             |   |         |
|           | <pre>&lt;placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;!-- ID der Organisation aus dem GDA Index --&gt;   &lt;id root="1.2.40.0.34.99.4613.3" assigningAuthorityName="GDA Index"/&gt;   &lt;!-- Name der Organisation --&gt;   &lt;name&gt;Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung&lt;/name&gt;   &lt;!-- Kontaktdaten der Organisation --&gt;   &lt;telecom value="tel:+43.6138.3453446.0"/&gt;   &lt;telecom value="fax:+43.6138.3453446.4674"/&gt;   &lt;telecom value="mailto:info@amadeusspital.at"/&gt;   &lt;telecom value="http://www.amadeusspital.at"/&gt;   &lt;!-- Adresse der Organisation --&gt;   &lt;addr&gt;     &lt;!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 'Address Compilation' (2019-02-28T14:24:14) --&gt;   &lt;/addr&gt; &lt;/placeholder&gt;</pre> |             |   |         |
| Beispiel  | Strukturbeispiel - minimal   |             |   |         |
|           | <pre>&lt;placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;!-- ID der Organisation aus dem GDA Index --&gt;   &lt;id root="1.2.40.0.34.99.4613.3" assigningAuthorityName="GDA Index"/&gt;   &lt;!-- Name der Organisation --&gt;   &lt;name&gt;Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung&lt;/name&gt; &lt;/placeholder&gt;</pre>   |             |   |         |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT         | Kard  | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|------------|---|------|--|-------------|
| @classCode            | CS         | 0 ... 1   | F    | ORG  |             |
| @determinerCode       | CS         | 0 ... 1   | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:id                | II         | 1 ... *   | M    | ID der Organisation.   | (atc...ame) |
| hl7:name              | ON         | 1 ... 1   | M    | Name der Organisation. Bei Organisationen die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden.<br>Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.  | (atc...ame) |
| hl7:telecom           | TEL.AT     | 0 ... *   |      | Kontaktdaten der Organisation.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.  | (atc...ame) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |
| └ @value              | st         | 1 ... 1   | R    | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                | set_cs     | 0 ... 1   |      | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. Bsp: WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“   |             |
|                       | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |      |  |             |
| hl7:addr              | AD         | 0 ... 1   |      | Adresse der Organisation.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (atc...ame) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |






## 12.4.5.15 Assigned Entity

|               |   |                       |   |
|---------------|---|-----------------------|---|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22  at-cda-bbr- | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-05-26 13:50:41<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"> <li> atcdabbr_other_AssignedEntity vom 2021-02-19 13:09:09</li> <li> atcdabbr_other_AssignedEntity vom 2019-03-04 12:03:36</li> </ul> |
| <b>Status</b> |  Aktiv                               | <b>Versions-Label</b> | 1.0.1+20210526  |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_other_AssignedEntity   | <b>Bezeichnung</b>    | Assigned Entity   |

### Beschreibung

Zusammengesetzte Objekte die Person- und Organisationsinformationen enthalten.

Hierbei **MUSS** jedenfalls die „Person“ der Entität angegeben werden. Die Angabe der Organisation, der die Person angehört, ist prinzipiell optional. Diese Optionalität kann sich in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall in „verpflichtend“ ändern.

|                          |  |             |   |
|--------------------------|--|-------------|---|
| <b>Klassifikation</b>    | Template-Typ nicht spezifiziert  |             |   |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |             |   |
| <b>Benutzt</b>           | Benutzt 3 Templates  |             |   |
|                          | <b>Benutzt</b>   | <b>als</b>  | <b>Name</b>   |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25  | Containment |  Address Compilation (1.0.0+20210219)                |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11  | Containment |  Person Name Compilation G2 M (1.0.0+20210219)       |
|                          | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9   | Containment |  Organization Compilation with name (1.0.0+20210219) |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 <i>Assigned Entity</i> (2021-02-19 13:09:09)  at-cda-bbr-<br>Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 <i>Assigned Entity</i> (2019-03-04 12:03:36)  at-cda-bbr- |             |   |

## Beispiel

### Beispiel

```
<placeholder classCode="ASSIGNED">
  <id root="1.2.40.0.34.99.111.1.3" extension="2222" assigningAuthorityName="Amadeus Spital"/>
  <addr nullFlavor="UNK">
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 'Address Compilation' (2019-02-28T14:24:14) -->
  </addr>
  <telecom value="tel:+43.1.3453446.0"/>
  <telecom value="fax:+43.1.3453446.4674"/>
  <telecom value="mailto:info@amadeusspital.at"/>
  <telecom value="http://www.amadeusspital.at"/>
  <assignedPerson>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 'Person Name Compilation G2 M' (2019-04-02T10:09:43) -->
  </assignedPerson>
  <representedOrganization>
    <!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 'Organization Compilation with name' (2019-02-13T10:30:51) -->
  </representedOrganization>
</placeholder>
```





1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                   | DT         | Kard   | Konf | Beschreibung  | Label                            |
|------------------------|------------|--|------|---|----------------------------------|
| @classCode             | cs         | 0 ... 1  | F    | ASSIGNED  |                                  |
| Auswahl                |            | 1 ... *  |      | Mindestens eine ID der Person der Entität<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul>     |                                  |
|                        | Constraint | Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>NI</b> ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li><b>UNK</b> ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> |      |   |                                  |
| └ hl7:id               | II         | 0 ... *  |      |   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |            |  |      |   |                                  |
| └ hl7:id               | II         | 0 ... 1  |      |   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |            |  |      |   |                                  |
| └ @nullFlavor          | cs         | 1 ... 1  | F    | NI  |                                  |
| └ hl7:id               | II         | 0 ... 1  |      |   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |            |  |      |   |                                  |
| └ @nullFlavor          | cs         | 1 ... 1  | F    | UNK   |                                  |
| Auswahl                |            | 0 ... 1  |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:addr[not(@nullFlavor)] welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 Address Compilation (DYNAMIC)</li> <li>hl7:addr[@nullFlavor='UNK']</li> </ul> |                                  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                             |            |   |   |                                  |
|-----------------------------|------------|---|---|----------------------------------|
| └ h17:addr                  |            | 0 ... 1   | Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [not(@nullFlavor)]       |            |   |   |                                  |
| └ h17:addr                  |            | 0 ... 1   |   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [@nullFlavor="UNK"]      |            |   |   |                                  |
| └ @nullFlavor               | cs         | 1 ... 1 F   | UNK   |                                  |
| h17:telecom                 | TEL.AT     | 0 ... *   | Beliebig viele Kontakt-Elemente der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| wo [not(@nullFlavor)]       |            |   |   |                                  |
| └ @value                    | url        | 1 ... 1 R   | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.). Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“ |                                  |
| └ @use                      | cs         | 0 ... 1   | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP.<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |                                  |
|                             | Constraint | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |                                  |
| h17:assignedPerson          |            | 1 ... 1 M   | Personendaten der Person der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Personen-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)   | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |
| h17:representedOrganization |            | 0 ... 1 R   | Organisationsdaten der Entität. Grundsätzlich sind die Vorgaben gemäß „Organisations-Element“ zu befolgen.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (DYNAMIC)                                       | ( atcdabbr_other_AssignedEntity) |

# 12.4.5.16 Organization Compilation with name

| Id                      | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <span>ref at-cda-bbr-</span>   | Gültigkeit                           | 2021-02-19 13:31:25<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationCompilationWith-Name vom 2019-02-13 10:30:51</li></ul> |      |         |                         |  |                                      |         |  |
|-------------------------|---|--------------------------------------|--|------|---------|-------------------------|--|--------------------------------------|---------|--|
| Status                  |  Aktiv   | Versions-Label                       | 1.0.0+20210219   |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Name                    | atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithName  | Bezeichnung                          | Organization Compilation with name   |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Beschreibung            |   |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Klassifikation          | Template-Typ nicht spezifiziert   |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Offen/Geschlossen       | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Benutzt                 | Benutzt 1 Template  |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
|                         | <table><tr><th>Benutzt</th><th>als</th><th>Name</th><th>Version</th></tr><tr><td>1.2.40.0.34.6.0.11.9.25</td><td>Containment </td><td>Address Compilation (1.0.0+20210219)</td><td>DYNAMIC</td></tr></table>  | Benutzt                              | als  | Name | Version | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 | Containment  | Address Compilation (1.0.0+20210219) | DYNAMIC |  |
| Benutzt                 | als   | Name                                 | Version  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 | Containment   | Address Compilation (1.0.0+20210219) | DYNAMIC  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Beziehung               | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (2019-02-13 10:30:51) <span>ref at-cda-bbr-</span><br>Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 (2019-02-12 15:50:47) <span>ref ?</span><br>Spezialisierung: Template 2.16.840.1.113883.10.12.151 <i>CDA Organization</i> (2005-09-07) <span>ref ad1bbr-</span>   |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |
| Beispiel                | <div>Strukturbeispiel: Organisation</div> <pre>&lt;placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;!-- ID der Organisation --&gt;   &lt;id root="1.2.40.0.34.99.3" assigningAuthorityName="GDA Index"/&gt;   &lt;!-- Name der Organisation --&gt;   &lt;name&gt;Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung&lt;/name&gt;   &lt;!-- Kontaktdaten der Organisation --&gt;   &lt;telecom value="tel:+43.6138.3453446.0"/&gt;   &lt;telecom value="fax:+43.6138.3453446.4674"/&gt;   &lt;telecom value="mailto:info@amadeusspital.at"/&gt;   &lt;telecom value="http://www.amadeusspital.at"/&gt;   &lt;!-- Adresse der Organisation --&gt;   &lt;addr&gt;     &lt;!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 'Address Compilation' (2019-02-28T14:24:14) --&gt;   &lt;/addr&gt; &lt;/placeholder&gt;</pre> |                                      |  |      |         |                         |  |                                      |         |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

## Beispiel

### Strukturbeispiel: Organisation - minimal

```
<placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">  
  <!-- Name der Organisation -->  
  <name>Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung</name>  
</placeholder>
```



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT         | Kard  | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|------------|---|------|--|-------------|
| @classCode            | CS         | 0 ... 1   | F    | ORG  |             |
| @determinerCode       | CS         | 0 ... 1   | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:id                | II         | 0 ... *   |      | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (atc...ame) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |
| hl7:name              | ON         | 1 ... 1   | M    | Name der Organisation. Bei Organisationen, die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden.<br>Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.                             | (atc...ame) |
| hl7:telecom           | TEL.AT     | 0 ... *   |      | Kontaktdaten der Organisation.<br>Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Kontaktdaten-Element“ zu befolgen.  | (atc...ame) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |
| └ @value              | st         | 1 ... 1   | R    | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                | set_cs     | 0 ... 1   |      | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|                       | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |      |  |             |
| hl7:addr              | AD         | 0 ... 1   |      | Adresse der Organisation.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.25 <i>Address Compilation</i> (DYNAMIC)   | (atc...ame) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |

## 12.4.5.17 Person Name Compilation G2

|               |   |                       |  |
|---------------|---|-----------------------|--|
| <b>Id</b>     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 <small>ref at-cda-bbr-</small>                                   | <b>Gültigkeit</b>     | 2021-02-19 13:36:49<br>Andere Versionen mit dieser Id:<br>▪ <input type="radio"/> atcdabbr_other_PersonNameCompilationG2 vom 2019-02-12 14:00:33 |
| <b>Status</b> |  Aktiv | <b>Versions-Label</b> | 1.0.0+20210219   |
| <b>Name</b>   | atcdabbr_other_PersonNameCompilationG2  | <b>Bezeichnung</b>    | Person Name Compilation G2   |

### Beschreibung

In Granularitätsstufe 2 wird der Personen-Name strukturiert angegeben. Die einzelnen Elemente des Namens (mindestens der Vorname und Nachname) werden getrennt angegeben.

#### nullflavors für Name zugelassen!

Die **korrekte Reihenfolge** der einzelnen Namenselemente ist wichtig. Als Richtlinie gilt, dass diese in der "natürlichen" Reihenfolge der Benutzung des Namens angegeben werden. Das ist besonders in den folgenden Fällen relevant:

- Präfixe (prefix) **MÜSSEN** immer vor dem Namen stehen, zu dem sie gehören.
- Vornamen (given) **MÜSSEN** immer in der offiziellen (gesetzlichen) Sequenz stehen.
- Nachnamen (family) und ein eventuelles Trennzeichen (meistens '-') **MÜSSEN** in der offiziellen Sequenz stehen, abhängig von der Wahl bei der Eheschließung.
- Suffixe (suffix) **MÜSSEN** immer hinter dem Namen stehen, zu dem sie gehören.

Für die Namenselemente kann zur näheren Bestimmung ein Qualifier angegeben werden (aus dem Value Set ELGA\_EntityNamePartQualifier"), v.a. für Prefix/Suffix. Es gibt auch nicht näher bestimmte Prefixe/Suffixe, z.B. trifft das für die Angabe von "Junior" oder "Senior" bzw "Jun."/"Sen" oder "Jr."/"Sr" zu.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Klassifikation</b>    | Template-Typ nicht spezifiziert  |
| <b>Offen/Geschlossen</b> | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)   |
| <b>Beziehung</b>         | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.6 <i>Person Name Compilation G2</i> (2019-02-12 14:00:33) <small>ref at-cda-bbr-</small>  |
| <b>Beispiel</b>          | <div>Strukturbeispiel</div> <pre> &lt;name&gt;   &lt;prefix qualifier="NB"&gt;Gräfin&lt;/prefix&gt;   &lt;given&gt;Sissi&lt;/given&gt;   &lt;family&gt;Österreich&lt;/family&gt;   &lt;family qualifier="BR"&gt;Habsburg&lt;/family&gt;   &lt;suffix qualifier="AC"&gt;MSc&lt;/suffix&gt; &lt;/name&gt; </pre> |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

**Beispiel**

Unbekannte Person

```
<placeholder classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">  
  <name nullFlavor="UNK"/>  
</placeholder>
```

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT   | Kard    | Konf | Beschreibung  | Label       |
|-----------------------|------|---------|------|---|-------------|
| @classCode            | CS   | 0 ... 1 | F    | PSN   |             |
| @determinerCode       | CS   | 0 ... 1 | F    | INSTANCE  |             |
| Auswahl               |      | 1 ... 1 |      | Namen-Element (Person)<br>Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:name[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:name[@nullFlavor='UNK']</li> <li>hl7:name[@nullFlavor='MSK']</li> </ul>   |             |
| └ hl7:name            | PN   | 0 ... 1 |      |   | (atc...nG2) |
| wo [not(@nullFlavor)] |      |         |      |   |             |
| └ @use                | CS   | 0 ... 1 |      | Die genaue Bedeutung des angegebenen Namens, beispielsweise dass der angegebene Personen-Name ein „Künstlurname“ ist, z.B. A („Artist“).<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNameUse“.<br>Wird kein @use Attribut angegeben, gilt der Name als rechtlicher Name („L“). |             |
| └ hl7:prefix          | ENXP | 0 ... * |      | Beliebig viele Präfixe zum Namen, z.B. Akademische Titel<br>Achtung: Die Angabe der Anrede („Frau“, „Herr“), ist im CDA nicht vorgesehen!   | (atc...nG2) |
| └ @qualifier          | CS   | 0 ... 1 |      | Die genaue Bedeutung eines prefix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Präfix einen akademischen Titel darstellt, z.B. AC („Academic“).<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“   |             |
|                       | CONF |         |      | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 ELGA_Entity-NamePartQualifier_VS (DYNAMIC)   |             |
| └ hl7:family          | ENXP | 1 ... * | M    | Mindestens ein Hauptname (Nachname)   | (atc...nG2) |
| └ @qualifier          | CS   | 0 ... 1 |      | Die genaue Bedeutung eines family-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet, z.B. BR („Birth“)<br>Zulässige Werte gemäß Value Set „ELGA_EntityNamePartQualifier“   |             |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                          |      |         |  |                                  |             |
|--------------------------|------|---------|--|----------------------------------|-------------|
|                          |      | CONF    | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_EntityNamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |                                  |             |
| └ h17:given              | ENXP | 1 ... * | M  | Mindestens ein Vorname           | (atc...nG2) |
| └ @qualifier             | cs   | 0 ... 1 | Die genaue Bedeutung eines given-Elements, beispielsweise dass das angegebene Element einen Geburtsnamen bezeichnet.<br>z.B.: BR („Birth“)<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ <i>ELGA_EntityNamePartQualifier</i> “      |                                  |             |
|                          |      | CONF    | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_EntityNamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |                                  |             |
| └ h17:suffix             | ENXP | 0 ... * |  | Beliebig viele Suffixe zum Namen | (atc...nG2) |
| └ @qualifier             | cs   | 0 ... 1 | Die genaue Bedeutung eines suffix-Elements, beispielsweise dass das angegebene Suffix einen akademischen Titel darstellt, z.B. AC („Academic“).<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ <i>ELGA_EntityNamePartQualifier</i> “ |                                  |             |
|                          |      | CONF    | Der Wert von @qualifier muss gewählt werden aus dem Value Set 1.2.40.0.34.6.0.10.8 <i>ELGA_EntityNamePartQualifier_VS</i> (DYNAMIC)  |                                  |             |
| └ h17:name               | PN   | 0 ... 1 |  |                                  | (atc...nG2) |
| wo [ @nullFlavor="UNK" ] |      |         |  |                                  |             |
| └ @nullFlavor            | cs   | 1 ... 1 | F  | UNK                              |             |
| └ h17:name               | PN   | 0 ... 1 |  |                                  | (atc...nG2) |
| wo [ @nullFlavor="MSK" ] |      |         |  |                                  |             |

└─ @nullFlavor

cs

1 ... 1 F

MSK

#### 12.4.5.18 Assigned Entity Body

|        |   |                |  |
|--------|---|----------------|--|
| Id     | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 ref at-cda-bbr-   | Gültigkeit     | 2021-05-26 14:04:21<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li>atcdabbr_other_AssignedEntityBody vom 2021-02-19 13:09:15</li><li>atcdabbr_other_AssignedEntityBody vom 2019-04-17 13:08:49</li></ul> |
| Status |  Aktiv | Versions-Label | 1.0.1+20210526   |
| Name   | atcdabbr_other_AssignedEntityBody   | Bezeichnung    | Assigned Entity Body   |

##### Beschreibung

Zusammengesetzte Objekte die Person- und Organisationsinformationen enthalten.

Hierbei MUSS jedenfalls die „Person“ der Entität angegeben werden. Die Angabe der Organisation, der die Person angehört, ist prinzipiell optional. Diese Optionalität kann sich in Abhängigkeit vom konkreten Anwendungsfall in „verpflichtend“ ändern.

##### Unterschiede zu AssigendEntity:

- Adressangabe minimal möglich
- assignedPerson.Name kann unstrukturiert angegeben werden
- representedOrganization.addr Adresse kann minimal angegeben werden





|                   |  |
|-------------------|--|
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert                    |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt) |


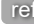

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

Benutzt

Beziehung

Benutzt 4 Templates

| Benutzt                 | als         | Name  | Version |
|-------------------------|-------------|---|---------|
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 | Containment |  Address Compilation Minimal (1.0.1+20210628)                      | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 | Containment |  Person Name Compilation G1 M (1.0.0+20210219)                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 | Containment |  Person Name Compilation G2 M (1.0.0+20210219)                     | DYNAMIC |
| 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 | Containment |  Organization Compilation with name, addr minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |

Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 *Assigned Entity Body* (2021-02-19 13:09:15)  at-cda-bbr-  
Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.16 *Assigned Entity Body* (2019-04-17 13:08:49)  at-cda-bbr-  
Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.22 *Assigned Entity* (2019-03-04 12:03:36)  at-cda-bbr-

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                   | DT | Kard    | Konf | Beschreibung   | Label                                |
|------------------------|----|---------|------|--|--------------------------------------|
| @classCode             | CS | 0 ... 1 | F    | ASSIGNED   |                                      |
| Auswahl                |    | 1 ... * |      | Elemente in der Auswahl: <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:id[not(@nullFlavor)]</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='NI']</li> <li>hl7:id[@nullFlavor='UNK']</li> </ul>   |                                      |
| └ hl7:id               | II | 0 ... * |      | Mindestens eine Id der Person.<br>Zugelassene nullFlavor: <ul style="list-style-type: none"> <li>NI ... Die Person der Entität hat keine Identifikationsnummer</li> <li>UNK ... Die Person der Entität hat eine Identifikationsnummer, diese ist jedoch unbekannt</li> </ul> | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| wo [not(@nullFlavor)]  |    |         |      |  |                                      |
| └ hl7:id               | II | 0 ... 1 |      |  | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| wo [@nullFlavor='NI']  |    |         |      |  |                                      |
| └ @nullFlavor          | CS | 1 ... 1 | F    | NI   |                                      |
| └ hl7:id               | II | 0 ... 1 |      |  | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| wo [@nullFlavor='UNK'] |    |         |      |  |                                      |
| └ @nullFlavor          | CS | 1 ... 1 | F    | UNK  |                                      |
| hl7:code               | CE | 0 ... 1 | R    | Funktionscode der angegebenen Person.<br>Das zu verwendende Value-Set ist in den abgeleiteten Templates zu spezifizieren.  | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                      |        |   |   |   |                                      |
|----------------------|--------|---|---|---|--------------------------------------|
| hl7:addr             |        | 0 ... *   | R | <p>Adresse der angegebenen Person.<br/>Keine vollständig strukturierte Adressangabe nötig.</p> <p>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)</p>   | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| Constraint           |        | Werden mehrere address-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein.                |   |   |                                      |
| hl7:telecom          | TEL.AT | 0 ... *   | R |   | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| └ @value             | url    | 1 ... 1   | R | <p>Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.)<br/>Es gelten die ELGA Formatkonventionen für Telekom-Daten, z.B. <a href="#">tel:+43.1.1234567</a><br/>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß Value-Set „ELGA_URLScheme“</p>  |                                      |
| └ @use               | cs     | 0 ... 1   |   | <p>Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br/>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“</p>   |                                      |
| Constraint           |        | Werden mehrere gleichartige "telecom"-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |   |   |                                      |
| Auswahl              |        | 0 ... 1   |   | <p>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:assignedPerson: Angabe der name-Elemente unstrukturiert</li> <li>hl7:assignedPerson: Angabe der name-Elemente strukturiert</li> </ul> <p>Elemente in der Auswahl:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>hl7:assignedPerson welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</li> <li>hl7:assignedPerson welches enthält Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC)</li> </ul> |                                      |
| └ hl7:assignedPerson |        | 0 ... 1   | R | <p>Personendaten. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen.<br/>Angabe der name-Elemente unstrukturiert, das name-Element ist Mandatory.</p> <p>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 <i>Person Name Compilation G1 M</i> (DYNAMIC)</p>  | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |


1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|                             |  |         |   |  |                                      |
|-----------------------------|--|---------|---|--|--------------------------------------|
| h17:assignedPerson          |  | 0 ... 1 | R | Personendaten. Grundsätzlich sind die Vorgaben für „Personen-Element“ zu befolgen.<br>Angabe der name-Elemente <b>strukturiert</b> , das name-Element ist Mandatory.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.11 <i>Person Name Compilation G2 M</i> (DYNAMIC) | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |
| h17:representedOrganization |  | 0 ... 1 | R | Organisationsdaten der angegebenen Person. Minimale Adressangabe möglich.<br><br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 <i>Organization Compilation with name, addr minimal</i> (DYNAMIC)  | ( atcdabbr_other_AssignedEntityBody) |

12.4.5.19 Organization Compilation with name, addr minimal

|                   |   |                |  |
|-------------------|---|----------------|--|
| Id                | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 <span>ref at-cda-bbr-</span>  | Gültigkeit     | 2021-06-28 13:58:02<br>Andere Versionen mit dieser Id: <ul style="list-style-type: none"><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithNameAddrMinimal vom 2021-02-19 13:31:31</li><li><input type="radio"/> atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithNameAddrMinimal vom 2019-04-18 11:28:59</li></ul> |
| Status            | <span>●</span> Aktiv  | Versions-Label | 1.0.1+20210628   |
| Name              | atcdabbr_other_OrganizationCompilationWithNameAddrMinimal   | Bezeichnung    | Organization Compilation with name, addr minimal   |
| Beschreibung      | Wiederverwendbare Compilation mit verpflichtender Angabe des name-Elements.<br>Minimale Adressangabe möglich. |                |  |
| Klassifikation    | Template-Typ nicht spezifiziert   |                |  |
| Offen/Geschlossen | Geschlossen (nur definierte Elemente sind erlaubt)  |                |  |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

|           |  |             |  |         |
|-----------|--|-------------|--|---------|
| Benutzt   | Benutzt 1 Template   |             |  |         |
|           | Benutzt  | als         | Name   | Version |
|           | 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10  | Containment |  Address Compilation Minimal (1.0.1+20210628) | DYNAMIC |
| Beziehung | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 <i>Organization Compilation with name, addr minimal</i> (2021-02-19 13:31:31) <span>ref at-cda-bbr-</span>   |             |  |         |
|           | Version: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 <i>Organization Compilation with name, addr minimal</i> (2019-04-18 11:28:59) <span>ref at-cda-bbr-</span>   |             |  |         |
|           | Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9 <i>Organization Compilation with name</i> (2019-02-13 10:30:51) <span>ref at-cda-bbr-</span>   |             |  |         |
|           | Adaptation: Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.12 (2019-02-12 15:50:47) <span>ref ?</span>  |             |  |         |
| Beispiel  | Strukturbeispiel   |             |  |         |
|           | <pre>&lt;placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;!-- ID der Organisation aus dem GDA Index --&gt;   &lt;id root="1.2.40.0.34.99.4613.3" assigningAuthorityName="GDA Index"/&gt;   &lt;!-- Name der Organisation --&gt;   &lt;name&gt;Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung&lt;/name&gt;   &lt;!-- Kontaktdaten der Organisation --&gt;   &lt;telecom value="tel:+43.6138.3453446.0"/&gt;   &lt;telecom value="fax:+43.6138.3453446.4674"/&gt;   &lt;telecom value="mailto:info@amadeusspital.at"/&gt;   &lt;telecom value="http://www.amadeusspital.at"/&gt;   &lt;!-- Adresse der Organisation --&gt;   &lt;addr&gt;     &lt;!-- template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 'Address Compilation Minimal' --&gt;   &lt;/addr&gt; &lt;/placeholder&gt;</pre> |             |  |         |
| Beispiel  | Strukturbeispiel - minimal   |             |  |         |
|           | <pre>&lt;placeholder classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE"&gt;   &lt;!-- Name der Organisation --&gt;   &lt;name&gt;Amadeus Spital - Chirurgische Abteilung&lt;/name&gt;   &lt;!-- Adresse der Organisation optional in Minimal-Variante --&gt; &lt;/placeholder&gt;</pre>   |             |  |         |

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25

| Item                  | DT         | Kard  | Konf | Beschreibung   | Label       |
|-----------------------|------------|---|------|--|-------------|
| @classCode            | CS         | 0 ... 1   | F    | ORG  |             |
| @determinerCode       | CS         | 0 ... 1   | F    | INSTANCE   |             |
| hl7:id                | II         | 0 ... *   |      | Beliebig viele IDs der Organisation. z.B.: ID aus dem GDA-Index, DVR-Nummer, ATU-Nummer, etc.  | (atc...mal) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |
| hl7:name              | ON         | 1 ... 1   | M    | Name der Organisation. Bei Organisationen die im GDA-Index angegeben sind, soll deren Kurzbezeichnung verwendet werden.<br>Zu dem Namen größerer Organisationen SOLL auch die Abteilung angegeben werden.  | (atc...mal) |
| hl7:telecom           | TEL.AT     | 0 ... *   |      |  | (atc...mal) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |
| └ @value              | st         | 1 ... 1   | R    | Die Kontaktadresse (Telefonnummer, Email, etc.), z.B. <a href="tel:+43.1.1234567">tel:+43.1.1234567</a><br>Formatkonvention siehe „telecom – Format Konventionen für Telekom-Daten“<br>Zulässige Werteliste für telecom Präfixe gemäß „ELGA_URLScheme“ |             |
| └ @use                | set_cs     | 0 ... 1   |      | Bedeutung des angegebenen Kontakts (Heim, Arbeitsplatz, ...), z.B. WP<br>Zulässige Werte gemäß Value-Set „ELGA_TelecomAddressUse“  |             |
|                       | Constraint | Werden mehrere gleichartige telecom-Elemente strukturiert, MUSS jeweils das Attribut @use angeführt sein. |      |  |             |
| hl7:addr              | AD         | 0 ... 1   |      | Adresse der Organisation. Minimale Adressangabe möglich.<br>Beinhaltet 1.2.40.0.34.6.0.11.9.10 <i>Address Compilation Minimal</i> (DYNAMIC)  | (atc...mal) |
| wo [not(@nullFlavor)] |            |   |      |  |             |

## 12.5 Terminologien

Die erforderlichen Terminologien sind im Folgenden aufgelistet.

### 12.5.1 TGD\_tgdServiceEvents\_VS

Ist unter <https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--elgatgd-?id=1.2.40.0.34.6.0.10.26&effectiveDate=2019-02-28T11:25:49&language=en-US> auffindbar.

### 12.5.2 TGD\_Messergebnis\_Codes\_VS

Ist unter <https://art-decor.org/art-decor/decor-valuesets--elgatgd-?id=1.2.40.0.34.6.0.10.28&effectiveDate=2019-06-29T07:51:19&language=de-DE> auffindbar.

Falls Werte in den definierten Value-Sets fehlen, dann bitten wir um die Meldung mit einem Vorschlag an [cda@elga.gv.at](mailto:cda@elga.gv.at) (<mailto:cda@elga.gv.at>).

# 13 Anhang

## 13.1 Abbildungsverzeichnis

1. Verwendete Standards

## 13.2 Tabellenverzeichnis

1. Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Headers
2. Übersichtstabelle der Header-Elemente für Zeitpunkte/Zeitspannen
3. Übersichtstabelle der CDA Strukturen des Bodys

## 13.3 Einzelnachweise

1. Personal Healthcare Monitoring Report - PHMR [https://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=33](https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=33)
2. IHE Pharmacy Community Medication Administration - CMA [https://www.ihe.net/uploaded-Files/Documents/Pharmacy/IHE\\_Pharmacy\\_Suppl\\_CMA.pdf](https://www.ihe.net/uploaded-Files/Documents/Pharmacy/IHE_Pharmacy_Suppl_CMA.pdf)
3. IHE Patient Care Coordination (PCC) [Online Juli 2019] [https://www.ihe.net/resources/technical\\_frameworks/#pcc](https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#pcc)
4. Logical Observation Identifiers Names & Codes (LOINC) [loinc.org](https://loinc.org) (<https://loinc.org/>)
5. Regenstrief Institute, Inc. [www.regenstrief.org](http://www.regenstrief.org) (<https://www.regenstrief.org/>)
6. Unified Code for Units of Measure (UCUM) [www.unitsofmeasure.org](http://www.unitsofmeasure.org) (<https://www.unitsofmeasure.org/>)
7. WHO ICD-10 [www.who.int/classifications/icd/en/](http://www.who.int/classifications/icd/en/) (<https://www.who.int/classifications/icd/en/>)
8. [www.who.int](http://www.who.int) (<https://www.who.int/>)
9. Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme 10. Revision – BMASGK-Version 2020 SYSTEMATISCHES VERZEICHNIS PDF (<http://www.sozialministerium.at/dam/jcr:64beea0-ec63-4864-a954-0ee1beb9e5c8/ICD-10%20BMASGK%202020+%20-%20SYSTEMATISCHES%20VERZEICHNIS.pdf>)
10. Anatomical Therapeutic Chemical Classification System (ATC) <https://www.who.int/tools/atc-ddd-toolkit/atc-classification>
11. ARGE Pharma im Fachverband der chemischen Industrie Österreichs (FCIO) [argepharma.fcio.at](http://argepharma.fcio.at) (<https://argepharma.fcio.at/>)
12. EDQM Council of Europe [www.edqm.eu](http://www.edqm.eu) (<https://www.edqm.eu/>)
13. Health informatics - Medical / health device communication standards ISO/IEEE 11073 Nomenclature Part 10101: Nomenclature (<https://standards.ieee.org/standard/11073-10101-2019.html>)
14. Health informatics - Medical / health device communication standards ISO/IEEE 11073 Nomenclature Amendment 1 Part 10101: Nomenclature Amendment 1: Additional Definitions (<https://standards.ieee.org/standard/11073-10101a-2015.html>)
15. Österreichischer e-Health Terminologieserver: [termpub.gesundheit.gv.at](http://termpub.gesundheit.gv.at) (<https://termpub.gesundheit.gv.at/>)
16. Health Level Seven International [www.hl7.org](http://www.hl7.org) (<http://www.hl7.org>)
17. ISO/HL7 27932:2009 Data Exchange Standards — HL7 Clinical Document Architecture, Release 2 [1] (<https://www.iso.org/standard/44429.html>)
18. World Wide Web Consortium. Extensible Markup Language, 1.0, 5th Edition. [2] (<http://www.w3.org/TR/REC-xml>)
19. HL7 Version 3 Product Suite [3] ([http://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=186](http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=186))
20. ART-DECOR® [www.art-decor.org](http://www.art-decor.org) (<https://art-decor.org>)
21. HL7 Clinical Document Architecture (CDA) [4] ([http://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=7](http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7))

22. HL7 Version 3: Reference Information Model (RIM) [5] ([http://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=77](http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=77))
23. HL7 Version 3 Standard: Data Types – Abstract Specification, Release 2[6] ([http://www.hl7.org/documentcenter/private/standards/v3/edition\\_web/infrastructure/datatypes\\_r2/datatypes\\_r2.html](http://www.hl7.org/documentcenter/private/standards/v3/edition_web/infrastructure/datatypes_r2/datatypes_r2.html))
24. HL7 Templates Standard: Specification and Use of Reusable Information Constraint Templates, Release 1 [7] ([http://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=377](http://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=377))
25. HL7 Austria [www.hl7.at](http://www.hl7.at) (<http://www.hl7.at/>)
26. IHE Patient Care Coordination (PCC) [Online Juli 2019]: [https://www.ihe.net/resources/technical\\_frameworks/#pcc](https://www.ihe.net/resources/technical_frameworks/#pcc)
27. Rahmenrichtlinie für die IT-Infrastruktur bei der Anwendung von Telemonitoring: Messdatenerfassung [8] (<https://www.sozialministerium.at/Themen/Gesundheit/eHealth/Telemedizin/Rahmenrichtlinie-f%C3%BCr-die-IT-Infrastruktur-bei-der-Anwendung-von-Telemonitoring--Messdatenerfassung-.html>)

### 13.4 Literatur und Weblinks

- Clinical Document Architecture (CDA®) Release 2.0 [https://www.hl7.org/implement/standards/product\\_brief.cfm?product\\_id=7](https://www.hl7.org/implement/standards/product_brief.cfm?product_id=7)
- Boone, Keith W. "The CDA-Book", Springer, 2011 <https://www.springer.com/gp/book/9780857293350>
- Anleitungskarte "Art-Decor-Tabellen verstehen (auf [wiki.hl7.at](http://wiki.hl7.at))".

### 13.5 Revisionsliste

#### 13.5.1 Nebenversion 2020.1 (1.1.0+20201120)

Folgende Änderungen wurden in der Nebenversion 2020.1 (1.1.0+20201120 nach neuem Versionschema) gegenüber der Hauptversion durchgeführt (weitere Details siehe [Diskussionsseite](#)):

##### 13.5.1.1 Organization Compilation: representedOrganization/telecom in 1.2.40.0.34.6.0.11.9.5; 1.2.40.0.34.6.0.11.9.7; 1.2.40.0.34.6.0.11.9.9; 1.2.40.0.34.6.0.11.9.20 & 1.2.40.0.34.6.0.11.1.2

Das Schematron Assert in allen "Organization Compilation" Templates und dem "Author" Template ist strenger als sein narrativer Constraint ihn beschreibt. Deswegen wurden das Assert dort jeweils entfernt.

##### 13.5.1.2 DocumentCode/translation 1.2.40.0.34.6.0.11.1.16

Element translation muss child von Element code sein, war in dem Template jedoch auf derselben Ebene modelliert.

##### 13.5.1.3 recordTarget 1.2.40.0.34.6.0.11.1.3

Hinzufügen von @assigningAuthorityName bei /ClinicalDocument[1]/recordTarget[1]/patientRole[1]/id[@root="1.2.40.0.34.4.21"] mit dem Wert "Nationaler Krankenversicherungsträger"

##### 13.5.1.4 Vitalparameter - kodiert 1.2.40.0.34.6.0.11.2.46

wurde analog zu den Messergebnissen an der selben Stelle durch ein Entry für Grafiken erweitert. In der Vorversion war der Titel für die Sektion Vitalparameter fest vorgegeben. Im TmE ist diese Sektion als Untersektion von "Erhobenen Daten" angedacht, wo die einzelnen Typen, wie "Blutdruck und Puls" oder "Gewicht", als Titel gewählt werden sollen.

### **13.5.1.5 Problem Entry 1.2.40.0.34.6.0.11.3.6 & Problem Status Observation 1.2.40.0.34.6.0.11.3.49**

Es wurde jeweils das Textreference so eingefügt, das innerhalb eines text elements das text element mit der reference verlangt wurde. Somit wurde unabsichtlich text/text/reference statt text/reference modelliert. Bei den drei Templates wurde das contains zu einem include geändert, welches den Fehler behebt.

### **13.5.1.6 Medikationseinnahme Entry 1.2.40.0.34.6.0.11.3.72**

Medikationseinnahme-Verlinkung zum Abgabe-Medikament muss mit einem <supply>-Element sein.

Medikationseinnahme Entry wurde der Datentyp von TS auf TS.AT.TZ umgestellt, um auch Zeitpunkt nur auf den Tag genau angeben zu können.

Beim Medikationseinnahme Entry ist das zweite effectiveTime als NP modelliert worden, um es explizit zu verbieten (es gibt IHE-Pharm Szenarien außerhalb vom CMA (Community Medication Administration) wo es angewendet wird).

Leider ist dies zwar in ArtDecor modellierbar, jedoch das Schematron fehlerhaft, wenn das Element gleich aussieht (gleicher typeCode).

Das zweite Element wird durch die geschlossenen Templates implizit verboten. Zweites modelliertes effectiveTime mit NP wurde entfernt.

### **13.5.1.7 Device Product Instance Template 1.2.40.0.34.6.0.11.9.43**

code/originalText auf [M 1..1] geändert, PHMR Kompatibilität ist wieder gegeben

### **13.5.1.8 Device Manufacturer Information Observation 1.2.40.0.34.6.0.11.3.77**

Fälschlich angegebene TemplateID[1]/extension bei Device Manufacturer Information Observation wurde entfernt.

### **13.5.1.9 Auszügen aus erhobenen Befunden 1.2.40.0.34.6.0.11.2.91**

"Text" war mandatory modelliert, wurde auf [0..1 O] korrigiert

### **13.5.1.10 Medikation Abgabe Entry 1.2.40.0.34.11.8.2.3.1**

1 ... 1 M von 1.2.40.0.34.11.30033 Patient Instructions und 1.2.40.0.34.11.30034 Pharmacist Instructions wurden jeweils auf 0 ... 1 R geändert.

### **13.5.1.11 Erweiterungen des Datentyps für effectiveTime**

Die Templates

- Messergebniss Gruppe Entry
- Messergebnis Entry
- Serienmessung Entry
- Vitalparameter Gruppe Entry
- Vitalparameter Entry
- Serienmessung Vitalparameter Entry

wurde jeweils mit einer Auswahl für drei verschiedenen effectiveTime ausgestattet, hatten vorher nur eine Variante mit low & high.



### 13.5.1.12 DeviceInformationOrganizer 1.2.40.0.34.6.0.11.3.73

Low und high in effectivetime fälschlicherweise als Attribute modelliert, wurden in Elemente ummodelliert.

TS muss auf TS.AT.TZ geändert werden um auch Werte nur mit Datum zu akzeptieren.

### 13.5.2 Nebenversion 1.2.0+20210304

Folgende Änderungen wurden in der Nebenversion 1.2.0+20210304 gegenüber der Nebenversion 2020.1 (1.1.0+20201120) durchgeführt (weitere Details siehe [Diskussionsseite](#)):

**13.5.2.1 DocumentLevelTemplate 1.2.40.0.34.6.0.11.0.10** (<https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--elgatgd-?section=templates&id=1.2.40.0.34.6.0.11.0.10&effectiveDate=2021-02-11T09:01:26&language=de-DE>) & **Document PracticeSettingCode 1.2.40.0.34.6.0.11.1.44** (<https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--at-cda-bbr-?section=templates&id=1.2.40.0.34.6.0.11.1.44&effectiveDate=2021-03-01T15:37:20&language=de-DE>)

Fehler in hl7at:practiceSettingCode und hl7at:formatCode mit fehlenden Elementen verhinderte die direkte Daten-Übernahme in XDS wie auch wurden ClassCode und MoodCode-Attribute in <clinicalDocument> ergänzt.

**13.5.2.2 Diagnose - kodiert 1.2.40.0.34.6.0.11.2.96** (<https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--elgatgd-?section=templates&id=1.2.40.0.34.6.0.11.2.96&effectiveDate=2020-10-06T09:34:46&language=de-DE>)

Im Template wurde die Beschreibung im Sinne des Ambulanzbefundes geändert, jedoch wurde nicht beachtet das dadurch auch die Beschreibung im TmE geändert wird, welcher dieselbe Sektion benutzt. Die Beschreibung wurde wieder "generischer" umgeschrieben.

**13.5.2.3 Serienmessung Entry 1.2.40.0.34.6.0.11.3.101** (<https://art-decor.org/art-decor/decor-templates--at-cda-bbr-?section=templates&id=1.2.40.0.34.6.0.11.3.101&effectiveDate=2021-01-21T08:12:21&language=de-DE>)

Beim Serienmessung Entry wurde beim Beispiel der MDC Code "19380" verwendet, wo der Kontext (das Überkapitel) nicht sichtbar ist. Wurde korrigiert auf "150452".

### 13.6 Erratum

Weitere Probleme und allfällige Korrekturen werden auf der [Diskussionsseite](#) im Wiki gesammelt.